



„DTX Studio™ Implant“

3.6 versija

Naudojimo instrukcija

Turiny

Turiny	2
Ivadas	8
Atsakomybės atsisakymas	8
Įrenginio aprašas	8
Paskirtis	8
Paskirtis ir naudojimo indikacijos	8
Numatytasis naudotojas ir numatytoji tikslinė pacientų grupė	9
Privalomasis suderinamumas su kitais įrenginiais	9
Prietaisai su matavimo funkcija	9
Kontraindikacijos	9
Kibernetinis saugumas	9
Suderinamumas	9
Sąveikumas	9
Numatytoji naudojimo trukmė	9
Veikimo reikalavimai ir apribojimai	10
Klinikinė nauda ir nepageidaujami šalutiniai poveikiai	10
Mokymosi galimybės	10
Pranešimas apie rimtus nepageidaujamus įvykius	10
Profesionalus naudojimas	10
Sistemos reikalavimai	10
Kaip programinę įrangą įdiegti	10
Naudojimo instrukcijos	10
Įspėjimai, perspėjimai ir atsargumo priemonės	11
Įspėjimai	11
„SmartFusion™“ inicijavimo įspėjimai	11
Skenavimo įspėjimai	11
Gido įspėjimai	12
Klinikiniai įspėjimai – bendrieji	12
Klinikiniai įspėjimai – implantas	12
Konfigūravimo įspėjimai	12
Įspėjimas dėl atstumo tarp implantų ir nervų	13
Įspėjimas dėl atstumo tarp implantų ir dantų šaknų	13
Perspėjimai / atsargumo priemonės	13

Sistemos reikalavimai	15
Operacinės sistemos	15
Reikalavimai	15
Pradžia	16
Gydymo koncepcija	16
„DTX Studio Implant“ atidarymas	16
Pagrindiniai veiksmai su pacientų failais	16
Naujo paciento failo kūrimas	16
Esamo paciento failo atidarymas	16
Gydymo plano atidarymas	16
Gydymo plano išsaugojimas	16
Gydymo plano kopijavimas	16
Gydymo plano pervardijimas arba naikinimas	17
Gydymo plano uždarymas	17
Paciento failo uždarymas	17
Naudotojo identifikavimas	18
Prisijungimas	18
Dviejų veiksmų autentifikavimas	18
Naudotojų perjungimas	18
Paskyrų duomenų tvarkymas	18
Odontologijos centro sąranka	19
Odontologijos centro sąrankos diegimas	19
Paskyrų tvarkymas	19
Naudotojų pridėjimas	19
Programinės įrangos apžvalga	20
Darbo srities sistema	21
Kas yra darbo sritis?	21
Priemonių juosta	21
Sąveika su peržiūros programomis	22
Manipuliavimas objektais	22
Objekto rodymas arba slėpimas	22
Manipuliacijos KT sluoksniu	23
KT vaizdų naršymas	23
Lygis ir langas	23
Lygis / langas naudojant dvimatį vaizdą	23
Lygis / langas naudojant trimatį vaizdą	23

Paciento modelis	24
Trimačio paciento modelio kūrimas	24
Paciento modelio kūrimas	24
Pjūvio kreivės formos redagavimas	24
Pjūvio kreivės formos redagavimas	24
Esamų valdymo taškų keitimas	24
Danties valdymo taškų naudojimas	25
Skersinio pjūvio dydžio koregavimas	25
Paciento modelio vaizdavimas	25
Kas yra perkėlimo funkcija?	25
Kaip anuliuoti paciento modelio vaizdavimą	26
Paciento šablono naudojimas	26
Kaulo artefaktų trynimas	26
Šablono išjungimas	27
Paciento šablono nustatymas iš naujo	27
Didžiausios dalies išlaikymas	27
Informacija apie protezavimą	28
Diagnozavimo sąranka	28
Dantų skenavimas	28
Skenuota dantų liejinio nuotrauka	28
Skenuotos dantų liejinio nuotraukos užsakymas	28
Burnos ertmės ar kitu staliu skeneriu skenuota nuotrauka	28
SmartFusion™	29
Skenuotos dantų nuotraukos įtraukimas į paciento modelį	29
„SmartFusion™“ inicijavimas	31
Inicijavimo procedūra	31
Kaip paleisti inicijavimo vedlį	31
Kaip nurodyti sutampančius taškus inicijavimo vedlyje	32
Įterpti tašką	32
Pašalinti pasirinktus taškus	32
Visų taškų šalinimas	32
„SmartFusion™“ inicijavimo įspėjimai	33
Veido skenavimas	33
Skenuotos veido nuotraukos įtraukimas į paciento modelį	33
Skenuotos veido nuotraukos apkirpimas	34
SmartSetup™	34
„SmartSetup™“ skaičiavimas	34
„SmartSetup™“ nustatymų reguliavimas	34
„SmartSetup™“ redagavimas	35

Radiografinio gido modelis	36
Radiografinio gido modelio sukūrimas	36
Vidinis paviršius	36
Diagnozė	37
Nervai	37
Dantys	37
Dantų pašalinimas iš modelio	37
Kaip pašalinti visus dantis vienu metu	37
Vieno danties pašalinimas	38
Matavimas	38
Implantų planavimas	39
Darbas su ne „Nobel Biocare“ implantais	39
Implantų įtraukimas į gydymo planą	39
Implanto įtraukimas į gydymo planą	39
Ką reiškia geltona zona?	40
Danties padėtis	40
Dantų schema	40
Manipuliacijos implantu	40
Implanto orientacijos keitimas	40
Implanto pastūmimas	41
Vieno implanto dėjimas lygiagrečiai kitam	41
Visų implantų įdėjimas lygiagrečiai	41
Atramos	41
Tinkamos atramos implantui pasirinkimas	41
Chirurginės operacijos tipo nustatymas	42
Skirtingi chirurginių operacijų tipai	42
Pirminės movos poslinkis	42
Pirminės movos poslinkio nustatymas	43
Pirminės movos pasukimo nustatymas	43
Kaulo pjūvio plokštuma	43
Tvirtinamieji kaiščiai	44
Tvirtinamojo kaiščio įtraukimas į gydymo planą	44
Tinkamas tvirtinamųjų kaiščių polinkis ir gylis	44
Tvirtinamieji kaiščiai ir radiografinis gidas (darbo eiga su bedančiais pacientais)	45
Tvirtinamieji kaiščiai ir skenuota dantų nuotrauka (darbo eiga su dalinai bedančiais pacientais)	46

Gydymo plano tikrinimas	47
Prisegimo funkcijos naudojimas	47
Skersinio pjūvio prisegimas prie implanto arba tvirtinamojo kaiščio („Anchor Pin“)	47
Perėjimas prie kito implanto arba tvirtinamojo kaiščio	47
Grįžimas į kreivės režimą	47
Gydymo plano tikrinimas	48
Chirurginio gido kūrimas	48
Chirurginio gido sukūrimas pagal gydymo planą	48
Chirurginio gido tikrinimas	48
Virtualaus chirurginio gido redagavimas	49
Gydymo plano patvirtinimas	49
Užsakymai	50
Darbas su ryšiais	50
Ryšio pridėjimas	50
Ryšio užklausos priėmimas	50
Darbas su gaminių užsakymais	51
Gaminio užsakymo kūrimas	51
Gaminio užsakymo išsiuntimas	51
Darbas su modelio skenogramos užsakymais	52
Modelio skenavimo užsakymo kūrimas	52
Darbas su „TempShell“ užsakymais	52
„TempShell“ darbo eiga	52
„LabDesign“ prašymo kūrimas	53
„TempShell“ užsakymo kūrimas	53
„LabDesign“ įtraukimas į gydymo planą	53
„TempShell“ įtraukimas į gydymo planą	54
Darbas su paslaugų užklausomis	54
Įprasta paslaugos užklausos pateikimo per „DTX Studio Go“ darbo eiga	54
Kaip atsakyti į paslaugos prašymą	54
Vietos paslaugos prašymo pateikimo darbo eiga	55
Patvirtinto plano eksportas	55
Darbas su „Assistant“	56

„DTX Studio Implant“ įspėjimo sistema	57
„DTX Studio Implant“ įspėjimai	57
Gido įspėjimai	58
Klinikiniai įspėjimai	59
Bendrieji įspėjimai	59
Implanto įspėjimai	60
Konfigūruojami įspėjimai	60
Techninių apribojimų	61
Mažiausias atstumas tarp movų „Guided Sleeve“	61
Mažiausias atstumas tarp movų ir implantų arba movų ir tvirtinamųjų kaiščių	61
Susikirtimas tarp implantų, tvirtinamųjų kaiščių arba implantų ir tvirtinamųjų kaiščių	61
Santykis tarp movos „Guided Sleeve“ ir radiografinio gido ir (arba) skenuotos dantų nuotraukos	62
Santykis tarp movos kreipiamosios movos „Guided Sleeve“ ir kaulo	63
Radiografinis gidas sukurtas be kalibruotos ISO vertės.	63
Gydymo plano aptarimas	64
Ataskaitos	64
Ataskaitos kūrimas	64
Ataskaitos spausdinimas	64
Peržiūros failai	65
Peržiūros failo kūrimas	65
Atidarykite peržiūros failą naudodami „DTX Studio Implant“	65
Peržiūros failo atidarymas naudojantis atsisiuntimo nuoroda	65
„Communicator“ pristatymai	66
„Communicator“ pristatymo kūrimas	66
Gydymo plano eksportavimas informacijos ar chirurginės operacijos tikslais	67
Eksportavimas į „DTX Studio Clinic“	67
Gydymo plano eksportas vaizduoti kituose programinės įrangos produktuose (atviras eksportas)	67
„X-Guide™“ chirurginis planas	68
„X-Guide™“ chirurginio plano kūrimas	68
„X-Guide™“ chirurginio plano eksportas	68
„OsseoCare™ Pro“ chirurginis planas	69
„OsseoCare™ Pro“ chirurginio plano kūrimas	69
Skenerio kalibravimas	70
Naujo kalibravimo rinkinio kūrimas	70
Techninė pagalba	71

Įvadas

Atsakomybės atsisakymas

Šis gaminys yra bendros koncepcijos dalis ir gali būti naudojamas tik kartu su susijusiais originaliais gaminiais, vadovaujantis „Nobel Biocare“ nurodymais ir rekomendacijomis. Jei kartu su „Nobel Biocare“ gaminiais naudojami nerekomenduojami trečiųjų šalių gaminiai, anuliuojama bet kokia garantija arba kiti išreikšti ar numanomi „Nobel Biocare“ įsipareigojimai. „Nobel Biocare“ gaminių naudotojas privalo nuspręsti, ar atitinkamas gaminys yra tinkamas individualaus paciento atveju. „Nobel Biocare“ atsisako bet kokios išreikštos ar numanomos atsakomybės ir nebus laikoma atsakinga už jokią tiesioginę, netiesioginę, baudžiamąją ar kitokią žalą, atsiradusią dėl arba susijusią su bet kokiomis profesinio sprendimo ar praktikos klaidomis naudojant „Nobel Biocare“ gaminius. Naudotojas taip pat privalo reguliariai domėtis naujausiais pakeitimais, susijusiais su šiuo „Nobel Biocare“ gaminiu ir jo naudojimu. Kilus abejonių naudotojas privalo kreiptis į „Nobel Biocare“ atstovybę. Už šio produkto naudojimą yra atsakingas naudotojas. „Nobel Biocare“ neprisiima jokios atsakomybės už patirtą žalą dėl netinkamo gaminių naudojimo. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie šioje naudojimo instrukcijoje nurodyti gaminiai dėl priežiūros institucijų reikalavimų gali būti parduodami ar licencijuojami ne visose šalyse.

Prieš naudodami „DTX Studio Implant“ atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir jas saugokite, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

Atkreipkite dėmesį: šiame dokumente pateikta informacija skirta tam, kad galėtumėte greitai pradėti naudotis.

Įrenginio aprašas

„DTX Studio Implant“ yra klinikinės paskirties programinė įranga, skirta vaizdais pagrįstos diagnostikos procesui vykdyti ir dantų, kaukolės, veido bei žandikaulio ligų gydymui planuoti.

„DTX Studio Implant“ skirta tam, kad taikant paciento (KS)KT vaizdavimo metodą būtų galima lengviau vykdyti dantų, kaukolės, veido bei žandikaulio ir susijusių sričių diagnostikos ir gydymo planavimo procesus. Be to, galima atvaizduoti ir į bendrą paciento įrašą susieti dvimačius duomenis

(pvz., fotografinius vaizdus, rentgeno nuotraukas arba intraoralinio paviršinio skenavimo duomenis). Gali būti pridėta ir atvaizduota protezavimo informacija, skirta protezavimo implantams planuoti. Chirurginį planą, įskaitant implantų padėtis ir protezavimo informaciją, galima eksportuoti į „DTX Studio Lab“ dantų protezams projektuoti.

„DTX Studio Implant“ palaiko „NobelGuide®“ dantų implantais grindžiamo burnos atkūrimo klinikinę koncepciją. Tai visos nukreipiamos chirurginės sistemos („NobelGuide®“ koncepcijos) bedančių arba iš dalies bedančių žandikaulių, įskaitant atskirų vienetų atvejus, gydymo dalis.

„DTX Studio Implant“ naudotojai gali prenumeruoti reguliarius mokymo ir švietimo seansus, kad įvaldytų planavimo programinę įrangą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie rengiamus kursus, apsilankykite „Nobel Biocare“ internetinėje svetainėje adresu www.nobelbiocare.com.

Paskirtis

Programinė įranga skirta tam, kad būtų lengviau vykdyti diagnostikos ir gydymo planavimo procesą atliekant dantų, kaukolės, veido bei žandikaulio procedūras.

Paskirtis ir naudojimo indikacijos

„DTX Studio Implant“ yra programinės įrangos sąsaja, skirta dvimačių ir trimačių vaizdų informacijai, gautai naudojant tokią įrangą kaip KT skeneris siekiant atlikti gydymo planavimą dantų, kaukolės, veido bei žandikaulio srityse, perduoti ir atvaizduoti.

„DTX Studio Implant“ gali būti naudojama nukreipiamai implantų chirurgijai palaikyti ir pateikti dantų atkūrimo sprendimų konstrukcinių įvadų ir apžvalgą. Rezultatai gali būti eksportuoti implantams gaminti.

Numatytasis naudotojas ir numatytoji tikslinė pacientų grupė

„DTX Studio Implant“ tarpdisciplininė gydytojų grupė naudoja kaip pagalbinę priemonę gydant pacientus, kuriems reikia taikyti dantų, kaukolės, veido, žandikaulio ar susijusius gydymo metodus.

Ji skirta pacientams, kuriems reikia odontologinio gydymo.

Privalomasis suderinamumas su kitais įrenginiais

- „DTX Studio Implant“ peržiūros programinė įranga
- „iPad“ skirta „NobelClinician Communicator“ programa
- „OsseoCare™ Pro“ „iPad“ programa
- „DTX Studio Lab“
- „DTX Studio Implant“ turi būti suderinama su dažniausiai naudojamomis „Windows“ ir „Mac“ operacinėmis sistemomis, įskaitant naujausius leidimus.
- „X-Guide™“ – 3D navigacijos sistema („X-Nav Technologies, LLC“)
- „DTX Studio Clinic“
- „NobelGuide®“ koncepcija ir chirurginiai gidai
- „Nobel Biocare“ implantai ir standartinės atramos
- Paviršiaus duomenims importuoti į „DTX Studio Implant“: paviršiaus nuskaitymas, gautas naudojant „NobelProcera® 2G“ skaitytuvą, „Kavo LS 3“ skaitytuvą. Šifruotas formatas (*.nxa)
- Trečiųjų šalių implantai, skirti gydymui planuoti ir gidu valdomoms chirurginėms operacijoms – tik pirminiam gręžimui.
- DICOM importavimas (iš (KS)KT skenerių) ir STL / PLY importavimas (iš stalinių ar intraoralinių skenerių).
- „DTX Studio Implant“ turi būti suderinama su internetiniu portalu – „DTX Studio Go“.

Prietaisai su matavimo funkcija

Matavimo tikslumas priklauso nuo vaizdo duomenų, naudotos skenerio aparatinės įrangos, jos kalibravimo ir fiksavimo nustatymų. Matavimas negali būti tikslesnis nei vaizdo raiška. „DTX Studio Implant“ programinė įranga pateikia vertę, suapvalintą iki vieno skaitmens po kablelio, pagal naudotojo pasirinktus taškus.

Kontraindikacijos

„DTX Studio Implant“ nenustatyta.

Kibernetinis saugumas

Kompiuteryje, kuriame „DTX Studio Implant“ bus naudojama, rekomenduojama įdiegti aktyvią ir atnaujintą antivirusinę ir apsaugos nuo kenkėjiškų programų programinę įrangą bei tinkamai sukonfigūruotą užkardą.

Be to, kai nuo kompiuterio atsitraukiate, jį visada užrakinkite. Jei to nepadarysite, diagnozė ir planavimas ar gydymas gali būti netyčia pakeisti.

Suderinamumas

„DTX Studio Implant“ nėra sujungta su kitomis medicinos priemonėmis ir yra suderinama su ankstesnėmis „DTX Studio Implant“ versijomis.

Sąveikumas

„DTX Studio Implant“ yra suderinama su „DTX Studio Clinic“ ir „DTX Studio Lab“.

Numatytoji naudojimo trukmė

Numatytas programinės įrangos naudojimo laikas yra treji metai. Palaikomose operacinėse sistemose ji ir toliau atliks savo paskirtį.

Veikimo reikalavimai ir apribojimai

„DTX Studio Implant“ priklauso nuo operacinių sistemų, su kuriomis ji naudojama. Todėl svarbu užtikrinti, kad „DTX Studio Implant“ būtų naudojama tik su patvirtintomis operacinėmis sistemomis. Daugiau informacijos apie patvirtintas operacines sistemas rasite dokumente „Sistemos reikalavimai“, psl. Nr. 15.

Klinikinė nauda ir nepageidaujami šalutiniai poveikiai

„DTX Studio Implant“ yra sudedamoji gydymo, kurio metu naudojama dantų implantų sistema ir (arba) dantų vainikėliai ir tiltai, dalis. Klinikinė gydymo nauda, kurios pacientai gali tikėtis – atkurti trūkstami dantys ir (arba) vainikėliai.

Šalutinis poveikis nežinomas.

Mokymosi galimybės

Primygtinai rekomenduojama, kad gydytojai, nauji ir patyrę mūsų programinės įrangos naudotojai, prieš naudodami programinę įrangą pirmą kartą, perskaitytų naudojimo instrukcijas. Pagal pageidavimą gali būti organizuojami kursai esant įvairiam žinių ir patirties lygiui.

Daugiau informacijos rasite apsilankę mokymo svetainėje adresu tw.dtxstudio.com.

Pranešimas apie rimtus nepageidaujamus įvykius

Jei naudojant šį įrenginį arba dėl jo naudojimo įvyko rimtas nepageidaujamas įvykis, apie jį praneškite gamintojui ir savo nacionalinei institucijai. Šio įrenginio gamintojo kontaktinė informacija, kuria naudojantis reikia pranešti apie rimtą nepageidaujamą įvykį:

Nobel Biocare AB

<https://www.nobelbiocare.com/complaint-form>

Profesionalus naudojimas

„DTX Studio Implant“ skirta tik profesionaliam naudojimui.

Sistemos reikalavimai

Patariame prieš pradėdant diegti programinę įrangą peržiūrėti „Sistemos reikalavimai“, psl. Nr. 15. Norėdami gauti informacijos apie minimalius ir (arba) rekomenduojamus reikalavimus, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Naudojant naujas programinės įrangos versijas gali būti taikomi didesni aparatinės įrangos ar operacinės sistemos reikalavimai.

Kaip programinę įrangą įdiegti

Norėdami gauti informacijos apie programinės įrangos diegimą, kreipkitės į įgaliotąjį specialistą arba klientų aptarnavimo skyrių.

Naudojimo instrukcijos

Norėdami gauti išsamios informacijos apie programinės įrangos naudojimą, žr. toliau šioje naudojimo instrukcijoje pateikiamus nurodymus.

Įspėjimai, perspėjimai ir atsargumo priemonės

Įspėjimai

Programinėje įrangoje rodomi toliau pateikti įspėjimai.



- Ši planavimo programa visų techninių apribojimų automatiškai netikrina! Kai kuriais atvejais chirurginių gidų negalima pagaminti, net jei programinė įranga automatiškai nenustato jokių techninių apribojimų.
- Naudotojas privalo būti susipažinęs su KT duomenų interpretavimu ir KT duomenų pateikimu naudojant tūrinį vaizdavimą.
- Netinkamas (KS)KT skenuotos nuotraukos ir skenuoto paviršiaus suliejimas lems netinkamą chirurginį gidą, kurio nebus galima naudoti atliekant chirurginę operaciją.
- Žinokite, kad duomenų vaizdavimas (pvz., peržiūros programos orientacija, objektų spalvos) ir įspėjimai „DTX Studio Implant“ ir „X-Guide™“ programinėje įrangoje gali skirtis.
- „DTX Studio Implant“ palaiko tik kai kuriuos į „X-Guide™“ eksportuotinus implantus. Nepalaikomi implantai į „X-Guide™“ failą nebus įtraukti.



„SmartFusion™“ inicijavimo įspėjimai

- Skenuotos dantų nuotraukos sulygiavimas koreguotas rankiniu būdu.
Paciento modelio ir dantų nuotraukos suliejimas buvo koreguotas rankomis. Pakartotinai patikrinkite, ar dantų nuotrauka tinkamai apjungta su (KS)KT nuotrauka, nes dėl nuokrypių atsiras klaidų tinkamai nustatant implantų padėtį.
- Viena ar kelios taškų poros neatitinka.
- Nurodyti taškai netinkamai paskirstyti skenuotoje dantų nuotraukoje.
- Nurodykite bent tris sutampančius taškus.
- Patikrinkite skenuotos dantų nuotraukos ir paciento modelio sulygiavimą ir, jei jis netinkamas arba abejojate, sulygiavimą perskaičiuokite vedliu „Redaguoti skenuotą dantų nuotrauką“.



Skenavimo įspėjimai

Nebus galima įkelti netinkamų DICOM rinkinių. DICOM rinkiniai gali būti netinkami dėl vienos iš tolesnių priežasčių

- DICOM rinkinyje yra mažiau nei du pjūviai.
- DICOM rinkinio pjūvio inkrementas yra nulinis.
- DICOM rinkinio pjūvių inkrementai nenuoseklūs.
- DICOM rinkinyje nėra vaizdo padėties.
- DICOM rinkinyje yra netinkama vaizdo padėtis.
- DICOM rinkinio pjūviai per stori.
- DICOM rinkinyje užfiksuotas įrenginio detektoriaus pakrypimas.
- DICOM rinkinio pjūvių inkrementas per didelis (šį DICOM rinkinį įmanoma naudoti, tačiau tik savo atsakomybe).



Gido įspėjimai

- Susikerta movos.*
- Susikerta implantas ir mova.
- Susikerta tvirtinamasis kaištis ir mova.
- Susikerta pažymėtas dantis ir mova.
- Tvirtinamojo kaiščio mova per arti skenuotos dantų nuotraukos.
- Pirminė mova per arti skenuotos dantų nuotraukos.*
- Mova „Guided Sleeve“ per arti skenuotos dantų nuotraukos.

* Kol nebus pašalinta ši problema, chirurginio gido nebus įmanoma pagaminti.



Klinikiniai įspėjimai – bendrieji

- Plane nėra nė vieno tvirtinamojo kaiščio.
- Susikerta tvirtinamieji kaiščiai.
- Nesukalibruotas radiografinis gidas.
- Gydymas suplanuotas naudojant neįdiegtus produktus.*
- Įjungtas prastos kokybės vaizdavimas.**
- Skenuotos dantų nuotraukos sulygiavimas koreguotas rankiniu būdu.
- Nepavyko atlikti „SmartFusion“ sulygiavimo.*
- Patikrinti „SmartFusion“ sulygiavimą

* Kol nebus pašalinta ši problema, nebus įmanoma pagaminti chirurginio gido.

** Pasirinkus prastos kokybės vaizdą padidėja pavojus, kad paciento modelyje bus matomos ne visos anatomicinės savybės. Šis nustatymas turės įtakos tik trimačio tūrio kokybei. KT pjūviai nebus paveikti.



Klinikiniai įspėjimai – implantas

Svarbu

Vertės, kurios sugeneruos implanto įspėjimus, turi būti nustatytos vadovaujantis mediko patirtimi ir žiniomis.

- Susikerta implantai.
- Susikerta implantas ir tvirtinamasis kaištis.
- Implantas per arti pažymėto nervo.*
- Implantas per arti pažymėto danties.*
- „DTX Studio Implant“ palaiko tik kai kuriuos į „X-Guide“ eksportuotinus implantus. Nepalaikomi implantai į „X-Guide“ failą nebus įtraukti.

* Šie įspėjimai konfigūruojami



Konfigūravimo įspėjimai

Konfigūruojami įspėjimai yra paremti tūriu aplink implantą (t. y. įspėjimo tūriu). Kai šis tūris kertasi su pažymėta anatomicine struktūra, sugeneruojamas įspėjimas.

Įspėjimo tūris priklauso nuo iš anksto nustatyto atstumo. Pagal numatytąjį nustatymą nustatytas minimalus atstumas yra 1,5 mm. Esant šiam minimaliam atstumui įspėjimo tūris sutampa su geltona zona (atitinkančia 1,5 mm atstumą aplink implantą ir 2 × 1,5 mm (3,0 mm) atstumą ties viršūne). Įspėjimo tūrį galima padidinti. Kaip pavaizduota paveikslėlyje (pvz., 4,0 mm atstumas), įspėjimo tūris yra pritaikomas atitinkamai.



Įspėjimas dėl atstumo tarp implantų ir nervų

Kai implantas nustatomas per arti pažymėto nervo (t. y. įspėjimo tūris sutampa su pažymėto nervo vizualizacija), sugeneruojamas įspėjimas. Rodomas susijęs implantas (jei jis dar nebuvo matomas) ir jis pažymimas oranžine spalva.

Įspėjimas dėl atstumo tarp implantų ir dantų šaknų

Kai implantas nustatomas per arti danties šaknies (t. y. įspėjimo tūris sutampa su pažymėtu dantimi), sugeneruojamas įspėjimas. Implantas yra rodomas pažymėtas oranžine spalva.

Pastaba

Minimalų numatytąjį įspėjimo tūrio atstumą reikia nustatyti naudojant „DTX Studio Implant“ > „Bendrosios ypatybės“. Šios vertės išsaugomos kompiuteryje, kuriuo dirbate. Jei gydymo planas atidaromas ne tame pačiame kompiuteryje, kuriame buvo sukurtas, rodomi įspėjimai atitinka šiuo metu naudojamo kompiuterio nustatymus. Atsižvelgiant į kompiuterio nustatymus rodomi įspėjimai gali skirtis. Konfigūruojamas vertes visada galima koreguoti nustatymuose, o sugeneravus įspėjimą vertės rodomos jo apžvalgoje.

Perspėjimai / atsargumo priemonės



- Implantuojantiems, protezuojantiems ir susijusią programinę įrangą naudojančioms gydytojams, tiek pradedantiems, tiek patyrusiems, rekomenduojama prieš pradedant taikyti naują gydymo metodiką dalyvauti specialiuose mokymuose. „Nobel Biocare“ siūlo daugybę įvairių kursų skirtingo lygio žinių ir patirties turintiems gydytojams. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.nobelbiocare.com.
- Jei pirmą kartą naudodami naują prietaisą arba taikydami naują gydymo metodą dirbsite kartu su kolega, turinčiu naujo prietaiso naudojimo arba naujo gydymo metodo taikymo patirties, tai gali padėti išvengti galimų komplikacijų. „Nobel Biocare“ šiam tikslui pasitelkė pasaulinį konsultantų tinklą.
- Nėra šimtaprocentinės garantijos, kad implantacija bus sėkminga. Nesilaikant gaminio naudojimo indikacijų ir chirurginės (-ių) arba darbo procedūros (-ų) galima patirti nesėkmę. Nerekomenduojama gydyti vaikų įprastais gydymo būdais, kol nebus tinkamai dokumentuota žandikaulio formavimosi fazės pabaiga.
- Esant priešoperaciniam kietojo ar minkštojo audinio deficitui galimas blogesnis estetiškas rezultatas arba netaisyklingas implanto kampas. Primygtinai rekomenduojama „NobelGuide®“ chirurginius gidus ir dantų protezų analogus naudoti tik su atitinkamais „Nobel Biocare“ implantais, chirurginiais instrumentais ir protezavimo komponentais, nes komponentų, kurie nėra skirti naudoti kartu, derinimas gali sukelti mechaninių ir (arba) instrumentinių problemų, sužaloti audinį arba lemti nepriimtina estetinę rezultatą.
- Prieš planuodamas bet kokią chirurginę procedūrą ne burnoje (t. y. kaukolės, veido ir žandikaulio gydymą naudojant implantus ne dantų ar skruostikaulio srityje), naudotojas privalo nustatyti, ar implantas skirtas naudoti ne burnoje.
- Be to, kompiuteryje, kuriame naudosite „DTX Studio Implant“ („NobelClinician®“), rekomenduojama įdiegti aktyvią ir atnaujintą antivirusinę ir apsaugos nuo kenkėjiškų programų programinę įrangą bei tinkamai sukonfigūruotą užkardą.
- Jungtinėse Valstijose ir kai kuriose kitose rinkose vidukauliniams implantams skirtas chirurginis gidas laikomas medicininio įrenginio. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šių chirurginių gidų reglamentavimo statusą ir jiems taikomus reikalavimus, kreipkitės į vietos reglamentavimo instituciją.



- Kai įspėjimai sugeneruojami dėl cilindriškų formų, šie įspėjimai apskaičiuojami remiantis apytiksliais gaminio formos apskaičiavimais.

- Dėl programinės įrangos žinių ir išmanymo stokos galimas diagnozės ir faktinio gydymo uždelsimas arba netinkamas gydymo planas.

- Naudojant programinės įrangos diagnostikos ir planavimo įrankius ypač svarbu atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

- ar parengtos indikacijos (vizualizavimas, matavimas, kritinės struktūros, importuoti duomenys, implantų planavimas) teisingos;
- automatizuotų funkcijų rezultatų teisingumas (dantų skenogramų lygiavimas, virtualių dantų nustatymas...);
- sukurtus chirurginio gido STL failus ir jų optimalų pritaikymą prie paciento burnos pagal parengtą planą;
- ar duomenys atnaujinti ir nėra pasenę.

To nepadarius padidėja rizika, kad reikės peržiūrėti diagnozę, planavimą ar gydymą. Tai savo ruožtu gali lemti diagnozės, planavimo ar paties gydymo atidėjimą arba perplanavimą, galimas netinkamas gydymo planas.

- Įkeliant paciento duomenis rekomenduojama skirti ypatingą dėmesį. Dėl neteisingų ir neišsamų duomenų gali būti sudarytas neteisingas gydymo planas.

- Iš programinės įrangos išskleidžiant ataskaitą ar paciento duomenis svarbu žinoti, kad paciento duomenys, iš kurių nebuvo pašalinta asmens informacija, gali būti be paciento sutikimo naudojami netinkamais tikslais.

- Rekomenduojama atkreipti ypatingą dėmesį į peržiūros programų pateikties režimą ir orientacijos ženklus. Neteisinga paciento orientacija ar vaizdavimas, arba gali būti sudarytas neteisingas gydymo planas.

- Atnaujinus programinės įrangos versiją, rekomenduojama patikrinti svarbius atidarytų pacientų atvejų ir (arba) gydymo plano nustatymus ir įsitikinti, kad jie ir naujoje programinės įrangos versijoje yra teisingi. Neteisingi nustatymai gali lemti diagnozės ir planavimo ar faktinio gydymo atidėjimą arba perplanavimą arba netinkamą gydymo planą.

- Kompiuteryje, kuriame „DTX Studio Implant“ bus naudojama, rekomenduojama įdiegti aktyvią ir atnaujintą antivirusinę ir apsaugos nuo kenkėjiškų programų programinę įrangą bei tinkamai sukonfigūruotą užkardą. Be to, be priežiūros paliekamą kompiuterį visada užrakinkite. Jei to nepadarysite, diagnozė ir planavimas ar gydymas gali būti netyčia pakeisti.

- Rekomenduojama atkreipti ypatingą dėmesį į sukurtą implantų planavimą ir į tai, kaip implantai išdėstyti vienas kito ir kitų importo anatominių struktūrų atžvilgiu. Taip pat reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į programinės įrangos įspėjamuosius signalus. Be to, eksportuodami visada patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą implantų planavimą ir ar eksportuotame implantų plane yra visa implantavimo operacijai atlikti reikalinga informacija. To nepadarius padidėja rizika, kad reikės peržiūrėti diagnozę, planavimą ar gydymą. Tai savo ruožtu gali lemti diagnozės, planavimo ar paties gydymo atidėjimą arba perplanavimą, galimas netinkamas gydymo planas.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

- „Windows® 11“ arba 10, 64 bitų („Pro“ ir „Enterprise“ leidimai) staliniame arba nešiojamajame kompiuteryje.
- „macOS Sequoia“ (15), Sonoma“ (14), „Ventura“ (13) arba „Monterey“ (12) („Mac“ ir „Apple Silicon Mac“ „Intel“ pagrindu su M1 lustu arba naujesne versija) „iMac“, „Mac Mini“, „Mac Pro“, „MacBook Pro“, „MacBook Air“ įrenginiuose.

Pastaba

Kai kurių „MacBook Air®“ ir „Mac® Mini“ konfigūracijų vaizdo plokštėms taikomi tūrio vaizdavimo apribojimai. Apsvarstykite galimybę rinktis mažos raiškos tūrio vaizdavimą.

Reikalavimai

Centrinis procesorius	Dviejų branduolių / 3 GHz taktinis dažnis
Operatyvioji atmintis	8 GB
Grafikos plokštė	Speciali plėtotės grafikos plokštė su optimaliu 3D palaikymu („OpenGL 3.3“) ir 2 GB arba daugiau atminties (pvz., AMD arba NVIDIA). 4K ekranams: 4 GB ar daugiau atminties. Palaikomi 6-osios kartos arba naujesni „Intel“ procesoriai (su integruotu 9-osios kartos arba naujesniu grafikos procesoriumi). Norėdami patikrinti grafikos plokštės „OpenGL“ versiją, apsilankykite svetainėje http://realtech-vr.com/admin/gview .
Disko talpa	5 GB laisvos vietos diske
Tinklas	Plačiajuostis interneto ryšys su 3 Mbps siuntimo ir 30 Mbps atsisiuntimo sparta.
Monitorius	„Full HD“ (1920 × 1080) arba didesnės raiškos.

Pradžia

Gydymo koncepcija

Gydymas apima visus su pacientu susijusius **gydymo planus**. Kuriant naujo paciento skiltį arba dirbant su esamu galima pradėti gydymą. Pavyzdžiui, galite sukurti atskirus gydymo planus viršutiniam ir apatiniam žandikauliams.

Gydymo planą sudaro pagrindinis paciento modelis, skenuota dantų nuotrauka, vaškinis modelis ir (arba) radiografinis gidas bei visi konkretaus paciento esamos padėties sąrankos planavimo produktai.

„DTX Studio Implant“ atidarymas

Norėdami atidaryti „DTX Studio Implant“, darbalaikyje dukart spustelėkite nuorodos piktogramą . Programinė įranga atidaroma modulyje „Biuras“, kad galėtumėte prisijungti ir pradėti dirbti su pacientų failais.

Pagrindiniai veiksmai su pacientų failais

Pastaba

Kad galėtumėte pradėti dirbti su pacientų failais, prisijunkite prie „DTX Studio Implant“.

Naujo paciento failo kūrimas

Norėdami sukurti naujo paciento failą, spustelėkite **Naujas**  priemonių juostos skirtuke **Medicininiai įrašai**. Dialogo lange **Naujas pacientas** pasirinkite sukurti trimatį paciento modelį, užsakyti dantų liejinio skenuotą nuotrauką arba įvesti paciento informaciją.

Esamo paciento failo atidarymas

Norėdami atidaryti paciento failą, sąraše dukart spustelėkite paciento vardą. Iškilęs dialogo langas **Medicininis įrašas**, kuriame galėsite pasirinkti pereiti į modulį (kad galėtumėte kurti trimatį planą), įvesti paciento informaciją, užsakyti gaminius ar aptarti gydymo planą.

Gydymo plano atidarymas

Jei atidarytas konkretaus paciento failas, o jūs norite atidaryti to paciento gydymo planą, priemonių juostoje spustelėkite skirtuką **„DTX Studio Implant“**, tada spustelėkite **Atidaryti** . Kai atsidarys langas **Planavimo apžvalga**, pasirinkite gydymo planą ir spustelėkite **Atidaryti scenarijų**.

Gydymo plano išsaugojimas

Norėdami gydymo planą įrašyti, naudokite skirtuko „DTX Studio Implant“ parinktį **Įrašyti**  arba paspauskite [CTRL + S].

Gydymo plano kopijavimas

Norėdami įrašyti gydymo kopiją (pvz., kad nukopijuotus duomenis galėtumėte naudoti kito žandikaulio gydymo planui sukurti), pasirinkite skirtuko „DTX Studio Implant“ parinktį **Įrašyti kaip**, tada pasirinkite **Naujas gydymas** .

Gydymo plano pervardijimas arba naikinimas

Norėdami pervardyti arba panaikinti gydymo planą, naudokite skirtuko „DTX Studio Implant“ parinktį **Tvarkyti**. Tai yra įmanoma tik laikantis tam tikrų sąlygų.

Gydymo plano uždarymas

Norėdami gydymo planą uždaryti, priemonių juostoje spustelėkite skirtuką „DTX Studio Implant“, tada spustelėkite parinktį **Uždaryti planą** 🗑️. Gydymo planas bus uždarytas ir pasirodys dialogo langas **Planavimo apžvalga**.

Paciento failo uždarymas

Norėdami uždaryti paciento failą, priemonių juostoje spustelėkite skirtuką „DTX Studio Implant“, tada meniu pasirinkite **Uždaryti pacientą**. Kai pasirodys dialogo langas **Medicininis įrašas**, spustelėkite **Uždaryti pacientą**. Jei paciento faile yra neįrašytų pakeitimų, sistema klausia, ką daryti: **Įrašyti**, **Neįrašyti** arba **Atšaukti** uždarant paciento failą.

Naudotojo identifikavimas

Kompiuterį su „DTX Studio Implant“ gali naudoti keli naudotojai. Siekiant užtikrinti, kad prisijungti ir naudotis „DTX Studio Implant“ galėtų tik įgaliojami naudotojai, reikalinga tinkama naudotojų identifikacija. Programinė įranga tada pritaikys teisingus naudotojo parametrus ir paciento privatumo taisykles. Naudojant „DTX Studio Go“ galimas autentifikavimas dviem veiksmiais, kad būtų dar saugiau.

Prisijungimas

1. Norėdami atidaryti programinę įrangą, darbalaukyje dukart spustelėkite piktogramą .
2. Pasirinkite naudotoją.
3. Įveskite atitinkamą slaptažodį.
4. Spustelėkite [Prisijungimas](#).

Prisijungdami pirmą kartą įveskite slaptažodį, kurį gavote registruodamiesi el. paštu. Jeigu prašoma, slaptažodį pakeiskite. Slaptažodis turėtų būti kuo saugesnis ir sudėtingesnis – jis neturi būti sudarytas iš lengvai atspėjamų žodžių (nenaudokite jokių asmens duomenų, pvz., gimimo datos ir t. t.).

Jei pasirinksite [Automatinis prisijungimas](#), kompiuteryje, kurį naudojate, „DTX Studio Implant“ prisijungimo dialogo langas nebebus rodomas.

Dviejų veiksmių autentifikavimas

Jei „DTX Studio Go“ buvo nustatytas autentifikavimas dviem veiksmiais, prisijungdami turėsite įvesti slaptažodį ir šešių skaitmenų patvirtinimo kodą. Kas 30 dienų būsite paraginti įvesti naują šešių skaitmenų patvirtinimo kodą.

Naudotojų perjungimas

Norėdami „DTX Studio Implant“ programinėje įrangoje naudotojus perjungti, modulio [Mano biuras](#) meniu „DTX Studio Implant“ spustelėkite [Perjungti paskyrą](#).

Paskyrų duomenų tvarkymas

Norėdami sužinoti licencijos arba paskyros duomenis, duomenis redaguoti, pakeisti slaptažodį arba tvarkyti odontologijos centro ryšius ar teises, atidarykite dialogo langą [Tvarkyti paskyrą](#).

1. Modulyje [Mano biuras](#) spustelėkite skirtuką „DTX Studio Implant“.
2. Pasirinkite [Tvarkyti paskyrą](#).
3. Dialogo lange [Tvarkyti paskyrą](#) rodoma turima informacija.

Odontologijos centro sąranka

„DTX Studio Implant“ programinės įrangos praktikos sąrankos versiją galima diegti keliose darbo vietose, kad galėtų prisijungti keli naudotojai. Bendrai naudojamame tinklo aplanke galima centralizuotai saugoti pacientų failus, kad juos būtų galima lengvai pasiekti iš įvairių vietų.

Odontologijos centro sąrankos diegimas

Norėdami gauti instrukcijas, kaip įdiegti ir užregistruoti „DTX Studio Implant“ programinę įrangą, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Paskyrų tvarkymas


Norėdami tvarkyti savo praktikoje esančių naudotojų paskyras ir nustatyti atitinkamas naudotojų teises, atidarykite dialogo langą [Tvarkyti paskyras](#) naudodami parinktį [Tvarkyti paskyrą](#), esančią meniu „DTX Studio Implant“.

Naudotojų pridėjimas

Norėdami įtraukti naujų naudotojų, kreipkitės į vietinį „Nobel Biocare“ klientų aptarnavimo arba pagalbos skyrių.

Programinės įrangos apžvalga

Pagrindiniai grafiniai naudotojo sąsajos komponentai nurodyti toliau esančiame paveikslėlyje.

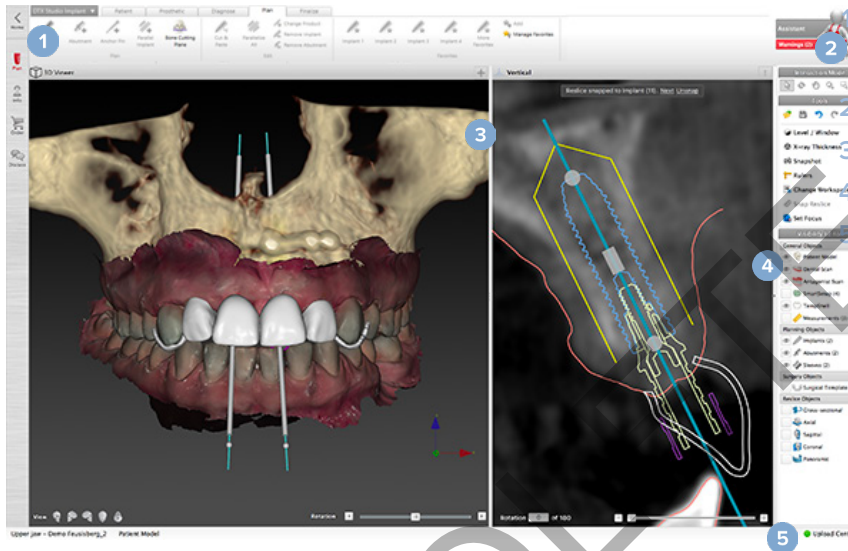

Priemonių juosta su pasirinktam moduliui skirtomis veiksmų grupėmis

Asistentas

Darbo sritis

Modulių juosta

Įkėlimų centras

Norėdami naršyti „DTX Studio Implant“ modulius, modulių juostoje spustelėkite piktogramas:

Home

Plan

Info

Order

Discuss

Pagrindinis / Mano biuras modulis skirtas pacientų duomenims ir kalibravimo rinkiniams tvarkyti.

Trimatis planavimas modulis skirtas DICOM failams importuoti, pacientų ir gidų modeliams kurti, diagnozuoti bei planuoti.

Paciento informacija modulis skirtas paciento informacijai saugoti ir klinikiams vaizdams tvarkyti **Pacientų bibliotekoje**.

Užsakymo modulis skirtas tam, kad galėtumėte užsakyti dantų liejinio ar vaškinio modelio skenogramas, „TempShell“ arba chirurginį gidą ir dantų protezo analogą su standartizuotais komponentais.

Aptarimo modulis skirtas tam, kad būtų paprasčiau perduoti informaciją apie gydymo planą kolegoms ir pacientams (naudojant peržiūros programos failus, ataskaitas ir (arba) „Communicator“ pristatymus) ir susieti „DTX Studio Implant“ ir „OsseoCare™ Pro“ kuriant „OsseoCare™ Pro“ operacijas.


Dukart spustelėję pacientą **Mano biuras** atidarysite konkretų su šiuo pacientu susijusį skyrį. Spustelėję **Trimatis planavimas** galėsite nustatyti diagnozę ir sudaryti gydymo planą.

Darbo srities sistema

Planuojant „DTX Studio Implant“, svarbu peržiūrėti paciento duomenis skirtingais būdais. Rodinys priklauso nuo naudotojui reikiamos informacijos. Šie skirtingi duomenų vaizdavimo būdai vadinami darbo sritimis.

Kas yra darbo sritis?


Darbo srityje pateikiamos trimačio ir dvimačio vaizdo peržiūros programos ir dešiniojoje ekrano pusėje esančios šoninės juostos redagavimo sritys. Darbo srityje gali būti pavaizduoti ir apdorojami trimačiai objektai ir (arba) dvimačio vaizdo duomenys. Perjunkite iš vienos sistemoje esančios peržiūros programos schemos į kitą, kad peržiūrėtumėte priešoperacinius vaizdo duomenis.

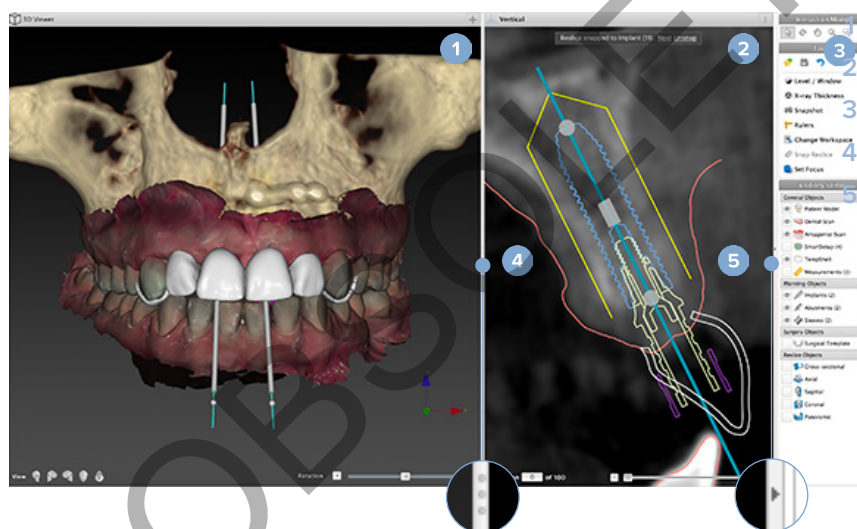

- 1 Trimatės peržiūros programa
- 2 Dvimatės peržiūros programa
- 3 Šoninė juosta
- 4 Dalytuvas
- 5 Sutraukimo mygtukas

Priemonių juosta

Darbo srities viršuje yra nuo konteksto priklausoma priemonių juosta, kurioje pateiktos konkrečioms užduotims skirtos priemonės. Planavimo modulyje specialieji skirtukai pasirodo pasirinkus konkrečius objektus (pvz., skersinį pjūvį, implantus ir pan.). Šie specialieji skirtukai (dar vadinami kontekstiniais skirtukais) suteikia pakaitinę prieigą prie veiksmų, kurie taip pat pasiekiami išskleidžiamuosiuose meniu, kurie rodomi spustelėjus objektą dešiniuoju pelės mygtuku.

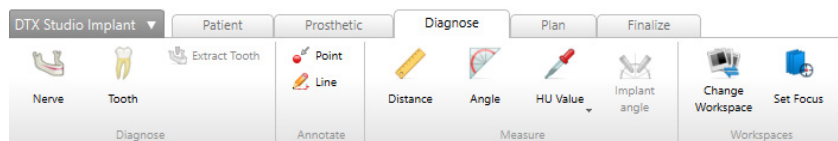

Sąveika su peržiūros programomis

Dirbant su trimatėmis modeliais galima pasirinkti įvairius sąveikos režimus. Sąveikos režimus galite perjungti spustelėdami piktogramas sąveikos priemonių juostoje, naudodami dešiniojo klavišo paspaudimu atveriamą kontekstinį meniu **Sąveika** arba paspausdami sparcųjų klavišų derinius.

	Sąveikos režimas	Pažymėti objektą ar nurodyti veiksmo objektą galite nuspausdami kairįjį pelės mygtuką.
	Pasukimo režimas	Pasukti trimatį vaizdą (tik trimatį) galite vilkdami pelę.
	Panoramos režimas	Panoraminis vaizdas rodomas velkant pelę.
	Mastelio keitimo režimas	Vaizdas didinamas arba mažinamas velkant pelę.
	Lauko mastelio keitimo režimas	Nubrėždami stačiakampę sritį (tik dvimačiame vaizde) padidinkite ir sufokusuokite konkrečią modelio sritį.

Perjunkite skirtingus sąveikos režimus naudodami sparciuosius klavišus:

„Ctrl“ („Cmd“) arba vidurinis pelės mygtukas	Perjunkite panoramos režimą, kai įjungtas bet kuris kitas režimas. Panoramos režimas išlaikomas, kol nuspaustas mygtukas. Atleiskite mygtuką norėdami grįžti į pradinį režimą.
„Alt“	Perjunkite sukimo režimą, kai įjungtas bet kuris kitas režimas. Sukimo režimas išlaikomas, kol mygtukas nuspaustas. Atleiskite mygtuką norėdami grįžti į pradinį režimą.
„Shift“	Perjunkite mastelio keitimo režimą, kai įjungtas bet kuris kitas režimas. Mastelio keitimo režimas išlaikomas, kol nuspaustas mygtukas. Atleiskite mygtuką norėdami grįžti į pradinį režimą.
Klavišas „Tab“	Įjunkite sąveikos režimą arba sukimo režimą.

Trimatės peržiūros programoje yra daug standartinių rodinių. Spustelėdami piktogramas atidarysite atitinkamus standartinius modelio vaizdus.

	Priekis – standartinis frontalinis vaizdas spartusis klavišas [5]
	Kairė – standartinis šoninis vaizdas iš kairės spartusis klavišas [1]
	Dešinė – standartinis šoninis vaizdas iš dešinės spartusis klavišas [3]
	Iš viršaus žemyn – standartinis kranialinis-kaudalinis vaizdas spartusis klavišas [9]
	Iš apačios į viršų – standartinis kaudalinis-kranialinis vaizdas spartusis klavišas [7]

Manipuliavimas objektais

Norėdami pažymėti objektą, atidarykite sąveikos režimą ir spustelėkite objektą. Trimatės peržiūros programoje balta kontūro linija parodo, kad objektas pažymėtas. Dvimatės peržiūros programoje nuspalvinamas pažymėto objekto kontūras.

Pastaba

paciento modelis šiuo atveju yra išimtis. Pasirinkus paciento modelį nerodoma jokia kontūro linija.

Pasirinkite skersinį pjūvį, implantą arba tvirtinamąjį kaištį ir pasiekite susijusius veiksmus naudodami specialųjį priemonių juostos skirtuką.

Spustelėję bet kurį objektą dešiniu juostos pelės mygtuku atversite išskleidžiamąjį meniu, kuriame pateikiami visi veiksmai, kuriuos galima atlikti su šiuo objektu.


Objekto rodymas arba slėpimas

Norint sudaryti veiksmingą paciento gydymo planą, planavimo etape svarbu matyti tik dominančius objektus.

Pavienį objektą galite paslėpti naudodami kontekstinį meniu arba spartųjį klavišą [H].

Naudojant programą **Matomumo redaktorius** vienu pelės mygtuko spustelėjimu galima rodyti arba paslėpti standartinius objektus.

Objektų grupėms skirtos įvairios matomumo valdymo piktogramos:

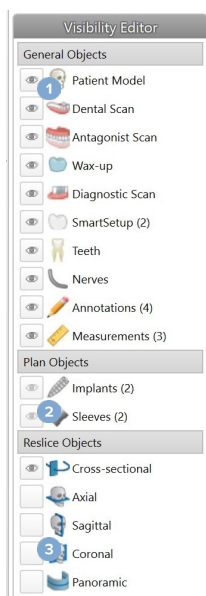

- 1 Kai prieš grupę yra juoda matomumo piktograma , ekrane rodomi visi grupei priklausantys objektai.
- 2 Kai prieš grupę yra pilka matomumo piktograma , vienas ar daugiau grupės objektų paslepiami, o kiti rodomi ekrane.
- 3 Kai prieš grupę nėra jokios piktogramos , paslepiami visi grupei priklausantys objektai.

Manipuliacijos KT sluoksniu

KT vaizdų naršymas

„DTX Studio Implant“ įdiegtos įvairios priemonės (pvz., pelės slinkties ratukas, slankiklis arba pjūvio įvesties laukelis), leidžiančios naršyti pjūvius.

Lygis ir langas

Naudokite lygio / lango priemonę dvimatės ir trimatės peržiūros programose norėdami pakeisti verčių, naudojamų duomenims konvertuoti į vaizdą arba modelį, lygį bei langą. Atsižvelgiant į vaizdo tipą (dvimatis arba trimatis), rezultatas skirsis.

Lygis / langas naudojant dvimatį vaizdą

KT pjūvių kontrastingumas ir panoraminiai vaizdai apibrėžiami lango ir lygio vertėmis. Lygio / lango nustatymu apibrėžiama, kurios pilkio vertės rodomos ekrane. Parodoma pasirinkta sritis, kurios centras yra ties lygio verte, ir lango pločio vertė (po lygiai padalinta abiejose lygio pusėse). Koreguojant šiuos nustatymus galima keisti KT pjūvių kontrastingumą.

Lygis keičiamas nuspaudžiant pelės mygtuką ir pelę judinant aukštyn ir žemyn. Lango plotis keičiamas nuspaudžiant pelės mygtuką ir pelę judinant kairėn (siaurinamas) ir dešinėn (platinamas).

Lygis / langas naudojant trimatį vaizdą

Kai dirbama su trimačiu rodiniu, lygio / lango priemonė naudojama perkėlimo funkcijos masteliui arba centrui valdyti. Šitaip sumažinamas triukšmo kiekis paciento modelyje arba pakoreguojami spalvų nustatymai, kad būtų gautas geresnis paciento modelio vaizdas.

Perkėlimo funkcijos centrą perkelkite (nepaveikdami intervalo pločio) nuspausdami pelės mygtuką ir pelę judindami aukštyn arba žemyn. Nuspauskite pelės mygtuką ir pelę virš paciento modelio vilkite kairėn arba į dešinėn norėdami atitinkamai padidinti arba sumažinti verčių, naudojamų paciento modeliui generuoti, intervalą.

Paciento modelis

Trimačio paciento modelio kūrimas

Norint sukurti trimatį paciento modelį, svarbu pasirinkti tinkamus DICOM failus, nustatyti tinkamiausią dominantį tūrį, nurodyti optimalią ISO vertę ir pasirinkti teisingą žandikaulio sukandimo tipą. Sistema padės atlikti šiuos paciento kūrimo vedlio veiksmus.

Paciento modelio kūrimas

1. Pereikite į vedlį **Kurti pacientą** atlikdami vieną iš šių veiksmų:
 - „DTX Studio Implant“ priemonių juostos skirtuke **Medicininiai įrašai** spustelėkite **Naujas** , tada spustelėkite **Kurti naują planavimą**.
 - Jei atvertas planavimo modulis, **Planavimas** priemonių juostos skirtuke **Pacientas** spustelėkite **Pacientas** .
2. Iš įkeltų DICOM rinkinių pasirinkite atitinkamą rinkinį arba importuokite tinkamą rinkinį.
3. Spustelėkite **Kitas**.
4. Nustatykite dominantį tūrį (angl. „Volume of Interest“, VOI) puslapyje **Dominančio tūrio ir ISO vertės nustatymas**.
5. Naudodami slankiklį **ISO vertė** nustatykite tinkamą ISO vertę ir spustelėkite **Kitas**.
6. Koreguokite skenerio padėtį ir naudodami slankiklius nustatykite sąkandžio plokštumą.
7. Pasirinkite gydomo paciento žandikaulio tipą.
8. Spustelėkite **Baigti**.

Pjūvio kreivės formos redagavimas

Norint gauti optimalią pjūvio kreivę, skersinį pjūvį visada reikia nustatyti statmenai sąkandžio plokštumai. Kuriant naują paciento modelį, numatytoji pjūvio kreivė apskaičiuojama pagal pasirinktą žandikaulio tipą, dominantį tūrį ir sąkandžio plokštumą. Šios kreivės formą bei kryžminio pjūvio dydį galima redaguoti.

Pjūvio kreivės formos redagavimas

1. Spustelėkite mygtuką **Pjūvio kreivė** , esantį skirtuko **Pacientas** grupėje **KT redaktorius**.
2. Pradedamas veiksmas **Koreguoti pjūvio kreivę**.
3. Priderinkite apskaičiuotą kreivę keisdami esamus valdymo taškus arba sugeneruokite naują kreivę pažymėdami norimus danties valdymo taškus.

Esamų valdymo taškų keitimas

1. Spustelėkite ir pelyte vilkite valdymo taškus norėdami keisti pjūvio kreivės formą.
2. Įterpkite tašką, pridėkite galinį tašką arba pasirinkite ir pašalinkite tašką.
3. Kai kreivės forma bus tinkama, spustelėkite **Baigti**.

Danties valdymo taškų naudojimas

1. Spustelėkite [Kreivę nurodyti iš naujo](#).
2. Vadovaukitės instrumentų patarimais, kaip tinkamai išdėstyti danties valdymo taškus.
 - Spustelėkite ašinę peržiūrą norėdami nurodyti trečiojo dešiniojo krūminio (protinio) danties padėtį.
 - Spustelėkite ašinę peržiūrą norėdami nurodyti kito dešiniojo danties (kandžio) padėtį.
 - Spustelėkite ašinę peržiūrą norėdami nurodyti kandžio padėtį kairėje.
 - Spustelėkite ašinę peržiūrą norėdami nurodyti ketvirtojo – kairiojo, trečiojo krūminio (protinio) – danties padėtį.

Pastabos

Dantų numeriai mygtukų etiketėse priklauso nuo naudojamos dantų žymėjimo sistemos. Šį žymėjimą galima pakeisti naudojant Bendrosios ypatybės.

Jei danties žymeklio taškai turi būti išdėstyti ten, kur fizinių dantų nebėra, išdėstykite juos taip, tarsi dantys iš tikrųjų būtų savo vietose.

Pagal šiuos keturis taškus – du trečiuosius krūminius ir du kandžius – kartu su penkiais automatiškai sugeneruotais valdymo taškais bus sudaryta pjūvio ašies kreivė.

3. Patikrinkite kreivę, prireikus pakoreguokite.
4. Kai kreivės forma bus tinkama, spustelėkite [Baigti](#).

Skersinio pjūvio dydžio koregavimas

Pakoreguokite statmeno vaizdo dydį, kad teisingai matytumėte kryžminio pjūvio atvaizdą.

1. Spustelėkite [Pjūvio kreivę](#), kad pradėtumėte veiksmą [Koreguoti pjūvio kreivę](#).
2. Nuvilkite rodomos srities ribas statmename vaizde aukštyn, žemyn arba į šonus.

Pastaba

galima atskirai nuvilkti viršutinės ar apatinės ribas. Nuvelkant kairiąją arba dešiniąją ribą, priešinga riba bus traukiama priešinga kryptimi ir tokiu pačiu atstumu, kad pjūvio ašies atvaizde būtų išlaikoma centrinė padėtis.

Paciento modelio vaizdavimas



Įspėjimas

Naudotojas privalo būti susipažinęs su KT duomenų interpretavimu ir KT duomenų pateikimu naudojant tūrinį vaizdavimą.

Kas yra perkėlimo funkcija?

Kai sukuriamas paciento modelis, kiekviena pilka žyma konvertuojama į specialią tam tikro sodrumo spalvą, kad paciento modeliui būtų suteikta konkreti išvaizda. Todėl taikoma perkėlimo funkcija, kuri priskiria RGB vertes ir sodrumą kiekvienam tūrio vaizdo elementui. Taikant perkėlimo funkciją pavaizduojamas trimatis tūris.

Perkėlimo funkcijas galima valdyti ir pritaikyti paciento modeliui naudojant galeriją [Perkėlimo funkcijos](#).

Šioje galerijoje yra miniatiūrų, atitinkančių esamas perkėlimo funkcijas bei veiksmus, kuriuos galima atlikti su šiomis perkėlimo funkcijomis. Tarp [įtaisytyjų šablonų](#), [tinkintų šablonų](#) ir esamo paciento „[Šis pacientas](#)“ perkėlimo funkcijų yra tam tikrų skirtumų.

Kaip anuliuoti paciento modelio vaizdavimą

Kai įjungtas planavimo režimas, trimačio vaizdo artefaktus ir netvarkingas daleles galima išvalyti naudojant veiksmus [Paciento šablonas](#) arba [Trinti kaulo artefaktus](#).

Paciento šablono naudojimas

1. Spustelėkite [Paciento šablonas](#) .
2. Atlikdami veiksmą [Paciento šablonas](#) spustelėkite vieną toliau nurodytų piktogramų:

	Spustelėkite Iškirpti , kad būtų parodyta iš modelio šalintina tūrio dalis. Viskas, kas yra nubraižytame daugiakampyje, bus paslėpta.
	Spustelėkite Izoliuoti , kad būtų parodyta pageidaujama tūrio dalis. Viskas, kas nepatenka į nubraižytą daugiakampį, bus paslėpta.
	Norėdami iš naujo įtraukti iškirpto tūrio dalį, spustelėkite Įtraukti .
3. Pradėkite braižyti daugiakampį.
 - Spustelėkite kairiuoju pelės mygtuku.
 - Perkelkite pelę ir spustelėkite antrą kartą. Dvi spustelėtos padėties susiejamos žalia punktyrine linija.
 - Spustelėkite trečiąjį kartą. Žalia punktyrinė sąsajos linija pasikeis į daugiakampį.
 - Tęskite, kol daugiakampyje atsiras modelio dalis, kurią norite iškirpti.
 - Spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku arba paspauskite [Įvesti](#) norėdami pritaikyti.

Kaulo artefaktų trynimasis

1. Spustelėkite mygtuką [Trinti kaulo artefaktus](#) , esantį skirtuko [Pacientas](#) grupėje [Paciento redagavimo programa](#). Pradedamas veiksmas [Trinti kaulo artefaktus](#).
2. Spustelėkite mygtuką [Magiškas trintukas](#)  arba mygtuką [Trintukas](#) , matomą atliekant veiksmą [Trinti kaulo artefaktus](#).
3. Spustelėkite KT duomenis arba laikykite nuspaustą pelės mygtuką norėdami pažymėti dalis, kurias reikia pašalinti iš paciento modelio. Naudojant mygtuką [Magiškas trintukas](#) , pašalinamas žymėjimas mažoje, vidutinio dydžio arba didelėje srityje aplink spustelėjimu pažymėtą vietą, atsižvelgiant į šepetėlio dydį. Naudojant mygtuką [Trintukas](#) , pašalinamas visas žymėjimas sferoje aplink spustelėjimu pažymėtą padėtį. Sferos dydis priklauso nuo šepetėlio dydžio, kurį galima keisti.

Pastaba

Kaulų artefaktų trynimo veiksmas nedaro įtakos pradiniam KT duomenims. Kai artefaktai pašalinami ir vėliau veiksmu [Redaguoti pacientą](#) redaguojamas paciento modelis, artefaktai vėl tampa modelio dalimi. Todėl jei norint geresnio rezultato reikia atlikti abu veiksmus, „Nobel Biocare“ iš pradžių rekomenduoja redaguoti paciento modelį, o paskui ištrinti galimą triukšmą ir artefaktus.

Šablono išjungimas

Naudokite [Išjungti šabloną](#)  norėdami perjungti paciento modelio ir nustatytą pasirinkimą.

Paciento šablono nustatymas iš naujo

Naudokite [Paciento šabloną nustatyti iš naujo](#)  norėdami dar kartą pamatyti visą paciento modelį, koks buvo sukurtas.

Didžiausios dalies išlaikymas

Kai modelį tiksliai reguliuojate naudodami veiksmo [Paciento šablonas](#) priemones, užuot iškirpę visas mažesnes vaizdą gadinančias daleles, galite izoliuoti didžiausią „kaulinę“ modelio dalį.

Norėdami tai padaryti, spustelėkite veiksmą [Palikti didžiausią dalį](#) , matomą atliekant veiksmus [Paciento šablonas](#) arba [Trinti kaulo artefaktus](#). Mažesnės dalelės ir dalys, kurių tankis skiriasi nuo kaulo tankio, bus pašalintos. Didžiausia kaulinė dalis liks matoma.

Informacija apie protezavimą

Diagnozavimo sąranka

Naudojant „DTX Studio Implant“, atsižvelgiant į klinikinės indikacijas, galima pasirinkti du skirtingus skenavimo tipus kuriamam diagnostiniam modeliui:

- Jei pacientui trūksta nedaug dantų (likę bent šeši dantys), galima naudoti 2G protokolą be radiografinio gido (naudojant burnos ertmės skenavimą).
- Jei pacientas visai neturi dantų arba trūksta daugelio (rekomenduojama, kai likę mažiau nei šeši dantys), būtina naudoti protokolą su radiografiniu gidu.

Dantų skenavimas

Skenuota dantų liejinio nuotrauka

Dantų liejinys gaminamas iš atspaudų, jis atvaizduoja paciento burnos ertmę. Protezavimo karūnėlė gali būti konstruojama ant liejinio, naudojant skenuotą protezavimo ar vaškinį modelius. Šio modelio paviršius gali būti tiksliai nuskenuotas (suskaitmenintas) dantų technikos laboratorijoje. Tada šią nuskenuotą paviršiaus nuotrauką galima importuoti į „DTX Studio Implant“ ir susieti su paciento trimačio modelio DICOM informacija.

Padarę atspaudą prisijunkite prie „DTX Studio Implant“, atidarykite paciento failą ir dantų technikos laboratorijoje užsakykite skenuotą dantų liejinio nuotrauką. Kai dantų technikos laboratorija nuskenuotą failą įkels į debesies paslaugą, skenuotą vaizdą atsisiųskite ir naudodami „SmartFusion™“ suliekit su DICOM duomenimis iš paciento modelio.

Skenuotos dantų liejinio nuotraukos užsakymas

1. Atidarykite paciento failą, spustelėkite [Užsakyti gaminių](#), kad pereitumėte į užsakymo modulį, tada spustelėkite [Skenavimas](#) .
2. Skenuojamus objektus dantų schemeje nurodykite nuvilkdami skenuotiną sritį ir išskleidžiamajame meniu pasirinkdami reikiamą parinktį. Pageidaujami skenuoti vaizdai rodomi sąrašo dešinėje.
3. Spustelėkite [Kitas](#).
4. Pasirinkite prijungtą dantų technikos laboratoriją, kuri dantų liejinį nuskenuos, įveskite visus reikiamus duomenis, specialiąsias instrukcijas ir patikrinkite pageidaujamų skenuoti vaizdų sąrašą.
5. Spustelėkite [Baigti](#).
6. Užsakymas išsiunčiamas į dantų technikos laboratoriją, įtraukiamas į sąrašą [Užsakymai](#) ir rodomas su iš serverio gautu užsakymo numeriu.

Burnos ertmės ar kitu staliniu skeneriu skenuota nuotrauka

Skenuota informacija yra įkeliama į „NobelClinician®“ programą ir duomenys yra susiejami tarpusavyje su paciento 3D modelio duomenimis. Šią paviršiaus skenuotą nuotrauką (t. y. .ply ir .stl failus) galima importuoti į „DTX Studio Implant“ ir sulieti su paciento trimačiu modeliu, gautu iš DICOM duomenų, naudojant „SmartFusion™“.

SmartFusion™

Skenuotos dantų nuotraukos įtraukimas į paciento modelį

Nuskenuoto paviršiaus nuotrauką (gautą iš dantų technikos laboratorijos ar intraoralinio skenerio) galima sulieti su paciento modeliu.


1. Planavimo modulyje atidarykite gydymo planą.
2. Spustelėkite **Skenuota dantų nuotrauka**  skirtuko **Protezavimas** grupėje **Gydymo skenavimas**.
3. Pasirinkite dantų skenavimą arba importuokite skenuotos dantų nuotraukos failą.
4. Kai naudojami .nxa failai, skenuotai dantų nuotraukai naudotas skeneris automatiškai nustatomas pagal pasirinkto failo duomenis. Jei naudojate .stl failus, skenerį nustatykite:

- apatiniame dešiniajame lango kampe spustelėkite **Pasirinkti skenerį** arba, jei skeneris jau buvo pasirinktas anksčiau, **Keisti skenerį**;
- pasirinkite skenerį iš sąrašo;
- spustelėkite **Pasirinkti skenerį**.

Pastaba


Visada patikrinkite, kuris skeneris prijungtas, ypač kai importuojate .nxa failus arba kai dantų nuotraukai skenuoti gali būti naudojami kiti skeneriai. Iš sąrašo pasirinkus konkretų skenerį, jis bus išsaugotas ir kuriant naujus pacientų modelius bus naudojamas kaip numatytasis.

5. Spustelėkite **Kitas**.
6. Jei žinomas skenavimo intervalas, dantų intervalas nurodomas automatiškai. Norėdami pakoreguoti pasirinkto dantų skenavimo intervalą:
 - laikykite žymeklį virš dantų schemos išilgai lanko;
 - spustelėkite dantų lanką arba lanką supančią spalvą pažymėtą sritį ir palaikykite nuspaudę pelės mygtuką;
 - pelyte tempkite virš dantų schemoje pavaizduotų dantų, kol bus apimtas visas skenavimo intervalas. Nurodykite bent trijų dantų vienetų dantų skenavimo intervalą. pelės mygtuką atleiskite;
 - pakoreguokite intervalą spustelėdami mėlynai paryškintose srityse, kad įtrauktumėte arba išskirtumėte objektą. Jei skenavimo intervalo koregavimą norite pradėti iš naujo, spustelėkite **Dantų schemą nustatyti iš naujo**. Būtinai nurodykite artimą skenavimo intervalą.

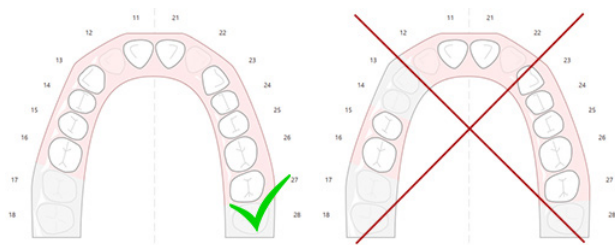

7. Nurodykite trūkstamus dantis dantų schemoje arba spustelėdami baltai pavaizduotą dantį, paversdami jį neaktyviu trūkstamu dantimi. Kaip trūkstamus, galima nurodyti tik pažymėtame dantų intervale esančius dantis. Į dantų intervalą įtraukite bent vieną išlikusį dantį.

8. Spustelėkite [Kitas](#).
9. Nurodykite visas dantų padėtis pagal vedlyje pateiktus patarimus. Kai reikia nurodyti krūminį dantį, spustelėkite vainiko gumburėlio viduryje. Nurodydami iltinį dantį, spustelėkite jo kandamojo krašto viduryje. Norėdami perdaryti šiuos veiksmus, spustelėkite [Taškus nurodyti iš naujo](#). Nustatyti taškai pašalinami ir galite pradėti nuo pradžių.
10. Spustelėkite [Kitas](#).
11. Paciento modelis ir dantų skenograma sulygiuotos naudojant „SmartFusion™“.
12. Vedlio puslapyje [Patikrinti rezultatą patikrinkite, ar tinkamas automatinis sulygiavimas](#). Susietos skenuotos dantų nuotraukos kontūrai (pagal numatytąjį nustatymą jie rodomi rausvos spalvos) turi tiksliai atitikti (KS)KT skenuotos dantų nuotraukos sąkandžio informaciją. [Šio žingsnio tikslumą turi užtikrinti gydytojas](#) (žr. vaizdus kitame puslapyje). Jei vaizdai nesutampa, inicijuokite „SmartFusion™“. Jei negalite tiksliai sulieti dviejų modelių, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
13. Jei sulygiavimas tinkamas, spustelėkite [Baigti](#).
14. Nuskenuota dantų nuotrauka įtraukiama į vaizdą. Jei buvo užsakyta virtualiųjų dantų arba protezavimo šablono / vaškinio modelio skenuota nuotrauka, ji taip pat įtraukiama.

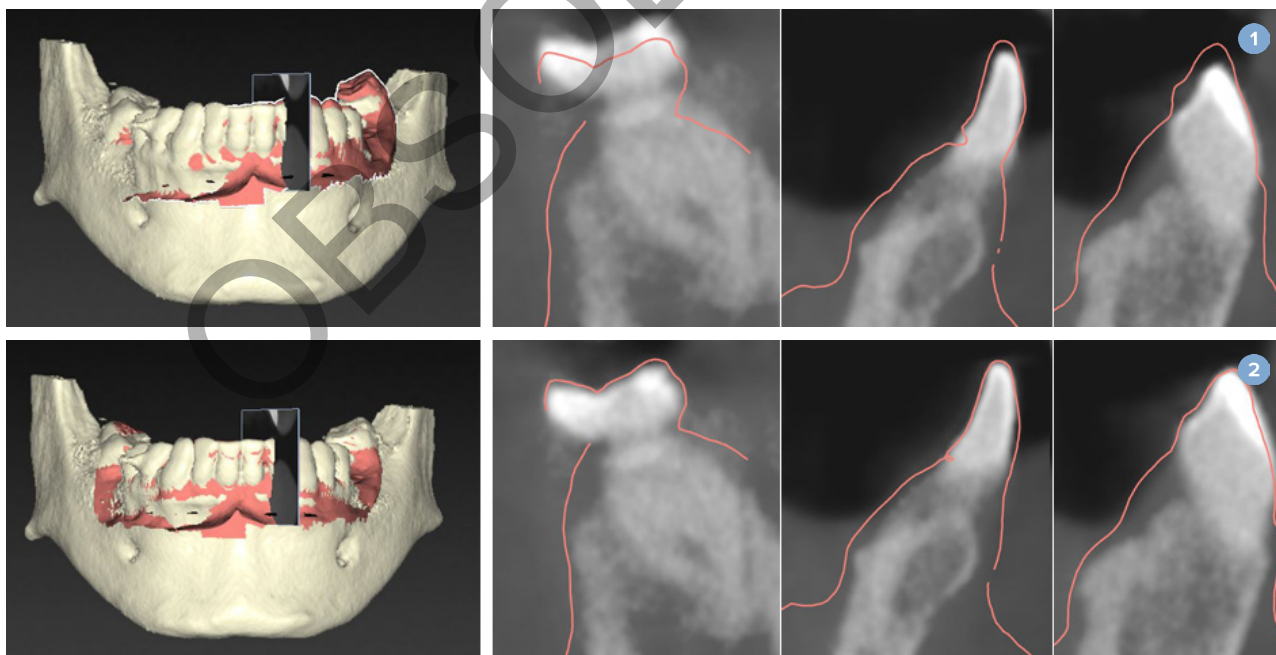

- 1 Netinkamas suliejimas
- 2 Tinkamas suliejimas



Įspėjimas

Netinkamas (KS)KT skenuotos nuotraukos ir skenuoto paviršiaus suliejimas lems netinkamą chirurginį gidą, kurio nebus galima naudoti atliekant chirurginę operaciją.

„SmartFusion™“ inicijavimas

Jei nepavyksta sulieti skenuotos dantų nuotraukos ir paciento modelio naudojant „SmartFusion™“ arba suliejama nepakankamai tiksliai, pakoreguokite pradinę skenuotos dantų nuotraukos padėtį ir iš naujo paleiskite „SmartFusion™“ skaičiavimą. Tai vadinama „SmartFusion™“ inicijavimu.

Pastaba


Tikėtina, kad „SmartFusion™“ rezultatai bus nepakankamai tikslūs, jei pacientas turi mažiau negu šešis dantis.

Inicijavimo procedūra


Norėdami inicijuoti „SmartFusion™“, turite nurodyti bent tris poras sutampančių paciento modelio ir skenuotos dantų nuotraukos taškų. Jei taškai išdėstomi netiksliai, juos pašalinkite ir nurodykite dar kartą. Visus sutampančius taškus galima pašalinti vienu spustelėjimu.

Kaip paleisti inicijavimo vedlį

- Jei esant paleistai „SmartFusion™“ norite iš karto koreguoti pradinę padėtį, eikite į vedlį spustelėdami veiksmą „Inicijuoti „SmartFusion““.

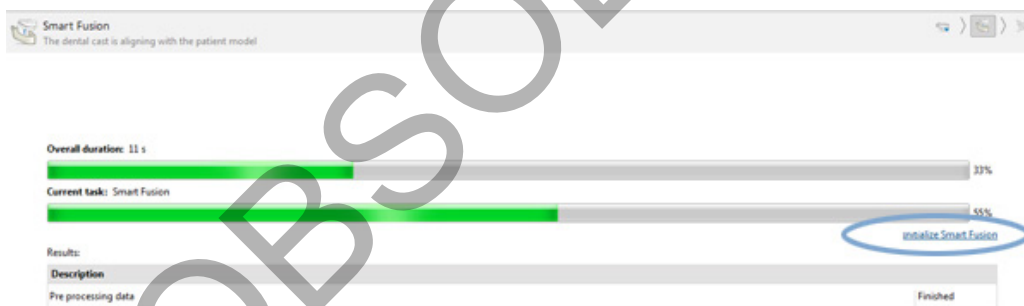

- Jei paleidus „SmartFusion™“ **suliejimas nevyksta**, rodomas įspėjimo pranešimas. Spustelėkite **Inicijuoti padėties nustatymą**, kad paleistumėte inicijavimo vedlį. Tada galėsite pakoreguoti skenuotos dantų nuotraukos pradinę padėtį. Paleiskite iš naujo „SmartFusion™“.
- Jei pabandžius paleisti „SmartFusion™“ **veikia**, tačiau procesas vis tiek nevyksta, rodomas įspėjimo pranešimas, o jūs būsite perkelti į puslapį „Tikrinti rezultatą“. Šiame puslapyje pereikite į inicijavimo vedlį spustelėdami **Nurodyti sutampančius taškus** (žr. vaizdą žemiau).
- Jei „SmartFusion™“ **veikia ir procesas pavyksta**, tačiau dantų skenograma ir paciento modelis sulygiuojami netinkamai, vedlio puslapyje **Patikrinti rezultatą** spustelėkite veiksmą **Nurodyti sutampančius taškus**, kad patektumėte į inicijavimo vedlį.

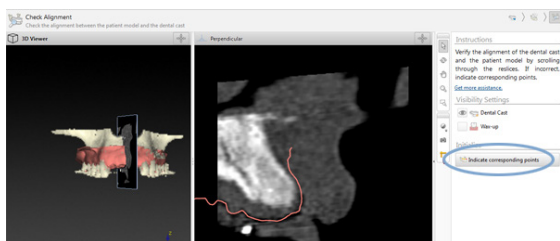


Kaip nurodyti sutampančius taškus inicijavimo vedlyje

Įterpti tašką

1. Atidarius vedlį, suaktyvinamas veiksmas **Įterpti taškus** .
2. Spustelėkite konkrečią padėtį ant paciento modelio dantų kairiojoje srityje.
3. Spustelėkite atitinkamą padėtį ant skenuotos dantų nuotraukos dešiniojoje srityje. Pakartokite 2 ir 3 veiksmus, kol nustatysite bent tris sutampančių taškų poras.
4. Patikrinkite, ar vedlio įspėjimų srityje nėra rodoma įspėjimų.
5. Jei rodomas pranešimas, kad nurodytas reikiamas taškų porų skaičius, spustelėkite **Baigti**, kad uždarytumėte vedlį. Prieš uždarydami vedlį būtinai pašalinkite visas įspėjimuose nurodytas problemas. Kitaip negalėsite baigti.

Patarimas

Pasirūpinkite, kad įtraukiami taškai būtų tinkamai išdėstyti visame dantų lanke. Stenkitės, kad jie nebūtų arti vienas kito. Kuo plačiau išdėstyti taškai, tuo tikslesnis bus suliejimas. Išdėstykite taškus bent dviejuose iš keturių kvadrantų, kaip parodyta paveikslėlyje.

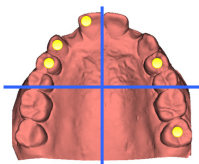

Pašalinti pasirinktus taškus

Pastaba

Jei taškų šalinimo parinktis išjungtos, spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku, kad užbaigtumėte taškų įtraukimo veiksmą. Įjungiami kiti veiksmai.

Pažymėtų taškų šalinimas

1. Vienoje iš peržiūros programų pasirinkite tašką.
2. Spustelėkite **Pašalinti pasirinktus taškus** .
3. Pasirinktas taškas ir su juo sutampantis taškas bus pašalinti.

Visų taškų šalinimas

Norėdami pašalinti visus nurodytus taškus, spustelėkite **Pašalinti visus taškus** .

Pašalinami visi nurodyti virtualūs taškai.

„SmartFusion™“ inicijavimo įspėjimai

Įspėjimas

Skenuotos dantų nuotraukos sulgiavimas koreguotas rankiniu būdu.

Paciento modelio ir dantų nuotraukos suliejimas buvo koreguotas rankomis. Pakartotinai patikrinkite, ar dantų nuotrauka tinkamai apjungta su (KS)KT nuotrauka, nes dėl nuokrypių atsiras klaidų tinkamai nustatant implantų padėtį.

Paaškinimas

Jei naudotojas pasirenka sulgiuoti dantų skenogramą ir paciento modelį rankiniu būdu arba dantų skenograma buvo sureguliuota rankiniu būdu, o ne naudodamas „SmartFusion™“, sistema prašo suliejimą pakartotinai patikrinti, kad būtų išvengta galimų netikslumų.

Viena ar kelios taškų poros neatitinka.

Sistema išmatuoja atstumą tarp taškų paciento modelyje ir atitinkamų taškų skenuotoje dantų nuotraukoje. Jei atstumas didesnis nei numatytas, sistema pateikia įspėjimą naudotojo prašydama pakoreguoti taškų poras.

Nurodyti taškai netinkamai paskirstyti skenuotoje dantų nuotraukoje.

Kai sistema nustato, kad nurodyti taškai nėra išdėstyti bent dviejuose iš keturių kvadrantų, pateikiamas įspėjimas. Naudotojo prašoma pakoreguoti sutampančius taškus arba įtraukti sutampančių taškų porą, atsižvelgiant į tinkamą taškų pasiskirstymą dantų lanko kvadrantuose. Reikėtų stengtis, kad taškai nebūtų arti vienas kito.

Nurodykite bent tris sutampančius taškus.

Nustatytas nepakankamas taškų porų skaičius, todėl negalima užbaigti vedlio. Nustatykite papildomų taškų porų, kol pasieksite minimalų reikalingą taškų porų skaičių.

Veido skenavimas

Įkelkite skenuotą veido nuotrauką, kuri turi būti susieta su paciento modeliu. Galima po vieną įkelti skirtingas skenuotas nuotraukas. Norint geriausio rezultato, pirmiausia reikia įkelti skenuotą neutralaus veido nuotrauką ir ją susieti su paciento modeliu. Vėliau galima įkelti ir susieti (pavyzdžiui, su skenuota neutralaus veido nuotrauka) skenuotą besišypsančio veido nuotrauką.

Skenuotos veido nuotraukos įtraukimas į paciento modelį

- Skirtuko [Protezavimas](#) grupėje [Papildomos skenuotos nuotraukos](#) spustelėkite mygtuką [Skenuota veido nuotrauka](#) , kad paleistumėte vedlį.
- Spustelėkite [Pasirinkti skenuotą veido nuotrauką](#). Pasirinkite skenuotą veido nuotrauką (.obj) ir spustelėkite [Atidaryti](#).
- Spustelėkite [Kitas](#).
- Patikrinkite dabartinę įkeltos skenuotos nuotraukos padėtį. Norėdami pakoreguoti skenuotos veido nuotraukos ir paciento modelio sulgiavimą, spustelėkite [Koreguoti sulgiavimą](#) , pasirinkite objektą, su kuriuo norite sulgiuoti skenuotą veido nuotrauką, ir spustelėkite [Gerai](#). Vedlys leidžia nurodyti bent penkis sutampančius taškus, kad skenuotą nuotrauką ir modelį galėtumėte tinkamai sulgiuoti. Spustelėkite [Baigti](#), jei norite išeiti iš sutampančių taškų vedlio.
- Spustelėkite [Baigti](#), jei norite išeiti iš vedlio [Skenuota veido nuotrauka](#).

Norėdami pridėti dar vieną skenuotą veido nuotrauką, pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus.

Skenuotos veido nuotraukos apkirpimas

Gali būti naudinga iš šypsenos skenogramos iškirpti dantis, kad naudodami veido skenogramą galėtumėte parodyti pacientui modelį su „SmartSetup™“.

1. Priemonių juostos skirtuke **Protezavimas** arba vedlyje **Skenuota veido nuotrauka** spustelėkite **Apkirpti skenuotą veido nuotrauką** .
2. Spustelėdami ir vilkdami pašalinkite sritį, kurią reikia nukirpti. Prireikus naudokite slankiklį **Koreguoti teptuko dydį**.
3. Spustelėkite **Baigti**.

Pastaba

Apkirpimo veiksmas bus atliktas rodomai skenuotai veido nuotraukai. Jei buvo įkeltos kelios skenuotos nuotraukos ir norite apkirpti vieną iš skenuotų veido nuotraukų, pirmiausia būtinai pasirinkite tinkamą skenuotą veido nuotrauką dešiniojo pelės mygtuko meniu **Veido skenograma**.

SmartSetup™

„SmartSetup™“ yra sprendimas, skirtas automatiškai apskaičiuoti virtualius dantis, remiantis duomenimis, gautais atlikus dantų skenavimą. Atliekant šį skaičiavimą atsižvelgiama į:

- esamo danties dydį, formą ir padėtį;
- danties, kurį reikia sukurti, tipą (pavyzdžiui, iltinį dantį reikia formuoti kitaip nei kaplius);
- atitinkamą priešingos lanko pusės danties dydį ir formą;
- priekinės srities dantų estetinio išdėstymo taisykles;
- priešingo žandikaulio dantų informaciją, kai ji galima.

„SmartSetup™“ skaičiavimas

Kai apskaičiuojate „SmartSetup™“ įsitikinkite, kad yra skenuota dantų nuotrauka, įskaitant bent tris išlikusius dantis.

1. Spustelėkite **SmartSetup**  skirtuko **Protezavimas** grupėje **Papildomos skenuotos nuotraukos**.
2. Apatiniame dešiniajame dantų schemasrities kampe spustelėkite **„SmartSetup“ nustatymai** ir pakoreguokite „SmartSetup™“ nustatymus, kad gautumėte skirtingą „SmartSetup™“ rezultatą.
3. Spustelėkite **Apskaičiuoti**. „SmartSetup™“ apskaičiuojama

„SmartSetup™“ nustatymų reguliavimas

„SmartSetup™“ vedlyje galima pakoreguoti nustatymus, kad būtų pakeistas „SmartSetup™“ apskaičiavimo rezultatas.

1. Puslapyje **Patikrinti „SmartSetup™“**, kuris yra **„SmartSetup™“** vedlyje, spustelėkite **„SmartSetup™“ parinkty** apatiniame dešiniajame dantų schemasrities kampe, kad atidarytumėte dialogo langą **Nustatymai**.

2. Grupėje **Kokybė** nurodykite, kokios kokybės modelius norite skaičiuoti: **Didž.** (skaičiavimai šiek tiek užtruks), **Optim.** ar **Žema**. Nuo jūsų pasirinkimo priklauso, ar atliekant skaičiavimą bus atsižvelgiama į daugiau, ar į mažiau dantų.
 - **Maksimumas**: į „SmartSetup™“ skaičiavimą bus įtraukti visi nuskenuoti dantys. Skaičiavimas truks ilgiau nei pasirinkus sprendimą **Optim.**
 - **Optimalu**: bus atsižvelgiama į dantis, reikalingus norint gauti optimalų rezultatą, be to, apskaičiuojama pakankamai greitai.
 - **Mažas**: skaičiuojant „SmartSetup™“ atsižvelgiama į mažiausią dantų skaičių. Skaičiavimas truks trumpiau nei pasirinkus sprendimą **Optimalu**.
3. Grupėje „**SmartSetup™**“ nuspręskite, ar norite skaičiuoti virtualius dantis pagal šiuos kriterijus:
 - **Pašalinkite tarpus dantų sąrankoms**: dažniausiai norite sumažinti tarpus tarp gretimų dantų. Tačiau pasitaiko atveju, kad tarpas, kurį reikia užpildyti, yra per didelis. Pažymėjus šią parinktį gali būti sukurtas per didelis virtualus dantis. Tokiu atveju gali būti geriau išjungti parinktį **Tarpų šalinimas dantų šablone**. Pagal numatytąjį nustatymą ši parinktis pažymėta **Visiems dantims**. Parinkčių lauke galite pasirinkti dantį arba dantis, tarp kurių norite pašalinti tarpus.
 - **Padėtis pagal priešingus dantis (veidrodinis)**: pasirinkite šią parinktį, jei norite išdėstyti „SmartSetup™“ tiksliai taip, kaip priešingi dantys. Tačiau žinokite, kad daugumos pacientų dantų lankas nėra visiškai simetriškas, todėl naudojant šią funkciją galite gauti ne tokį optimalų rezultatą. Todėl ši parinktis pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta. Tačiau naudotojas gali ją įjungti ir patikrinti, ar ją naudojant galima apskaičiuoti geresnį rezultatą.
 - **Optimizuoti priekinių dantų estetiką**: šis veiksmas pagrįstas taisyklių, nustatančių, ar skaičiuoti estetiškai priimtinausią rezultatą, rinkiniu. Šiose taisyklėse nurodoma, kad, pvz., centriniams priekiniams dantims taikoma tokia taisyklė – jų kandamas kraštas turi būti tokio pat aukščio ir pločio. Ši taisyklė taip pat taikoma antriesiems kandžiams ir iltiniams dantims.
 - **Įtraukti trečiąjį (-uosius) krūminį (-ius)**: ši parinktis pažymima numatyta, jei į skenavimo intervalą įtraukti tretieji krūminiai dantys. Į trečiojo (-ųjų) krūminio (-ių) danties (-ų) dydį, formą ir padėtį atsižvelgiama apskaičiuojant „SmartSetup™“ dydį, formą ir padėtį.
 - **Papildomas okliuzijos koregavimas**: kai yra antagonisto informacija, ši parinktis pasirenkama numatyta. Į priešingo žandikaulio dantų informaciją atsižvelgiama tiksliai koreguojant sąkandį.
4. Spustelėkite **Gerei**, kad nustatymus pritaikytumėte „SmartSetup™“ skaičiavimui. Tęskite vedlį spustelėdami **Kitas**.

„SmartSetup™“ redagavimas

Kiekvienos apskaičiuotos „SmartSetup™“ sąrankos padėtį redaguokite atskirai:

1. Spustelėkite **Redaguoti sąranką „SmartSetup“**  priemonių juostos **Planavimas** skirtuke **Protezavimas**. Arba spustelėkite **Redaguoti „SmartSetup“** vedlio **SmartSetup** puslapyje **Patikrinti rezultatą**.
2. Kad pasirinktumėte „SmartSetup™“ redaguoti, ją spustelėkite trimatės peržiūros programoje arba parinkčių lauke pasirinkite dantį.
3. Spustelėkite veiksmus **Poslinkis**, **Sukimas** ir (arba) **Mastelis**, kad pakoreguotumėte pasirinktos „SmartSetup™“ padėtį ir dydį.

	Poslinkis	Spustelėkite „SmartSetup™“, laikykite nuspaustą pelės mygtuką ir vilkite, kad pakeistumėte „SmartSetup™“ sąrankos padėtį. Norėdami tiksliai nustatyti „SmartSetup™“ sąrankos padėtį, pakoreguokite vertes langeliuose Bukalinė / lingvalinė, Mezialinė / distalinė ir (arba) Sąkandis.
	Sukimas	Spustelėkite „SmartSetup™“, laikykite nuspaustą pelės mygtuką ir ją vilkite, kad „SmartSetup™“ sąranką pasuktumėte. Norėdami tiksliai nustatyti „SmartSetup™“ sąrankos padėtį, pakoreguokite vertes langeliuose Bukalinė / lingvalinė, Mezialinė / distalinė ir (arba) Sąkandis.
	Mastelis	Spustelėkite „SmartSetup™“, laikykite nuspaustą pelės mygtuką ir vilkite, kad pakoreguotumėte „SmartSetup™“ mastelį. Vilkite aukštyn, kad mastelį padidintumėte, arba žemyn, kad jį sumažintumėte. Arba naudodamiesi langeliu Mastelio keitimas nustatykite konkrečius mastelio keitimo procentus ar patikslinkite „SmartSetup™“ sąrankos dydį.

Norėdami anuliuoti pasirinktos „SmartSetup™“ pakeitimus, spustelėkite  [Nustatyti dantį iš naujo](#).

Radiografinio gido modelis

Remiantis klinikiniais paciento tyrimais, radiografinis gidas sukonstruojamas pagal kliniškai patvirtintą dantų šabloną, kuriame turi būti dvigubo skenavimo procedūrai skirtų žymų. Virtualus modelis sukonstruojamas sukūrus paciento modelį.

Radiografinio gido modelio sukūrimas

1. Atsidarykite gido kūrimo vedlį spustelėdami [Guide](#) .
2. Pasirinkite teisingus DICOM duomenis ir spustelėkite [Kitas](#).
3. Nustatykite dominantį tūrį (VOI).
4. Naudojant atitinkamą kalibravimo rinkinį, įkeliama [Kalibruota ISO vertė](#). Spustelėkite [Kitas](#).
5. Patikrinkite radiografinio gido modelį.
6. Paciento modelis ir radiografinis gidas bus automatiškai sulieti.
7. Patikrinkite sulgiavimo rezultatą ir spustelėkite [Baigti](#).

Vidinis paviršius

Norėdami sukurti radiografiniu gidu pagrįstą vidinį paviršių, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Priemonių juostos [Planavimas](#) skirtuke [Protezavimas](#) spustelėkite [Vidinis paviršius](#) .
2. Patikrinkite vidinį paviršių ir spustelėkite [Baigti](#).

Diagnozė

Nervai

Norėdami apibrėžti nervą, skirtuke [Diagnozuoti](#) spustelėkite [Nervas](#)  ir atsidarys vedlys.

1. Jei reikia, pakoreguokite nervo pjūvį.
2. Spustelėdami pažymėkite nervo suformavimo taškus.
3. Spustelėdami dešinįjį pelės mygtuką nutraukite taškų pridėjimą.
4. Spustelėkite [Baigti](#).

Tokiu būdu sferos sujungiamos su vamzdelio formos linija, vaizduojančia nervą.

Norėdami įtraukti kitą nervą, pasirinkite veiksmą [Įtraukti naują nervą](#) , esantį grupėje [Veiksmai su nervu](#). Paskui pradėkite žymėti naujo nervo taškus kaip aprašyta pirmiau.

Patarimas

Jei sunku pavaizduoti nervo kanalą, pakoreguokite nervo pjūvį. Ši U forma nėra susieta ar sujungta su pjūvio kreivės forma.

Dantys

Norėdami pažymėti dantį, skirtuke [Diagnozuoti](#) spustelėkite [Dantis](#)  ir atsidarys vedlys.

1. Pasirinkite norimą žymėti dantį lentelės viršuje.

Pastaba

Pagal numatytuosius nustatymus čia bus naudojamas FDI žymėjimas. Jei reikia, pakeiskite dantų lentelės žymėjimą naudodamiesi [Bendrosios ypatybės](#).

2. Pakoreguokite pasirinkto danties padėtį, norėdami nustatyti jo centrinę ašį.
3. Spustelėkite [Magiškas žymės užpildymas](#)  arba [Žymėjimo šepetėlis](#) .
4. Pereikite per KT pjūvius ir spustelėkite arba nuvilkite pažymėdami dantį atskirais elementais. Visi duomenys konkrečioje zonoje aplink spustelėtą padėtį bus nuspalvinti ir pridėti prie danties.
5. Spustelėkite [Atnaujinti trimatį](#)  arba naudokite spartųjį klavišą [u]. Dantis rodomas trimatėje peržiūroje ir įtraukiamas į paciento modelį trimatės peržiūros programoje.
6. Jei reikia, schemoje pasirinkite naują norimą žymėti dantį.
7. Kai bus pažymėti visi dantys, spustelėkite [Baigti](#).

Dantų pašalinimas iš modelio

Kai dantys yra pažymėti, juos galima nuimti nuo paciento modelio vieną po kito arba visus iš karto.

Kaip pašalinti visus dantis vienu metu

1. Spustelėkite [Išimti dantį](#) , esantį skirtuke [Pacientas](#). Ši piktograma įjungama tik tada, kai dantys yra pažymėti.
2. Jei reikia, paciento modelį pakoreguokite veiksmiais [Paciento šablonas](#) arba [Trinti kaulo artefaktus](#).

Pastaba

Kai pridodate naujų danties paaiškinimų arba kai nuimtus dantis redaguojate, dar kartą atlikite veiksmą **Išimti**, jei norite jį taikyti ir naujai pridėtiems ar pagedaguotiems dantis. Jis nebus vykdomas automatiškai. Arba naudokite veiksmą **Ištraukti dantį**.

Vieno danties pašalinimas

1. Norėdami pasirinkti, spustelėkite pažymėtą dantį.
2. Užduočių juostos **Diagnozuoti** grupėje **Diagnozuoti** spustelėkite **Ištraukti dantį** . Piktograma **Ištraukti dantį** įjungiama tik po to, kai dantis yra pažymėti.
3. Pašalintas dantis pažymėtas raudonai.

Matavimas

Galimi keli matavimo tipai.

Patarimas

Jei sunku perskaityti matmenų tekstą, kurį gali užstoti vaizde esantys objektai, pažymėkite matmenį ar jo tekstą ir rezultatas bus pateiktas būsenos juostoje.

Atstumas tarp 2 taškų	1. Spustelėkite mygtuką Atstumas , kuris yra skirtuke Diagnozė. 2. Spustelėdami nurodykite pirmą tašką ir dar kartą spustelėkite kitoje pozicijoje. Rodomas matmuo.
Kampas	1. Spustelėkite Kampas , kuris yra skirtuke Diagnozė. 2. Nurodykite tris taškus: a, b ir c. 3. Kampas vaizduojamas kampo lanku ir parodoma matmens vertė.
Pilka žyma / Hounsfieldo vienetai	1. Spustelėkite mygtuką HU vertė , kuris yra skirtuke Diagnozė. 2. Nurodykite tašką, kuriame matuosite HU vertę.
Kampas tarp implantų ar atramų	1. Pasirinkite implantą ir spustelėkite mygtuką Implanto kampo vertė , esantį skirtuke Diagnozė. 2. Pažymėkite antrą implantą. Geltona lanko formos linija nurodo matmenį ir vertę.

Implantų planavimas

Darbas su ne „Nobel Biocare“ implantais

„DTX Studio Implant“ taip pat galima naudoti kitų gamintojų (ne „Nobel Biocare“) implantų sistemas (pvz., „Straumann“, „Dentsply“, „Camlog“ dantų implantus ir kt.). Dialogo lango [Ypatybės](#) skirtuke [Implantų gaminiai](#) naudotojas gali nurodyti, kurias implantų sistemas įtraukti į „DTX Studio Implant“.

Pastaba

Norint ne „Nobel Biocare“ implantus atsisiųsti į „DTX Studio Implant“, reikalingas interneto ryšys.

Norint į „DTX Studio Implant“ programinę įrangą įtraukti arba iš jos pašalinti tam tikras implantų sistemas, būtina uždaryti visus planavimo scenarijus. Uždarykite visus pacientų failus ir pereikite į dialogo langą [Ypatybės](#):

1. Spustelėkite „DTX Studio Implant“ skirtuką.
2. Pasirinkite [Bendrosios nuostatos](#).
3. Spustelėkite [Įdiegti gaminiai](#).
4. Nurodykite, kurios implantų sistemos turi būti įtrauktos į programinę įrangą arba iš jos pašalintos.
5. Spustelėkite [Gera!](#), kad užbaigtumėte.

Pastaba

Naudojant gaminius, kurių programinėje įrangoje nėra, planavimo plane jie bus pakeisti cilindro formos netikrais gaminiais. Tačiau išlaikoma originali gaminio informacija ir, kai bus galima naudoti gaminius, planavimo plane esantys netikri gaminiai bus pakeisti išsamesnės išvaizdos gaminiais.



Perspėjimas

Kai įspėjimai sugeneruojami dėl cilindro formų, šie įspėjimai apskaičiuojami remiantis apytiksliais gaminio formos apskaičiavimais.

Implantų įtraukimas į gydymo planą

Šiame skyriuje paaiškinama, kaip virtualiai suplanuoti implanto vietą. Tačiau rekomenduojama žinoti ir suprasti kiekybinius bei kokybinius apribojimus, taikomus planuojant burnos implantų vietą.

Implanto įtraukimas į gydymo planą

1. Spustelėkite [Implant](#)  skirtuke [Planas](#).
2. Spustelėdami paciento modelį nurodykite implanto peties tašką.
3. Spustelėdami modelį pažymėkite implanto viršūnę.
4. Lango [Gaminio pasirinkimas](#) dalyje [Gamintojas](#) pasirinkite tinkamą gamintoją.
5. Pažymėkite implantą. Pasirinktinai nurodykite chirurginės operacijos tipą, suderinamą atramą ir patikrinkite danties padėtį.
6. Patvirtinkite spustelėdami [Pasirinkti gaminį](#).



Perspėjimas

Negalimi gaminiai lange [Gaminio pasirinkimas](#) rodomi su raudonu įspėjimu, o trimačiame rodinyje rodomi mėlynai. Šių gaminių užsakyti negalima.

Ką reiškia geltona zona?

Tipiški „NobelGuide“ koncepcijos leistini nuokrypiai neviršija 1,5 mm. Pusiaus skaidri geltona zona padeda naudotojui įvertinti šią padėtį gyvybiškai svarbių struktūrų atžvilgiu. Ši zona yra cilindras, kuris 1,5 mm viršija realių implantų spindulį su 3 mm aukščio smailėjimu.

Kai geltona zona tampa matoma pro išorinį kaulo paviršių, ji naudotoją įspėja apie galimus pavojus.

Pastabos

Grąžtai gali būti 1 mm ilgesni už planuojamą (-us) implantą (-us). Geltona zona taip pat įvertina ir šį galimą nukrypimą.

Patartina išlaikyti bent 3 mm pagrindinio žandikaulio tarpą tarp dviejų implanto ir žandikaulio sąveikų ir bent 1,5 mm atstumą tarp danties ir implanto, kad būtų užtikrintas tinkamas kraujo pritekėjimas ląstelėms atsinaujinti.

„NobelGuide“ koncepcija apima kelis klinikinius žingsnius, į kuriuos gydytojas praktikas turi atsižvelgti kiekvienu konkrečiu atveju. Taip siekiant užtikrinti bendrą tikslumą reikia įvertinti šių procedūrų įtaką kiekvienu konkrečiu atveju.

Danties padėtis

Implantams priskiriamas konkretus danties numeris. Šis danties numeris rodomas keliose programinės įrangos vietose, kaip antai implanto [Savybių skydelis](#), specialiajame implanto skirtuke, implanto meniu, kuris įjungiamas dešiniojo pelės mygtuko spustelėjimu, ir būsenos juostoje, kai implantas pasirenkamas.

Dantų schema

Naudojant dantų schemą galima patikrinti ir, jei reikia, pakoreguoti apytikslę danties, kuriam paskirtas implantas, padėtį. Šiai dantų schemai naudojamas dantų numeravimas atitinka nustatymą bendrosiose ypatybėse.



Nežinomoms ar neaiškioms dantų padėtimis naudojama padėtis su klaustuko ženklu (pvz., kai implantą numatoma įstatyti tarp dviejų padėčių, kur jau numatyti kiti implantai).

Manipuliacijos implantu

„DTX Studio Implant“ yra įvairių funkcijų, skirtų optimaliai implanto padėčiai suplanuoti.

Implanto orientacijos keitimas

Implanto padėtis keičiama velkant sferas.

1. Pažymėkite implantą. Sferos taps raudonos.
2. Atlikite vieną ar kelis tolesnius veiksmus.
 - Paspauskite viršutinę implanto sferą ir vilkdami pasukite; sukimosi taškas bus apikalinis taškas.
 - Spustelėkite apatinę implanto sferą ir vilkdami pasukite; naudojamo implanto sukimosi taškas bus peties taškas.

Implanto pastūmimas

Norėdami fiziškai paversti implantą, atlikite tolesnius veiksmus.

1. Pažymėkite implantą. Ant implanto esantis pilkas vamzdelis taps žalios spalvos.
2. Paspauskite žalią vamzdelį ir nuvilkite implantą į reikiamą padėtį. Implantas išlaikys pradinę padėtį.

Gylį ir pasukimą taip pat galima pakeisti naudojant piktogramas, esančias specialioje priemonių juostoje [Implantas](#).

Vieno implanto dėjimas lygiagrečiai kitam

Norėdami lygiagrečiai suplanuoti atskirą naują implantą su pažymėtu implantu, atlikite tolesnius veiksmus.

1. Pažymėkite implantą, kurį naudosite kaip bazinį.
2. Spustelėkite [Lygiagretus implantas](#) .
3. Norėdami nurodyti implanto peties tašką spustelėkite trimatės arba dvimatės peržiūros programoje.
4. Naujas implantas bus įstatytas lygiagrečiai su pažymėtu implantu.

Visų implantų įdėjimas lygiagrečiai

Norėdami lygiagrečiai išdėstyti visus plane esančius implantus, atlikite tolesnius veiksmus.

1. Pažymėkite implantą, kurį naudosite kaip bazinį.
2. Spustelėkite [Lygiagrečiai išdėstyti visus](#) .
3. Visi implantai įstatomi lygiagrečiai su pradžioje pažymėtu implantu.

Pastaba

Po komandos [Lygiagrečiai visi](#) atidžiai patikrinkite visų implantų padėtis. Jei klinikiniu atžvilgiu rezultatas yra nepriimtinas, naudokite funkciją [Anuliuoti](#).

Atramos

Tinkamos atramos implantui pasirinkimas

1. Vaizde pasirinkite implantą.
2. Spustelėkite [Atrama](#)  skirtuke „Implantas“, arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pasirinktą implantą ir nuorodų meniu pasirinkite [Itraukti atramą](#).
3. Atidaromas langas [Gaminio pasirinkimas](#), kuriame rodomos suderinamos atramos.
4. Pagal numatytąjį nustatymą pasirinkta [Atramos nėra](#). Atramą pasirinkite atsižvelgdami į reikiamus matmenis.
5. Spustelėkite [Pasirinkti gaminį](#).

Pastaba

Šios parinktys pasiekiamos tik tada, kai pažymėtas implantas dar yra be atramos. Jei atrama jau yra, kad atsidarytų langas [Gaminio pasirinkimas](#), spustelėkite meniu punktą [Keisti gaminį](#) arba piktogramą .

Chirurginės operacijos tipo nustatymas

Gydamas pacientą, gydytojas gali rinktis iš įvairių chirurginių operacijų, kurios vadinamos chirurginių operacijų tipais (atliekamas ranka, chirurginio gido naudojimas tik pirminiam gręžimui arba jo naudojimas visai operacijai). Gydomo plane chirurginės operacijos tipą galima nustatyti kiekvienam implantui atskirai.

1. Pažymėkite implantą.
2. Specialiajame priemonių juostos skirtuke spustelėkite piktogramą **Chirurginės operacijos tipas**. Piktogramos forma priklauso nuo chirurginės operacijos tipo.
3. Pasirinkite atitinkamą chirurginės operacijos tipą iš sąrašo. Galimos parinktys skirsis atsižvelgiant į pasirinkto implanto tipą.

Pastabos

Kai dedamas naujas implantas, chirurginės operacijos tipą galima nustatyti lango **Gaminio pasirinkimas** skirtuke **Chirurgijos tipas**.



Kuriant chirurginį gidą chirurginės operacijos tipą galima koreguoti lange **Tikrinti chirurgijos sąranką**.

Skirtingi chirurginių operacijų tipai

Atsižvelgiant į gydymo plane pasirinktus gaminius, galima rinktis skirtingas chirurgines operacijas. Toliau aprašyti galimų chirurginių operacijų tipai.



Atliekama rankomis: įsriegiant implantą nenaudojamas chirurginis gidas (ne mova „Guided Sleeve“).



Visiškai valdoma: įsriegiant implantą (-us) į suplanuotą (-as) vietą (-ą) paciento burnoje naudojamas chirurginis gidas su visiškai valdoma kreipiamąja mova (leidžiančia atlikti kreipiamąjį gręžimą ir implanto įsriegimą).



Pirminis gręžimas (**tik „NobelGuide“ 1,5 ir 2,0 mm „Twist Drill“**): chirurginis gidas su kreipiamąja mova (tik nukreipiamasis pirminis gręžimas) bus naudojamas suplanuotai (-oms) implanto (-ų) padėčiai perkelti į paciento burną. Atlikus šį pirminį gręžimą, chirurginis gidas pašalinamas, išgręžtas gylis užfiksuojamas pagal krypties indikatorius arba rankinį grąžtą anatomicinės struktūros (pvz., kaulo keteros) atžvilgiu ir pradedamas rankinis gręžimas, po kurio seka rankomis įsriegiamas implantas (įvairių gylių rankiniai įrankiai, atsižvelgiant į apibrėžtą anatomicinę struktūrą po gido pašalinimo). Atsižvelgiant į implanto skersmenį gali būti pasirenkama kitokio skersmens pirminė mova.

Pirminės movos poslinkis

Ši funkcija skirta tik pirminiam gręžimui. Kai kurių klinikinių indikacijų atveju, numatytasis atstumas tarp suplanuoto implanto (implanto peties) ir movos nėra pakankamas (pvz., implantą reikia įsriegti giliau, peilio ašmenys, kurie bus pašalinti įsriegus implantą, movos ir gretimo danties trintis ir t. t.). Esant tokioms indikacijoms, numatytoje padėtyje esanti mova kertasi su skenuotos dantų nuotraukos paviršiaus modeliu, todėl naudojant pirmines movas sugeneruojamas įspėjimas. Norint sukurti chirurginį gidą be movos susikirtimų ir išlaikyti implantą planuotoje klinikinėje padėtyje, movą galima pakelti aukščiau.

Numatytasis kreipiamųjų movų ir planuojamo implanto santykis visuose gręžimo protokoluose atitinka „NobelGuide“ kreipiamųjų grąžtų gylio žymes. Papildomas atstumas vadinamas „movos poslinkiu“. Jis automatiškai užfiksuojamas ir įtraukiamas į „NobelGuide“ chirurginių instrukcijų puslapį, kuris išsiunčiamas kartu su chirurginiu gidu.

Pirminės movos poslinkio nustatymas

1. Pažymėkite implantą.
2. Įsitikinkite, kad pažymėto implanto chirurginės operacijos tipas – [pirminis gręžimas](#).
3. Spustelėkite mygtuką [Movos poslinkis](#), kuris yra prie piktogramos [Chirurginės operacijos tipas](#), specialiajame skirtuke [Implantas](#). Arba dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite implantą ir išskleidžiamajame meniu pažymėkite [Movos poslinkis](#).
4. Nuvilkite slankiklį, kad pakeistumėte movos aukštį, arba tiesiog įveskite poslinkio aukštį slankiklio laukelyje.

Pirminės movos pasukimo nustatymas

Jei movos yra netinkamoje sukimo padėtyje, sukimą galima pakoreguoti movas pasukant.

1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite implantą.
2. Išskleidžiamajame meniu spustelėkite [Movos pasukimas](#).
3. Vilkite slankiklį, kol pasuksite movą į tinkamą padėtį.

Kaulo pjūvio plokštuma

Norėdami nurodyti plokštumą, atitinkančią idealų paciento kaulo lygį, atlikite veiksmą [Kaulo pjūvio plokštuma](#). Iš tikrųjų nė viena dalis nebus pašalinta. Tai vietos, ties kuria gali tekti nupjauti kaulą, vizualizavimas, kad būtų lengviau planuoti gydymą.

1. Priemonių juostos skirtuko [Planas](#) grupėje [Planas](#) spustelėkite [Kaulo pjūvio plokštuma](#) .
2. Į paciento modelį įtraukiama violetinė plokštuma.
3. Norėdami plokštumą pasirinkti, ją spustelėkite. Vilkdami kraštuose esančias spalvotas rankenėles pakoreguokite plokštumos dydį ir padėtį. Norėdami pakoreguoti plokštumos padėtį modelio Z ašies atžvilgiu, naudokite slankiklį [Plokštumos aukštis](#), kuris yra dešiniojo pelės mygtuko meniu.

Tvirtinamieji kaiščiai

Kad pradėdami chirurginę procedūrą užtikrintumėte tinkamą fiksavimą, naudodami kreipiamuosius tvirtinamuosius kaiščius įtvirtinkite chirurginį gidą. Planuojant kreipiamuosius tvirtinamuosius kaiščius svarbu nustatyti pakreipimą ir gylį. Dažniausiai į bedančius žandikaulius įstatomi trys ar keturi tvirtinamieji kaiščiai. Tvirtinamuosius kaiščius reikia įstatyti vietose, kuriose yra pakankamai kortikalinio kaulo. Siekiant sumažinti audinių pažeidimo pavojų, būtina vengti bikortikalaus tvirtinamųjų kaiščių tvirtinimo.

Pastabos

Tvirtinamojo kaiščio („Anchor Pin“) padėtis ir orientavimas turi būti tokie, kad galėtumėte lengvai įstatyti implantą (įvertinkite lūpų įtraukimą ir burnos atvėrimą) ir nepažeistumėte kritinių struktūrų, pavyzdžiui, kraujagyslių.

Rekomenduojama naudoti operacinę rodyklę, kad chirurginis gidas paciento burnoje būtų tiksloje padėtyje. Operacinė rodyklė turi užtikrinti priėjimą gręžiant ir įstatant tvirtinamuosius kaiščius. Sudėjus tvirtinamuosius kaiščius, chirurginę rodyklę galima išimti.

Tvirtinamojo kaiščio įtraukimas į gydymo planą

Tvirtinamojo kaiščio padėtį nustatykite panašiai, kaip įstatydami implantą.

1. Spustelėkite **Tvirtinamasis kaištis** .
2. Paspaudę nurodykite tvirtinamąjį kaištį.
3. Paspaudę nurodykite tvirtinamojo kaiščio viršūnę.
4. Į vaizdą įdedamas tvirtinamasis kaištis.

Patarimas

Peties ir viršūnės taškus patogiau nustatyti atitinkamame dvimačiame pjūvyje.

Tinkamas tvirtinamųjų kaiščių polinkis ir gylis

Norint stabilizuoti chirurginį gidą implanto įsriegimo metu, strateginėse vietose galima padėti tvirtinamuosius kaiščius. Jų pakreipimas ir gylis yra itin svarbūs.


Chirurginės operacijos metu tvirtinamieji kaiščiai taip pat atlieka lūpų atvertimo funkciją. Jei tvirtinamieji kaiščiai išskleidžiami per plačiai, tai gali trukdyti prasižioti. Norint sumažinti tokį galimą apribojimą, galima naudoti trumpesnius tvirtinamuosius kaiščius. Vis dėlto, tvirtinamieji kaiščiai turi užtikrinti gerą priėjimą ir neblokuoti implantų vietų.

Movos turi būti įstatomos arti gleivinės, kaip parodyta burnos ertmės skaitmeniniame paviršiaus modelyje (maždaug 0,5–1 mm atstumu), tačiau neturėtų trukdyti ar kirsti su minėtu modeliu, kai paviršius skenuojamas naudojant „SmartFusion“.


Kai nėra dantų, rekomenduojama naudoti mažiausiai keturis tvirtinamuosius kaiščius. Norint užfiksuoti chirurginį gidą iš dviejų pusių, tvirtinamųjų kaiščių movos dedamos į angas ne burnos pusėje arba, tam tikrais atvejais, iš priešingos pusės (gomurio ar liežuvio).

Tvirtinamieji kaiščiai ir radiografinis gidas (darbo eiga su bedančiais pacientais)

Kai naudojamas radiografinis gidas, mova turi būti prie jo prijungta, tačiau turi neišlįsti pro jo graviruotą paviršių.

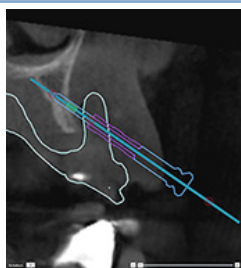


Tinkamai

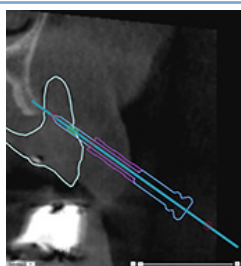

Netinkamai

Tvirtinamojo kaiščio mova neprijungta prie radiografinio gido ir nebus prijungta prie chirurginio gido.

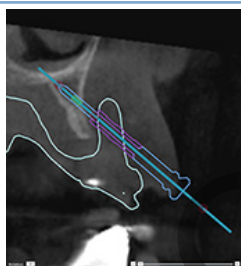


Netinkamai


Tvirtinamojo kaiščio mova išsikiša iš radiografinio gido, todėl chirurginis gidas netilps į paciento burną.

Tvirtinamieji kaiščiai ir skenuota dantų nuotrauka (darbo eiga su dalinai bedančiais pacientais)

Kai paviršius skenuojamas naudojant „Smart Fusion“, movą reikia įstatyti arti gleivinės (0,5–1 mm atstumu nuo gleivinės, kaip parodyta paviršiaus skenuotoje nuotraukoje), tačiau ji neturėtų išsikišti iš „Smart Fusion“ paviršiaus skenuotos nuotraukos.

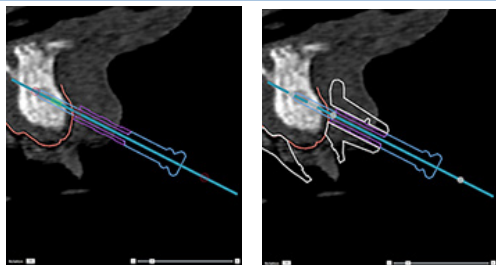


Tinkamai

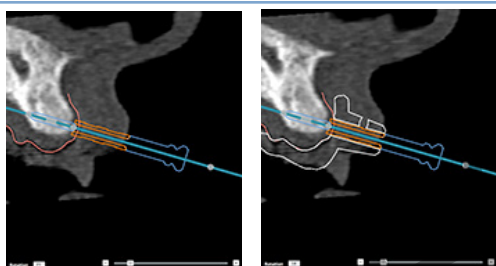


Netinkamai

Tvirtinamojo kaiščio mova išsikiša iš dantų nuotraukos (minkštojo audinio), todėl chirurginis gidas netilps į paciento burną.

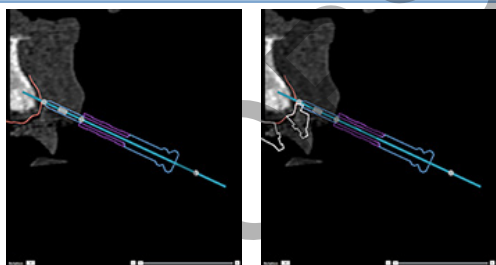

Netinkamai

Tvirtinamasis kaištis neįtvirtintas kaule ir neprijungtas prie dantų nuotraukos. Aplink movą nebus uždėta chirurginio gido medžiaga.

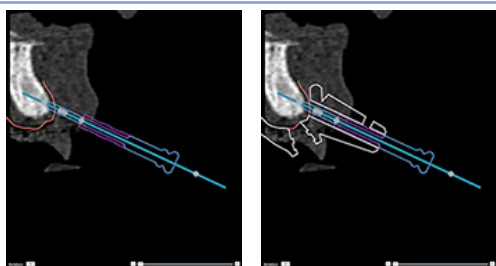

Netinkamai

Tvirtinamasis kaištis neįtvirtintas kaule, chirurginio gido medžiaga uždėta aplink movą, bet šis tvirtinamasis kaištis chirurginės operacijos metu nieko nefiksuoja.

Gydymo plano tikrinimas

Kai reikia patikrinti implanto arba tvirtinamojo kaiščio padėtį kaule, galima peržiūrėti atvaizdo tūrio pjūvius išilgai implanto arba tvirtinamojo kaiščio arba lygiagrečiai su jais. Ši funkcija leidžia nuodugniai patikrinti implantus ir tvirtinamuosius kaiščius supančius kaulus ir įsitikinti, kad pasirinkta padėtis tinkama implantams arba tvirtinamiesiems kaiščiams.

Prisegimo funkcijos naudojimas

Skersinio pjūvio prisegimo funkcija veikia keliais režimais:

- **Implanto arba tvirtinamojo kaiščio režimu** skersinis pjūvis prisegamas prie pagrindinės implanto arba tvirtinamojo kaiščio ašies ir išdėstomas implanto arba tvirtinamojo kaiščio centre.
- **Kreivės režimu** skersinis pjūvis prisegamas prie panoraminio pjūvio kreivės.

Skersinio pjūvio prisegimas prie implanto arba tvirtinamojo kaiščio („Anchor Pin“)

1. Spustelėkite **Įrankiai** skydelio mygtuką **Prisegti pjūvį**.
2. Skersinis pjūvis prisegamas prie pasirinkto implanto ar tvirtinamojo kaiščio ir bus sukamas aplink jo ašį, o ne aplink žandikaulio lanką. Nepasirinkus jokio implanto ar tvirtinamojo kaiščio, pjūvis prisegamas prie paskutinio pasirinkto implanto arba tvirtinamojo kaiščio. Jei dar nepasirinktas joks implantas ar tvirtinamasis kaištis, pjūvis prisegamas prie paskiausiai suplanuoto implanto arba tvirtinamojo kaiščio.

Patarimas

Pasirinkus kitą implantą arba tvirtinamąjį kaištį, pjūvis automatiškai prisegamas prie naujo implanto arba tvirtinamojo kaiščio. Šią funkciją galima išjungti tik bendrosiose ypatybėse.

Pastaba

Jei skersinis pjūvis buvo prisegtas prie implanto, vaizde naikinant paskutinį implantą skersinis pjūvis automatiškai prisegamas prie kreivės.

Perėjimas prie kito implanto arba tvirtinamojo kaiščio


Kai prisegimo funkcija veikia implanto arba tvirtinamojo kaiščio režimu, pereikite prie kito implanto arba tvirtinamojo kaiščio naudodami veiksmą **Kitas**, rodomą dvimatės peržiūros programos juostoje **Prisegimas**.

1. Prisegimo juostoje spustelėkite **Kitas**.
2. Skersinis pjūvis pereina prie kito implanto ar tvirtinamojo kaiščio.

Grįžimas į kreivės režimą

Kai prisegimo funkcija veikia implanto arba tvirtinamojo kaiščio režimu, grįžti į kreivės režimą galite naudodami juostos **Prisegimas** veiksmą **Panaikinti prisegimą**.

1. Prisegimo juostoje spustelėkite **Panaikinti prisegimą**.
2. Skersinis pjūvis yra prisegtas prie kreivės.

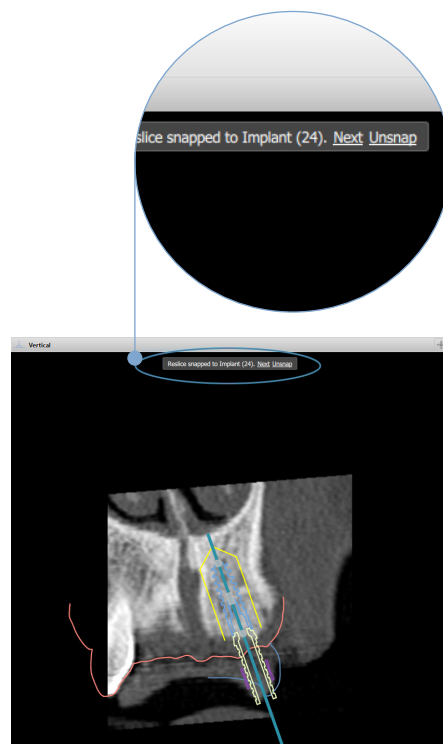

Gydymo plano tikrinimas

Chirurginio gido kūrimas

Chirurginis gidas padės atlikti chirurginę operaciją tiksliai, kaip suplanuota. Baigdami rengti planą sukurkite virtualų chirurginį gidą, pagal kurį matysite tai, ką gausite.

Chirurginio gido sukūrimas pagal gydymo planą


1. Spustelėkite [Sukurti gidą](#)  skirtuke [Užbaigti](#). Iššoks langas, kuriame turėsite patvirtinti implantų padėtis su pasirinktomis movomis (chirurgijos tipais). Pagal numatytuosius nustatymus chirurginį gidą gamina „Nobel Biocare“. Jei pageidaujate, kad gidas būtų gaminamas vietoje arba pas kitą gamintoją, pasirinkite [Kita](#). Gamintoją pasirinkite iš sąrašo. Jei pasirinksite savo paskyros pavadinimą, gidą galėsite patys atsisiųsti iš „DTX Studio™ Go“. Jei pasirinksite kurį nors iš savo ryšių, gidas bus pateiktas atsisiųsti jiems. Įveskite visus reikiamus duomenis ir, jei reikia, koreguokite pasirinktą chirurginės operacijos tipą.
2. Jei tipas tinkamas, spustelėkite [Kitas](#). Sugeneruojamas virtualus chirurginis gidas.
3. Patikrinkite virtualų chirurginį gidą.
4. Spustelėkite [Baigti](#).
5. Rodomas dialogo langas [Patvirtinti planavimą užsakymui](#). Atidžiai jį perskaitykite. Spustelėdami [Perskaičiau viską, kas pirmiau nurodyta, ir su tuo sutinku](#) patvirtinkite, kad perskaitėte pranešimus ir viskas yra gerai.
6. Spustelėkite [Sukurti užsakymą](#), kad gidą tuojau pat užsakytumėte. Sistema atvers užsakymo modulį, kuriame matysite planavimo failą ir gaminius galėsite užsakyti. Norėdami užsakymą atidėti, spustelėkite [Patvirtinti vėliau](#).

Pastaba

Vietoje gaminti skirto virtualaus chirurginio gido spalva skirsis nuo to, kuris skirtas gaminti „Nobel Biocare“ laboratorijoje.



Virtualus gidas, numatytas gaminti „Nobel Biocare“ laboratorijoje.

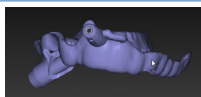

Virtualus gidas, numatytas gaminti vietoje.

Chirurginio gido tikrinimas

Baigiant rengti gydymo planą itin svarbu pastebėti problemas, dėl kurių būtų neįmanoma tinkamai sukurti chirurginio gido.

1. Patikrinkite tvirtinamųjų kaiščių padėtį.
2. Patikrinkite pakreipimus tarp implantų ir, jei abejojate, su technikai apsarstykite, ar pakreipimai nesukels problemų protezuojant.
3. Patikrinkite kreipiamąsias movas greta esančių dantų atžvilgiu.
 - Patikrinkite, ar mova noliečia greta esančių dantų.
 - Peržiūrėkite trimatį vaizdą ir patikrinkite, ar chirurginis gidas noliečia greta esančių dantų, kad nustatytumėte, ar chirurginio gido nereikia šlifuoti ar modifikuoti.

4. Kad galėtumėte patvirtinti planą, kiekvieną implantą patikrinkite statmenajame pjūvyje ir trimačiame vaizde.
5. Įsitikinkite, kad chirurginio gido palaikančiose konstrukcijose, kurios supa implantų ar tvirtinamųjų kaiščių movas, nėra įtrūkių ar skylių.
6. Perduokite planą technikams, kad jie jį patikrintų visais atžvilgiais.

Virtualaus chirurginio gido redagavimas

Pastaba

Taikoma tik iš dantų skenogramos sukurtiems gidams.

Jei virtualus gidas netinkamai paskirstytas dantų lanke (netolygiai išdėstytas lūpų, burnos ir liežuvio paviršiuose), jo formą galima redaguoti. Vedlyje [Redaguoti gidą](#) keiskite mėlynos linijos formą, kol ji sutaps su dantų lanko forma.

1. Spustelėkite [Redaguoti gidą](#)  skirtuke [Baigimas](#).
2. Spustelėkite ir vilkite kreivės taškus į norimą vietą.
3. Kai mėlyna linija tiksliau sutaps su dantų lanku, spustelėkite [Baigti](#).
4. Virtualus chirurginis gidas sugeneruojamas iš naujo.

Jei virtualaus gido forma vis tiek nėra optimali, kartokite šiuos veiksmus, kol pasieksite norimą rezultatą.

Pastaba

Jungtinėse Valstijose ir kai kuriose kitose rinkose vidukauliniams implantams skirtas chirurginis gidas laikomas medicininio įrenginio. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šių chirurginių gidų reglamentavimo statusą ir jiems taikomus reikalavimus, kreipkitės į vietos reglamentavimo instituciją.

Gydymo plano patvirtinimas

Visiškai baigtą gydymo planą užfiksуйте jį patvirtindami. Perskaitykite dialogo lange [Patvirtinimas](#) esantį tekstą ir patvirtinkite, kad su juo sutinkate.

Patvirtinimo būseną pasirodo planavimo būsenos juostoje.

Patvirtinto gydymo plano pakeisti negalima. Norėdami atvesti ir atlikti tolesnius pakeitimus, spustelėkite mygtuką [Atšaukti planavimo patvirtinimą](#).

Užsakymai

Skenuotą nuotrauką arba „TempShell“ užsakymus nusiųskite dantų technikos laboratorijai, kad būtų atliktas skenavimas arba suprojektuotas ir apskaičiuotas „TempShell“. Norint išsiųsti užsakymus per debesies paslaugą, odontologijos laboratorija turi naudoti „DTX Studio Lab“ ir turi būti užmegztas ryšys „DTX Studio Lab“ ir „DTX Studio Implant“.

Darbas su ryšiais

Norėdami pridėti ryšį, turite turėti asmens, dantų technikos laboratorijos ar odontologijos centro, su kuriuo norite susijungti, devynių skaitmenų identifikavimo numerį. „DTX Studio Implant“ programinėje įrangoje ryšio atpažinimo ženklas rodomas dialogo lange [Tvarkyti paskyrą](#). „DTX Studio Lab“ ryšio atpažinimo ženklas rodomas dialogo lange [Išsami paskyros informacija](#).

Ryšio pridėjimas

1. Spustelėkite piktogramą [Itraukti ryšį](#)  [Mano biuras](#) priemonių juostos skirtuke [Medicininiai įrašai](#). Arba spustelėkite skirtuką „DTX Studio Implant“ ir tada spustelėkite [Tvarkyti paskyrą](#).
2. Dialogo lango [Tvarkyti paskyrą](#) grupėje [Tvarkyti ryšius](#) spustelėkite [Itraukti naują ryšį](#).
3. Įveskite paskyros, su kuria norite susijungti, devynių skaitmenų identifikavimo numerį.
4. Spustelėkite [Itraukti ryšį](#). Naujas ryšys įtraukiamas į sąrašą, rodoma būsena [Pakvietimas išsiųstas](#) ir su naudojama paskyra susietu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas pakvietimas.
5. Spustelėkite [Gerei](#).
6. Adresatui priėmus jūsų kvietimą, jums atsiunčiamas patvirtinimo el. laiškas ir ryšio būsena sąraše pasikeičia į [Priimtas](#).

Ryšio užklauso priėmimas

Jums atsiųstų naujų ryšio užklauso būsena yra [Pateiktas prašymas](#). Norėdami ryšio užklauso priimti, kvietimo el. laiške spustelėkite [Priimti](#). Arba galite atlikti tolesnius veiksmus.

1. Priemonių juostos [Mano biuras](#) skirtuke [Medicininiai įrašai](#) spustelėkite [Itraukti ryšį](#)  arba spustelėkite skirtuką „DTX Studio Implant“ ir tada spustelėkite [Tvarkyti paskyrą](#).
2. Dialogo lango [Tvarkyti paskyrą](#) grupėje [Tvarkyti ryšius](#) pasirinkite ryšio užklauso, kurios būsena yra [Pakvietimas išsiųstas](#).
3. Spustelėkite [Priimti pasirinktą ryšį](#).
4. Ryšio būsena pasikeis į [Priimtas](#) ir pakvietėjui bus išsiųstas patvirtinimo el. laiškas.

Darbas su gaminių užsakymais

Gaminio užsakymo kūrimas

„Nobel Biocare“ gaminiams galima sukurti gaminio užsakymą. Ne „Nobel Biocare“ gaminiams (pvz., ne „Nobel Biocare“ implantams) gaminių užsakymų sukurti negalima.

Norėdami sukurti gaminio užsakymą, atlikite tolesnius veiksmus.

1. Spustelėkite **Užsakyti**  skirtuke **Baigti** priemonių juostoje **Planavimas**.
Arba spustelėkite **Gaminys** priemonių juostoje **Užsakymas**.
2. Bus rodomas šiam pacientui galimų planavimo failų sąrašas. Dešinėje lango dalyje peržiūrėkite pažymėto planavimo failo duomenis, išrinkite atitinkamą planavimo failą ir spustelėkite **Kitas**.

Pastaba

Įsitikinkite, kad norimas užsakyti planavimo failas yra patvirtintas . Tik patvirtintus planavimo failus galima konvertuoti į užsakymus. Jei planavimo failas dar nepatvirtintas, rodomas įspėjimas.

3. Rodomas **Gaminių sąrašas**. Pašalinkite sąrašo elementus, kurių nereikia užsakyti, arba pakoreguokite užsakytinų gaminių kieki ir spustelėkite **Kitas**.
4. Pasirinkite adresą **Gavėjas**, nurodykite, kas pateikė užsakymą, ir prireikus įveskite pastabas gamintojui.
5. Pasirinkite, ką daryti su užsakymu: **Tik išsaugoti** ar **Išsaugoti ir siųsti dabar**.
6. Patikrinkite užsakomus gaminius srityje **Užsakyti gaminiai**.
7. Spustelėkite **Baigti**. Užsakymas sukuriamas ir pateikiamas sukurtų užsakymų sąrašė.

Gaminio užsakymo išsiuntimas

Norėdami išsiųsti sukurtą gaminio užsakymą, atlikite tolesnius veiksmus.

1. Sąrašė pasirinkite sukurtą užsakymą.
2. Priemonių juostoje spustelėkite **Siųsti** .

Darbas su modelio skenogramos užsakymais

Jei norite gauti dantų liejinio, diagnostinio šablono ar vaškinio modelio paviršiaus skenuotą nuotrauką ir (arba) skenuotą priešingo žandikaulio nuotrauką, dantų technikos laboratorijai nusiųskite modelio skenavimo užsakymą.

Modelio skenavimo užsakymo kūrimas

1. Modulyje **Biuras** spustelėkite **Naujas**  ir **Užsakyti modelio skenogramą** .
Arba eikite į modulį **Užsakymas** ir spustelėkite **Skenograma**.
2. Skenuojamus objektus dantų schemeje nurodykite nuvilkdami skenuotiną sritį ir išskleidžiamajame meniu pasirinkdami reikiamą parinktį. Pageidaujami skenuoti vaizdai rodomi sąrašo dešinėje.
3. Spustelėkite **Kitas**.
4. Pasirinkite prijungtą dantų technikos laboratoriją, kuri dantų liejinį nuskenuos, įveskite visus reikiamus duomenis, specialiąsias instrukcijas ir patikrinkite pageidaujamų skenuoti vaizdų sąrašą.
5. Spustelėkite **Baigti**.
6. Modelio skenavimo užsakymas išsiunčiamas į dantų technikos laboratoriją, įtraukiamas į sąrašą **Užsakymai** ir rodomas su iš serverio gautu užsakymo numeriu.

Darbas su „TempShell“ užsakymais

Neatidėliotini laikini protezai pacientui suteikia galimybę gauti laikiną karūnelę ar tiltą implantavimo metu. Tam „DTX Studio Implant“ naudotojas ir dantų technikos laboratorija (naudojanti „DTX Studio Lab“) kartu suprojektuoja „Tempshell“, kurį chirurgijos metu gydytojas gali konvertuoti į negalutinį protezą.

„TempShell“ darbo eiga

„DTX Studio Implant“ sukuria paciento failą, prideda protezavimo informaciją ir suplanuoja implantus. Sukuriamas „TempShell“ užsakymas, kuris nusiunčiamas dantų technikos laboratorijai, ji užklausa gauna „DTX Studio Lab“. Dantų technikos laboratorija su „DTX Studio Lab“ parengia „LabDesign“.

„LabDesign“ pasirinktinai galima bendrinti su „DTX Studio Implant“ naudotoju. Norėdamas patikrinti, ar projektas tinka gydymo planui, naudotojas „LabDesign“ „DTX Studio Implant“ įterpia į gydymo planą. Jei reikia kokio nors koregavimo, kreipiamasi į dantų technikos laboratoriją (telefonu arba el. paštu), kad ji tai atliktų. „DTX Studio Implant“ naudotojui ir dantų technikos laboratorijai gali prireikti atlikti kelis koregavimus. Kai gydytojas patvirtina, kad projektas tinka, dantų technikos laboratorija sukuria ir bendrina „TempShell“.

„DTX Studio Implant“ naudotojas prideda „TempShell“ prie gydymo plano.

„LabDesign“ prašymo kūrimas

Norėdami sukurti „LabDesign“ prašymą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Modulio **Užsakymas** priemonių juostoje spustelėkite **LabDesign** .
2. Bus rodomas šiam pacientui galimų planavimo failų sąrašas. Dešinėje lango dalyje peržiūrėkite pažymėto planavimo failo duomenis, išrinkite atitinkamą planavimo failą ir spustelėkite **Kitas**.
3. Rodoma „LabDesign“ prašymo apžvalga.
4. Dantų schemeje nurodykite padėtis, dėl kurių teikiamas „LabDesign“ (pavienio danties ar tilto) prašymas.
5. Pasirinkite dantų technikos laboratoriją, kuri prašymą apdoro, arba pasirinkite prašymą eksportuoti kaip failą.
6. Patikrinkite prašymo informaciją ir prireikus pakoreguokite.
7. Spustelėkite **Baigti**.

„TempShell“ užsakymo kūrimas

Norėdami sukurti „TempShell“ užsakymą ir jį nusiųsti dantų technikos laboratorijai, atlikite tolesnius veiksmus.

1. Modulio **Užsakymas** priemonių juostoje spustelėkite **TempShell** .
2. Bus rodomas šiam pacientui galimų planavimo failų sąrašas. Dešinėje lango dalyje peržiūrėkite pažymėto planavimo failo duomenis, išrinkite atitinkamą planavimo failą ir spustelėkite **Kitas**.
3. Rodoma „TempShell“ užsakymo apžvalga.
4. Dantų schemeje nurodykite padėtis, kurioms „TempShell“ yra užsakomas (pavienis dantis ar tiltas). Nepasirinkite iškyšų ilginimo.
5. Pasirinkite dantų technikos laboratoriją, kuri užsakymą apdoro, arba pasirinkite užsakymą eksportuoti kaip failą.
6. Patikrinkite užsakymo informaciją ir prireikus pakoreguokite.
7. Spustelėkite **Baigti**.

„LabDesign“ įtraukimas į gydymo planą

Norint patikrinti, ar dantų technikos laboratorijos suprojektuotas protezas tinka gydymo planui, į gydymo planą galima įtraukti bendrinamą „LabDesign“ projektą.

1. Spustelėkite **Įtraukti „LabDesign“**  modulio **Planavimas** skirtuke **Protezavimas**.
2. Rodomas dialogo langas **Įtraukti „LabDesign“**. Pasirinkite **LabDesign** ir spustelėkite **Įtraukti „LabDesign“**.
3. **LabDesign** projektas įtraukiamas į vaizdą.
4. Dantų technikos laboratorijai telefonu arba el. paštu patvirtinkite, kad „LabDesign“ projektas tinka, arba paprašykite, kad atliktų pakeitimų.

Pastabos

Jei gydymo planą reikia koreguoti, būtinai pakartotinai užsakykite „LabDesign“.

Jei „LabDesign“ failas yra diske, jį importuokite naudodami veiksmą **Importuoti „LabDesign“** dialogo lange **Įtraukti „LabDesign“**.

„TempShell“ įtraukimas į gydymo planą

1. Spustelėkite **Pridėti „TempShell“** , kuris yra priemonių juostos **Planavimas** skirtuke **Baigti**.
2. Rodomas dialogo langas **Įtraukti „TempShell“**.
3. Spustelėkite esamą „TempShell“ įtraukti į gydymo planą.
4. Spustelėkite **Pridėti „TempShell“**.

Pastaba

Jei „TempShell“ failas yra diske, jį importuokite naudodami veiksmą **Importuoti „TempShell“** dialogo lange **Įtraukti „TempShell“**.

Darbas su paslaugų užklausomis

Įprasta paslaugos užklauso pateikimo per „DTX Studio Go“ darbo eiga

„DTX Studio Clinic“ naudotojas (užklauso pateikėjas) norėtų iš „DTX Studio Implant“ naudotojo (teikėjo) gauti konkretaus atvejo planą. Užklauso pateikėjas programoje „DTX Studio Clinic“ sukuria paciento failą ir paprastai per „DTX Studio Go“ siunčiama paslaugos užklausa. Kai teikėjas „DTX Studio Go“ gauna naują užklausą sukurti planą, galima atsisiųsti reikiamus failus. ZIP failą reikia išskleisti ir išsaugoti. Teikėjas sukuria naują paciento failą „DTX Studio Implant“, naudodamas gautus paciento duomenis. Teikėjas „DTX Studio Implant“ atlieka įprastus implantų planavimo veiksmus ir patvirtina gydymo planą. Tada jis gali atsakyti į paslaugos užklausą ir per „DTX Studio Go“ užklauso pateikėjui išsiųsti gydymo planą.

Kaip atsakyti į paslaugos prašymą

Norėdami patvirtintą planą vėl išsiųsti paslaugos užklauso pateikėjui, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Modulyje **Užsakymas** spustelėkite **Vykdyti prašymą** .
2. Sąrašė pasirinkite tinkamą planą. Spustelėkite **Kitas**.
3. Įveskite prašomą informaciją, kad paslaugos užklausą galėtumėte tinkinti. Nepamirškite pridėti ataskaitos ir, jei reikia, pridėkite pastabas arba nuotraukas.
4. Spustelėkite **Baigti**.
5. Išskylančiame lange pateikiama pagrindinė informacija (kaip antai paslaugos ID ir užklauso pateikėjo informacija), kad galėtumėte patikrinti, ar gydymo planas siunčiamas tinkamam paciento atvejui. Spustelėkite **Įkelti**, kad planą išsiųstumėte užklauso pateikėjui.

Vietos paslaugos prašymo pateikimo darbo eiga

Jei naudotojas viename kompiuteryje įdiegė tiek „DTX Studio Clinic“, tiek „DTX Studio Implant“, darbo eiga šiek tiek skiriasi. „DTX Studio Clinic“ sukuriama paciento failas ir atliekant reikiamus suderinimus sukuriama paciento modelis. Kai „DTX Studio Implant“ atidaroma iš „DTX Studio Clinic“, paciento modelis eksportuojamas ir pagal eksportuotus duomenis „DTX Studio Implant“ sukuriama naujas paciento failas. „DTX Studio Implant“ sukuriama gydymo implantais planas, tada jį galima eksportuoti į „DTX Studio Clinic“ ir joje tiesiogiai vizualizuoti.



Svarbu

Jei skenuota dantų nuotrauka ir paciento modelis „DTX Studio Clinic“ buvo sulygiuoti naudojantis „SmartFusion™“, iškyla įspėjamasis pranešimas, kad suderinimą turite patikrinti:

Patikrinkite skenuotos dantų nuotraukos ir paciento modelio sulygiamą ir, jei jis netinkamas arba abejojate, sulygiamą perskaiciuokite vedliu „Redaguoti skenuotą dantų nuotrauką“.

Patvirtinto plano eksportas

Jei tiek „DTX Studio Clinic“, tiek „DTX Studio Implant“ įdiegtos tame pačiame kompiuteryje, patvirtintą planą reikia eksportuoti.

1. Modulyje **Užsakymas** spustelėkite **Vykdyti prašymą** .
2. Sąrašė pasirinkite tinkamą planą. Spustelėkite **Kitas**.
3. Įveskite prašomą informaciją, kad paslaugos užklausą galėtumėte tinkinti. Nepamirškite pridėti ataskaitos ir, jei reikia, pridėkite pastabas arba nuotraukas.
4. Spustelėkite **Eksportuoti**.
5. Pasirinkite vietą eksportuotiems failams saugoti. Spustelėkite **Pasirinkti aplanką**.
6. Failai nuo šiol bus prieinami pasirinktoje vietoje.

Darbas su „Assistant“

Jei norite atidaryti „DTX Studio Implant Assistant“, spustelėkite mygtuką **Assistant** viršutiniame dešiniajame lango kampe.

Rodomas langas „DTX Studio Implant Assistant“. „DTX Studio Implant Assistant“ sudaro įvairūs skirtukai:

- **Užduotys**  : planavimo ir papildomų veiksmų apžvalga, kuri padeda atlikti planavimo procedūrą.
- **Įspėjimai**  : įspėjimo pranešimai įspėja apie galimas problemas.
- **Planavimo apžvalga**  : pateikiama implantų, atramų ir (arba) tvirtinamųjų kaiščių, naudojamų planuojant gydymą, apžvalga. Taip pat nurodoma, ar sukurtas radiografinis kreipiklis ir chirurginis gidas. Numatytų implantų padėtis yra nurodyta dantų schemeje.


OBSOLETE

„DTX Studio Implant“ įspėjimo sistema

„DTX Studio Implant“ programinėje įrangoje pateikiama įvairių techninių / gamybos / procedūrų įspėjimų (pvz., „movos „Guided Sleeve“ yra per arti viena kitos“, „neįdėtas nei vienas tvirtinamasis kaištis“, „implantas suplanuotas per arti pažymėto nervo“).

Jei įspėjimai sugeneruojami dėl to, kad „DTX Studio Implant“ aptinka klinikinio ar techninio planavimo problemų, juos galima peržiūrėti planavimo asistento dalyje [Įspėjimai](#).

Atidarykite planavimo asistentą ir spustelėkite [Įspėjimai](#) arba spustelėkite [Įspėjimai](#) po mygtuku [Asistentas](#). Dabar „Planning Assistant“ rodo įspėjimus, suklasifikuotus pagal klinikinius ir gido įspėjimus.

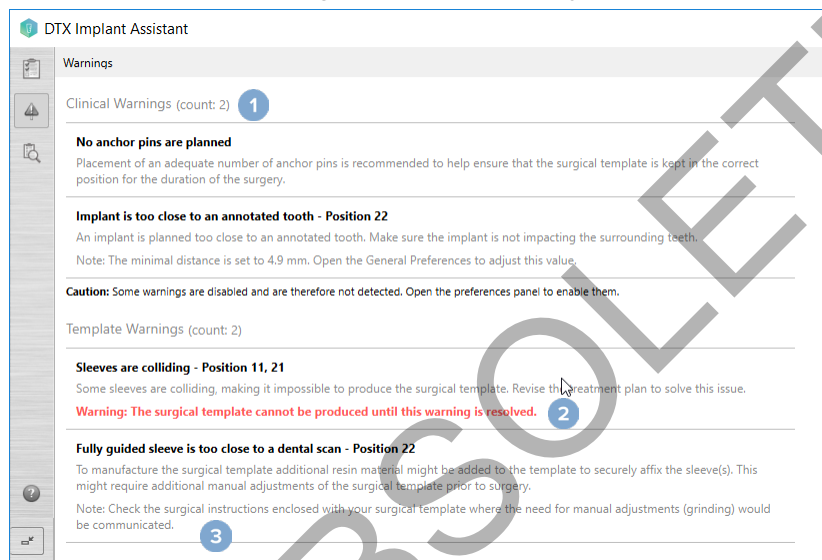

- 1 Esamas klinikinų ir gido įspėjimų skaičius rodomas įspėjimų antraštėje.
- 2 Kai chirurginio gido neįmanoma pagaminti, konkretūs įspėjimai pažymimi raudonu pranešimu, nurodančiu, kad norint pagaminti chirurginį gidą, reikia pašalinti šiuos įspėjimus sukėlusią problemą.
- 3 Prie konfigūruojamų įspėjimų pateikiama pastaba, kurioje nurodoma nustatyta reikšmė ir kur šią reikšmę galima pakeisti, jei ką nors reikia koreguoti. Jei ypatybėse konfigūruojamas įspėjimas buvo išjungtas, parodomas perspėjamasis pranešimas, informuojantis naudotoją, kad galimos problemos gali būti neaptiktos.

„DTX Studio Implant“ įspėjimai



Įspėjimas

Ši planavimo programa visų techninių apribojimų automatiškai netikrina. Kai kuriais atvejais chirurginių gidų negalima pagaminti, net jei programinė įranga automatiškai nenustato jokių techninių apribojimų.

Planuojant reikia atsižvelgti į konkrečius techninius apribojimus, kad būtų užtikrinta tinkama chirurginio gido gamyba ir pagamintas gidas būtų sėkmingai panaudotas operacijos metu. „DTX Studio Implant“ automatiškai aptinka kai kuriuos galimus techninių ir klinikinų apribojimų pažeidimus. Pažeidus kuriuos nors apribojimus, asistente pateikiamas įspėjimo pranešimas. Spustelėkite šį pranešimą, kad peržiūrėtumėte išsamų pastabų ir įspėjimų aprašą.

Dvimatės ir trimatės peržiūros programose problemą sukėlę objektai nuspalvinami raudona arba oranžine spalva, atsižvelgiant į pažeidimo tipą. Asistente rodomi atitinkami įspėjimo pranešimai. Šie pranešimai taip pat matomi lange [Patvirtinti](#), planavimo apžvalgoje, ataskaitoje ir kt.

Toliau pateikta galimų įspėjimų apžvalga pagal įspėjimų tipą.

Gido įspėjimai

Ataskaitoje gido įspėjimai rodomi paskutiniame puslapyje.

Įspėjimas	Paiškinimas
Susikerta movos.*	Kai kurios movos susikerta, dėl to neįmanoma pagaminti chirurginio gido. Norėdami išspręsti šią problemą, peržiūrėkite gydymo planą.
Susikerta implantas ir mova.	Implantas susikerta su mova. Tai gali sukelti problemų operacijos metu. Rekomenduojama peržiūrėti gydymo planą.
Susikerta tvirtinamasis kaištis ir mova.	Tvirtinamasis kaištis susikerta su mova. Tai gali sukelti problemų operacijos metu. Rekomenduojama peržiūrėti gydymo planą.
Susikerta pažymėtas dantis ir mova.	Mova susikerta su pažymėtu dantimi. Įsitikinkite, kad šis susikirtimas netrukdytų teisingai uždėti chirurginį gidą.
Tvirtinamojo kaiščio mova per arti skenuotos dantų nuotraukos.	Tvirtinamojo kaiščio mova suplanuota per arti dantų nuotraukos. Operacijos metu tai gali trukdyti teisingai uždėti chirurginį gidą. Pabandykite nustatyti tvirtinamojo kaiščio movos padėtį taip, kad ji nesikirstų su dantų nuotrauka.
Pirminė mova per arti skenuotos dantų nuotraukos.*	Pirminio gręžimo mova per arti dantų nuotraukos, todėl neįmanoma pagaminti chirurginio gido. Norėdami išspręsti šią problemą, peržiūrėkite suplanuotų implantų padėtis arba pakeiskite movos poslinkį.
Mova „Guided Sleeve“ per arti skenuotos dantų nuotraukos.	Norint pagaminti chirurginį gidą, į jį gali būti papildomai pridėdama plastinės medžiagos, kad būtų patikimai pritvirtinta (-os) mova (-os). Dėl to prieš operaciją chirurginį gidą gali prireikti papildomai koreguoti rankomis.
Pastaba Peržiūrėkite su chirurginiu gidu pateiktas chirurgines instrukcijas, kuriose nurodyta, ar reikalingas rankinis koregavimas (šlifavimas).	

* Kol nebus pašalinta ši problema, chirurginio gido nebus įmanoma pagaminti.

Klinikiniai įspėjimai

Klinikiniai įspėjimai skirstomi į bendruosius įspėjimus ir implanto įspėjimus. Klinikiniai įspėjimai ataskaitoje rodomi implanto puslapiuose.

Bendrieji įspėjimai

Įspėjimas	Paaiškinimas
Plane nėra nė vieno tvirtinamojo kaiščio.	Patariama įstatyti pakankamai tvirtinamųjų kaiščių, kad tinkama chirurginio gido padėtis būtų išlaikyta visos operacijos metu.
Susikerta tvirtinamieji kaiščiai.	Susikerta kai kurie tvirtinamieji kaiščiai. Tai gali sukelti problemų operacijos metu. Rekomenduojama peržiūrėti gydymo planą.
Nesukalibruotas radiografinis gidas.	Radiografinio gido 3D modelis sukurtas naudojant pilką žymą (ISO žymą), nesukalibruotą jūsų skeneriui. Norint pagaminti tiksliai tinkantį chirurginį gidą, svarbu atlikti „NobelGuide“ kalibravimo procedūrą, aprašytą „NobelGuide“ koncepcijos vadove.
Gydymas suplanuotas naudojant neįdiegtus produktus.*	Gydymo plane yra produktų, kurie šiuo metu neįdiegti jūsų kompiuteryje. Įsitikinkite, kad veikia interneto ryšys ir iš naujo atidarykite gydymo planą. Jei trūkstančių produktų įdiegti nepavyksta, kreipkitės į savo konsultantą.
Ijungtas prastos kokybės vaizdavimas.**	Gydymo plane trimačiam paciento modeliui naudojamas prastos kokybės vaizdas.
Skenuotos dantų nuotraukos sulgyjimas koreguotas rankiniu būdu.	Sulygiavimas tarp paciento modelio ir dantų skenogramos buvo rankiniu būdu sureguliuotas, nurodant atitinkamus taškus arba importuojant naują dantų skenogramos paviršių. Pakartotinai patikrinkite, ar dantų nuotrauka tinkamai apjungta su (KS)KT nuotrauka, nes dėl nuokrypių atsiras klaidų tinkamai nustatant implantų padėtį.
Nepavyko atlikti „SmartFusion“ sulgyjimo.*	Nepavyko atlikti „SmartFusion“ sulgyjimo ir jis nebuvo koreguotas rankiniu būdu. Norėdami išspręsti šią problemą, paleiskite veiksmą „Redaguoti skenuotą dantų nuotrauką“.
Patikrinti „SmartFusion“ sulgyjimą	Patikrinkite skenuotos dantų nuotraukos ir paciento modelio sulgyjimą ir, jei jis netinkamas arba abejojate, sulgyjimą perskaičiuokite vedliu „Redaguoti skenuotą dantų nuotrauką“.

* Kol nebus pašalinta ši problema, nebus įmanoma pagaminti chirurginio gido.

** Pasirinkus prastos kokybės vaizdą padidėja pavojus, kad paciento modelyje bus matomos ne visos anatomicinės savybės. Šis nustatymas turės įtakos tik trimačio tūrio kokybei. KT pjūviai nebus paveikti.

Implanto įspėjimai

Dalis implanto įspėjimų yra konfigūruojami. Pvz., juos galima įjungti ar išjungti ir (arba) naudotojas gali nustatyti vertes, kurioms esant įspėjimai pateikiami. Toliau pateiktoje lentelėje šie įspėjimai pažymėti kaip „konfigūruojami“.



Svarbu

Vertės, kurios sugeneruos implanto įspėjimus, turi būti nustatytos vadovaujantis mediko patirtimi ir žiniomis.

Įspėjimas

Paiškinimas

Susikerta implantai.	Susikerta kai kurie implantai. Tai gali sukelti problemų operacijos metu. Rekomenduojama peržiūrėti gydymo planą.
Susikerta implantas ir tvirtinamasis kaištis.	Implantas susikerta su tvirtinamuoju kaiščiu. Tai gali sukelti problemų operacijos metu. Rekomenduojama peržiūrėti gydymo planą.
Implantas per arti pažymėto nervo.*	Implantas suplanuotas per arti pažymėto nervo. Įsitikinkite, kad implantas neličia nervo.
	Pastaba Nustatytas [...] mm minimalus atstumas. Norėdami šią vertę koreguoti, atidarykite „Bendrosios parinktys“.
Implantas per arti pažymėto danties.*	Implantas suplanuotas per arti pažymėto danties. Įsitikinkite, kad implantas neličia gretimų dantų.
	Pastaba Nustatytas [...] mm minimalus atstumas. Norėdami šią vertę koreguoti, atidarykite „Bendrosios parinktys“.

* Šie įspėjimai konfigūruojami

Konfigūruojami įspėjimai

Konfigūruojami įspėjimai yra paremti tūriu aplink implantą (t. y. įspėjimo tūriu). Kai šis tūris kertasi su pažymėta anatomine struktūra, sugeneruojamas įspėjimas.


Įspėjimo tūris priklauso nuo iš anksto nustatyto atstumo. Pagal numatytąjį nustatymą nustatytas minimalus atstumas yra 1,5 mm. Esant šiam minimaliam atstumui įspėjimo tūris sutampa su geltona zona (atitinkančia 1,5 mm atstumą aplink implantą ir 2 × 1,5 mm (3,0 mm) atstumą ties viršūne). Įspėjimo tūrį galima padidinti. Kaip pavaizduota paveikslėlyje (pvz., 4,0 mm atstumas), įspėjimo tūris yra pritaikomas atitinkamai.

Įspėjimas dėl atstumo tarp implantų ir nervų

Kai implantas nustatomas per arti pažymėto nervo (t. y. įspėjimo tūris sutampa su pažymėto nervo vizualizacija), sugeneruojamas įspėjimas. Rodomas susijęs implantas (jei jis dar nebuvo matomas) ir jis pažymimas oranžine spalva.

Įspėjimas dėl atstumo tarp implantų ir dantų šaknų

Kai implantas nustatomas per arti danties šaknies (t. y. įspėjimo tūris sutampa su pažymėtu dantimi), sugeneruojamas įspėjimas. Implantas yra rodomas pažymėtas oranžine spalva.

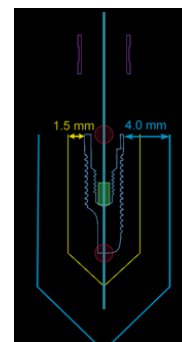

Pastaba

Minimalų numatytąjį įspėjimo tūrio atstumą reikia nustatyti naudojant „DTX Studio Implant“ > „Bendrosios ypatybės“. Šios vertės išsaugomos kompiuteryje, kuriuo dirbate. Jei gydymo planas atidaromas ne tame pačiame kompiuteryje, kuriame buvo sukurtas, rodomi įspėjimai atitinka šiuo metu naudojamo kompiuterio nustatymus. Atsižvelgiant į kompiuterio nustatymus rodomi įspėjimai gali skirtis. Konfigūruojamas vertes visada galima koreguoti nustatymuose, o sugeneravus įspėjimą vertės rodomos jo apžvalgoje.

Techninių apribojimų,


Paaiškinama daug techninių apribojimų, kurie turi lemiamą įtaką formuojant tinkamą chirurginį gidą. Nepaisant šių apribojimų negalima garantuoti, kad bus įmanoma pagaminti chirurginį gidą ar tinkamai jį naudoti.

Mažiausias atstumas tarp movų „Guided Sleeve“

Chirurginiame gide būtina išlaikyti mažiausią atstumą tarp kreipiamųjų movų. Kai atstumas yra per mažas, neįmanoma pagaminti chirurginio gido.

Pažeidus minimalų atstumą tarp kreipiamųjų movų jos automatiškai tampa matomos ir pažymimos raudonai. Esant tokiai sąrankai neįmanoma pagaminti chirurginio gido.


Norėdami išspręsti šią situaciją, pastumkite ar paverskite implantus taip, kad padidėtų atstumas tarp movų. Kai atstumas yra pakankamai didelis, kreipiamosios movos automatiškai vaizduojamos įprasta spalva.

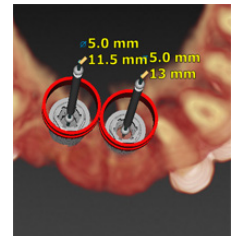

Mažiausias atstumas tarp movų ir implantų arba movų ir tvirtinamųjų kaiščių

Kai movos ir implantai arba movos ir tvirtinamieji kaiščiai išdėstomi labai arti vienas kito ar kertasi, jie automatiškai tampa matomi ir vaizduojami oranžine spalva. Jei atstumas tarp movos ir implanto ar tvirtinamojo kaiščio per mažas, chirurginės operacijos metu gali būti sunku paruošti kaulą arba įdėti implantą ar tvirtinamąjį kaištį.

Norėdami išspręsti šią problemą, pastumkite ar paverskite implantus ar tvirtinamuosius kaiščius taip, kad padidėtų atstumas tarp jų ir movų. Kai atstumas yra pakankamai didelis, jie automatiškai vaizduojami įprasta spalva.

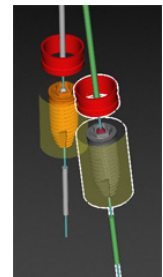


Susikirtimas tarp implantų, tvirtinamųjų kaiščių arba implantų ir tvirtinamųjų kaiščių

Kai kertasi implantai, tvirtinamieji kaiščiai arba implantai ir tvirtinamieji kaiščiai, jie automatiškai tampa matomi ir vaizduojami oranžine spalva. Jei šie objektai susikerta, gali kilti problemų atliekant chirurginę operaciją.

Norėdami išspręsti šią problemą, pastumkite ar paverskite implantus arba tvirtinamuosius kaiščius taip, kad jie nesusikirstų. Kai atstumas yra pakankamai didelis, jie automatiškai vaizduojami įprasta spalva.

Pastaba

Kai kuriais atvejais tvirtinamajam kaiščiui pirmiausia naudojamas implanto dydis. Prieš įstatant implantą reikia išimti tvirtinamąjį kaištį.

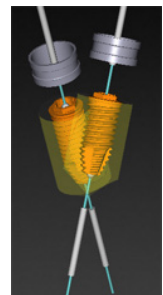


Santykis tarp movos „Guided Sleeve“ ir radiografinio gido ir (arba) skenuotos dantų nuotraukos

Planavimo metu svarbu atsižvelgti ne tik į klinikinius aspektus, bet ir į techninius movų „Guided Sleeve“ padėties apribojimus, atsižvelgiant į radiografinį gidą ir (arba) skenuotą dantų nuotrauką – reikia patikrinti movų „Guided Sleeve“ padėtį pagal rodomą radiografinį gidą ir (arba) skenuotą dantų nuotrauką.

Radiografinio vadovo padėtis


- **Padėtis:** kiekviena kreipiamoji mova turi būti radiografiniame gide, kad būtų užtikrintas pakankamas chirurginio gido medžiagos kiekis, kuris išlaikytų kreipiamąją movą.

- 1 Tinkamai nustatyta padėtis
- 2 Netinkamai nustatyta padėtis: mova per toli ir neprijungta prie radiografinio gido.

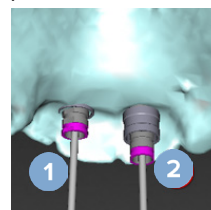

- **Gylis:** būtina patikrinti movos gylį radiografinio gido atžvilgiu. Mova negali išsikišti iš į dantenų pusę nukreipto paviršiaus (graviruoto paviršiaus), kad būtų užtikrinta tinkama chirurginio gido padėtis. Norėdami patikrinti movos gylį, patikrinkite movos padėtį ir pakoreguokite implanto gylį naudodamiesi specialiosios priemonių juostos piktograma **Gylis**.
Arba pasirinkę pirminę movą koreguokite movos poslinkį.

- 1 Tinkamai nustatyta padėtis
- 2 Neteisinga padėtis: mova įdėta per giliai.



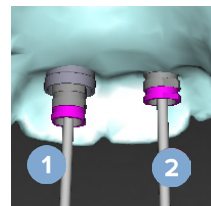


Skenuota dantų liejinio nuotrauka

Patikrinkite movų padėtis po implantų planavimo. Būtina išspręsti toliau aprašytas situacijas.



- **Šoniniai susilietimai:** tai susilietimai su greta esančiais dantimis arba galimai su minkštuju audiniu (burnos ertmės paviršiaus skenuota nuotrauka). Jei įvyksta susilietimas, patikrinkite, ar galima pakeisti implanto padėtį, kad nebūtų sugeneruotas susilietimo įspėjimas. Jei tai neįmanoma, bandykite susiaurinti movos skersmenį arba pasirinkite tik pirminį gręžimą. Patyrę naudotojai gali praleisti valdomo gręžimo procedūros dalis ir, pašalinę chirurginį gidą, užbaigti gręžimo protokolą rankomis atliekamos chirurginės operacijos protokolu. Tokiu atveju implantas įsriegiamas rankomis.

- 1 Netinkama padėtis: per arti greta esančio danties ar minkštojo audinio arba jį liečia.
- 2 Teisingai išdėstyta: pakeistas skersmuo.
- 3 Teisingai išdėstyta: pakeista į pirminę movą.

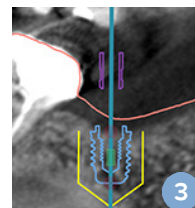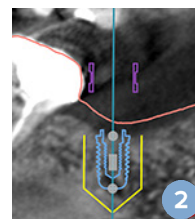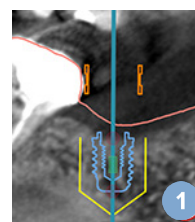

- **Vertikalūs susilietimai:** tai susilietimai su galimai minkštuoju audiniu (burnos ertmės paviršiaus skenuota nuotrauka). Jei įvyksta vertikalus susidūrimas, o jūs esate pasirinkę pirminį gręžimą, koreguokite movos poslinkį.

- 1 Netinkamai nustatyta padėtis
- 2 Teisingai išdėstyta: sureguliuotas movos poslinkis.

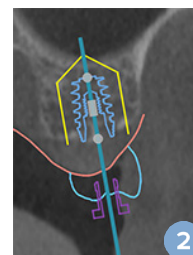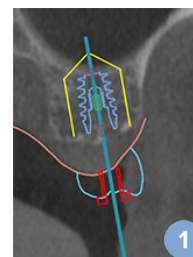

Santykis tarp movos kreipiamosios movos „Guided Sleeve“ ir kaulo

Planuojant svarbu atsižvelgti į techninius kreipiamųjų movų padėties apribojimus kaulo paviršiaus, kuriame gali būti dantų, atžvilgiu. Kai kreipiamoji mova kerta su žandikaulio paviršiumi arba likę dantys sudaro dalį žandikaulio modelio, gali būti neįmanoma chirurginės operacijos metu teisingai uždėti chirurginį gidą.

Tačiau kai kuriais atvejais ši klaida gali būti priimtina (pvz., kai mova liečiasi su dantimi, kuris per chirurginę operaciją bus pašalintas, arba kai mova liečiasi su artefaktu).

Gidu valdomos atramos

Kai planuojama naudoti kreipiamąsias atramas, įsitikinkite, kad kampas tarp didžiausiu kampu įstatomų implantų neviršija 30 laipsnių.

Radiografinis gidas sukurtas be kalibruotos ISO vertės.

Jeigu gamybai eksportuojamas chirurginis gidas, kuriant radiografinio gido modelį rekomenduojama naudoti kalibruotą ISO vertę. Jeigu kalibravimo rinkinys nenaudojamas, šio automatinio žingsnio svarbai pabrėžti pateikiamas kalibravimo įspėjimas („Radiografinis gido modelis sukurtas be kalibruotos ISO vertės“).

Gydymo plano aptarimas

Modulyje [Aptarimas](#) galite kurti ataskaitas, tik skaitomus peržiūros failus ir „Communicator“ pateiktis.

Ataskaitos

Ataskaitos kūrimas

1. Įsitikinkite, kad paciento failas atidarytas. Spustelėkite mygtuką [Ataskaita](#) , esantį planavimo modulio skirtuko [Užbaigti](#) grupėje [Perdavimas](#).
2. Rodomas planavimo failų sąrašas. Pasirinkite atitinkamą planavimo failą ir spustelėkite [Kitas](#). Sistema įkelia duomenis ir sugeneruoja ataskaitos puslapius.
3. Rodomi ataskaitos puslapių peržiūros vaizdai: turimos bendrosios paciento informacijos ir gydymo apžvalga, naudojamo skenerio, planavimo įspėjimų ir naudojamų gaminių, taip pat chirurginio plano vaizdai.
Pastaba
peržiūros vaizdai sugeneruojami mažesnės raiškos nei tikras PDF failas.
4. Suteikite ataskaitai atitinkamą pavadinimą.
5. Pasirinktinai galite į ataskaitą įtraukti pastabą (iki 700 simbolių).
6. Tinkinkite ataskaitą pasirinkdami įtrauktinus puslapius: panaikinkite puslapių, kuriuos norite pašalinti iš ataskaitos, pasirinkimą. Puslapiai, kurių žymėjimas buvo panaikintas, bus rodomi pilka spalva ir nebus įtraukti į galutinę sugeneruotą ataskaitą.
7. Jei reikia, padarykite ataskaitą anoniminę.
8. Spustelėkite [Baigti](#), jei norite sukurti ataskaitą, arba [Atšaukti](#), jei užklauso norite atsisakyti.
9. Patvirtinus rodoma pasirinktų ataskaitos puslapių peržiūra. Pereikite per puslapius ir juos patikrinkite.

Ataskaitos spausdinimas

Jei sukurtą ataskaitą norite išspausdinti, pirmiausia turite ją iškseportuoti ir išsaugoti kaip PDF failą.

1. Pasirinkite ataskaitą sąraše [Ryšių elementai](#).
2. Priemonių juostos skirtuko [Perdavimas](#) grupėje [Ataskaita](#) spustelėkite [Eksportuoti](#).
3. Pereikite į vietą, kurioje norite išsaugoti ataskaitą.
4. Spustelėkite [Įrašyti](#).
5. Ataskaita išsaugoma kaip PDF dokumentas. Pagal numatytąjį nustatymą ataskaita bus atidaryta, kad galėtumėte išspausdinti dokumentą.

Peržiūros failai

Jei asmens, su kuriuo norite aptarti gydymo planą, kompiuteryje „DTX Studio Implant“ nėra, gydymo plano informaciją galima pateikti naudojantis peržiūros failu. Peržiūros failas yra gydymo plano versija. Jis sukuriamas „DTX Studio Implant“, įrašomas kaip tik skaitomas failas ir jame pateikiamas konkretaus paciento gydymo planas. Peržiūros failą galima atidaryti kompiuteryje, kuriame įdiegta „DTX Studio Implant“ peržiūros programa.

Peržiūros failo kūrimas

1. Atidarykite modulį [Aptarimas](#).
2. Skirtuko [Perdavimas](#) grupėje [Perduoti](#) spustelėkite [Peržiūros programa](#) .
3. Pasirinkite planavimo failą iš sąrašo ir spustelėkite [Toliau](#).
4. Tinkinimo puslapyje įveskite peržiūros programos informaciją.
 - Įveskite atitinkamą peržiūros failo pavadinimą.
 - Spustelėkite į peržiūros failą norimus įtraukti vaizdus.
 - Nurodykite, ar KT vaizdo duomenis reikia suglaudinti.
 - Jei paciento duomenų negalima bendrinti, čia failą anonimizuokite pasirinkdami [Anonimizuoti visą paciento informaciją](#).
 - Norėdami užbaigtą peržiūros failą tuojau pat bendrinti, pažymėkite atitinkamą žymės langelį.
5. Norėdami peržiūros failą išsaugoti, spustelėkite [Baigti](#).
6. Peržiūros failas išsaugomas ir rodomas sąrašė [Ryšių elementai](#). Rodomas dialogo langas [Bendrinti peržiūros programą](#).
7. Įveskite el. pašto adresą arba naudodamiesi mygtuku [Kontaktai](#) pasirinkite, su kuo norite bendrinti peržiūros failą.
8. Įveskite asmeninį pranešimą ir spustelėkite [Bendrinti](#).
9. Pasirinktiems asmenims nusiunčiamas el. laiškas su atsisuntimo nuoroda.

Atidarykite peržiūros failą naudodami „DTX Studio Implant“

1. Dukart spustelėkite peržiūros failą sąrašė [Ryšių elementai](#).
2. Pažymėtas peržiūros failas atidaromas „DTX Studio Implant“ peržiūros programoje.

Peržiūros failo atidarymas naudojantis atsisuntimo nuoroda

Jei gavote el. laišką su peržiūros failo atsisuntimo nuoroda, atlikite tolesnius veiksmus.

1. El. laiške spustelėkite atsisuntimo nuorodą.
2. Peržiūros failas atsiunčiamas.
3. Pereikite į vietą, kur laikomas parsųstas failas, ir dukart spustelėkite išsaugotą peržiūros failą.
4. Atidaroma „DTX Studio Implant“ peržiūros programa, kurioje rodomas peržiūros failas.

Modulyje [Aptarimas](#) galite kurti ataskaitas, tik skaitomus peržiūros failus ir „Communicator“ pateiktis.

„Communicator“ pristatymai

„Communicator“ pristatymuose pateikiama gydymo plano apžvalga. Be to, jie suteikia galimybę pacientą informuojant apie procedūrą pasižymėti pastabas. „Communicator“ prezentacijos gali būti naudojamos, kai pacientams ir kolegoms reikia pateikti informaciją apie odontologinį gydymą. Be to, prezentacijas galima pateikti naudojantis debesies paslauga.

„Communicator“ prezentacijos įkeliamos į debesies paslaugą ir jas galima atidaryti „iPad®“ skirta programėle „Communicator“.

„Communicator“ pristatymo kūrimas

1. Atidarykite modulį [Aptarimas](#).
2. Skirtuko [Perdavimas](#) grupėje [Perduoti](#) spustelėkite [Communicator](#) .
3. Pasirinkite planavimo failą iš sąrašo.
4. Spustelėkite [Kitas](#).
5. Tinkinimo puslapyje įveskite „Communicator“ pristatymo informaciją.
 - Įveskite atitinkamą pristatymo pavadinimą.
 - Jei pageidaujate, įtraukite pastabų apie pristatymą. Jos rodomos „Communicator“ pristatyme, kai jis atidaromas „iPad®“ įrenginiu.
 - Apibrėžkite į pristatymą norimus įtraukti vaizdus. Įtraukti galima tik į pacientų biblioteką įtrauktus vaizdus.
 - Jei paciento duomenų negalima bendrinti, čia failą anonimizuokite pasirinkdami [Anonimizuoti visą paciento informaciją](#).
 - Norėdami užbaigtą „Communicator“ pristatymą tuojau pat įkelti į „iPad®“ įrenginį, pažymėkite atitinkamą žymės langelį.
6. Spustelėkite [Baigti](#).
7. „Communicator“ pateiktis išsaugoma ir rodoma sąrašė [Ryšių elementai](#).

Gydymo plano eksportavimas informacijos ar chirurginės operacijos tikslais

„DTX Studio Implant“ leidžia eksportuoti gydymo planą, skirtą naudoti, pvz., „DTX Studio Clinic“, „X-Guide™“ ar „OsseoCare™ Pro“, arba konsultuotis kituose programinės įrangos produktuose.

Eksportavimas į „DTX Studio Clinic“

Gydymo plano eksportavimas vaizduoti „DTX Studio Clinic“

1. Eikite į modulį [Planavimas](#).
2. Skirtuko [Užbaigti](#) grupėje [Chirurginės operacijos planas](#) spustelėkite [Klinikinių duomenų eksportavimas](#) .
3. Pasirinkite aplanką, kuriame bus saugomas užšifruotas .dtxip failas su visa reikalinga informacija apie gydymo planą.
4. Rodomas pranešimas, patvirtinantis sėkmingą išsaugojimą, taip pat failo išsaugojimo vietą. Spustelėkite [Gera!](#), kad jį uždarytumėte.

Gydymo plano eksportas vaizduoti kituose programinės įrangos produktuose (atviras eksportas)

1. Eikite į modulį [Planavimas](#).
2. Skirtuko [Užbaigti](#) grupėje [Perduoti](#) spustelėkite [Atidaryti eksportą](#) .
3. Pasirinkite aplanką, kuriame gydymo planas bus saugomas.
4. Spustelėkite [Eksportuoti](#).
5. Rodomas pranešimas, patvirtinantis sėkmingą išsaugojimą, taip pat failo išsaugojimo vietą. Spustelėkite [Gera!](#), kad jį uždarytumėte.

„X-Guide™“ chirurginis planas

„X-Guide™“ yra trimatė dantų implantų nukreipimo sistema, kuri gydymo planą padeda perkelti pacientui ir užtikrina interaktyvų valdymą atliekant operaciją.



Įspėjimas

Žinokite, kad duomenų vaizdavimas (pvz., peržiūros programos orientacija, objektų spalvos) ir įspėjimai „DTX Studio Implant“ ir „X-Guide™“ programinėje įrangoje gali skirtis.

„X-Guide™“ chirurginio plano kūrimas

1. Modulyje [Aptarimas](#) spustelėkite [X-Guide](#) , kuris yra grupėje [Perduoti](#).
2. Pasirinkite tinkamą patvirtintą planavimo failą iš sąrašo.
3. Spustelėkite [Kitas](#).
4. Puslapyje [Tinkinti chirurginės operacijos sąranką](#) įveskite išsamius duomenis. Prireikus anonimizuokite.
5. Spustelėkite [Baigti](#).

„X-Guide™“ chirurginio plano eksportas

1. Modulyje [Aptarimas](#) iš sąrašo [Perdavimo elementai](#) pasirinkite sukurtą „X-Guide™“ chirurginį planą.
2. Skirtuko [Perdavimas](#) grupėje [X-Guide](#) spustelėkite [Eksportuoti](#) .



Įspėjimas

„DTX Studio Implant“ palaiko tik kai kuriuos į „X-Guide™“ eksportuotinus implantus. Nepalaikomi implantai į „X-Guide™“ failą nebus įtraukti.

3. Dialogo lange spustelėkite [Naršyti](#) ir pereikite į vietą, kurioje „X-Guide™“ chirurginį failą reikia įrašyti.
4. Spustelėkite [Įrašyti](#).

„OsseoCare™ Pro“ chirurginis planas

„OsseoCare™ Pro“ yra „Apple's iPad®“ valdomas grąžto variklis, dėl to gydymo seką galima suplanuoti ir nustatyti prieš chirurginę operaciją. Įrenginys odontologams bei chirurgams suteikia galimybę tinkamais įrankiais pjauti kietuosius ir minkštuosius audinius.

„OsseoCare™ Pro“ chirurginis planas apima nuoseklius gydymo sekos veiksmus ir per operaciją odontologui arba chirurgui „iPad®“ programėlėje pateikia nuoseklius nurodymus.

„OsseoCare™ Pro“ chirurginio plano kūrimas

1. Modulyje [Aptarimas](#) spustelėkite [OsseoCare Pro](#) , kuris yra grupėje [Perduoti](#).
2. Pasirinkite tinkamą patvirtintą planavimo failą iš sąrašo.
3. Spustelėkite [Kitas](#).
4. Puslapyje [Tinkinti chirurginės operacijos sąranką](#) įveskite išsamius duomenis.
5. Spustelėkite [Baigti](#). Pagal numatytuosius nustatymus užbaigtas chirurginis planas bus įkeltas į debesies paslaugą.
6. Norėdami tęsti, teisinės atsakomybės atsisakymo formoje spustelėkite [Sutinku](#).

Skenerio kalibravimas

Pastaba

Šią skenerio kalibravimo procedūrą reikia atlikti tik kuriant radiografinį gidą.

Norint tinkamai ir tiksliai perkelti gydymo planą iš kompiuterio pacientui, kad būtų atlikta chirurginė operacija, labai svarbu generuoti chirurginį gidą, kuris taip pat gerai, kaip ir radiografinis gidas, tiktų prie jį supančių minkštųjų ir kietųjų audinių. Tam reikia tikslios 1:1 kopijos, apimančios (kūgio formos spindulio) KT skenerio atliekamą skaitmenizavimą ir virtualaus radiografinio gido modelio sukūrimą programinėje įrangoje, naudojant nuo skenerio priklausomus atitinkamus nustatymus. Ši ISO vertė gali būti atpažinta rankiniu būdu, atliekant tikslią rankinę sąveiką, arba gali būti apibrėžta automatiškai kalibravimo nuskaitymu iš unikalaus „NobelGuide®“ kalibravimo objekto, gauto naudojant skenerį su tinkamais nustatymais. „NobelGuide®“ kalibravimo objektas yra tokių pačių pralaidumo savybių kaip ir radiografinis gidas (PMMA) ir turi tiksliai apibrėžtą programinei įrangai žinomą formą. Kad būtų galima išskirti (segmentuoti) tinkamus radiografinio gido skenavimo matmenis ir formą, „DTX Studio Implant“, automatiškai tirdama nuorodinį skenavimą (kalibravimo skenavimą) ir lygindama jį su žinoma originalia forma, gali automatiškai apibrėžti ir paskui pritaikyti tinkamiausią ISO vertę (**kalibruotą ISO vertę**). Programinė įranga išsaugo visus su skeneriu susijusius kalibravimo rinkinius. Atlikdama kiekvieną radiografinio gido nuskaitymą, ji automatiškai ieško tinkamo kalibravimo rinkinio už „žinomų“ skenerių. Jei aptinkamas toks skeneris, pasiūloma ir automatiškai pritaikoma priklausanti **Kalibruota ISO vertė**. Radiografinio gido ISO vertės redagavimo priemonė suteikia informacijos apie naudojamą kalibravimo rinkinį, naudojamo skenerio tipą ir kalibruotą ISO vertę.

Jei gamybai eksportuojamas chirurginis gidas, kuriant radiografinio gido modelį rekomenduojama naudoti kalibruotą ISO vertę. Jeigu kalibravimo rinkinys nenaudojamas, šio automatinio žingsnio svarbai pabrėžti pateikiamas kalibravimo įspėjimas (**Radiografinis gido modelis sukurtas be kalibruotos ISO vertės**).

Jei kalibravimas naudojamas, ISO vertės redagavimo priemonė vietoje **ISO vertė** rodo **Kalibruota ISO vertė**. Naudojant sistemos generuotą kalibravimo rinkinį, rodoma **Siūloma ISO vertė**.

Naujo kalibravimo rinkinio kūrimas

Pirmą kartą naudojant vaizdo duomenis iš konkretaus (KS)KT skenerio ir tam tikro protokolo būtina sukurti naują kalibravimo rinkinį. Sukūrus šį kalibravimo rinkinį jį galima naudoti visiems pacientams, kurie bus skenuojami šiuo vaizdo gavimo įrenginiu. Rekomenduojama sukurti naują kalibravimo rinkinį ne rečiau kaip kas šešis mėnesius arba atnaujinus, patobulinus ar atlikus techninę vaizdo gavimo įrenginio priežiūrą.

Kad sukurtumėte naują kalibravimo rinkinį, spustelėkite modulio **Mano biuras** skirtuko **Skeneris** grupėje **Kalibravimo rinkinys** esantį mygtuką **Naujas** . Paleidžiamas vedlys **Kalibravimo kūrimas**.

Kalibravimo vedlys padės trimis žingsniais atlikti kalibravimo procedūrą:

1. Įkelkite kalibravimo DICOM failus
2. Apskaičiuokite kalibravimo nustatymus
3. Įveskite išsamią informaciją ir įrašykite kalibravimo rinkinį

Techninė pagalba

Jei kyla problemų, susisiekite su „DTX Studio“ technine pagalba:

support@dtxstudio.com

<https://tech.dexis.com/support>

OBSOLETE



Nobel Biocare AB
Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1,
411 17 Göteborg,
SWEDEN

www.nobelbiocare.com

Australijoje platina:


Nobel Biocare Australia Pty Ltd
Level 4/7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW 2114
AUSTRALIA

Telefonas +61 1800 804 597



Importuotojas / atstovas Šveicarijoje:

Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
SWITZERLAND

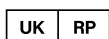

Atsakingasis asmuo JK:

Nobel Biocare UK Ltd.
4 Longwalk Road
Stockley Park
Uxbridge UB11 1FE
UNITED KINGDOM

Naujojoje Zelandijoje platina:

Nobel Biocare New Zealand Ltd
33 Spartan Road
Takanini, Auckland, 2105
NEW ZEALAND

Telefonas +64 0800 441 657

Turkijoje platina:

EOT Dental
Sağlık Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş
Nişpetiye Mah. Aytar Cad.
Metro İş Merkezi No: 10/7
Beşiktaş İSTANBUL
Telefonas +90 2123614901



ifu.dtxstudio.com/symbolglossary
ifu.dtxstudio.com