



DTX Studio™ Implant

Version 3.6

Bruksanvisning

Innhold

Innhold	2
Innledning	8
Ansvarsfraskrivelse	8
Beskrivelse av enheten	8
Tiltenkt formål	8
Tiltenkt bruk / indikasjoner for bruk	8
Tiltenkt bruker og tiltenkt pasientmålgruppe	9
Påkrevd kompatibilitet med annet utstyr	9
Enheter med målefunksjon	9
Kontraindikasjoner	9
Cybersikkerhet	9
Kompatibilitet	9
Interoperabilitet	10
Tiltenkt levetid	10
Ytelseskrav og begrensninger	10
Kliniske fordeler og uønskede bivirkninger	10
Fasiliteter og opplæring	10
Merknad om alvorlige hendelser	10
Profesjonell bruk	10
Systemkrav	10
Installasjon av programvaren	10
Håndteringsinstruksjoner	10
Advarsler, forsiktighetsregler og forholdsregler	11
Advarsler	11
SmartFusion™-initialiseringsadvarsler	11
Skanningsadvarsler	11
Maladvarsler	12
Kliniske advarsler – generelt	12
Kliniske advarsler – implantat	12
Konfigurerbare advarsler	12
Advarsel mellom implantater og nerver	13
Advarsel mellom implantater og tannrøtter	13
Forsiktighetsregler/forholdsregler	13

Systemkrav	15
Operativsystemer	15
Krav	15
Start	16
Behandlingsmodellen	16
Åpne DTX Studio Implant	16
Grunnleggende handlinger relatert til pasientfiler	16
Opprette en ny pasientfil	16
Åpne en eksisterende pasientfil	16
Åpne en behandlingsplan	16
Lagre en behandlingsplan	16
Kopiere en behandlingsplan	16
Gi nytt navn til eller slette en behandlingsplan	17
Lukke en behandlingsplan	17
Lukke en pasientfil	17
Identifikasjon av bruker	18
Logge på	18
Tofaktoraутentisering	18
Veksle mellom brukere	18
Administrere kontodetaljer	18
Praksisoppsett	19
Installere praksisoppsett	19
Administrere kontoer	19
Legge til brukere	19
Programvareoversikt	20
Arbeidsområde-system	21
Hva er et arbeidsområde?	21
Verktøylinje	21
Arbeide interaktivt med visningsfeltene	22
Endre objekter	22
Vise eller skjule et objekt	22
Endre et CT-snitt	23
Bla gjennom CT-bilder	23
Nivå og vindu	23
Nivå/vindu i 2D	23
Nivå/vindu i 3D	23

Pasientmodell	24
Opprette en pasientmodell i 3D	24
Opprett en pasientmodell	24
Redigere formen på nytt snitt-kurven	24
Justere formen på nytt snitt-kurven	24
Flytte de eksisterende kontrollpunktene	24
Bruke tannkontrollpunkter	25
Juster størrelsen på det nye tverrsnittet	25
Visualisering av pasientmodellen	25
Hva er en overføringsfunksjon?	25
Slik rydder du opp i visualiseringen av pasientmodellen	26
Bruke pasientmasken	26
Slett benartefakter	26
Deaktiver maske	27
Tilbakestill pasientmaske	27
Behold den største delen	27
Protetikkinformasjon	28
Diagnostisk oppsett	28
Tannskanning	28
Skanning av tannmodellen	28
Bestille en skanning av tannmodellen	28
Intraoral skanning eller annen bordskanning	28
SmartFusion™	29
Legge til tannskanningen i pasientmodellen	29
Initialisering av SmartFusion™	31
Initialiseringsprosedyre	31
Starte initialiseringsveiviseren	31
Angi korresponderende punkter i initialiseringsveiviseren	32
Sett inn et punkt	32
Fjerne utvalgte punkter	32
Fjern alle punkter	33
SmartFusion™-initialiseringsadvarsler	33
Ansiktsskanning	33
Legge til en ansiktsskanning i pasientmodellen	33
Trimme ansiktsskanninger	34
SmartSetup™	34
Beregne en SmartSetup™	34
Justere SmartSetup™-innstillinger	35
Redigere en SmartSetup™	36

Radiografisk guide-modell	36
Opprette en radiografisk guide-modell	36
Intaglio-overflate	36
Diagnose	37
Nerver	37
Tenner	37
Fjerne tennene fra modellen	37
Trekk fra alle tenner samtidig	37
Fjern Singel Tann	38
Målinger	38
Planlegge implantater	39
Arbeide med implantater fra andre produsenter enn Nobel Biocare	39
Legge til implantater i en behandlingsplan	39
Legge til et implantat i en behandlingsplan	39
Hva betyr den gule sonen?	40
Tannposisjon	40
Tannkart	40
Endre et implantat	40
Endre retning for implantatet	40
Flytte et implantat	41
Plasser ett implantat parallelt med et annet	41
Plassere alle implantater parallelt	41
Abutment	41
Velge en egnet distanse for et implantat	41
Angi kirurgitype	42
Ulike kirurgityper	42
Pilothylse-offset	43
Angi pilothylse-offset	43
Angi pilothylserotasjon	43
Benskjæringsplan	43
Festepinner	44
Legge til en festepinne i behandlingsplanen	44
Riktig helling og dybde på festepinner	44
Festepinner og radiografisk guide (arbeidsflyt ved tannløse kjeve)	45
Festepinner og tannskanninger (arbeidsflyt ved delvis tannløse kjeve)	46

Inspisere en behandlingsplan	47
Arbeide med festefunksjonalitet	47
Feste det nye tverrsnittet til et implantat eller en festepinne	47
Hopp til et annet implantat eller en annen festepinne	47
Gå tilbake til kurve-modus	47
 Inspisere en behandlingsplan	 48
Opprette en kirurgisk mal	48
Opprette en kirurgisk mal i samsvar med behandlingsplanen	48
Inspiser den kirurgiske malen	48
Redigere den virtuelle kirurgiske malen	49
Godkjenne en behandlingsplan	49
 Bestillinger	 50
Arbeide med kontakter	50
Legge til en kontakt	50
Godta en kontakt	50
Arbeide med produktbestillinger	51
Opprette en produktbestilling	51
Sende en produktbestilling	51
Arbeide med modellskanningsbestillinger	52
Opprette en modellskanningsbestilling	52
Arbeide med TempShell-bestillinger	52
TempShell-arbeidsflyten	52
Opprette en LabDesign-forespørsel	53
Opprette en TempShell-bestilling	53
Legge til en LabDesign i behandlingsplanen	53
Legge til et TempShell i behandlingsplanen	54
Arbeid med serviceforespørsler	54
Vanlig arbeidsflyt for serviceforespørsler via DTX Studio Go	54
Respondere på en serviceforespørsel	54
Arbeidsflyt for lokale serviceforespørsler	55
Eksportere en godkjent plan	55
 Arbeide med Assistent	 56

DTX Studio Implant Varslingssystem	57
Advarsler i DTX Studio Implant	57
Maladvarsler	58
Kliniske advarsler	59
Generelle advarsler	59
Implantatvarsler	60
Konfigurerbare advarsler	60
Tekniske begrensninger	61
Minimumsavstand mellom guidede hylser	61
Minimumsavstand mellom hylser og implantater / hylser og festepinner	61
Kollisjon mellom implantater, festepinner eller implantater og festepinner	61
Forholdet mellom guidet hylse og radiografisk guide og/eller tannskanning	62
Forholdet mellom den guidede hylsen og benet	63
Radiografisk guide ble opprettet uten en kalibrert iso-verdi.	63
Drøfte behandlingsplanen	64
Rapporter	64
Opprette en rapport	64
Skrive ut en rapport	64
Visningsfiler	65
Opprette en visningsfil	65
Åpne en visningsfil via DTX Studio Implant	65
Åpne en visningsfil via nedlastingslenken	65
Communicator-presentasjoner	66
Opprette en Communicator-presentasjon	66
Eksportere en behandlingsplan for konsultasjon eller kirurgi	67
Eksport til DTX Studio Clinic	67
Eksportere behandlingsplan for visualisering i andre programvareprodukter (åpen eksport):	67
Kirurgisk plan i X-Guide™	68
Opprette en kirurgisk plan i X-Guide™	68
Eksportere en kirurgisk plan fra X-Guide™	68
Kirurgisk plan i OsseoCare™ Pro	69
Opprette en kirurgisk plan i OsseoCare™ Pro	69
Skannerkalibrering	70
Opprett nytt kalibreringssett	70
Teknisk støtte	71

Innledning

Ansvarsfraskrivelse

Dette produktet er en del av en helhetlig modell og kan bare brukes sammen med de tilhørende originalproduktene i henhold til instruksjonene og anbefalingene fra Nobel Biocare. Ikke-anbefalt bruk av produkter laget av tredjeparter sammen med Nobel Biocare-produkter vil ugyldiggjøre enhver garanti eller annen forpliktelse som uttrykkelig eller underforstått er gitt av Nobel Biocare. Enhver som bruker produkter fra Nobel Biocare er forpliktet til å avgjøre om et produkt er egnet eller ikke for bruk til en bestemt pasient under de aktuelle omstendighetene. Nobel Biocare frasier seg ethvert ansvar, uttrykkelig eller underforstått, og skal ikke være ansvarlig for eventuelle direkte skader eller følgeskader, strafferettslige skader eller andre skader, som oppstår som følge av eller i forbindelse med eventuelle feil i faglig vurdering eller praksis ved bruk av Nobel Biocare-produkter. Brukeren er også forpliktet til å holde god oversikt over eventuelle oppdateringer av dette Nobel Biocare-produktet og dets bruksområde. I tilstilfeller skal brukeren kontakte Nobel Biocare. Ettersom bruken av dette produktet er underlagt brukerens kontroll, er det hans/hennes ansvar. Nobel Biocare påtar seg intet ansvar for skader som oppstår i tilknytning til dette. Vær oppmerksom på at enkelte produkter som er beskrevet i denne bruksanvisningen, kanskje ikke er klarert av tilsynsmyndigheter, markedsført eller lisensiert for salg i alle markeder.

Les gjennom denne bruksanvisningen før DTX Studio Implant tas i bruk, og oppbevar den for å kunne slå opp i den senere.

Vær oppmerksom på at informasjonen i dette dokumentet skal hjelpe deg med å komme i gang.

Beskrivelse av enheten

DTX Studio Implant er programvare til klinisk bruk som skal gi støtte ved bildebaserte diagnostikkprosesser og planlegging av dentale, craniomaxillofaciale og relaterte behandlinger.

For å støtte diagnostikk- og behandlingsplanleggingsprosesser for dentale, craniomaxillofaciale og relaterte behandlinger tilbyr DTX Studio Implant en visualiseringsteknikk for

(CB)CT-bilder av pasienten, til bruk i den diagnostiske prosessen og i prosessen for behandlingsplanlegging. 2D-bildedata som fotografiske bilder og røntgenbilder eller overflateskanninger av den intraorale situasjonen kan også visualiseres for å sette sammen diagnostiske bildedata. Protetikkinformasjon kan tilføyes og visualiseres som en støtte ved protetisk implantatplanlegging. Operasjonsplanen, inkludert implantatposisjonene og den protetiske informasjonen, kan eksporteres for å designe tannkonstruksjoner i DTX Studio Lab.

DTX Studio Implant støtter den kliniske modellen fra NobelGuide® for oral rehabilitering basert på tannimplantater. Den er en del av hele systemet for guidet kirurgi ("NobelGuide®-modellen") for behandling av fullstendig og delvis tannløse kjever, inkludert singel-ledd-kasus.

DTX Studio Implant-brukere kan velge å abonnere på regelmessige opplærings- og utdanningsøkter for å mestre planleggingsprogramvaren. Hvis du ønsker mer informasjon kan du ta en kikk på kursene som er tilgjengelige via nettstedet til Nobel Biocare på www.nobelbiocare.com.

Tiltenkt formål

Programvarens tiltenkte formål er å støtte den diagnostiske prosessen og planlegging av dentale og craniomaxillofaciale behandlinger.

Tiltenkt bruk / indikasjoner for bruk

DTX Studio Implant er et programvaregrensesnitt for overføring og visualisering av 2D- og 3D-bildeinformasjon fra utstyr som CT-skannere, med det formål å støtte diagnostiske prosesser, behandlingsplanlegging og oppfølging innen det dentale og craniomaxillofaciale området.

DTX Studio Implant kan brukes som støtte for guidet implantatkirurgi og til å gi designinnspill til, og en gjennomgang av, dentale konstruksjonsløsninger. Resultatene kan eksporteres for produksjon.

Tiltenkt bruker og tiltenkt pasientmålgruppe

DTX Studio Implant brukes av et tverrfaglig behandlingsteam for støtte til pasienter som gjennomgår dentale, craniomaxillofaciale og relaterte behandlinger.

Tiltenkt for pasienter som får tannbehandling.

Påkrevd kompatibilitet med annet utstyr

- DTX Studio Implant Viewer-programvare
- NobelClinician Communicator iPad-app
- OsseoCare™ Pro iPad-app
- DTX Studio Lab
- DTX Studio Implant må være kompatibel med de mest brukte operativsystemene, Windows og Mac, inkludert de nyeste versjonene av disse.
- X-Guide™ – 3D-navigasjonssystem (X-Nav Technologies, LLC)
- DTX Studio Clinic
- NobelGuide®-modell og kirurgiske maler
- Nobel Biocare-implanter og standarddistanser
- For import av overflatedata i DTX Studio Implant: Overflateskanning innhentet med NobelProcera® 2G-skanner, Kavo LS 3-skanner. Kryptert format (*.nxa)
- Tredjepartsimplantater for behandlingsplanlegging og guidet kirurgi – bare pilotboring.
- DICOM-import (fra (CB)CT-skannere) og STL/PLY-import (fra bord- eller intraorale skannere).
- DTX Studio Implant må være kompatibel med nettportalen – DTX Studio Go.

Enheter med målefunksjon

Målenøyaktigheten avhenger av bildedataene, skannerens maskinvare, kalibrering og bildetakingsinnstillinger. Målingen kan ikke være mer nøyaktig enn oppløsningen til bildet. DTX Studio Implant-programvaren rapporterer verdien, avrundet til ett siffer etter desimaltegnet, basert på brukervalgte punkter.

Kontraindikasjoner

Ingen identifisert for DTX Studio Implant.

Cybersikkerhet

Det anbefales i tillegg at aktivert og oppdatert antivirusprogramvare og beskyttelse mot skadelig programvare, samt en riktig konfigurert brannmur, er installert på datamaskinen der DTX Studio Implant skal brukes.

Dessuten skal datamaskinen din alltid være låst når den er uten tilsyn. Unnlattelse av å gjøre dette kan føre til utilsiktet håndtering av diagnosen og planlegging eller behandling.

Kompatibilitet

DTX Studio Implant er ikke forbundet med annet medisinsk utstyr. Programvaren er kompatibel med tidligere versjoner av DTX Studio Implant.

Interoperabilitet

DTX Studio Implant er interoperabelt med DTX Studio Clinic og DTX Studio Lab.

Tiltenkt levetid

For programvare er den tiltenkte levetiden tre år. Brukt på støttede operativsystemer vil den fungere i henhold til tiltenkt bruk.

Ytelseskrav og begrensninger

DTX Studio Implant er avhengig av operativsystemene det brukes med. Det er derfor viktig å passe på at DTX Studio Implant bare brukes med godkjente operativsystemer. Du finner mer informasjon om hvilke operativsystemer som er godkjent, i 'Systemkrav' på side 15.

Kliniske fordeler og uønskede bivirkninger

DTX Studio Implant er en komponent av behandling med et tannimplantatsystem og/eller kroner og broer. Som en klinisk behandlingsfordel kan pasientene vente å få sine manglende tenner erstattet og/eller kroner restaurert.

Ingen kjente bivirkninger.

Fasiliteter og opplæring

Det anbefales på det sterkeste at klinikere, nye så vel som erfarne brukere av programvaren vår, leser bruksanvisningen før de bruker programvaren for første gang. Et bredt spekter av kurs for ulike nivåer av kunnskap og erfaring kan gis på forespørsel.

Du kan finne mer informasjon ved å besøke vårt opplæringsnettsted på tw.dtxstudio.com.

Merknad om alvorlige hendelser

Hvis det har skjedd en alvorlig hendelse under bruk av denne enheten eller som et resultat av bruken av den, må du rapportere hendelsen til produsenten og den ansvarlige nasjonale myndigheten. Alvorlige hendelser kan rapporteres til produsenten av utstyret ved hjelp av følgende kontaktinformasjon:

Nobel Biocare AB

<https://www.nobelbiocare.com/complaint-form>

Profesjonell bruk

DTX Studio Implant er kun til profesjonell bruk.

Systemkrav

Vi anbefaler å kontrollere 'Systemkrav' på side 15 før installasjon av programvaren startes. Kontakt kundestøtte for informasjon om minimum og/eller anbefalte krav. Nye versjoner av programvaren kan ha høyere krav til maskinvare eller operativsystem.

Installasjon av programvaren

Kontakt autorisert tekniker eller kundestøtte for informasjon om hvordan du installerer programvaren.

Håndteringsinstruksjoner

For detaljert informasjon om hvordan du bruker programvaren, se de detaljerte instruksjonene videre i denne bruksanvisningen.

Advarsler, forsiktighetsregler og forholdsregler

Advarsler

Følgende advarsler vises i programvaren.



- Dette planleggingsprogrammet kontrollerer ikke automatisk alle tekniske begrensninger! I enkelte tilfeller lar det seg kanskje ikke gjøre å fremstille de kirurgiske malene, selv om programvaren ikke automatisk identifiserer noen tekniske begrensninger.
- Brukeren må være fortrolig med tolkningen av CT-data og hvordan CT-data visualiseres ved hjelp av volumjengivelse.
- Feilaktig innretting av CBCT-skanningen og overflateskanningen vil føre til at den kirurgiske malen blir feil, slik at den ikke kan brukes under inngrepet.
- Vær klar over at det kan være forskjeller i visualisering av data (f.eks. orientering av visningsfelt, objektfarger) og advarsler mellom DTX Studio Implant og X-Guide™-programvaren.
- DTX Studio Implant støtter kun et utvalg av implantater som skal eksporteres til X-Guide™. Ikke-støttede implantater vil ikke være inkludert i X-Guide™-filen.



SmartFusion™-initialiseringsadvarsler

- Innretting av tannskanning justeres manuelt.

Innrettingen mellom pasientmodellen og tannskanningen er justert manuelt. Dobbeltsjekk at tannskanningen er riktig innrettet etter (CB)CT-skanningen, ettersom avvik vil introdusere feil ved riktig posisjonering av implantatene.
- Ett eller flere punktpar samsvarer ikke.
- De definerte punktene er ikke godt nok spredt over tannskanningen.
- Indiker minst tre korresponderende punkter.
- Kontroller innrettingen av tannskanningen og pasientmodellen. Hvis den er feil eller usikker, må den beregnes på nytt i Rediger tannskanning-veiviseren.



Skanningsadvarsler

Det vil ikke være mulig å laste inn ugyldige DICOM-sett. DICOM-sett kan være ugyldige på grunn av ett av følgende

- DICOM-settet har mindre enn to snitt.
- DICOM-settet har en snittøkning på null.
- DICOM-settet har inkonsekvente snittøkninger.
- DICOM-settet har ingen bildeorientering.
- DICOM-settet har feil bildeorientering.
- DICOM-settets snittykkelse er for stor.
- DICOM-settet har en helning for gantry-detektor.
- Snittøkningen for DICOM-settet er for stor (DICOM-settet kan brukes, men på egen klinisk risiko).



Maladvarsler

- Hylser kolliderer.*
- Implantat og hylse kolliderer.
- Festepinne og hylse kolliderer.
- Merket tann og hylse kolliderer.
- Festepinnehylse er for nær tannskanningen.
- Pilothylse er for nær tannskanningen.*
- Fullstendig guidet hylse er for nær en tannskanning.

* Den kirurgiske malen kan ikke produseres før denne advarselen er løst.



Kliniske advarsler – generelt

- Ingen festepinner er planlagt.
- Festepinner kolliderer.
- Radiografisk guide ble ikke kalibrert.
- Behandling planlagt med ikke-installerte produkter.*
- Lavkvalitets visualisering aktivert.**
- Innretting av tannskanning justeres manuelt.
- SmartFusion-innretting mislyktes.*
- Bekreft SmartFusion-oppretting

* Den kirurgiske malen kan ikke produseres før denne advarselen er løst.

** Ved visning med lavkvalitets visualisering økes risikoen for at enkelte anatomiske funksjoner ikke vil være synlige i pasientmodellen. Denne innstillingen virker kun inn på kvaliteten i 3D-volumet. Nye CT-snitt påvirkes ikke.



Kliniske advarsler – implantat

Viktig

Verdiene som skal utløse implantat-advarslene må angis i henhold til brukerens kliniske kompetanse og erfaring.

- Implantater kolliderer.
- Implantater og festepinne kolliderer.
- Implantat er for nært en merket nerve.*
- Implantat er for nært en merket tann.*
- DTX Studio Implant støtter kun et utvalg av implantater som skal eksporteres til X-Guide. Ikke-støttede implantater vil ikke være inkludert i X-Guide-filen.

* Disse advarslene kan konfigureres



Konfigurerbare advarsler

De konfigurerbare advarslene baserer seg på et volum rundt implantatet (dvs. et advarselsvolum). Når dette volumet kolliderer med en merket anatomisk struktur, utløses det en advarsel.

Advarselsvolumet angis på bakgrunn av en avstand som er innstilt på forhånd. Denne avstanden settes som standard til 1.5 mm, minimumsavstanden. Med denne minimumsavstanden, er advarselsvolumet sammenfallende med den gule sonen (som representerer en avstand på 1.5 mm rundt implantatet og en avstand på 2×1.5 mm (3.0 mm) ved apeks). Advarselsvolumet kan økes. Som vist i bildet (for en avstand på f.eks. 4.0 mm) skaleres advarselsvolumet tilsvarende.



Advarsel mellom implantater og nerver

Når et implantat plasseres for nær en merket nerve (dvs. når advarselsvolumet kolliderer med visualiseringen av den merkede nerven), utløses det en advarsel. Det berørte implantatet vises (hvis det ikke var synlig allerede) og blir oransje.

Advarsel mellom implantater og tannrøtter

Når et implantat plasseres for nær en tannrot (dvs. når advarselsvolumet kolliderer med visualiseringen av den merkede tannen), utløses det en advarsel. Implantatet vises og blir oransje.

Notat

Minimumsavstanden for advarselsvolumet skal angis via DTX Studio Implant > Generelle innstillinger. Verdiene lagres på datamaskinen du arbeider på. Når du åpner behandlingsplanen på en annen datamaskin enn den du brukte da du opprettet planen, er advarslene som vises i tråd med innstillingene på datamaskinen du bruker for øyeblikket. Dette kan føre til ulike advarsler, basert på innstillingene på datamaskinen. De konfigurerbare verdiene kan justeres i innstillingene, og verdiene vises i advarselsoversikten når det utløses en advarsel.

Forsiktighetsregler/forholdsregler



- Det er sterkt anbefalt at nye så vel som erfarne brukere av tannimplantater, protetik og tilhørende programvare, alltid går igjennom spesialtrening før de begynner en ny behandlingsmetode. Nobel Biocare tilbyr et stort utvalg kurs for ulike kunnskaps- og erfaringsnivåer. Du kan finne mer informasjon på www.nobelbiocare.com.
- Når man bruker nytt utstyr eller en ny behandlingsmetode for første gang, kan man unngå mulige komplikasjoner ved å arbeide sammen med en kollega som har erfaring i bruken av dette utstyret eller behandlingsmetoden. Nobel Biocare har et verdensomspennende nettverk av mentorer som er tilgjengelige for dette formålet.
- Det kan ikke garanteres at implantatet har en suksessrate på hundre prosent. Særlig kan manglende overholdelse av produktets indikasjoner for bruk og kirurgiske eller håndteringsmessige prosedyrer resultere i feil. Når det gjelder pediatriske pasienter, anbefales det ikke å utføre rutinebehandling før slutten av vekstfasen for kjevebenet er godt dokumentert.
- Et underskudd på hardt vev eller bløtvev før operasjonen kan forårsake et dårligere estetisk resultat eller en ugunstig vinkling av implantatet. Det anbefales sterkt at NobelGuide® kirurgiske maler og duplikatproteser bare brukes sammen med egnede Nobel Biocare-implantater, kirurgiske instrumenter og protetikkomponenter, da det å kombinere komponenter som ikke er beregnet på å bli brukt sammen, kan føre til mekanisk svikt og/eller instrumentfeil, skade på vev eller utilfredsstillende estetiske resultater.
- Før det planlegges noen form for ekstraoral kirurgisk behandling, det vil si en craniomaxillofacial behandling hvor tannimplantater benyttes utenfor det dentale eller zygomatiske området, har brukeren ansvaret for å avgjøre om et implantat er beregnet for ekstraoral bruk eller ikke.
- Det anbefales i tillegg at aktivert og oppdatert antivirusprogramvare og beskyttelse mot skadelig programvare, samt en riktig konfigurert brannmur, er installert på datamaskinen der DTX Studio Implant (NobelClinician®) skal brukes.
- I USA og enkelte andre markeder er den fysiske kirurgiske malen for plassering av endossøse tannimplantater en medisinsk enhet. Ta kontakt med det lokale tilsynsorganet for å få informasjon om forskrifter og krav knyttet til produksjonen av disse kirurgiske malene.



- Når det utløses advarsler på grunn av sylinderformene, er disse advarslene kalkulert ut fra et estimat av produktformen.
- Mangel på kunnskap om og forståelse av programvaren kan føre til forsinkelse eller endring av tidsplanen for diagnose og planlegging eller selve behandlingen eller kan føre til en feilaktig behandlingsplan.
- Når du bruker diagnose- og planleggingsverktøyene i programvaren, er det viktig å være ekstra oppmerksom på:
 - at dannede indikasjoner er korrekte (visualiseringer, målinger, kritiske strukturer, importerte data, implantatplanlegging).
 - riktigheten av resultatet av de automatiserte funksjonene (justering av tannskanninger, virtuell oppstilling ...)
 - den utformede kirurgiske malen stl-filer og deres optimale tilpasning til pasientens munn i henhold til den utarbeidede planen.
 - at data er oppdatert og ikke foreldet.

Unnlatelse av å gjøre dette vil øke risikoen for at diagnose, planlegging eller behandling må revideres, noe som deretter kan føre til forsinkelse eller omlegging av tidsplanen for diagnose og planlegging eller selve behandlingen eller kan føre til en feilaktig behandlingsplan.

- Det anbefales å være ekstra oppmerksom ved lasting av pasientdata. Feil og ufullstendig data kan føre til en feilaktig behandlingsplan.
- Når en rapport eller pasientdata hentes ut fra programvaren, er det viktig å vite at ikke-anonymiserte pasientdata kan brukes til uriktige formål uten pasientens samtykke.
- Det anbefales å være ekstra oppmerksom på representasjonsmodusen og retningsmarkeringene i visningsfeltene. En feilaktig pasientorientering eller representasjon kan føre til en feilaktig behandlingsplan.
- Etter oppdatering av programvareversjonen anbefales det å verifisere de kritiske innstillingene for de åpne pasientkasusene og/eller behandlingsplanen for å sikre at disse innstillingene er riktige i den nye programvareversjonen. Feil innstillinger kan føre til forsinkelse eller endring av tidspunkt for en diagnose og planlegging eller selve behandlingen eller kan føre til en feilaktig behandlingsplan.
- Det anbefales i tillegg at aktivert og oppdatert antivirusprogramvare og beskyttelse mot skadelig programvare, samt en riktig konfigurert brannmur, er installert på datamaskinen der DTX Studio Implant skal brukes. Videre må du alltid låse datamaskinen når den er uten tilsyn. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til utilsiktet håndtering av diagnosen og planlegging eller behandling.
- Det anbefales å være ekstra oppmerksom på den opprettede implantatplanen og plasseringen av implantatene i forhold til hverandre og andre importerte anatomiske strukturer. Ekstra oppmerksomhet bør også rettes mot advarselssignalene i programvaren. Kontroller dessuten alltid at riktig implantatplan ble valgt for eksport, og at den eksporterte implantatplanen inneholder all nødvendig informasjon for implantatkirurgi. Unnlatelse av å gjøre dette vil øke risikoen for at diagnose, planlegging eller behandling må revideres, noe som deretter kan føre til forsinkelse eller omlegging av tidsplanen for diagnose og planlegging eller selve behandlingen eller kan føre til en feilaktig behandlingsplan.

Systemkrav

Operativsystemer

- Windows® 11 eller 10 64-biters (Pro og Enterprise-utgave) på PC eller notebook.
- macOS Sequoia (15), Sonoma (14), Ventura (13) eller Monterey (12) (Intel-basert Mac og Apple Silicon Mac med M1 Chip eller høyere) på iMac, Mac Mini, Mac Pro, MacBook Pro, MacBook Air-enheter.

Notat

Grafikkortene til enkelte MacBook Air®- og Mac® Mini-konfigurasjoner har begrensninger med hensyn til volumgjengivelse. Vurder å velge volumgjengivelse med lav oppløsning.

Krav

CPU	Dual-core / 3 GHz klokkefrekvens
RAM	8 GB
Grafikkort	Dedikert tilleggsgrafikkort med optimal 3D-støtte (OpenGL 3.3) og 2 GB minne eller mer (for eksempel AMD eller NVIDIA). For 4K-skjermer: 4 GB minne eller mer. 6. generasjon Intel® CPU-er eller nyere er støttet (med innebygd 9. generasjon GPU eller nyere) Gå til http://realtech-vr.com/admin/glview for å sjekke OpenGL®-versjonen for grafikkortet.
Diskplass	5 GB ledig diskplass
Nettverk	Bredbåndstilkobling til Internett med hastighet på 3 Mbps for opplasting og 30 Mbps for nedlasting.
Skjerm	Full HD (1920 × 1080) eller høyere.

Start

Behandlingsmodellen

En **behandling** omfatter alle **behandlingsplanene** knyttet til en pasient. En ny behandling kan startes opp når man oppretter en ny pasient eller under arbeidet med en eksisterende pasient. Du kan for eksempel opprette egne behandlinger for overkjeven og underkjeven.

En **behandlingsplan** inneholder den grunnleggende pasientmodellen, tannskanningen, oppvoksingen og/eller en radiografisk guide, i tillegg til alle produktene i den gjeldende scenekonfigurasjonen for en bestemt pasient.

Åpne DTX Studio Implant

Du åpner DTX Studio Implant ved å dobbeltklikke på snarveisikonet  på skrivebordet. Programvaren åpnes i Office-modulen, hvor du kan logge på og begynne å arbeide med pasientfiler.

Grunnleggende handlinger relatert til pasientfiler

Notat

Logg på DTX Studio Implant for å begynne å arbeide med pasientfiler.

Opprette en ny pasientfil

Klikk på **Nytt**  i **Pasientjournaler**-fanen på verktøylinjen for å opprette en ny pasientfil. I dialogboksen **Ny pasient** velger du å opprette en 3D-pasientmodell, bestille en skanning av en tannmodell eller angi pasientinformasjon.

Åpne en eksisterende pasientfil

Dobbelklikk på et pasientnavn i listen for å åpne en pasientfil. Dialogboksen **Pasientjournal** vises. Her avgjør du om du vil gå til modulen for å opprette en 3D-plan, skrive inn pasientinformasjon, bestille produkter eller drøfte en behandlingsplan.

Åpne en behandlingsplan

Når en bestemt pasientfil er åpnet, og du ønsker å åpne en behandlingsplan for pasienten, klikker du på **DTX Studio Implant**-fanen på verktøylinjen og klikker på **Åpne** . Når **Planleggingsoversikt**-vinduet vises, velger du behandlingsplanen og klikker på **Åpne scenario**.

Lagre en behandlingsplan

For å lagre en behandlingsplan bruker du **Lagre**  på **DTX Studio Implant**-fanen eller trykker på [CTRL + S].

Kopiere en behandlingsplan

Hvis du vil lagre en kopi av behandlingen, f.eks. for å opprette en behandling for den motstående kjeven med en kopi av dataene, velger du **Lagre som** på **DTX Studio Implant**-fanen og velger **Ny behandling** .

Gi nytt navn til eller slette en behandlingsplan

For å gi nytt navn til eller slette en behandlingsplan bruker du alternativet [Administrer](#) på [DTX Studio Implant](#)-fanen. Dette er kun mulig når bestemte vilkår overholdes.

Lukke en behandlingsplan

For å lukke en behandlingsplan klikker du på [DTX Studio Implant](#)-fanen på verktøylinjen og klikker på [Lukk planlegging](#) 🗑️. Behandlingsplanen lukkes og dialogboksen [Planleggingsoversikt](#) vises.

Lukke en pasientfil

Du kan lukke en pasientfil ved å klikke på [DTX Studio Implant](#)-fanen på verktøylinjen og velge [Lukk pasienten](#) i menyen. Når dialogboksen [Pasientjournal](#) vises, klikker du på [Lukk pasienten](#). Hvis noen ulagrede endringer er tilgjengelige i pasientfilen, ber systemet om innspill på hva som skal gjøres: [Lagre](#), [Ikke lagre](#) eller [Avbryt](#) lukking av pasientfilen.

Identifikasjon av bruker

Flere brukere kan ha tilgang til datamaskinen med DTX Studio Implant. For å sikre at bare autoriserte brukere kan logge på og bruke DTX Studio Implant er det nødvendig med egnet brukeridentifikasjon. Programvaren anvender de riktige brukerinnstillingene og personvernregler for pasienten. Det kan opprettes tofaktorautentisering via DTX Studio Go for å øke sikkerheten ytterligere.

Logge på

1. Dobbelklikk på skrivebordsikonet  for å åpne programvaren.
2. Velg brukeren.
3. Angi tilhørende passord.
4. Klikk på [Logg inn](#).

Når du logger på for første gang, må du angi passordet du mottok i registrerings-e-posten. Endre passordet slik du blir bedt om. Passordet skal være så sikkert og sterkt som mulig, og ikke inneholde åpenbare formuleringer (unngå for eksempel enhver henvisning til personlige opplysninger, som fødselsdato osv.).

Hvis du velger [Automatisk innlogging](#), vises ikke påloggingsdialogboksen for DTX Studio Implant lenger på datamaskinen som brukes.

Tofaktorautentisering

Hvis tofaktorautentisering ble konfigurert i DTX Studio Go, må du oppgi et passord og en sekssifret bekreftelseskode for å logge på. Du vil bli bedt om å angi en ny sekssifret bekreftelseskode hver 30. dag.

Veksle mellom brukere

I DTX Studio Implant kan du veksle mellom brukere ved å klikke på [Bytt konto](#) i [DTX Studio Implant](#)-menyen i [Kontor](#)-modulen.

Administrere kontodetaljer

Hvis du vil vise lisensen eller kontodetaljene, redigere detaljer eller endre et passord, administrere kontakter eller tillatelser innenfor en praksis, åpner du dialogboksen [Administrer konto](#):

1. Klikk på [DTX Studio Implant](#)-fanen i [Kontor](#)-modulen.
2. Velg [Administrer konto](#).
3. Tilgjengelig informasjon vises i dialogboksen [Administrer konto](#).

Praksisoppsett

Praksisoppsett-versjonen av DTX Studio Implant muliggjør flere installasjoner og pålogging for flere brukere i en tannlegepraksis. Pasientfiler kan lagres sentralt i en delt nettverksmappe, med enkel tilgang til disse filene fra ulike plasseringer.

Installere praksisoppsett

Kontakt kundestøtte for anvisninger om hvordan du installerer og registrerer DTX Studio Implant.

Administrere kontoer

Når du skal administrere brukerkontoene som er tilgjengelige i praksisen og konfigurere de tilhørende brukertillatelsene, åpner du dialogboksen [Administrere kontoer](#) med alternativet [Administrer konto](#) i [DTX Studio Implant](#)-menyen.


Legge til brukere

Kontakt Nobel Biocares kundeservice eller brukerstøtte lokalt hvis du ønsker å legge til nye brukere.

OBSOLETE

Programvareoversikt

Hovedkomponentene i det grafiske brukergrensesnittet vises i bildet nedenfor.

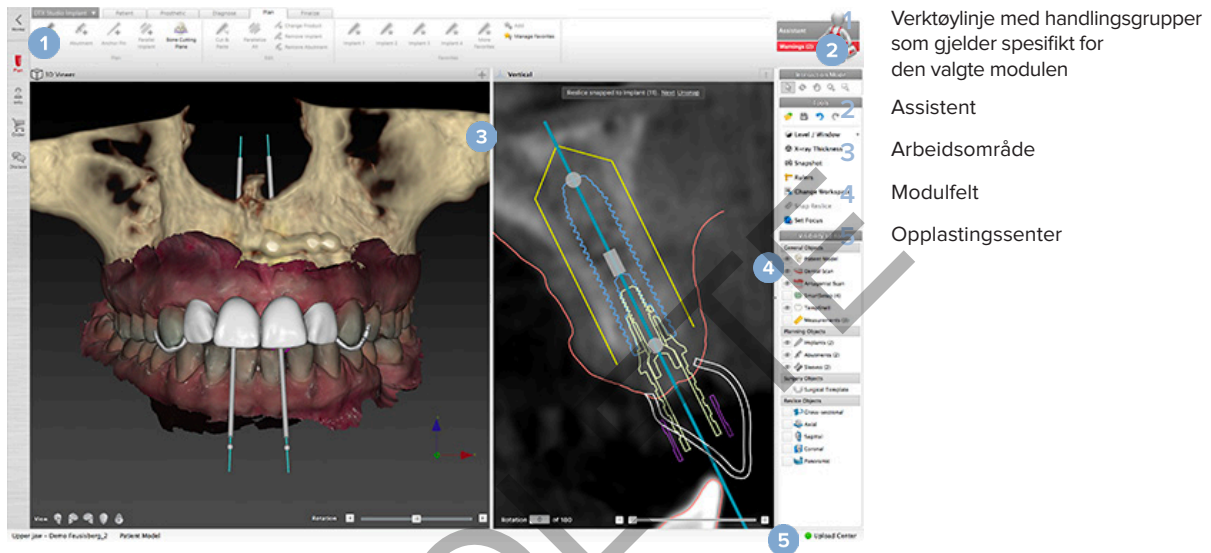

Klikk på ikonene i modulfeltet for å navigere gjennom de ulike DTX Studio Implant-modulene:

Modul	Beskrivelse
 Home	Forside / Kontor -modulen for å administrere pasienter og kalibreringssett.
 Plan	3D-planlegging -modulen hvor du kan importere DICOM-filer, opprette pasient- og guidemodeller, diagnose og plan.
 Info	Pasientinfo -modulen hvor du kan lagre pasientinformasjon og administrere kliniske bilder i pasientbiblioteket .
 Order	Bestillingsmodulen hvor du kan bestille skanninger av tannmodellen eller oppvokringen, TempShells eller den kirurgiske malen og dupliserte tannproteser sammen med standardkomponenter.
 Discuss	Diskuter -modulen hvor du kan legge til rette for å kommunisere med kollegaer og pasienter om en behandlingsplan – ved hjelp av visningsfiler, rapporter og/eller Communicator-presentasjoner – og koble til DTX Studio Implant og OsseoCare™ Pro under opprettelsen av OsseoCare™ Pro-inngrep.


Dobbeltklikk på en pasient i **Kontor** for å gå til en bestemt seksjon som er knyttet til denne pasienten. Klikk på **3D-planlegging** for å diagnostisere og planlegge en behandling.

Arbeidsområde-system

Når du planlegger i DTX Studio Implant, er det viktig å kunne vise pasientdata på ulike måter. Hvilken visning som er nødvendig, avhenger av hvilken informasjon brukeren trenger. De ulike måtene å visualisere dataene på, kalles arbeidsområder.

Hva er et arbeidsområde?

Et arbeidsområde er et oppsett med visningsfelt i 3D og 2D, sammen med redigeringsvinduer i sidefeltet på høyre side av skjermen. I et arbeidsområde kan du visualisere og arbeide interaktivt med 3D-objektene og/eller 2D-bilddataene. Veksle mellom de ulike visningsfeltoppsettene som er tilgjengelige i systemet, for å vise de preoperative bilddataene.

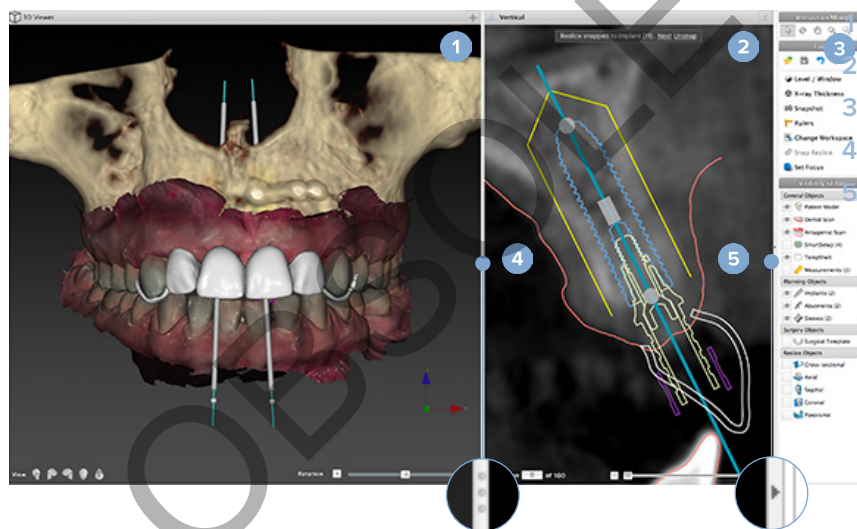

3D-visningsfelt

2D-visningsfelt


Sidefelt

Splitter

Skjul-knapp

Verktøylinje

Øverst i arbeidsområdet finnes en kontekstavhengig verktøylinje som gir tilgang de nødvendige verktøyene for ulike oppgaver. I planleggingsmodulen vises det egne faner når du velger bestemte objekter (f.eks. nye tverrsnitt, implantater osv.). Disse spesielle fanene – også kalt kontekstfaner – gir deg alternativ tilgang til handlinger som også er tilgjengelige via hurtigmenyer som åpnes når du høyreklikker på et objekt.

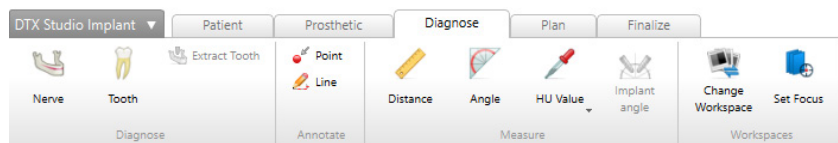

Arbeide interaktivt med visningsfeltene

Du kan velge blant ulike interaksjonsmoduser for å arbeide interaktivt med 3D-modeller. Veksle mellom interaksjonsmodusene ved å klikke på ikonene på interaksjonsverktøylinjen, bruke en [Interaksjon](#)-høyreklikkmeny eller ved hjelp av en hurtigtastkombinasjon.

	Interaktiv modus	Velg et objekt eller identifiser et objekt for en handling ved å trykke på venstre museknapp.
	Rotasjonsmodus	Roter 3D-bildet (bare 3D) ved å dra med musen.
	Panoreringsmodus	Panorer bildet ved å dra med musen.
	Zoommodus	Zoom inn eller ut ved å dra med musen.
	Zoomfeltmodus	Bruk zoom for å fokusere på et bestemt område i modellen, ved å tegne opp et rektangulært område (bare i 2D).

Veksle mellom ulike interaktive moduser ved hjelp av snarveiene:

Ctrl (Cmd) eller den midtre museknappen	Bytt til panoreringsmodus når du er i en annen modus. Så lenge knappen er trykket ned, opprettholdes panoreringsmodus. Slipp knappen for å gå tilbake til opprinnelige modus.
Alt	Bytt til rotasjonsmodus når du er i en annen modus. Så lenge knappen er trykket ned, opprettholdes rotasjonsmodus. Slipp knappen for å gå tilbake til opprinnelige modus.
Shift	Bytt til zoommodus når du er i en annen modus. Så lenge knappen er trykket ned, opprettholdes zoommodus. Slipp knappen for å gå tilbake til opprinnelige modus.
Tab-tast	Veksle mellom interaktiv modus og rotasjonsmodus.

Ulike standardvisninger er tilgjengelige i 3D-visningsfeltet. Klikk på ikonene for å gå til de korresponderende standardvisningene av modellen.

	Foran – Standard frontalvisning – hurtigtast [5]
	Venstre – Standard lateralvisning, venstre side – hurtigtast [1]
	Høyre – Standard lateralvisning, høyre side – hurtigtast [3]
	Øverst til nederst – Standard cranio-caudal-visning – hurtigtast [9]
	Nederst til øverst – Standard caudal-cranio-visning – hurtigtast [7]

Endre objekter

Velg et objekt ved å åpne interaktiv modus og klikk på objektet. I et 3D-visningsfelt angir en hvit konturlinje at objektet er valgt. I et 2D-visningsfelt har omrisset av det valgte objektet en farge.

Notat

Pasientmodellen er et unntak i dette tilfellet. Det vises ingen konturlinje når pasientmodellen er valgt.

Velg det nye tverrsnittet, et implantat eller en festepinne, og få tilgang til relaterte handlinger via den aktuelle verktøylinjekategorien.

Høyreklikk på et hvilket som helst objekt for å vise hurtigmenyen med mulige handlinger knyttet til dette objektet.


Vise eller skjule et objekt

For å kunne planlegge pasientens behandling på en effektiv måte, er det viktig å bare vise objekter av interesse i planleggingsfasen.

Et enkeltstående objekt kan skjules ved hjelp av høyreklikkmenyen eller hurtigtasten [H].

Ved hjelp av [Synlighetsredigering](#) kan standardobjektens synlighet endres med et enkelt museklikk.

Ulike synlighetsikoner er tilgjengelige for gruppeobjekter:

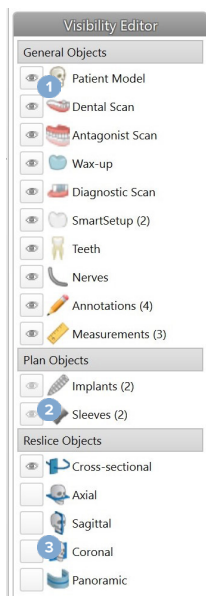

1 Når det svarte synlighetsikonet  vise foran gruppen, vises alle objektene som tilhører denne gruppen.

2 Når det grå synlighetsikonet  vises foran gruppen, er ett eller flere av objektene i gruppen skjult, mens andre fremdeles vises.

3 Når det ikke vises noe ikon  foran gruppen, er alle objektene i denne gruppen skjult.

Nivået endres ved å trykke på museknappen og bevege musen opp og ned. Vinduet oppdateres ved å trykke på museknappen og bevege musen mot venstre (smalere) og mot høyre (bredere).

Nivå/vindu i 3D

Når du arbeider i 3D-visning, brukes nivå/vindu-verktøyet til å kontrollere skaleringen eller sentreringen av overføringsfunksjonen, for å redusere mengden støy i pasientmodellen eller for å justere fargeinnstillingene. Disse justeringene kan forbedre visualiseringen av pasientmodellen.

Flytt sentrum av overføringsfunksjonen uten å påvirke bredden på området ved å trykke på museknappen og bevege musen opp eller ned. Trykk på museknappen og beveg musen mot venstre eller høyre over pasientmodellen for å henholdsvis øke eller redusere bredden på verdiområdet som benyttes for å generere pasientmodellen.

Endre et CT-snitt

Bla gjennom CT-bilder

DTX Studio Implant er utstyrt med en rekke verktøy, som for eksempel musehjulet, glidebryteren eller snittvisningsfeltet hvor du kan bla gjennom snittene.

Nivå og vindu

Bruk nivå/vindu-verktøyet i både 2D- og 3D-visningsfeltet til å endre nivået og vinduet for verdiene som brukes til å konvertere dataene til et bilde eller en modell. Resultatet varierer, avhengig av bildetype (2D eller 3D).

Nivå/vindu i 2D

Kontrasten i CT-snittene så vel som i panoramavisninger angis av verdiene for vindu og nivå. Nivå/vindu-innstillingen angir hvilke gråtoneverdier som vises på skjermen. Et utvalg sentrert rundt nivå-verdien, og med en bredde lik vindu-verdien (delt likt på begge sider av nivået), vises. Du kan endre kontrasten i CT-snittene ved å justere disse snittene.

Pasientmodell

Opprette en pasientmodell i 3D

Når du skal opprette en pasientmodell i 3D, er det viktig å velge de rette DICOM-filene, angi det best egnede volumet av interesse, indikere den optimale iso-verdien og velge riktig kjevetype. Systemet vil lede deg gjennom disse trinnene i Opprett pasient-veiviseren.

Opprett en pasientmodell

1. Åpne **Opprett pasient**-veiviseren ved hjelp av en av følgende handlinger:
 - Klikk på **Ny**  i **Pasientjournaler**-fanen på DTX Studio Implant-verktøylinjen, og klikk på **Opprett ny planlegging**.
 - I Planlegging-modulen klikker du på **Pasient**  på **Pasient**-fanen på **Planlegging**-verktøylinjen
2. Velg riktig sett blant DICOM-settene som er lastet inn, eller importer det riktige.
3. Klikk på **Neste**.
4. Angi det aktuelle volumet (VOI) på siden **Still inn det ønskede volumet og iso-verdi**.
5. Angi en egnet iso-verdi ved hjelp av **ISO-verdi**-glidebryteren, og klikk på **Neste**.
6. Juster skannerretningen og still inn okklusplanet ved hjelp av glidebryterne.
7. Velg kjevetyperen du vil behandle for pasienten.
8. Klikk på **Fullfør**

Redigere formen på nytt snitt-kurven

For å oppnå en optimal kurve for et nytt snitt, skal det nye tversnittet alltid plasseres vinkelrett på okklusplanet. Når du oppretter en ny pasientmodell, beregnes standardkurven for det nye snittet på bakgrunn av den valgte kjevetyperen, det aktuelle volumet og okklusplanet. Formen på denne kurven samt størrelsen på det nye tversnittet kan redigeres.

Justere formen på nytt snitt-kurven

1. Klikk på **Tversnittkurve**  i **CT-redigering**-gruppen i **Pasient**-fanen.
2. Handlingen **Juster tversnittkurve** startes opp.
3. Finjuster den beregnede kurven ved å flytte på de eksisterende kontrollpunktene eller generer en ny kurve ved å plassere kontrollpunkter.

Flytte de eksisterende kontrollpunktene

1. Klikk og dra i kontrollpunktene for å endre formen på kurven for det nye snittet.
2. Sett inn et punkt, legg til et endepunkt eller velg og fjern et punkt.
3. Klikk på **Fullfør** når formen på kurven er tilfredsstillende.

Bruke tannkontrollpunkter

1. Klikk på [Angi kurve på nytt](#).
2. Følg instruksjonene i verktøytipsene på for å plassere kontrollpunktene på riktig sted på tannen:
 - Klikk på aksialvisningen for å angi posisjonen til høyre tredje molar (visdomstann).
 - Klikk på aksialvisningen for å angi posisjonen til den neste tannen, høyre hjørnetann.
 - Klikk på aksialvisningen for å angi posisjonen til hjørnetannen på venstre side.
 - Klikk på aksialvisningen for å angi posisjonen til den fjerde tannen, venstre tredje molar (visdomstann).

Merk

Tannnumrene som er angitt i verktøytipsene varierer, avhengig av hvilket dentalt notasjonssystem som brukes. Denne notasjonen kan endres i Generelle innstillinger.

Hvis tannmarkeringspunkter skal plasseres der det ikke lenger er noe tannsett fysisk til stede, må du plassere dem der de ville ha / burde ha vært plassert.

Disse fire punktene – de to tredje molarene og de to hjørnetennene – sammen med fem kontrollpunkter som genereres automatisk, danner basisen for kurven i det nye snittet.

3. Kontroller kurven og finjuster den, hvis nødvendig.
4. Klikk på [Fullfør](#) når formen på kurven er tilfredsstillende.

Juster størrelsen på det nye tverrsnittet

Juster størrelsen på den vinkelrette visningen for å se det rette bildet i det nye tverrsnittet.

1. Klikk på [Tverrsnittkurve](#) for å åpne handlingen [Juster tverrsnittkurve](#).
2. Dra grensene i regionen som vises i den vinkelrette visningen opp og/eller ned eller sideveis.

Notat

Det er mulig å dra i de øvre eller nedre grenselinjene uavhengig av hverandre. Når du drar i den venstre eller høyre grenselinjen, flyttes den motsatte grenselinjen i motsatt retning og med samme avstand, for å sikre at det nye snittbildet er plassert i midten.

Visualisering av pasientmodellen



Advarsel

Brukeren må være fortrolig med tolkningen av CT-data og hvordan CT-data visualiseres ved hjelp av volumgjengivelse.

Hva er en overføringsfunksjon?

Når en pasientmodell opprettes, konverteres hver enkelt gråtoneverdi til en bestemt farge med viss opasitet for å til pasientmodellen et bestemt utseende. For å oppnå dette anvendes det en [overføringsfunksjon](#) som tilordner RGB-verdier og opasitet til hver enkelt voxel i volumet. Når man tar i bruk overføringsfunksjonen, blir 3D-volumet visualisert.

Overføringsfunksjoner kan administreres og anvendes på pasientmodellen ved hjelp av [overføringsfunksjonsgalleriet](#). Dette galleriet inneholder miniatyrbilder som representerer de tilgjengelige overføringsfunksjonene samt en rekke handlinger som kan utføres for disse overføringsfunksjonene. Det skilles mellom [innebygde maler](#), [tilpassede maler](#) og ["Denne pasienten"](#)-overføringsfunksjoner for den gjeldende pasienten.

Slik rydder du opp i visualiseringen av pasientmodellen

I planleggingsmodus kan du fjerne artefakter og støypartikler i 3D-bildet ved å bruke handlingene [Pasientmaske](#) eller [Slett benartefakter](#).

Bruke pasientmasken

- Klikk på [Pasientmaske](#) .
- I handlingen [Pasientmaske](#) klikker du på ett av følgende ikoner:

	Klikk på Skjær for å angi den delen av volumet som skal fjernes fra modellen. Alt som er innenfor det opptegnede polygonet vil være skjult.
	Klikk på Isoler for å angi den delen av volumet du ønsker å vise. Alt som er utenfor det opptegnede polygonet vil være skjult.
	Klikk på Legg til for å begynne å legge til igjen deler av volumet som er klippet bort.
- Begynn å tegne polygonet:
 - Klikk med venstre museknapp.
 - Flytt markøren og klikk én gang til. De to avmerkede posisjonene knyttes sammen med en grønn, stiplede linje.
 - Klikk en tredje gang. Den grønne, stiplede linjen endres til et polygon.
 - Fortsett til hele den delen av modellen som du vil klippe bort, befinner seg inni et polygon.
 - Høyreklikk eller trykk på [Enter](#) for å ta det i bruk.

Slett benartefakter

- Klikk på [Slett benartefakter](#)  i [Pasientredigering](#)-gruppen på [Pasient](#)-fanen. Handlingen [Slett benartefakter](#) starter.
- Klikk på [Magisk viskelær](#)  eller [Viskelær](#)  i handlingen [Slett benartefakter](#).
- Klikk på CT-data eller hold museknappen inne for å markere delene som skal fjernes fra pasientmodellen. Med [Magisk viskelær](#)  fjernes maskeringen i et lite, middels stort eller stort område rundt posisjonen du klikket på, avhengig av størrelsen på penselen. Med [Viskelær](#)  fjernes maskeringen i et område rundt posisjonen du klikket på. Størrelsen på området er avhengig av penselstørrelse, og denne kan endres.

Notat

Handlingen Slett benartefakter har ingen innvirkning på de opprinnelige CT-dataene. Når artefakter er fjernet og pasientmodellen senere redigeres via handlingen [Rediger pasient](#) action, vil artefaktene være en del av modellen igjen. Så hvis du må utføre begge handlingene for å oppnå et bedre resultat, anbefaler Nobel Biocare at du redigerer pasientmodellen først og fjerner mulig støy og artefakter etterpå.

Deaktiver maske

Bruk [Deaktiver maske](#)  til å veksle mellom den fullstendige pasientmodellen og det angitte utvalget.

Tilbakestill pasientmaske

Bruk [Tilbakestill pasientmaske](#)  for å vise den fullstendige pasientmodellen på nytt slik den ble generert.

Behold den største delen

Når modellen finjusteres ved hjelp av handlingen [Pasientmaske](#), er det mulig å isolere den største "benete" delen av modellen i stedet for å klippe bort alle de mindre partiklene som lager støy i visningen.

Dette gjør du ved å klikke på [Behold største del](#)  i handlingene [Pasientmaske](#) eller [Slett benartefakter](#). De mindre partiklene og delene med en annen tetthet enn bentettheten, vil bli fjernet. Den største benete delen forblir synlig.

Protetikkinformasjon

Diagnostisk oppsett

Ved bruk av DTX Studio Implant kan to typer skanneprotokoller følges for å modellere det virtuelle diagnostiske oppsettet, avhengig av de kliniske indikasjonene:

- I tilfeller med delvis tannløse pasienter der få tenner er borte (fortrinnsvis minst seks tenner står igjen), kan du følge protokollen uten radiografisk guide (benytter en skanning av den intraorale situasjonen).
- I tilfeller med tannløse pasienter og delvis tannløse pasienter der mange tenner er borte (anbefalt når mindre enn seks tenner står igjen), må protokollen med radiografisk guide følges.

Tannskanning

Skanning av tannmodellen

Tannmodellen lages etter et avtrykk og representerer pasientens intraorale situasjon. En protetisk løsning kan konstrueres på modellen ved hjelp av en protetisk oppstilling eller oppvoksing. Overflaten på denne modellen kan skannes nøyaktig (digitaliseres) av dentallaboratoriet. Denne overflateskanningen kan importeres til DTX Studio Implant for å innrettes etter pasientenes 3D-modell fra DICOM-dataene.

Etter at avtrykket er laget, logger du på DTX Studio Implant, åpner pasientfilen og bestiller en skanning av tannmodellen fra dentallaboratoriet. Når laboratoriet har lastet opp den skannede filen til skytjenesten, laster du ned skanningen og innretter den etter DICOM-dataene fra pasientmodellen via SmartFusion™.

Bestille en skanning av tannmodellen

1. Åpne en pasientfil, klikk på [Bestill produkter](#) for å gå til bestillingsmodulen, og klikk deretter på [Skann](#) .
2. Angi skanneobjektene på tannkartet ved å dra i regionen som skal skannes og velge det aktuelle alternativet fra hurtigmenyen. De forespurte skanningene vises i listen til høyre.
3. Klikk på [Neste](#).
4. Velg det tilkoblede dentallaboratoriet som skal skanne tannmodellen for deg, angi alle nødvendige detaljer, eventuelle spesielle instruksjoner som er nødvendige, og kontroller listen over forespurte skanninger.
5. Klikk på [Fullfør](#).
6. Bestillingen sendes til dentallaboratoriet og legges til i [Bestillinger](#)-listen, og vises med bestillingsnummeret som er hentet fra serveren.

Intraoral skanning eller annen bordskanning

Pasientens intraorale situasjon representeres av en overflateskanning, som for eksempel utføres med en intraoral skanner. Denne overflateskanningen (dvs. PLY- og STL-filer) kan importeres til DTX Studio Implant og innrettes etter pasientens 3D-modell ut fra DICOM-dataene ved hjelp av SmartFusion™.

SmartFusion™

Legge til tannskanningen i pasientmodellen


Denne overflateskanningen (som lastes opp av dentallaboratoriet eller importeres fra den intraorale skanneren) kan innrettes etter pasientmodellen.

1. Åpne behandlingen i planleggingsmodulen.
2. Klikk på **Tannskanning**  i **Behandlingsskanning**-gruppen i **Protetikk**-fanen.
3. Velg en tannskanning eller importer en tannskanningsfil.
4. Ved bruk av NXA-filer, angis skanneren som har blitt brukt til å utføre tannskanningen automatisk i henhold til opplysningene i den valgte filen. Ved bruk av STL-filer, må skanneren angis:
 - Nederst til høyre i vinduet klikker du på **Velg skanner** eller **Bytt skanner**, hvis en skanner har blitt valgt tidligere.
 - Velg skanneren fra listen.
 - Klikk på **Velg skanner**.

Notat


Kontroller alltid hvilken skanner som er valgt, særlig når du importerer NXA-filer eller når ulike skannere kan bli brukt til å utføre tannskanninger. Når du velger en bestemt skanner fra listen, blir den lagret og brukt som standardskanner når du oppretter nye pasientmodeller.

5. Klikk på **Neste**.
6. Hvis skanneområdet er kjent, angis tannområdet automatisk. Slik justerer du området for den valgte tannskanningen:
 - Hold musepekeren over tannkartet langs buen.
 - Klikk på buen – eller i det fargelagte, uthevede området som omgir buen – og hold inne museknappen.
 - Dra over tennene i tannkartet til hele skanneområdet er dekket. Angi et tannskanningsområde på minst tre dentale ledd. Slipp museknappen.
 - Juster området ved å klikke på de blå, uthevede områdene for å ta med eller utelate et ledd. Du kan starte justeringen av skanningsområdet på nytt ved å klikke på **Tilbakestill kart**. Pass på å angi et tilstøtende skanningsområde.

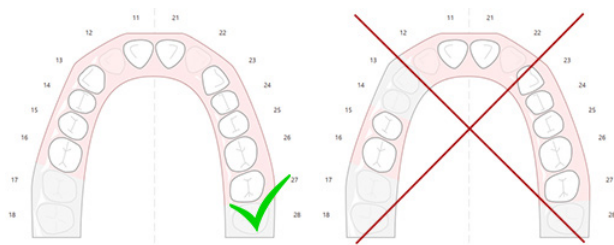

7. Indiker de manglende tennene på tannkartet ved å klikke på en hvit, tilstedeværende tann og gjøre den om til en deaktivert, manglende tann. Bare tenner i det merkede tannområdet kan angis som manglende tenner. Inkluder minst én gjenværende tann i skanningsområdet.

8. Klikk på **Neste**.
9. Indiker alle tannposisjoner i henhold til tipsene som gis i veiviseren. Klikk midt på kusen når du indikerer en molar. Klikk midt på skråkanten hvis det dreier seg om en hjørnetann. Klikk på **Indiker punkter på nytt** for å gjenta disse trinnene. De angitte punktene fjernes, og du kan begynne på nytt.
10. Klikk på **Neste**.
11. Pasientmodellen og tannskanningen innrettes ved hjelp av SmartFusion™.
12. På **Kontroller resultatet**-siden i veiviseren, **kontrollerer du at den automatiske innrettingen er korrekt**. Omrisset av den innrettede tannskanningen (vises som standard med rosa farge) må samsvare nøyaktig med den okklusale informasjonen om tennene i (CB)CT-skanningen. **Det er klinikerens ansvar å sørge for at dette trinnet er korrekt** (se bildene på neste side). Hvis den er feil, må du starte SmartFusion™. Hvis de to modellene ikke kan innrettes nøyaktig etter hverandre, bes du kontakte kundestøtte.
13. Klikk på **Fullfør** hvis innrettingen er korrekt.
14. Tannskanningen legges til i bildet. Hvis virtuelle tenner eller skanning av en protetisk oppstilling / oppvoksing var inkludert i bestillingen, legges denne også til automatisk.

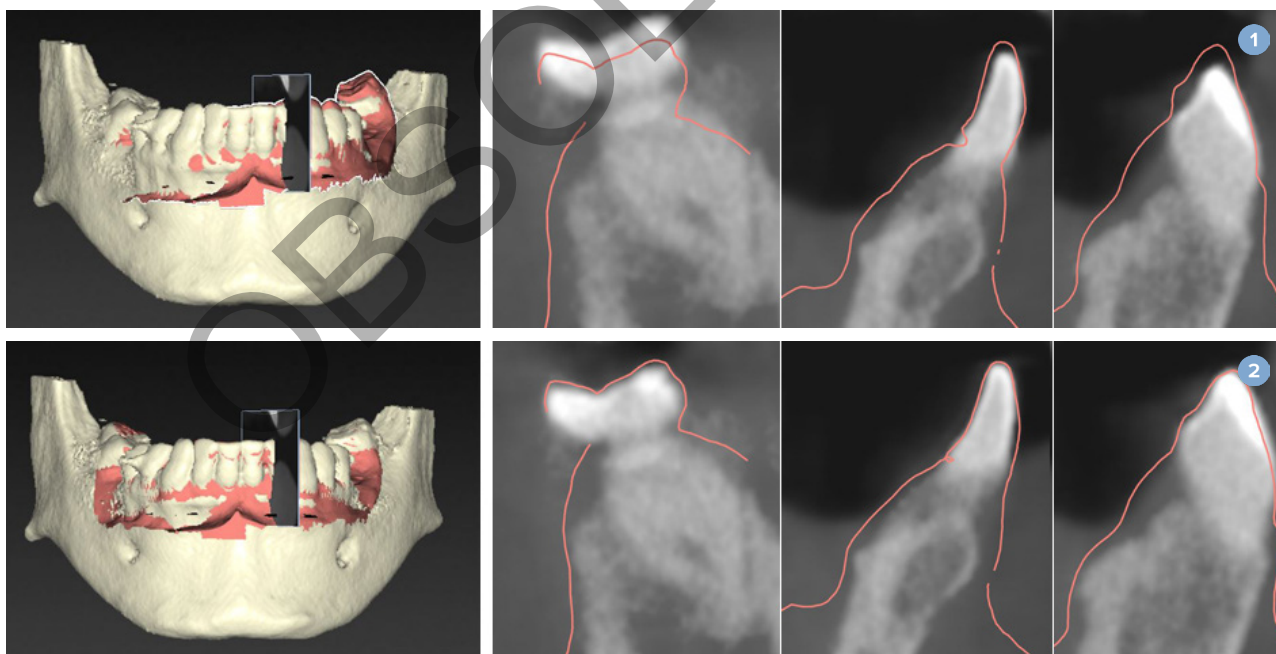

- 1 Feil innretting
- 2 Korrekt innretting



Advarsel

Feilaktig innretting av CBCT-skanningen og overflateskanningen vil føre til at den kirurgiske malen blir feil, slik at den ikke kan brukes under inngrepet.

Initialisering av SmartFusion™

Når SmartFusion™ av tannskanningen og pasientmodellen mislykkes, eller ikke er tilstrekkelig nøyaktig, justerer du tannskanningens innledende posisjon og starter SmartFusion™-beregningen på nytt. Dette kalles SmartFusion™-initialisering.

Notat


Det er sannsynlig at SmartFusion™ vil være mindre nøyaktig når pasienten har mindre enn seks tenner igjen.

Initialiseringsprosedyre


For å initialisere SmartFusion™ må du angi minst tre par korresponderende punkter, som vises på henholdsvis tennene i pasientmodellen og i tannskanningen. Hvis punktene plasseres unøyaktig, må de fjernes og angis på nytt. Alle korresponderende punkter kan fjernes med et enkelt klikk.

Starte initialiseringsveiviseren

- For å justere den innledende posisjonen umiddelbart mens SmartFusion™ kjører, må du åpne veiviseren ved å klikke på handlingen **Initialiser SmartFusion**.

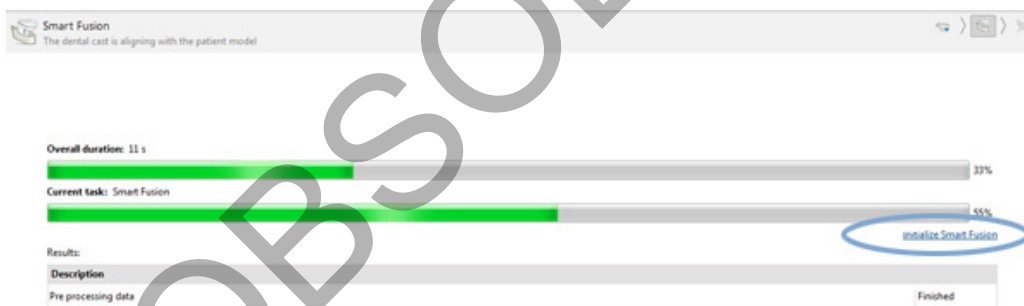

- Når **SmartFusion™ kjører, og prosessen mislykkes**, vises det en advarsel. Klikk på **Initialiser posisjon** for å starte initialiseringsveiviseren. Nå kan du justere startposisjonen for tannskanningen. Start SmartFusion™ på nytt.
- Når **SmartFusion™ kjører etter et initialiseringsforsøk**, men prosessen mislykkes på nytt, vises en advarsel, og du blir bragt videre til siden **Kontroller resultatet**. På denne siden kan du åpne initialiseringsveiviseren ved å klikke på **Indiker korresponderende punkter** (se bildet nedenfor).
- Når **SmartFusion™ kjører og lykkes**, men tannskanningen og pasientmodellen ikke er korrekt innrettet, åpner du initialiseringsveiviseren ved å klikke på handlingen **Indiker korresponderende punkter** på siden **Kontroller resultatet** i veiviseren.

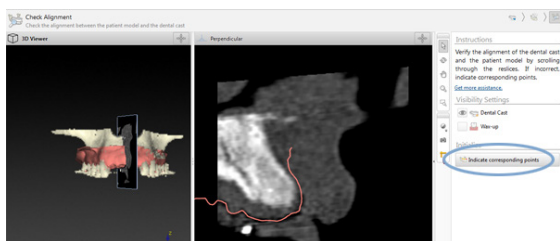


Angi korresponderende punkter i initialiseringsveiviseren

Sett inn et punkt

1. Når veiviseren åpnes, aktiveres handlingen **Sett inn punkter** 📍.
2. Klikk på en bestemt posisjonen i venstre rute på tennene i pasientmodellen.
3. Klikk på den korresponderende posisjonen i høyre rute på tannskanningen. Gjenta trinn 2 og 3 til du har angitt minst tre par med korresponderende punkter.
4. Se etter om det vises noen advarsler i advarselsdelen i veiviseren.
5. Når en melding angir at ønsket antall par er nådd, klikker du på **Fullfør** for å lukke veiviseren. Pass på at du følger opp alle advarsler før du lukker veiviseren. Ellers vil du ikke kunne fullføre og lukke.

Tips

Påse at punktene du legger til, er godt fordelt over hele tannbuen. Unngå at det dannes klynger. Jo større område som dekkes, jo mer sannsynlig er det at innrettingen blir korrekt. Plasser punktene i minst to av fire kvadranter som vist i bildet nedenfor.

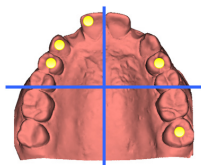

Fjerne utvalgte punkter

Notat

Hvis alternativene for å fjerne punkter er deaktivert, kan du høyreklikke for å fullføre handlingen Sett inn punkter. De andre handlingene aktiveres.

Slik fjerner du utvalgte punkter:

1. Velg et punkt i ett av visningsfeltene.
2. Klikk på **Fjern merkede punkter** 📍.
3. Det valgte punktet og det korresponderende punktet fjernes.

Fjern alle punkter

Hvis du vil fjerne alle indikerte punkter, klikker du på **Fjern alle punkter** 📍. Alle angitte virtuelle punkter fjernes.

SmartFusion™-initialiseringsadvarsler

Advarsel	Forklaring
Innretting av tannskanning justeres manuelt. Innrettingen mellom pasientmodellen og tannskanningen er justert manuelt. Dobbeltsjekk at tannskanningen er riktig innrettet etter (CB) CT-skanningen, ettersom avvik vil introdusere feil ved riktig posisjonering av implantatene.	Når brukeren velger å anvende manuell innretting for SmartFusion™ for tannskanningen og pasientmodellen, eller tannskanningen har blitt justert manuelt, sender systemet ut en advarsel for å dobbeltsjekke innrettingen og unngå mulige unøyaktigheter.
Ett eller flere punktpar samsvarer ikke.	Systemet måler avstanden mellom punktene som er plassert på pasientmodellen og de korresponderende punktene som er angitt på tannskanningen. Dersom avstanden er større enn forventet, sender systemet ut en advarsel og ber brukeren om å justere punktparene.
De definerte punktene er ikke godt nok spredt over tannskanningen.	Når systemet registrerer at de angitte punktene ikke er plassert i minst to av de fire kvadrantene, genereres det en advarsel. Brukeren blir bedt om å justere de korresponderende punktene eller legge til et par med korresponderende punkter, og ta hensyn til at de skal fordeles godt ut over kvadrantene i tannbuen. Klyngedanning bør unngås.
Indiker minst tre korresponderende punkter.	Det er ikke angitt mange nok par med punkter til at veiviseren kan fullføres. Sett inn flere par med punkter til minste tillatte antall punktpar er nådd.

Ansiktsskanning

Last inn en ansiktsskanning som skal tilordnes til pasientmodellen. Det er mulig å laste inn ulike skanninger, én om gangen. Det som gir best resultat, er å først laste inn en nøytral ansiktsskanning og tilordne den til pasientmodellen. Senere kan en smilende ansiktsskanning lastes inn og tilordnes, f.eks. til den nøytrale ansiktsskanningen.

Legge til en ansiktsskanning i pasientmodellen

1. Klikk på **Ansiktsskanning**  i **Flere skanninger**-gruppen på **Protetikk**-fanen for å starte veiviseren.
2. Klikk på **Velg en ansiktsskanning**. Velg en ansiktsskanning (OBJ), og klikk på **Åpne**.
3. Klikk på **Neste**.
4. Bekreft den nåværende plasseringen til den opplastede skanningen. Du kan justere innrettingen mellom den lastede ansiktsskanningen og pasientmodellen ved å klikke på **Juster innretting** , velge objektet du ønsker å rette inn ansiktsskanningen med, og klikke på **OK**. Veiviseren lar deg angi minst fem korresponderende punkter for å rette inn skanningen og modellen korrekt. Klikk på **Fullfør** for å lukke veiviseren med korresponderende punkter.
5. Klikk på **Fullfør** for å **Ansiktsskanning**-veiviseren.

Du kan legge til en ny ansiktsskanning ved å gjenta trinnene beskrevet ovenfor.

Trimme ansiktsskanninger

Det kan være nyttig å trimme bort tennene som vises på en smilende ansiktsskanning, slik at du faktisk kan vise pasientmodellen med f.eks. SmartSetup™ gjennom ansiktsskanningen.

1. Klikk på [Beskjær ansiktsskanning](#) , enten på [Protetikk](#)-fanen på verktøylinjen eller i [Ansiktsskanning](#)-veiviseren.
2. Fjern området som skal skjæres bort, ved å klikke og dra. Bruk [Juster penselstørrelse](#)-glidebryteren når du trenger det.
3. Klikk på [Fullfør](#).

Notat

Beskjæringen fungerer på ansiktsskanningen som vises. Når flere skanninger er lastet inn og du ønsker å beskjære én av ansiktsskanningene, må du først velge riktig ansiktsskanning via høyreklikkmenyen for [Ansiktsskanning](#).

SmartSetup™

SmartSetup™ er løsningen for automatisk beregning av virtuelle tenner basert på en skanning av den nåværende tannsituasjonen. Beregningen tar hensyn til følgende:

- Størrelsen, formen og posisjonen til de eksisterende tennene.
- Typen tann som skal designes (en hjørnetann må formes annerledes enn for eksempel en premolar).
- Størrelsen og formen på den speilede tannen.
- Et sett med estetiske regler for tenner som er plassert i front.
- Informasjon om antagonist-tenner, hvis dette er tilgjengelig.

Beregne en SmartSetup™

Ved beregning av en SmartSetup™, må du kontrollere at en tannskanning er tilgjengelig og omfatter minst tre gjenstående tenner.

1. Klikk på [SmartSetup](#)  i [Flere skanninger](#)-gruppen på [Protetikk](#)-fanen.
2. Klikk på [Innstillinger for SmartSetup](#) nederst til høyre i tannkartruten, og juster SmartSetup™-innstillingene for å få et annet SmartSetup™-resultat.
3. Klikk på [Beregn](#). SmartSetup™ beregnes

Justere SmartSetup™-innstillinger

I SmartSetup™-veiviseren kan innstillingene justeres for å endre resultatet av SmartSetup™-beregningen.

1. På siden [Kontroller SmartSetup™](#) i [SmartSetup™](#) veiviseren klikker du på [SmartSetup™-alternativer](#) nederst til høyre i tannkartruten for å åpne dialogboksen [Innstillinger](#).
2. I [Kvalitet](#)-gruppen angir du om du vil beregne modellene i [Maksimal](#) (denne beregningen vil ta litt tid), [Optimal](#) eller [Lav](#) kvalitet. Avhengig av hva du velger, tas flere eller færre tenner med i beregningen.

- **Maksimum:** Alle de skannede tennene tas med i beregningen av SmartSetup™. Det tar lenger tid å beregne dette enn om man velger løsningen **Optimal**.
 - **Optimal:** Tennene som er nødvendige for å beregne et optimalt resultat, tas med i beregningen, samtidig som beregningstiden er akseptabel.
 - **Lav:** Det minste antall tenner som er nødvendig, tas med i beregningen av SmartSetup™. Det tar kortere tid å beregne dette enn om man velger løsningen **Optimal**.
3. I **SmartSetup™**-gruppen avgjør du om de virtuelle tennene skal beregnes i henhold til følgende kriterier eller ikke:
- **Fjern mellomrom for tannoppsett:** Du vil som oftest gjerne redusere mellomrommene mellom tilstøtende tenner. I enkelte tilfeller kan imidlertid mellomrommet som skal fylles, være for stort. Hvis du velger dette alternativet, kan den virtuelle tannen bli for stor. I slike tilfeller kan det være bedre å slå av alternativet **Fjern mellomrom for tannoppsett**. Dette alternativet er valg som standard for **Alle tenner**. Tannen eller tennene som du vil fjerne mellomrommene mellom, kan du velge i nedtrekksfeltet.
 - **Posisjon basert på motstående tenner (spill):** Velg dette alternativet hvis du ønsker å plassere SmartSetup™ nøyaktig likt de motstående tennene. Vær imidlertid oppmerksom på at de fleste pasienter ikke har en helt symmetrisk bue, så det kan være at resultatet ikke blir helt optimalt når du bruker denne funksjonen. Dette alternativet er derfor slått av som standard. Brukeren kan imidlertid slå det på og sjekke om det vil medføre en bedre beregning av resultatet eller ikke.
 - **Optimaliser tannestetikken i fronten:** Denne handlingen baseres på et sett med regler for å bestemme eller beregne det beste estetiske resultatet. Disse reglene omfatter for eksempel at incisal-kanten på de sentrale fortennene skal være på samme høyde, og at den samme bredden skal anvendes for de sentrale fortennene. Dette er også relevant for de laterale fortennene og for hjørnetennene.
 - **Inkluder tredje molar(er):** Dette alternativet er valgt som standard dersom skanningsområdet omfatter de tredje molarene. Størrelsen, formen og plasseringen av de(n) tredje molaren(e) tas i betraktning når størrelsen, formen og posisjonen for SmartSetup™ beregnes.
 - **Ekstra finjustering av okklusjonen:** Når antagonist-informasjon er tilgjengelig, er dette alternativet valgt som standard. Det tas hensyn til antagonist-informasjonen ved finjustering av okklusjonen.
4. Klikk på **OK** for å anvende innstillingene til å beregne SmartSetup™. Fortsett veiviseren ved å klikke på **Neste**.

Redigere en SmartSetup™

Rediger posisjonen for hver beregnet SmartSetup™ individuelt:

1. Klikk på **Rediger SmartSetup**  på **Protetikk**-fanen på **Planlegging**-verktøylinjen. Du kan alternativt klikke på **Rediger SmartSetup** på siden **Kontroller resultatet** i **SmartSetup**-veiviseren.
2. Velg en SmartSetup™ som skal redigeres ved å klikke på den i 3D-visningsfeltet eller ved å velge tannen i nedtrekksfeltet.
3. Klikk på handlingene **Translasjon**, **Rotasjon** og/eller **Målestokk** for å justere posisjonen og størrelsen på valgt SmartSetup™.

	Translasjon	Klikk på SmartSetup™, hold nede museknappen, og dra for å transludere SmartSetup™. Juster verdiene i feltene Bukkal/lingual , Mesial/distal og/eller Okklusal for å finjustere posisjonen til SmartSetup™.
	Rotasjon	Klikk på SmartSetup™, hold nede museknappen og dra for å rotere SmartSetup™. Juster verdiene i feltene Bukkal/lingual , Mesial/distal og/eller Okklusal for å finjustere posisjonen til SmartSetup™.
	Målestokk	Klikk på SmartSetup™, hold nede museknappen og dra for å justere målestokken i SmartSetup™. Dra oppover for å øke målestokken, dra nedover for å redusere den. Du kan også bruke Skalering -feltet til å angi en bestemt skaleringsprosent eller finjustere størrelsen på SmartSetup™.

Du kan angre endringene for valgt SmartSetup™ ved å klikke på  **Tilbakestill tann**.

Radiografisk guide-modell

Basert på pasientens kliniske diagnostikk, konstrueres det en radiografisk guide basert på en klinisk validert tannoppstilling, med markører for den doble skanneprosedyren. Den virtuelle modellen konstrueres når pasientmodellen opprettes.

Opprette en radiografisk guide-modell

1. Åpne Opprett guide-veviseren ved å klikke på **Veiledning** .
2. Velg de riktige DICOM-dataene, og klikk på **Neste**.
3. Angi volumet av interesse (VOI).
4. Den **kalibrerte iso-verdien** lastes inn ved bruk av egnet kalibreringssett. Klikk på **Neste**.
5. Kontroller for radiografisk guide-modell.
6. Pasientmodellen og den radiografiske guiden innrettes automatisk.
7. Kontroller resultatet av innrettingen, og klikk på **Fullfør**.

Intaglio-overflate

Slik oppretter du en intaglio-overflate basert på radiografisk guide-modellen:

1. Klikk på **Intaglio**  på **Protetikk**-fanen på **Planlegging**-verktøylinjen.
2. Kontroller intaglio-overflaten, og klikk på **Fullfør**.

Diagnose

Nerver

Klikk på [Nerve](#)  på [Diagnose](#)-fanen for å åpne en veiviser og skissere en nerve.

1. Juster om nødvendig det nye snittet i nerven.
2. Klikk for å angi konstruksjonspunktene i nerven.
3. Høyreklikk for å slutte å legge til punkter.
4. Klikk på [Fullfør](#).

Kulene er knyttet sammen med en rørlignende linje, som indikerer nerven.

Velg [Legg til ny nerve](#)  i [Nervehandlinger](#)-gruppen for å legge til en ny nerve. Begynn å angi punktene i den nye nerven ved hjelp av prosessen som beskrives ovenfor.

Tips

Juster det nye snittet av nerven hvis det er vanskelig å visualisere nervekanalen. Denne U-formen henger ikke sammen med og er ikke relatert til formen på kurven for det nye snittet.

Tenner

Klikk på [Tann](#)  på [Diagnose](#)-fanen for å merke en tann. Da åpnes det en veiviser.

1. Velg tannen i det øverste kartet som skal merkes.

Notat

FDI-notasjon er brukt her som standard. Endre om nødvendig tannkartnotasjonen via [Generelle innstillinger](#).

2. Finjuster posisjonen til den valgte tannen for å justere tannens midtakse.
3. Klikk på [Magisk fylling av markering](#)  eller [Markeringspensel](#) .
4. Bla gjennom CT-snittene og klikk eller dra for å markere tannen bit for bit. Alle data i et bestemt område rundt stedet du klikker på, blir farget og blir lagt til tannen.
5. Klikk på [Oppdater 3D](#)  eller bruk hurtigtasten [u]. Tannen vises i en 3D-forhåndsvisning, og den legges til i pasientmodellen i 3D-visningsfeltet.
6. Velg om nødvendig en ny tann i kartet som skal merkes.
7. Når alle tennene er merket, klikker du på [Fullfør](#).

Fjerne tennene fra modellen

Når tennene er merket, er det mulig å trekke dem fra pasientmodellen, hver for seg eller samtidig.

Trekk fra alle tenner samtidig

1. Klikk på [Trekke fra tenner](#)  i [Pasient](#)-fanen. Ikonet er bare aktivert når tenner har blitt merket.
2. Korrigjer om nødvendig pasientmodellen med handlingene [Pasientmaske](#) eller [Slett benartefakter](#).

Notat

Når det legges til nye tann-notasjoner eller når tennene redigeres etter at tenner er trukket fra, må du utføre handlingen **Trekke fra** på nytt for å anvende den på tennene som nylig ble lagt til eller redigert også. Denne handlingen utføres ikke automatisk. Du kan også alternativt utføre handlingen **Trekke tann**.

Fjern Singel Tann

1. Klikk på den merkede tannen for å velge den.
2. Klikk på **Trekke tann**  i **Diagnose**-gruppen på **Diagnose**-verktøylinjen. Dette **Trekke tann**-ikonet aktiveres kun etter at tenner har blitt merket.
3. Den uttrukne tannen får en rød farge.

Målinger

Flere typer målinger er tilgjengelig.

Tips

Hvis det er vanskelig å lese teksten i målingen fordi objektene i bildet skjuler den, kan du velge den eller den tilhørende teksten for å vise måleresultatet i statusfeltet.

Avstand mellom to punkter	1. Klikk på Avstand  i Diagnose-fanen. 2. Klikk for å angi det første punktet, og klikk på nytt på et nytt sted. Målingen vises.
Vinkel	1. Klikk på Vinkel  i Diagnose-fanen. 2. Angi de tre punktene a, b og c. 3. Vinkelen visualiseres ved hjelp av en vinkelbue, og måleverdien vises.
Gråskalaverdi/Hounsfield-enheter	1. Klikk på HU-verdien  i Diagnose-fanen. 2. Angi et punkt for å måle HU-verdien der.
Vinkel mellom implantater eller distanser	1. Velg et implantat og klikk Implantatvinkel  i Diagnose-fanen. 2. Velg et implantat til. En buet gul linje indikerer målingen sammen med verdien.

Planlegge implantater

Arbeide med implantater fra andre produsenter enn Nobel Biocare

DTX Studio Implant er også åpen for implantatsystemer som ikke er fra Nobel Biocare (f.eks. Straumann-tannimplantater, Dentsply-tannimplantater, Camlog-tannimplantater osv.). Ved å bruke fanen **Implantatprodukter** i dialogboksen **Preferanser** kan brukeren angi hvilke implantatsystemer som skal inkluderes i DTX Studio Implant.

Notat

En internett-tilkobling er nødvendig for å laste ned implantater som ikke er fra Nobel Biocare, til DTX Studio Implant.

Implantatsystemer kan legges til eller fjernes fra DTX Studio Implant kun når alle planleggingsscenarioene er lukket. Lukk derfor alle pasientfiler og gå til dialogboksen **Preferanser**:

1. Klikk på fanen **DTX Studio Implant**.
2. Velg **Generelle innstillinger**.
3. Klikk på **Installerte produkter**.
4. Angi hvilke implantatsystemer som skal legges til eller fjernes fra programvaren.
5. Klikk på **OK** for å fullføre.

Notat

Når det benyttes produkter som ikke er tilgjengelige i programvaren, erstattes de da av sylinderformede dummy-produkter i behandlingsplanen. Informasjonen om originalproduktet blir imidlertid lagret, og når produktene blir tilgjengelige, erstattes dummy-produktene i behandlingsplanen med en mer detaljert fremstilling av produktene.



Forsiktig

Når det utløses advarsler på grunn av sylinderformene, er disse advarslene kalkulert ut fra et estimat av produktformen.

Legge til implantater i en behandlingsplan

Dette avsnittet forklarer hvordan du kan planlegge et implantat virtuelt. Det anbefales imidlertid at du vet og er oppmerksom på de kvantitative og kvalitative begrensningene knyttet til planlegging av orale implantater.

Legge til et implantat i en behandlingsplan

1. Klikk på **Implantat**  på **Planlegging**-fanen.
2. Klikk på pasientmodellen for å angi skulderpunktet for implantatet.
3. Klikk på modellen for å angi apeks for implantatet.
4. Velg riktig produsent i seksjonen **Produsent** i vinduet **Produktvalg**.
5. Velg et implantat. Hvis du ønsker det, kan du også angi kirurgitype, en kompatibel distanse, og kontrollere tannposisjonen.
6. Klikk på **Velg produkt** for å bekrefte.



Forsiktig

Produkter som ikke er tilgjengelige, vises med en rød advarsel i **Produktvalg**-vinduet og vises med blå farge i 3D-visningen. Det er ikke mulig å bestille disse produktene.

Hva betyr den gule sonen?

Den typiske toleransen for NobelGuide-modellen er innenfor 1.5 mm. Den halvgjennomsiktige gule sonen hjelper brukeren til å være bevisst på dette aspektet i tilknytning til vitale strukturer. Sonen er en sylinder som overstiger radiusen for de faktiske implantatene med 1.5 mm sammen med en kjegle med en høyde på 3 mm.

Den advarer brukeren om potensielle risikoer som kan oppstå når den gule sonen blir synlig gjennom den ytre benoverflaten.

Merk

Bor kan rekke 1 mm lenger enn planlagte implantater. Denne gule varselsonen tar også hensyn til denne typen avvik.

Det anbefales å beholde minst 3 mm vitalt ben mellom to implantat-ben-kontaktflater og en minimumsavstand på 1.5 mm mellom en tann og et implantat for å legge til rette for cellulær rekolonisering med riktig blodtilførsel.

NobelGuide-modellen omfatter flere kliniske trinn som klinikerer må ta hensyn til i hvert enkelt tilfelle.

Nøyaktigheten totalt sett i hvert enkelt tilfelle må derfor ta i betraktning hvilken innvirkning disse prosedyrene har.

Tannposisjon

Implantater tilordnes et bestemt tannnummer. Dette tannnummeret vises flere steder i programvaren, for eksempel i [egenskapspanelet](#) for et implantat, i den tilhørende implantat-fanen, i høyreklikkmenyen for et implantat, og i statusfeltet der implantatet blir valgt.

Tannkart

Ved hjelp av tannkartet kan brukeren kontrollere og om nødvendig justere den beregnede tannposisjonen et implantat er tilordnet til. Nummereringskonvensjonen for tennene i dette tannkartet korresponderer med innstillingen i de generelle innstillingene.



Posisjonen ? (spørsmåltegnposisjonen) brukes for tannposisjoner som er ukjente eller uklare (f.eks. når det planlegges et implantat mellom to posisjoner hvor det allerede er planlagt andre implantater).

Endre et implantat

DTX Studio Implant inneholder en rekke ulike funksjoner for å planlegge den optimale posisjonen til implantatet.

Endre retning for implantatet

Retningen på implantatet kan justeres ved å dra i kulene.

1. Velg implantatet. Kulene blir røde.
2. Gjør ett eller flere av følgende:
 - Klikk på den øvre kule på implantatet og dra i den for å rotere. Bruk det apikale punktet som et rotasjonspunkt.
 - Klikk på den nedre kule på implantatet og dra i den for å rotere. Bruk skulderpunktet i implantatet som rotasjonspunkt.

Flytte et implantat

Slik utfører du en fysisk overføring av implantatet:

1. Velg et implantat. Den grå tuben på implantatet blir grønn.
2. Klikk på den grønne tuben og dra implantatet til ønsket posisjon. Implantatet beholder sin opprinnelige retning.

Dybde og rotasjon kan også endres ved hjelp av ikoner på den tilhørende [Implantat](#)-verktøylinjen.

Plasser ett implantat parallelt med et annet

Slik plasserer du ett nytt implantat parallelt med et valgt implantat:

1. Velg implantatet du vil bruke som base.
2. Klikk på [Parallelt implantat](#) .
3. Klikk i 3D- eller 2D-visningsfeltet for å angi skulderpunktet for implantatet.
4. Det nye implantatet plasseres parallelt med det angitte implantatet.

Plassere alle implantater parallelt

Slik plasserer du alle implantater som er tilgjengelige i planen parallelt:

1. Velg implantatet du vil bruke som base.
2. Klikk på [Gjør alle parallele](#) .
3. Alle implantater plasseres parallelt med implantatet som ble valgt innledningsvis.

Notat

Etter bruk av kommandoen [Gjør alle parallele](#), må du undersøke posisjonen for alle implantater nøye. Hvis resultatet er klinisk uakseptabelt, benytter du [Angre](#)-funksjonen.

Abutment

Velge en egnet distanse for et implantat

1. Velg implantatet i bildet.
2. Klikk på [Distanse](#)  på Implantat-fanen, eller høyreklikk på det valgte implantatet og velg [Legg til distanse](#) fra hurtigmenyen.
3. Vinduet [Produktvalg](#) åpnes, og de kompatible distansene vises.
4. Som standard er "[Ingen distanse](#)" valgt. Velg en distanse, og ta hensyn riktige mål.
5. Klikk på [Velg produkt](#).

Notat

Disse alternativene er tilgjengelige kun hvis det valgte implantatet ikke har en distanse ennå. Hvis det allerede finnes en distanse, klikker du på menyelementet [Endre produkt](#) eller på ikonet  for å vise vinduet [Produktvalg](#).

Angi kirurgitype

Klinikeren har ulike kirurgiske alternativer, kalt kirurgityper, for hvordan pasienten kan behandles (frihånd, bruke en kirurgisk mal kun ved pilotboring eller bruke en kirurgisk mal ved fullt ut guidet kirurgi). Kirurgitypen kan angis individuelt for hvert implantat i behandlingsplanen.

1. Velg implantatet.
2. Klikk på **Kirurgitype**-ikonet på en egen fane på verktøylinjen. Dette ikonet endrer form avhengig av de ulike kirurgitypene.
3. Velg en egnet kirurgitype fra listen. De tilgjengelige alternativene varierer avhengig av hvilken implantattype som er valgt.

Merk

Når et nytt implantat skal plasseres, kan operasjonstypen angis via fanen **Operasjonstype** i **Produktvalg**-vinduet.



Operasjonstypen kan justeres i vinduet [Sjekk kirurgisk oppsett](#) når du oppretter en kirurgisk mal.

Ulike kirurgityper

Ulike kirurgiske alternativer kan benyttes, avhengig av hvilke produkter som er valgt i behandlingsplanen. Følgende kirurgityper er tilgjengelige:



Frihånd: Det benyttes ingen kirurgisk mal (ingen guidet hylse) til å plassere dette implantatet.



Fullt guidet: Det benyttes en kirurgisk mal med en fullt guidet hylse (som muliggjør guidet boring og guidet innsetting av implantatet) til å overføre de(n) planlagte implantatposisjonen(e) til pasientens munn.



Pilotboring (kun for NobelGuide 1.5 og 2.0 mm Twist Drills): En kirurgisk mal med en pilothylse (kun ved guidet pilotboring) brukes til å overføre de planlagte implantatposisjonene til pasientens munn. Etter bruk av innledende pilot-boring, fjernes den kirurgiske malen, den guidede boreddybden registreres av retningsindikatoren eller en frihånd's Twist Drill i forhold til et anatomisk landemerke (f.eks. benkam) og en frihånd's bro-protokoll innledes, etterfulgt av frihånd'sinnsetting av implantatet (alle dybder knyttet til frihånd'sverktøy i henhold til det angitte anatomiske landemerket etter at malen er fjernet). Det kan velges en annen pilothylsediameter, avhengig av diameteren på implantatet.

Pilothylse-offset

Denne funksjonen er kun utformet for pilotboring. I visse kliniske indikasjoner er standardavstanden mellom det planlagte implantatet (implantatskulderen) og hylsen ikke tilstrekkelig (f.eks. implantatet må plasseres dypere, knivsegg-kanten skal fjernes etter at implantatet er plassert, interferens mellom hylse og tilstøtende tenner osv.). I disse indikasjonene kolliderer hylsen i standardposisjon med overflatemodellen av tannskanningen, og det utløses en advarsel for pilot-hylser. Hylsen kan flyttes oppover, for å opprette en kirurgisk mal uten hylse-kollisjoner, og for å holde implantatet i den planlagte kliniske posisjonen.

Standardforholdet mellom guidede hylser og planlagte implantater gjenspeiles i dybdemarkeringene på alle NobelGuide guidede bor for alle boreprotokoller. Tilleggsavstanden kalles "hylse-offset". Den registreres automatisk og legges til på NobelGuide Surgical Instructions-siden som sendes sammen med den kirurgiske malen.

Angi pilothylse-offset

1. Velg et implantat.
2. Kontroller at operasjonstypen for det valgte implantatet er [pilotboring](#).
3. Klikk på ikonet for [Hylse-offset](#) som befinner seg ved siden av [Kirurgitype](#)-ikonet under en egen [Implantat](#)-fane. Eller høyreklikk på implantatet og velg [Hylse-offset](#) fra hurtigmenyen.
4. Dra i glidebryteren for å endre hylsens plassering i høyden eller angi offset-høyden direkte i glidebryterboksen.

Angi pilothylserotasjon

Hvis hylsene ikke er rotert i riktig posisjon, er det mulig å justere rotasjonen ved hjelp av hylserotasjon.

1. Høyreklikk på implantatet.
2. Klikk på [Hylserotasjon](#) i hurtigmenyen.
3. Dra i glidebryteren for å rotere hylsen til riktig rotasjonsstilling er angitt.

Benskjæringsplan

Du kan bruke handlingen [Benskjæringsplan](#) til å angi et plan som representerer det ideelle bennivået til pasienten. Ingenting vil faktisk bli fjernet. Det er en visualisering av hvor det kan være nødvendig å skjære bort ben, og hjelper deg i planleggingen av behandlingen.

1. Klikk på [Benskjæringsplan](#)  i [Plan](#)-gruppen på [Plan](#)-fanen på verktøylinjen.
2. Et lilla plan legges til i pasientmodellen.
3. Klikk på planet for å velge det. Dra de fargede håndtakene ved grensene for å justere planets størrelse og posisjon. Bruk [Planhøyde](#)-glidebryteren i høyreklikkmenyen til å justere planets posisjon i forhold til modellens Z-akse.

Festepinner

For etablere en egnet fiksering i starten av den kirurgiske behandlingen, festes den kirurgiske malen med Guided Anchor Pins. Ved planlegging av Guided Anchor Pins er vinklingen og dybden viktig. Vanligvis settes det inn tre eller fire festepinner i en tannløs kjeve. Festepinnene plasseres i områder med tilstrekkelig kortikalt ben. For å redusere risikoen for vevsskade til et minimum, må bikortikal festing av festepinner unngås.

Merk

Festepinnens plassering og retning skal legge til rette for enkel innsetting (vurder leppe-retraksjon og munnåpning) og samtidig unngå viktige strukturer som for eksempel blodkar.

For å kunne plassere den kirurgiske malen på nøyaktig riktig sted i pasientens munn, anbefales det å bruke en kirurgisk guide. Den kirurgiske guiden skal gi tilgang til boring, og til å plassere festepinnene. Når festepinnen er satt inn, kan den kirurgiske guiden fjernes.

Legge til en festepinne i behandlingsplanen

Plasser en festepinne på samme måte som du plasserer et implantat.

1. Klikk på **Ankerfeste** .
2. Klikk for å angi festepinnen.
3. Klikk for å angi apeks på festepinnen.
4. Festepinnen plasseres i bildet.

Tips

Det er mer praktisk å angi skulder- og apekspunktene på egnede, nye 2D-snitt.

Riktig helling og dybde på festepinner

Festepinner kan plasseres på strategiske steder for å stabilisere den kirurgiske malen ved innsetting av implantat. Festepinnenes vinkling og dybde er helt avgjørende.


Festepinnene kan også fungere som leppeholdere under kirurgi. Dersom festepinnene spres over et for stort område i buen, kan det ha negativ innvirkning på munnåpningen. Festepinnen fås også med kort skaft, for å dempe den potensielt negative effekten ovenfor. Plasseringen av festepinnene bør likevel planlegges, slik at de gir god tilgang, og de bør ikke komme i konflikt med implantatsetene.

Hylsene skal plasseres nær mucosa, representert av den digitaliserte overflatemodellen av den intraorale situasjonen (cirka 0.5 til 1 mm avstand fra mucosa), men de skal ikke komme i konflikt med eller kollidere med den ovennevnte modellen når det benyttes en smartfusjonert overflateskanning.


I situasjoner med tannløse kjeve anbefales det å bruke minst fire festepinner. Festepinnehylsene plasseres i vestibulum og settes inn ekstraoralt, eller i enkelte situasjoner fra motsatt retning (palatalt eller lingualt), for å låse den kirurgiske malen på plass fra to sider.

Festepinner og radiografisk guide (arbeidsflyt ved tannløse kjever)

Ved bruk av en radiografisk guiden, må hylsen kobles til den radiografiske guiden, men ikke protrudere intaglio-overflaten.

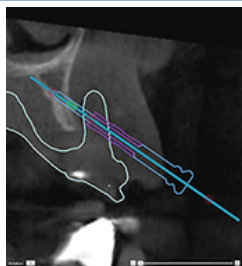


Riktig

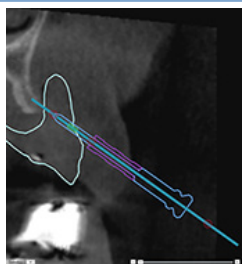

Feil

Hylsen på festepinnen er ikke festet til den radiografiske guiden og festes ikke til malen.

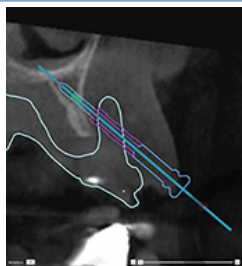


Feil


Hylsen på festepinnen protruderer gjennom den radiografiske guiden, og malen vil ikke passe i pasientens munn.

Festepinner og tannskanninger (arbeidsflyt ved delvis tannløse kjever)

Når det benyttes en smartfusjonert overflateskanning, må hylsen plasseres nær mucosa (0.5 mm til 1 mm avstand fra mucosa, representert i overflateskanningen), men den skal ikke protrudere den smartfusjonerte overflateskanningen.

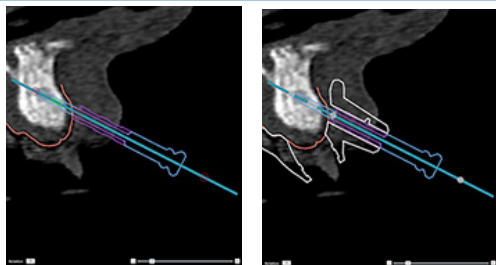


Riktig

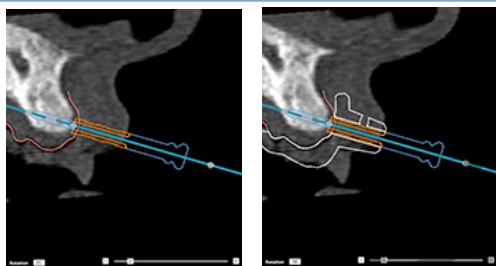


Feil

Hylsen på festepinnen protruderer tannskanningen (bløtvev), og malen vil ikke passe i pasientens munn.

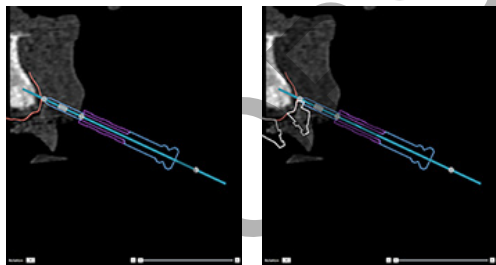

Feil

Festepinnen er ikke forankret i benet og er ikke knyttet til tannskanningen. Materialet i malen legges ikke til rundt hylsen.

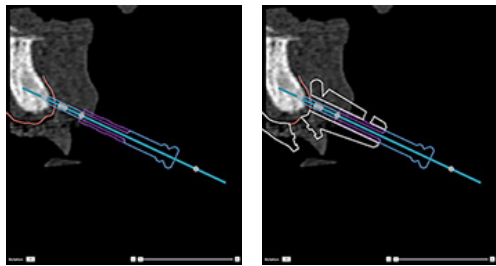

Feil

Festepinnen er ikke forankret i benet, materialet fra malen legges til rundt hylsen, men denne festepinnen medfører ingen fiksering under kirurgi.

Inspisere en behandlingsplan

Når du har behov for å inspisere banen til et implantat eller en festepinne gjennom benet, er det mulig å vise snitt gjennom bildevolumet langs et implantat eller en festepinne, og parallelt med det aktuelle implantatet eller festepinnen. Med denne funksjonen er det mulig å utføre detaljerte inspeksjoner av benet som omgir implantater og festepinner, forutsatt at den valgte posisjonen er egnet for plassering av implantater eller festepinner.

Arbeide med festefunksjonalitet

Festefunksjonaliteten i det nye tverrsnittet fungerer i ulike moduser:

- I **implantat- eller festepinne-modus**, festes det nye tverrsnittet til hovedaksen på et implantat eller en festepinne, og plasseres midt i implantatet eller festepinnen.
- I **kurve-modus** festes det nye tverrsnittet til kurven i det nye panoramasnittet.

Feste det nye tverrsnittet til et implantat eller en festepinne

1. Klikk på **Fest til nytt snitt** i **Verktøy**-panelet.
2. Det nye tverrsnittet festes til det valgte implantatet eller festepinnen, og roterer rundt sin egen akse i stedet for å følge buen i kjevebenet. Hvis det ikke er valgt et implantat eller en festepinne, festes det nye snittet til det sist valgte implantatet eller festepinnen. Hvis det ikke har blitt valgt et implantat eller en festepinne ennå, festes det nye snittet til det sist planlagte implantatet eller festepinnen.

Tips

Når du velger et nytt implantat eller festepinne, festes det nye snittet automatisk til det nye implantatet eller festepinnen. Denne funksjonen kan slås av i de generelle innstillingene.

Notat

Når du sletter det siste implantatet i bildet, festes det nye tverrsnittet automatisk til kurven hvis det ble festet til implantatet.

Hopp til et annet implantat eller en annen festepinne


Når festefunksjonaliteten er i implantat- eller festepinne-modus, flytter du til et annet implantat eller en annen festepinne ved hjelp av handlingen **Neste**, som vises i **Feste**-feltet i 2D-visningsfeltet.

1. Klikk på **Neste** på Feste-verktøylinjen.
2. Det nye tverrsnittet flyttes til neste implantat eller festepinne.

Gå tilbake til kurve-modus

Når festefunksjonaliteten er i implantat- eller festepinnemodus, går du tilbake til kurvemodus ved å bruke handlingen **Opphev feste** på **Feste**-verktøylinjen.

1. Klikk på **Opphev feste** på Feste-verktøylinjen.
2. Det nye tverrsnittet festes til kurven.

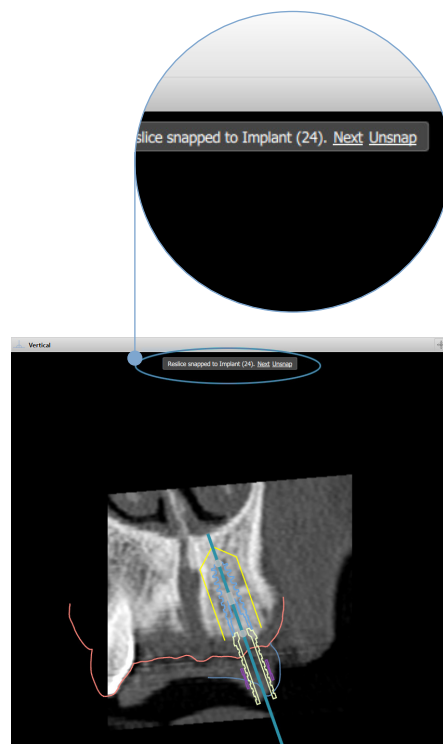

Inspisere en behandlingsplan

Opprette en kirurgisk mal

Den kirurgiske malen hjelper deg med å utføre kirurgi nøyaktig etter planen. Når du ferdigstiller planen, må du opprette en virtuell kirurgisk mal, som er en forhåndsvisning av det du vil motta.

Opprette en kirurgisk mal i samsvar med behandlingsplanen


1. Klikk på **Opprett mal**  på **Fullfør**-fanen. Det vises en dialogboks hvor du bekrefter implantatposisjonene med de valgte hylsene (kirurgityper). Den kirurgiske malen produseres som standard av Nobel Biocare. Hvis du ønsker at malen skal opprettes lokalt eller av en annen produsent, velger du **Annet**. Velg produsenten fra listen. Hvis du velger kontonavnet ditt, vil du kunne laste ned malen selv fra DTX Studio™ Go. Hvis du velger en av kontaktene dine, vil de kunne laste ned malen. Legg til nødvendige detaljer, og endre om nødvendig den valgte kirurgitypen.
2. Trykk på **Neste** hvis det stemmer. Den virtuelle kirurgiske malen genereres.
3. Inspiser den virtuelle kirurgiske malen.
4. Klikk på **Fullfør**.
5. Dialogboksen **Godkjenn planlegging for bestilling** vises. Les den nøye. Klikk på **Jeg har lest og godtar alt ovenfor** for å bekrefte at du har lest meldingene og at alt er slik det skal være.
6. Klikk på **Opprett bestilling** for å bestille malen umiddelbart. Du bringes videre til bestillingsmodulen, hvor du kan se planleggingsfilen og bestille produkter. Klikk på **Godkjenn senere** for å utsette bestillingen.

Notat

En virtuell kirurgisk mal for lokal produksjon har en annen farge enn en virtuell kirurgisk mal som skal produseres av Nobel Biocare.



Virtuell mal beregnet for produksjon av Nobel Biocare.

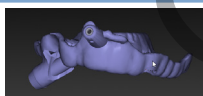

Virtuell mal beregnet for lokal produksjon.

Inspiser den kirurgiske malen

Når du ferdigstiller en behandlingsplan, er det svært viktig å være oppmerksom på en rekke problemer som kan forhindre at den kirurgiske malen blir opprettet på riktig måte:

1. Kontroller posisjonen til festepinnene.
2. Kontroller vinklingene mellom implantatene og – hvis du er i tvil – drøft med resten av teamet om vinklingen kan ha en negativ innvirkning på den protetiske behandlingen.
3. Kontroller de guidede hylsene i forhold til tilstøtende tenner.
 - Forsikre deg om at hylsen ikke berører de tilstøtende tennene.
 - Kontroller 3D-bildet for å se om den kirurgiske malen berører de tilstøtende tennene, for å avgjøre om malen må slipes eller ikke, eller om den må endres.
4. Kontroller hvert enkelt implantat i det nye vinkelrette snittet så vel som i 3D-bildet for å bekrefte planen.

5. Kontroller at det ikke finnes spalter eller hull i støttestrukturene i den kirurgiske malen som omgir hylsene på implantatene eller festepinnene.
6. Videreformidle planen til teamet for å undersøke alle aspekter.

Redigere den virtuelle kirurgiske malen

Notat

Dette er bare mulig for maler som opprettes fra en tannskanning.

Hvis den virtuelle malen ikke er riktig fordelt utover tannbuen (strekker seg jevnt over de labiale/bukkale og linguale overflatene), kan du redigere formen på den. Endre formen på den blå linjen i [Rediger mal-](#)veiviseren for å få kurven til å samsvare med tannbuen.

1. Klikk på [Rediger mal](#) i [Fullfør](#)-fanen.
2. Klikk og dra i prikkene på kurven for å endre posisjonen.
3. Når plasseringen av den blå linjen samsvarer bedre med tannbuen, klikker du på [Fullfør](#).
4. Den virtuelle kirurgiske malen genereres på nytt.

Hvis formen på den virtuelle malen fremdeles ikke er optimal, gjentar du disse trinnene helt til den er det.

Notat

I USA og enkelte andre markeder er den fysiske kirurgiske malen for plassering av endossøse tannimplantater en medisinsk enhet. Ta kontakt med det lokale tilsynsorganet for å få informasjon om forskrifter og krav knyttet til produksjonen av disse kirurgiske malene.

Godkjenne en behandlingsplan

Når en behandling er helt ferdig, låser du den ved å godkjenne den. Les teksten i dialogboksen [Godkjenn](#), og godta den for å fortsette til godkjenningen.

Godkjent-statusen vises i statusfeltet for planlegging.

En godkjent behandlingsplan kan ikke endres. Klikk på [Avvis planlegging](#)-knappen for å avvise planen og gjøre ytterligere endringer.

Bestillinger

Send skannings- eller TempShell-bestillinger til dentallaboratoriet for å utføre en skanning eller utforme og beregne et TempShell midlertidig. For å sende bestillingene via skytjenesten må tannlaboratoriet benytte DTX Studio Lab og det må etableres en kontakt i DTX Studio Lab og DTX Studio Implant.

Arbeide med kontakter

For å legge til en kontakt, trenger du det nysifrede identifikasjonsnummeret til personen, praksisen eller dentallaboratoriet du vil opprette som en kontakt. I DTX Studio Implant vises koden for kontakten i dialogboksen [Administrer konto](#). I DTX Studio Lab vises koden for kontakten i dialogboksen [Kontodetaljer](#).

Legge til en kontakt

1. Klikk på [Legg til kontakt](#)  i [Pasientjournaler](#)-fanen på [Kontor](#)-verktøylinjen. Du kan alternativt klikke på [DTX Studio Implant](#)-fanen og klikke på [Administrer konto](#).
2. I dialogboksen [Administrer konto](#) klikker du på [Legg til en ny kontakt](#) i gruppen [Administrer kontakter](#).
3. Legg inn det nysifrede identifikasjonsnummeret til kontoen du vil opprette som en kontakt.
4. Klikk på [Legg til kontakt](#). Den nye kontakten legges til i listen, statusen [Invitasjon sendt](#) vises, og en e-postinvitasjon sendes til adressen som er knyttet til kontoen som benyttes.
5. Klikk på [OK](#).
6. Når kontakten godtar invitasjonen din, sendes det en bekreftelses-e-post til deg, og kontaktens status i listen endres til [Akseptert](#).

Godta en kontakt

Nye kontaktforespørsler som er sendt til deg, har statusen [Forespurt](#). Klikk på [Godta](#) i e-postinvitasjonen for å godta en kontaktforespørsel. Du kan også:

1. Klikk på [Legg til kontakt](#)  på fanen [Pasientjournaler](#) på [Kontor](#)-verktøylinjen, eller klikk på [DTX Studio Implant](#)-fanen og klikk på [Administrer konto](#).
2. I dialogboksen [Administrer konto](#) velger du kontaktforespørselen i [Administrer kontakter](#)-gruppen som er merket med statusen [Invitasjon sendt](#).
3. Klikk på [Godta valgt kontakt](#).
4. Kontaktstatusen endres til [Akseptert](#), og en bekreftelses-e-post sendes til den som inviterer.

Arbeide med produktbestillinger

Opprette en produktbestilling

For Nobel Biocare-produkter kan det opprettes en produktbestilling. Det er ikke mulig å opprette en produktbestilling for produkter fra andre enn Nobel Biocare (f.eks. implantater fra andre enn Nobel Biocare).

Slik oppretter du en produktbestilling:

1. Klikk på **Bestilling**  på fanen **Fullfør** på **Planlegging**-verktøylinjen. Du kan alternativt klikke på **Produkt** på verktøylinjen i **Bestilling**-modulen.
2. Listen over tilgjengelige planleggingsfiler for den aktuelle pasienten vises. I vinduet til høyre kan du se detaljene for den valgte planleggingsfilen, velge riktig planleggingsfil og klikke på **Neste**.

Notat

Kontroller at planleggingsfilen som skal bestilles, er godkjent . Bare godkjente planleggingsfiler kan konverteres til bestillinger. En advarsel vises hvis planleggingsfilen ikke er godkjent ennå.

3. **Produktlisten** vises. Fjern elementene i listen som ikke trenger å bestilles eller juster antallet produkter som skal bestilles, og klikk på **Neste**.
4. Velg **leveringsadressen**, fyll ut hvem som har lagt inn bestillingen og angi om nødvendig merknader til produksjonen.
5. Angi alternativet **Bare lagre** for bestillingen eller **Lagre og send nå**.
6. Kontroller produktene som skal bestilles i **Bestilte produkter**-ruten.
7. Klikk på **Fullfør**. Bestillingen opprettes og vises i listen over opprettede bestillinger.

Sende en produktbestilling

Slik sender du en opprettet produktbestilling:

1. Velg den opprettede bestillingen fra listen.
2. Klikk på **Send**  på verktøylinjen.

Arbeide med modellskanningsbestillinger

Send en modellskanningsbestilling til dentallaboratoriet for å motta en overflateskanning av tannmodellen, et diagnostisk oppsett eller en oppvoksing og/eller en antagonistskanning.

Opprette en modellskanningsbestilling

1. I **Kontor**-modulen klikker du på **Ny**  og **Bestill en modellskanning** .
Alternativt kan du gå til **Bestilling**-modulen og klikke på **Skann**.
2. Angi skanneobjektene på tannkartet ved å dra i regionen som skal skannes og velge det aktuelle alternativet fra hurtigmenyen. De forespurte skanningene vises i listen til høyre.
3. Klikk på **Neste**.
4. Velg det tilkoblede dentallaboratoriet som skal skanne tannmodellen for deg, angi alle nødvendige detaljer, eventuelle spesielle instruksjoner som er nødvendige, og kontroller listen over forespurte skanninger.
5. Klikk på **Fullfør**.
6. Modellskanningsbestillingen sendes til dentallaboratoriet og legges til i **Bestillinger**-listen, og vises med bestillingsnummeret som er hentet fra serveren.

Arbeide med TempShell-bestillinger

Provisoriske strakstiltak gjør det mulig for en pasient å få en midlertidig krone eller bro når de kommer inn for å finne ut plasseringen av implantatet. For å oppnå dette, arbeider DTX Studio Implant-brukeren og dentallaboratoriet (som benytter DTX Studio Lab) sammen for å designe et TempShell som klinikeren kan konvertere til en midlertidig løsning på tidspunktet for inngrepet.

TempShell-arbeidsflyten

DTX Studio Implant-brukeren oppretter en pasientfil, legger til protetikkinformasjon og planlegger implantatene. Det opprettes en TempShell-bestilling som sendes til dentallaboratoriet, som mottar en forespørsel i DTX Studio Lab. Dentallaboratoriet utformer LabDesign i DTX Studio Lab.

LabDesign-en deles om ønskelig med DTX Studio Implant-brukeren. For å kontrollere om designen passer inn i behandlingsplanen, legger brukeren til LabDesign-en i behandlingsplanen i DTX Studio Implant. Hvis det er nødvendig å gjøre justeringer, må du kontakte dentallaboratoriet (på telefon eller e-post) for å be om justeringer. Det kan være nødvendig med flere iterasjoner mellom DTX Studio Implant-brukeren og dentallaboratoriet. Når klinikeren bekrefter at designen passer, opprettes og deles TempShell av dentallaboratoriet.

DTX Studio Implant-brukeren legger til TempShell i behandlingsplanen.

Opprette en LabDesign-forespørsel

Slik oppretter du en LabDesign-forespørsel:

1. Klikk på **LabDesign**  på verktøylinjen i **Bestilling**-modulen.
2. Listen over tilgjengelige planleggingsfiler for den aktuelle pasienten vises. I vinduet til høyre kan du se detaljene for den valgte planleggingsfilen, velge riktig planleggingsfil og klikke på **Neste**.
3. Oversikten over **LabDesign-forespørselen** vises.
4. Indiker på tannkartet hvilke posisjoner det forespørres en LabDesign (singel-ledd eller bro) for.
5. Velg dentallaboratoriet som skal behandle forespørselen, eller velg å eksportere forespørselen som en fil.
6. Kontroller forespørselsdetaljene og endre etter behov.
7. Klikk på **Fullfør**.

Opprette en TempShell-bestilling

Slik oppretter du en TempShell-bestilling og sender den til dentallaboratoriet:

1. Klikk på **TempShell**  på verktøylinjen i **Bestilling**-modulen.
2. Listen over tilgjengelige planleggingsfiler for den aktuelle pasienten vises. I vinduet til høyre kan du se detaljene for den valgte planleggingsfilen, velge riktig planleggingsfil og klikke på **Neste**.
3. Oversikten over **TempShell-bestillingen** vises.
4. Indiker på tannkartet hvilke posisjoner det bestilles et TempShell (singel-ledd eller bro) for. Ikke velg vinge-ekstensjonen.
5. Velg dentallaboratoriet som skal behandle bestillingen, eller velg å eksportere bestillingen som en fil.
6. Kontroller bestillingsdetaljene og endre etter behov.
7. Klikk på **Fullfør**.

Legge til en LabDesign i behandlingsplanen

For å kontrollere om konstruksjonen som er designet av dentallaboratoriet passer inn i behandlingsplanen, kan den delte LabDesign-en legges til i behandlingsplanen.

1. Klikk på **Legg til LabDesign**  i **Protetikk**-fanen i **Planlegging**-modulen.
2. Dialogboksen **Legg til LabDesign** vises. Velg **LabDesign-en** og klikk på **Legg til LabDesign**.
3. **LabDesign-en** legges til i bildet.
4. Ta kontakt med dentallaboratoriet på telefon eller e-post for enten å bekrefte at LabDesign-en passer eller for å be om justeringer.

Merk

Hvis du må justere behandlingsplanen, må du passe på å bestille LabDesign-en på nytt.

Hvis en LabDesign-fil er tilgjengelig på en stasjon, må du importere den ved hjelp av handlingen **Importer LabDesign** i dialogboksen **Legg til LabDesign**.

Legge til et TempShell i behandlingsplanen

1. Klikk på **Legg til TempShell**  på **Fullfør**-fanen på verktøylinjen for **Planlegging**.
2. Dialogboksen **Legg til TempShell** vises.
3. Klikk på et tilgjengelig TempShell som skal legges til i behandlingsplanen.
4. Klikk på **Legg til TempShell**.

Notat

Hvis en TempShell-fil er tilgjengelig på en stasjon, må du importere den ved hjelp av handlingen **Importer TempShell** i dialogboksen **Legg til TempShell**.

Arbeid med serviceforespørsler

Vanlig arbeidsflyt for serviceforespørsler via DTX Studio Go

DTX Studio Clinic-brukeren (bestiller) ønsker å motta en plan for et bestemt kasus fra en DTX Studio Implant-bruker (leverandør). Bestilleren oppretter en pasientfil i DTX Studio Clinic, og en serviceforespørsel sendes vanligvis via DTX Studio Go. Når leverandøren mottar en ny forespørsel i DTX Studio Go om å opprette en plan, kan de nødvendige filene lastes ned. Zip-filen må pakkes ut og lagres. Leverandøren oppretter en ny pasientfil i DTX Studio Implant, og bruker de mottatte pasientdataene som inndata. Leverandøren benytter den vanlige fremgangsmåten for implantatplanlegging i DTX Studio Implant og godkjenner behandlingsplanen. Deretter kan hun eller han respondere på serviceforespørselen og sende behandlingsplanen tilbake til bestilleren via DTX Studio Go.

Respondere på en serviceforespørsel

Slik sender du en godkjent plan tilbake til servicebestilleren:

1. I **Bestillingsmodul** klikker du på **Oppfyll forespørsel** .
2. Velg den riktige planen fra listen. Klikk på **Neste**.
3. Fyll ut nødvendig informasjon for å tilpasse serviceforespørselen. Pass på å legge ved rapporten, og legge til notater eller bilder (valgfritt).
4. Klikk på **Fullfør**.
5. I et popup-vindu vises grunnleggende informasjon som for eksempel service-ID og informasjon om bestilleren, slik at du kan kontrollere om behandlingen sendes tilbake for riktig pasientkasus. Klikk på **Last opp** for å sende planen til bestilleren.

Arbeidsflyt for lokale serviceforespørsler

Hvis en bruker har både DTX Studio Clinic og DTX Studio Implant installert på en og samme datamaskin, er arbeidsflyten noe annerledes. I DTX Studio Clinic blir det opprettet en pasientfil, og nødvendige innrettinger utføres for å opprette en pasientmodell. Når DTX Studio Implant åpnes fra DTX Studio Clinic, eksporteres pasientmodellen og en ny pasientfil opprettes i DTX Studio Implant, basert på de eksporterte dataene. Implantatbehandlingsplanen opprettes i DTX Studio Implant og kan eksporteres til og visualiseres direkte i DTX Studio Clinic.



Viktig

Når innrettingen av tannskanningen og pasientmodellen i DTX Studio Clinic er utført via SmartFusion™, vises det en advarsel hvor du blir bedt om å kontrollere innrettingen:

Kontroller innrettingen av tannskanningen og pasientmodellen. Hvis den er feil eller usikker, må den beregnes på nytt i Rediger tannskanning-veiviseren.

Eksportere en godkjent plan

Når både DTX Studio Clinic og DTX Studio Implant er installert på én og samme datamaskin, må den godkjente planen eksporteres.

1. I [Bestillingsmodul](#) klikker du på [Oppfyll forespørsel](#)
2. Velg den riktige planen fra listen. Klikk på [Neste](#).
3. Fyll ut nødvendig informasjon for å tilpasse serviceforespørselen. Pass på å legge ved rapporten, og legge til notater eller bilder (valgfritt).
4. Klikk på [Eksporter](#).
5. Velg plasseringen der de eksporterte filene skal lagres. Klikk på [Velg mappe](#).
6. Filene er nå tilgjengelige på den valgte plasseringen.

Arbeide med Assistent

Åpne DTX Studio Implant Assistent ved å klikke på **Assistent** øverst til høyre i vinduet.

Vinduet **DTX Studio Implant Assistent** vises. DTX Studio Implant Assistent har ulike faner:

- **Oppgaver**  : En oversikt over planleggingsoppgaver og andre oppgaver veileder deg gjennom planleggingsprosedyren.
- **Advarsler**  : Advarselmeldinger gjør deg oppmerksom på mulige problemer.
- **Planleggingsoversikt**  : Viser en oversikt over implantatene, distansene og/eller festepinnene som brukes i behandlingsplanen. Det angis også om den radiografiske guiden og den kirurgiske malen er opprettet eller ikke. Posisjonen for de planlagte implantatene angis på tannkartet.


OBSOLETE

DTX Studio Implant Varslingssystem

En rekke tekniske advarsler / produksjonsadvarsler / advarsler knyttet til prosedyrer (f.eks. guidede hylser som er plassert for nær hverandre, "ingen festepinner angitt", implantat planlagt for nær en merket nerve) visualiseres i DTX Studio Implant-programvaren.

Når det genereres advarsler fordi DTX Studio Implant har registrert problemer knyttet til den kliniske eller tekniske planleggingen, kan du se dem i **Advarsler**-seksjonen i planleggingsassistenten.

Åpne planleggingsassistenten og klikk på **Advarsler** ⁴, eller klikk på **Advarsler** under **Assistent**-knappen. Planleggingsassistenten viser advarslene, inndelt i kliniske advarsler og mal-advarsler.

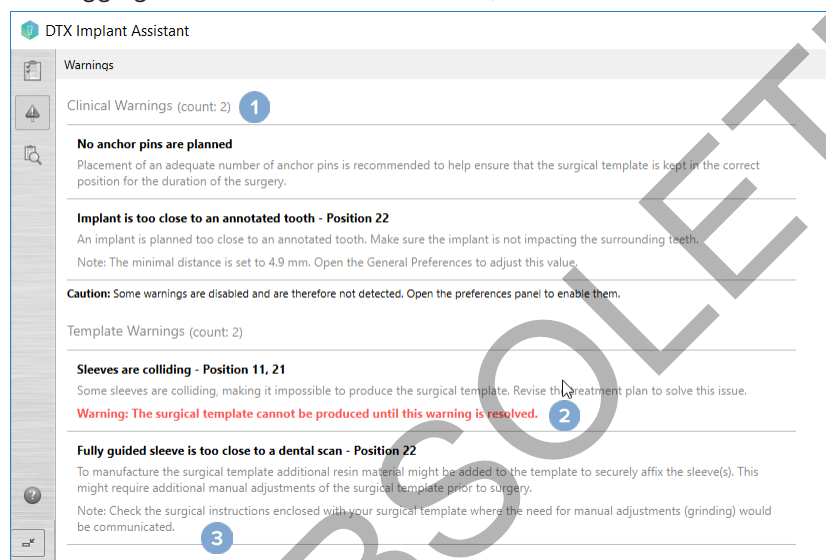

- 1 Antallet kliniske advarsler og mal-advarsler vises i overskriften for advarselstypen.
- 2 Når det ikke er mulig å produsere en kirurgisk mal, er de spesifikke advarslene merket med en rød merknad som angir at advarslene må løses før den kirurgiske malen kan produseres.
- 3 Konfigurerbare advarsler ledsages av en merknad med den angitte verdien, og hvor denne verdien kan endres hvis noe må justeres. Hvis en konfigurerbar advarsel har blitt deaktivert i innstillingene, vises det en forsiktig-melding, med informasjon om at mulige problemer kanskje ikke registreres.

Advarsler i DTX Studio Implant



Advarsel

Dette planleggingsprogrammet kontrollerer ikke automatisk alle tekniske begrensninger. I enkelte tilfeller lar det seg kanskje ikke gjøre å opprette kirurgiske maler, selv om ingen tekniske begrensninger blir automatisk identifisert i programvaren.

Under planleggingen må spesifikke tekniske begrensninger vurderes for å sikre riktig produksjon av den kirurgiske malen og vellykket bruk av den produserte malen under operasjonen. DTX Studio Implant oppdager automatisk mulig brudd på noen tekniske og kliniske begrensninger. Når begrensningene overskrides, vises det en advarsel i assistent-vinduet. Klikk på denne meldingen for å vise en detaljert beskrivelse av merknadene og advarslene.

I 2D- og 3D-visningsfeltet blir objekter som forårsaker et problem farget med rødt eller oransje, avhengig av type overtredelse. De tilsvarende advarslene vises i assistent-vinduet. Disse meldingene vises også i **Godkjenn**-vinduet, planleggingsoversikten, rapporten osv.

Nedenfor vises en oversikt over mulige advarsler i henhold til typen advarsel.

Maladvarsler

I rapporten vises mal-advarslene på siste side.

Advarsel	Forklaring
Hylser kolliderer.*	Enkelte hylser kolliderer, og dette gjør det umulig å produsere den kirurgiske malen. Revider behandlingsplanen for å løse dette problemet.
Implantat og hylse kolliderer.	Et implantat kolliderer med en hylse. Dette kan føre til problemer under kirurgi. Det anbefales å revidere behandlingsplanen.
Festepinne og hylse kolliderer.	En festepinne kolliderer med en hylse. Dette kan føre til problemer under kirurgi. Det anbefales å revidere behandlingsplanen.
Merket tann og hylse kolliderer.	En hylse kolliderer med en merket tann. Påse at denne kollisjonen ikke forhindrer korrekt plassering av den kirurgiske malen.
Festepinnehylse er for nær tannskanningen.	En festepinnehylse er planlagt for nært inntil tannskanningen. Dette kan forårsake feil i den korrekte plasseringen av den kirurgiske malen under kirurgi. Forsøk å plassere festepinnehylsen slik at den ikke kolliderer med tannskanningen.
Pilohylse er for nær tannskanningen.*	En hylse for pilotboring er plassert for nært inntil tannskanningen, og dette gjør det umulig å produsere den kirurgiske malen. Revider posisjonen til de planlagte implantatene eller endre hylsens offset for å løse problemet.
Fullstendig guidet hylse er for nær en tannskanning.	Når den kirurgiske malen skal produseres, kan det bli lagt til ytterligere resinmateriale i malen slik at hylsen(e) festes ordentlig. Dette kan føre til at den kirurgiske malen må justeres ytterligere før operasjonen.
Notat Kontroller de kirurgiske instruksjonene som følger med den kirurgiske malen hvor behovet for manuell justering (sliping) vil bli formidlet.	

* Den kirurgiske malen kan ikke produseres før denne advarselen er løst.

Kliniske advarsler

Kliniske advarsler deles inn i generelle advarsler og implantat-advarsler. Kliniske advarsler vises på implantat-sidene i rapporten.

Generelle advarsler

Advarsel	Forklaring
Ingen festepinner er planlagt.	Det anbefales å sette inn et tilstrekkelig antall festepinner, for å bidra til å sørge for at den kirurgiske malen holdes i korrekt posisjon under hele operasjonen.
Festepinner kolliderer.	Enkelte festepinner kolliderer. Dette kan føre til problemer under kirurgi. Det anbefales å revidere behandlingsplanen.
Radiografisk guide ble ikke kalibrert.	3D-modellen av den radiografiske guiden ble opprettet med en gråtoneverdi (ISO-verdi) som terskel, som ikke ble kalibrert for din skanner. For å kunne lage en kirurgisk mal med nøyaktig passform er det viktig å følge NobelGuide-kalibreringsprosedyren, som er beskrevet i håndboken for NobelGuide-modellen.
Behandling planlagt med ikke-installerte produkter.*	Behandlingsplanen inneholder produkter som for øyeblikket ikke er installert på datamaskinen din. Kontroller at du har en internett-tilkobling som fungerer, og åpne behandlingsplanen på nytt. Hvis det ikke er mulig å installere de manglende produktene, må du ta kontakt med kundestøtte lokalt.
Lavkvalitets visualisering aktivert.**	I behandlingsplanen benyttes det en lavkvalitets visualiseringen av 3D-pasientmodellen.
Innretting av tannskanning justeres manuelt.	Innrettingen mellom pasientmodellen og en tannskanning er manuelt justert ved å angi tilsvarende punkter eller importere en ny tannskanningsoverflate. Dobbeltsjekk at tannskanningen er riktig innrettet etter (CB)CT-skanningen, ettersom avvik vil introdusere feil ved riktig posisjonering av implantatene.
SmartFusion-innretting mislyktes.*	SmartFusion-innrettingen mislyktes og ble ikke justert manuelt. Start handlingen Rediger tannskanning for å løse dette problemet.
Bekreft SmartFusion-oppretting	Kontroller innrettingen av tannskanningen og pasientmodellen. Hvis den er feil eller usikker, må den beregnes på nytt i Rediger tannskanning-veiviseren.

* Den kirurgiske malen kan ikke produseres før denne advarselen er løst.

** Ved visning med lavkvalitets visualisering økes risikoen for at enkelte anatomiske funksjoner ikke vil være synlige i pasientmodellen. Denne innstillingen virker kun inn på kvaliteten i 3D-volumet. Nye CT-snitt påvirkes ikke.

Implantatvarsler

Noen av implantat-advarslene kan konfigureres. De kan for eksempel aktiveres eller deaktiveres, og/eller verdiene som brukes til å utløse advarslene kan angis av brukeren. I tabellen nedenfor er de merket med "konfigurerbar".



Viktig

Verdiene som skal utløse implantat-advarslene må angis i henhold til brukerens kliniske kompetanse og erfaring.


Advarsel	Forklaring
Implantater kolliderer.	Enkelte implantater kolliderer. Dette kan føre til problemer under kirurgi. Det anbefales å revidere behandlingsplanen.
Implantat og festepinne kolliderer.	Et implantat kolliderer med en festepinne. Dette kan føre til problemer under kirurgi. Det anbefales å revidere behandlingsplanen.
Implantat er for nært en merket nerve.*	Et implantat er planlagt for nær en merket nerve. Forsikre deg om at implantatet ikke virker inn på nerven. Notat Minsteavstand er satt til [...] mm. Åpne generelle preferanser for å justere denne verdien.
Implantat er for nært en merket tann.*	Et implantat er planlagt for nær en merket tann. Forsikre deg om at implantatet ikke virker inn på tennene som omgir det. Notat Minsteavstand er satt til [...] mm. Åpne generelle preferanser for å justere denne verdien.

* Disse advarslene kan konfigureres

Konfigurerbare advarsler

De konfigurerbare advarslene baserer seg på et volum rundt implantatet (dvs. et advarselsvolum). Når dette volumet kolliderer med en merket anatomisk struktur, utløses det en advarsel.

Advarselsvolumet angis på bakgrunn av en avstand som er innstilt på forhånd. Denne avstanden settes som standard til 1.5 mm, minimumsavstanden. Med denne minimumsavstanden, er advarselsvolumet sammenfallende med den gule sonen (som representerer en avstand på 1.5 mm rundt implantatet og en avstand på 2×1.5 mm (3.0 mm) ved apeks). Advarselsvolumet kan økes. Som vist i bildet (for en avstand på f.eks. 4.0 mm) skaleres advarselsvolumet tilsvarende.

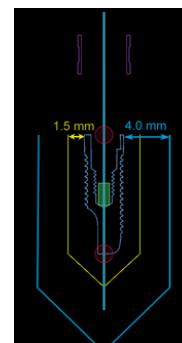

Advarsel mellom implantater og nerver

Når et implantat plasseres for nær en merket nerve (dvs. når advarselsvolumet kolliderer med visualiseringen av den merkede nerven), utløses det en advarsel. Det berørte implantatet vises (hvis det ikke var synlig allerede) og blir oransje.

Advarsel mellom implantater og tannrøtter

Når et implantat plasseres for nær en tannrot (dvs. når advarselsvolumet kolliderer med visualiseringen av den merkede tannen), utløses det en advarsel. Implantatet vises og blir oransje.

Notat

Minimumsavstanden for advarselsvolumet skal angis via [DTX Studio Implant > Generelle innstillinger](#). Verdiene lagres på datamaskinen du arbeider på. Når du åpner behandlingsplanen på en annen datamaskin enn den du brukte da du opprettet planen, er advarslene som vises i tråd med innstillingene på datamaskinen du bruker for øyeblikket. Dette kan føre til ulike advarsler, basert på innstillingene på datamaskinen. De konfigurerbare verdiene kan justeres i innstillingene, og verdiene vises i advarselsoversikten når det utløses en advarsel.

Tekniske begrensninger


Her finnes forklaringer på en rekke tekniske begrensninger som er avgjørende for at den kirurgiske malen blir opprettet på riktig måte. Hvis det ikke tas hensyn til disse begrensningene, kan det ikke garanteres at den kirurgiske malen kan produseres eller at den kan brukes på riktig måte.

Minimumsavstand mellom guidede hylser

I den kirurgiske malen må minimumsavstanden mellom guidede hylser overholdes. Hvis avstanden er for liten, kan ikke den kirurgiske malen produseres.

Når minimumsavstanden mellom de guidede hylsene ikke overholdes, blir de guidede hylsene automatisk synlige, og de får en rød farge. Dersom dette er tilfelle, kan ikke den kirurgiske malen produseres.


For å løse denne situasjonen må du flytte eller skråstille implantatene slik at mellomrommet mellom hylsene økes. Når avstanden er stor nok, får de guidede hylsene automatisk tilbake sin vanlige farge.

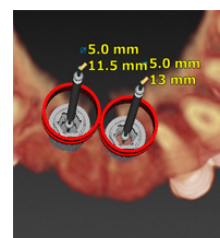

Minimumsavstand mellom hylser og implantater / hylser og festepinner

Når hylser og implantater eller hylser og festepinner plasseres svært nær hverandre eller kolliderer, blir de automatisk synlige og får en oransje farge. For kort avstand mellom en hylse og et implantat eller en festepinne kan føre til vanskeligheter under en operasjon for å forberede en osteotomi eller plassere et implantat eller en festepinne.

For å løse dette problemet må du flytte eller skråstille implantatene eller festepinnene slik at mellomrommet mellom dem og hylsen økes. Når avstanden er lang nok, får de automatisk tilbake sin vanlige farge.

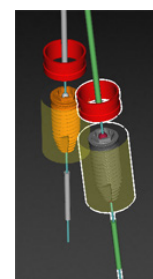


Kollisjon mellom implantater, festepinner eller implantater og festepinner

Når implantatene, festepinnene eller implantater og festepinner kolliderer, blir de automatisk synlige og får en oransje farge. Kollisjonen mellom disse objektene kan forårsake problemer under kirurgi.

For å løse dette problemet, må du flytte eller skråstille implantatene eller festepinnene slik at de ikke kolliderer. Når avstanden er stor nok, får de automatisk tilbake sin vanlige farge.

Notat

I enkelte tilfeller benyttes implantatsettet først til en festepinne. Festepinnen må fjernes før implantatet settes inn.

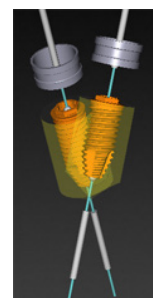


Forholdet mellom guidet hylse og radiografisk guide og/eller tannskanning

Under planleggingen er det, i tillegg til alle kliniske hensyn, viktig å vurdere de tekniske begrensningene for plasseringen av de guidede hylsene i forhold til den radiografiske guiden og/eller tannskanningen. Posisjonen til de guidede hylsene må bekreftes med den radiografiske guiden og/eller tannskanningen som vises.

Plassering av radiografisk guide


- **Plassering:** Hver enkelt guidede hylse skal plasseres innenfor den radiografiske guiden for å kontrollere at det er tilstrekkelig materiale i den kirurgiske malen til å støtte den guidede hylsen.

- 1 Riktig plassert
- 2 Feil plassert: Hylsen er plassert for langt unna og er ikke knyttet til den radiografiske guiden.

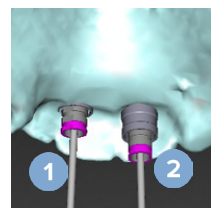

- **Dybde:** Det er nødvendig å kontrollere dybden på hylsen i forhold til den radiografiske guiden. Hylsen skal ikke trenge igjennom overflaten som vender mot gingiva (intaglio-overflaten) for å sørge for riktig plassering av den kirurgiske malen. For å kontrollere hylsens dybde må du vise hylsens posisjon og finjustere implantatdybden ved hjelp av **Dybde**-ikonet på den tilhørende verktøylinjen. Du kan også vurdere å justere hylse-offset når en pilothylse er valgt.

- 1 Riktig plassert
- 2 Feil plassert: Hylsen er plassert for dypt.



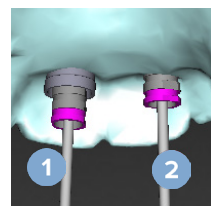


Skanning av tannmodellen

Kontroller hylseposisjoner etter planlegging av implantat. Følgende situasjoner må løses:



- **Laterale kollisjoner:** Laterale kollisjoner er kollisjoner med tilstøtende tenner, eller muligens med bløtvev (overflateskanning av den intraorale situasjonen). Hvis det oppstår en kollisjon, må du kontrollere om implantatets posisjon kan endres, slik at det ikke utløses noen kollisjonsadvarsel. Hvis dette ikke er mulig, kan du prøve å redusere hylsens diameter eller velge å kun benytte pilotboring. Avanserte brukere kan også vurdere å hoppe over deler av den guidede bore-protokollen og ferdigstille bore-protokollen med frihåndsprotokollen etter at den kirurgiske malen er fjernet. Implantatet blir deretter plassert på frihånd.

- 1 Feil plassert: For nært inntil eller kolliderer med tilstøtende tenner eller bløtvev.
- 2 Riktig plassert: Endret diameter.
- 3 Riktig plassert: Endret til pilothylse.

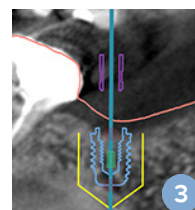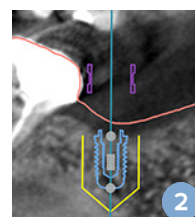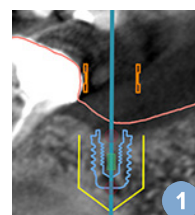

- **Vertical Kollisjoner:** Vertikale kollisjoner er kollisjoner med potensielt bløtvev (overflateskanning av den intraorale situasjonen). Hvis det oppstår en vertikal kollisjon, og du har valgt et alternativ med pilotboring, må du vurdere å justere hylse-offset.

- 1 Feil plassert
- 2 Riktig plassert: Hylse-offset justert.

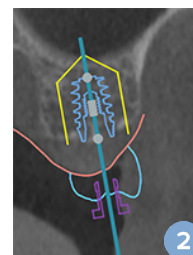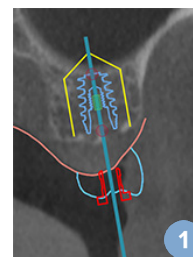

Forholdet mellom den guidede hylsen og benet

Under planleggingen er det viktig å vurdere de tekniske begrensningene for plasseringen av de guidede hylsene, i forhold til benoverflaten som kan omfatte tenner. Hvis den guidede hylsen kolliderer med benoverflaten eller de gjenstående tennene som er en del av benmodellen, vil det kanskje ikke være mulig å plassere den kirurgiske malen på riktig sted under kirurgi.

Denne feilen kan imidlertid aksepteres i enkelte tilfeller (f.eks. hvis hylsen kolliderer med en tann som skal trekkes før kirurgi, eller når en hylse kolliderer med en artefakt.)

Guidede distanser

Når det planlegges bruk av guidede distanser, må du sørge for at vinkelen mellom de mest vinklede implantatene ikke overstiger 30 grader.

Radiografisk guide ble opprettet uten en kalibrert iso-verdi.

Det anbefales å bruke den kalibrerte iso-verdien når du oppretter en radiografisk guide-modell, hvis det eksporteres en kirurgisk mal til produksjon. Hvis kalibreringssettet ikke benyttes, vises det en kalibreringsadvarsel ("Radiografisk guide-modell ble opprettet uten en kalibrert iso-verdi") for å understreke hvor viktig dette automatiserte trinnet er.

Drøfte behandlingsplanen

I **Diskuter**-modulen kan du opprette rapporter, skrivebeskyttede visningsfiler og Communicator-presentasjoner.

Rapporter

Opprette en rapport

1. Kontroller at en pasientfil er åpnet. Klikk på **Rapport**  i **Kommuniser**-gruppen på **Fullfør**-fanen i planleggingsmodulen.
2. Listen over planleggingsfiler vises. Velg den riktige planleggingsfilen, og klikk på **Neste**. Systemet laster inn dataene og genererer rapportsidene.
3. Det vises forhåndsvisningsbilder av rapportsidene: En oversikt over den tilgjengelige generelle informasjonen om pasienten, behandling, hvilken skanner som brukes, advarsler knyttet til planleggingen, anvendte produkter, bilder av den kirurgiske planen osv.

Notat

Forhåndsvisningsbildene genereres med en lavere oppløsning enn den faktiske PDF-filen.

4. Gi rapporten et passende navn.
5. Du kan også legge til en merknad (opptil 700 tegn) for rapporten, hvis du ønsker det.
6. Tilpass rapporten ved å velge sidene som skal inkluderes: Fjern markeringen av sidene du vil fjerne fra rapporten. Sidene der markeringen er fjernet, vises nedtonet og tas ikke med i den endelige rapporten som genereres.
7. Om nødvendig kan du gjøre rapporten anonym.
8. Klikk på **Fullfør** for å opprette rapporten eller **Avbryt** for å avvise forespørselen.
9. Ved bekreftelse vises det en forhåndsvisning med de valgte sidene for rapporten. Bla gjennom sidene for å kontrollere dem.

Skrive ut en rapport

Du kan skrive ut den opprettede rapporten ved å eksportere den og lagre den som en PDF-fil.

1. Velg rapporten i listen **Kommunikasjonselementer**.
2. Klikk på **Eksporter** i **Rapport**-gruppen i **Kommunikasjon**-fanen på verktøylinjen.
3. Bla til plasseringen der du vil lagre rapporten.
4. Klikk på **Lagre**.
5. Rapporten lagres som et PDF-dokument. Rapporten åpnes som standard, slik at du kan skrive ut dokumentet.

Visningsfiler

Hvis DTX Studio Implant ikke er tilgjengelig på datamaskinen til personen du vil drøfte behandlingsplanen med, kan en visningsfil benyttes når dere skal kommunisere om behandlingsplanen. En visningsfil er en versjon av behandlingsplanen som er lagret som en skrivebeskyttet fil, opprettet i DTX Studio Implant, og som inneholder behandlingsplanen for en bestemt pasient. Et visningsfil kan åpnes hvis DTX Studio Implant Viewer er installert på datamaskinen du bruker.

Opprette en visningsfil

1. Åpne **Diskuter**-modulen.
2. Klikk på **Visningsfelt**  i **Kommuniser**-gruppen på **Kommunikasjon**-fanen.
3. Velg planleggingsfilen fra listen, og klikk på **Neste**.
4. Fyll ut detaljene for visningsfeltet på tilpassingssiden:
 - Angi et passende navn for visningsfilen.
 - Klikk på bildene som skal inkluderes i visningsfilen.
 - Angi om CT-bildet skal komprimeres eller ikke.
 - Hvis pasientopplysningene ikke skal deles, kan du anonymisere filen her ved å velge **Anonymiser all pasientinformasjon**.
 - Merk av i den tilhørende avmerkingsboksen for å dele visningsfilen umiddelbart når den er ferdig.
5. Klikk på **Fullfør** for å lagre visningsfilen.
6. Visningsfilen lagres og vises i **Kommunikasjonselementer**-listen. Dialogboksen **Del et visningsfelt** vises.
7. Skriv inn e-postadressen eller bruk **Kontakter**-knappen for å velge personene du vil dele visningsfeltet med.
8. Legg til en personlig melding og klikk på **Del**.
9. En e-post med en nedlastingslenke sendes til de valgte personene.

Åpne en visningsfil via DTX Studio Implant

1. Dobbeltklikk på en visningsfil i listen **Kommunikasjonselementer**.
2. DTX Studio Implant Viewer-applikasjonen åpner og viser den valgte visningsfilen.

Åpne en visningsfil via nedlastingslenken

Når du har mottatt en e-post med en nedlastingslenke til en visningsfil:

1. Klikk på nedlastingslenken i e-posten.
2. Visningsfilen lastes ned.
3. Bla til plasseringen hvor den nedlastede filen er lagret, og dobbeltklikk på den lagrede visningsfilen.
4. DTX Studio Implant Viewer er åpnet og viser visningsfilen.

I **Diskuter**-modulen kan du opprette rapporter, skrivebeskyttede visningsfiler og Communicator-presentasjoner.

Communicator-presentasjoner

Communicator-presentasjoner gir en oversikt over behandlingsplanen og gir deg muligheten til å lage notasjoner mens du informerer pasienten om prosedyren. Communicator-presentasjoner kan brukes til å informere pasienter og kollegaer om en tannbehandling. Presentasjonene kan i tillegg gjøres tilgjengelige via skytjenesten.

Communicator-presentasjoner lastes opp til skyen og kan konsulteres via iPad®-appen Communicator.

Opprette en Communicator-presentasjon

1. Åpne [Diskuter](#)-modulen.
2. Klikk på [Communicator](#)  i [Kommuniser](#)-gruppen i [Kommunikasjon](#)-fanen.
3. Velg planleggingsfilen fra listen.
4. Klikk på [Neste](#).
5. Fyll ut detaljene for Communicator-presentasjonen på tilpassingssiden:
 - Angi et passende navn for presentasjonen.
 - Inkluder om ønskelig notater om presentasjonen. Notatene vises i Communicator-presentasjonen når den åpnes på en iPad®.
 - Angi hvilke bilder som skal inkluderes i presentasjonen. Bare bilder som er inkludert i pasientbiblioteket kan tas med.
 - Hvis pasientopplysningene ikke skal deles, kan du anonymisere filen her ved å velge [Anonymiser all pasientinformasjon](#).
 - Merk av i den tilhørende avmerkingsboksen for å laste opp Communicator-presentasjonen til iPad® når den er ferdig.
6. Klikk på [Fullfør](#).
7. Communicator-presentasjonen lagres og vises i [Kommunikasjonselementer](#)-listen.

Eksportere en behandlingsplan for konsultasjon eller kirurgi

DTX Studio Implant gjør det mulig å eksportere behandlingsplanen for bruk i f.eks. DTX Studio Clinic, X-Guide™ eller OsseoCare™ Pro eller til konsultasjon i andre programvareprodukter.

Eksport til DTX Studio Clinic

Slik eksporterer du behandlingsplanen for visualisering i DTX Studio Clinic:

1. Gå til [Planlegging](#)-modulen.
2. Klikk på [Klinikkeksport](#) i [Operasjonsplan](#)-gruppen på [Fullfør](#)-fanen.
3. Velg mappen hvor du vil lagre den krypterte DTXIP-filen som inneholder all nødvendig informasjon om behandlingsplanen.
4. Det vises en melding som bekrefter at lagringen er utført, samt stedet der filen er lagret. Klikk på [OK](#) for å lukke den.

Eksportere behandlingsplan for visualisering i andre programvareprodukter (åpen eksport):

1. Gå til [Planlegging](#)-modulen.
2. Klikk på [Åpen eksport](#) i [Kommuniser](#)-gruppen på [Fullfør](#)-fanen.
3. Velg mappen hvor du vil lagre behandlingsplanen
4. Klikk på [Eksporter](#).
5. Det vises en melding som bekrefter at lagringen er utført, samt stedet der filen er lagret. Klikk på [OK](#) for å lukke den.

Kirurgisk plan i X-Guide™

X-Guide™ er et navigasjonssystem i 3D for tannimplantater som bidrar til å overføre behandlingsplanen til pasienten og sørger for interaktiv veiledning under kirurgi.



Advarsel

Vær klar over at det kan være forskjeller i visualisering av data (f.eks. orientering av visningsfelt, objektfarger) og advarsler mellom DTX Studio Implant og X-Guide™-programvaren.

Opprette en kirurgisk plan i X-Guide™

1. I **Diskuter**-modulen klikker du på **X-Guide**  i **Kommuniser**-gruppen.
2. Velg den riktige, egnede planleggingsfilen fra listen.
3. Klikk på **Neste**.
4. Fyll ut detaljene på **Tilpass operasjonsoppsett**-siden. Anonymiser ved behov.
5. Klikk på **Fullfør**.

Eksportere en kirurgisk plan fra X-Guide™

1. I **Diskuter**-modulen velger du en kirurgisk plan i **X-Guide™** på **Kommunikasjonselementer**-listen.
2. Klikk på **Eksporter**  i **X-Guide**-gruppen på **Kommunikasjon**-fanen.



Advarsel

DTX Studio Implant støtter kun et utvalg av implantater som skal eksporteres til X-Guide™. Ikke-støttede implantater vil ikke være inkludert i X-Guide™-filen.

3. I dialogboksen klikker du på **Søk** og går til plasseringen der X-Guide™-kirurgifilen skal lagres.
4. Klikk på **Lagre**.

Kirurgisk plan i OsseoCare™ Pro

OsseoCare™ Pro er en kirurgimaskin som betjenes via iPad® fra Apple, og som gjør det mulig å planlegge og konfigurere behandlingssekvensen før operasjonen. Enheten er beregnet for å brukes av tannleger og kirurger til å skjære i hardt vev og bløtvev med egnede verktøy.

En kirurgisk plan i OsseoCare™ Pro kombinerer de fortløpende trinnene i behandlingssekvensen og veileder tannlegen eller kirurgen gjennom den kirurgiske prosessen steg for steg via iPad®-appen.

Opprette en kirurgisk plan i OsseoCare™ Pro

1. I [Diskuter](#)-modulen klikker du på [OsseoCare Pro](#)  i [Kommuniser](#)-gruppen.
2. Velg den riktige, egnede planleggingsfilen fra listen.
3. Klikk på [Neste](#).
4. Fyll ut detaljene på [Tilpass operasjonsoppsett](#)-siden.
5. Klikk på [Fullfør](#). Den ferdige kirurgiske planen lastes som standard opp til skyen.
6. Klikk på [Jeg er enig](#) i den juridiske ansvarsfraskrivelsen for å fortsette.

Skannerkalibrering

Notat

Denne prosedyren for skannerkalibrering er kun nødvendig for å opprette en radiografisk guide.

For å overføre behandlingsplanen korrekt og nøyaktig fra datamaskinen til pasienten ved kirurgi, er det viktig å generere en kirurgisk mal som passer, så vel som den radiografiske guiden til det myke og harde vevet rundt. Her kreves det en nøyaktig 1:1-kopi digitalisert av en (CB)CT-skanner samt en virtuell radiografisk guide-modell som opprettes i programvaren ved hjelp av egnede skanneravhengige innstillinger. Identifiseringen av denne verdien, "ISO-verdien", kan gjøres manuelt, ved manuell interaksjon, eller den kan fastslås automatisk ved hjelp av en kalibreringsskanning fra det unike NobelGuide®-kalibreringsobjektet som er skannet av den benyttede skanneren med egnede innstillinger. NobelGuide®-kalibreringsobjektet er et objekt med de samme radiolucente egenskapene som den radiografiske guiden (PMMA), og det har en nøyaktig definert form som er kjent for programvaren. Ved å undersøke referanseskanningen (kalibreringsskanningen) automatisk og sammenligne den med den kjente originalformen, kan DTX Studio Implant automatisk fastslå og anvende den best egnede ISO-verdien (**Kalibrert iso-verdi**) for å hente ut (segmentere) de korrekte målene og formen fra skanningen av radiografisk guide. Alle skannerspesifikke kalibreringssett lagres i programvaren. For hver enkelt skanning av en radiografisk guide, søkes det automatisk etter et egnet kalibreringssett fra "kjente" skannere. Hvis en slik skanner blir oppdaget, blir den korresponderende **kalibrerte iso-verdien** foreslått og tatt i bruk automatisk. Iso-verdieditoren i veiviseren for den radiografiske guiden gir informasjon om kalibreringssettet og typen skanner som benyttes, og om den kalibrerte iso-verdien.

Det anbefales å bruke den kalibrerte iso-verdien når du oppretter en radiografisk guide-modell, hvis det eksporteres en kirurgisk mal til produksjon. Hvis kalibreringssettet ikke benyttes, vises det en kalibreringsadvarsel (**Radiografisk guide-modell ble opprettet uten en kalibrert iso-verdi**) for å understreke hvor viktig dette automatiserte trinnet er.

Når kalibrering benyttes, viser redigeringsprogrammet for iso-verdien den **kalibrerte iso-verdien** i stedet for **iso-verdien**. Hvis du bruker et kalibreringssett som er generert av systemet, vises **Foreslått iso-verdi**.

Opprett nytt kalibreringssett

Første gang bildedata fra en bestemt (CB)CT-skanner og en spesifikk protokoll benyttes, må det opprettes et nytt kalibreringssett. Når dette kalibreringssettet er utarbeidet, kan det brukes til alle pasienter som skannes med denne bildetakingsenheten. Det anbefales å opprette et nytt kalibreringssett minst hver sjette måned eller når bildetakingsenheten har blitt oppdatert, oppgradert eller det har blitt utført vedlikehold.

Du kan opprette et nytt kalibreringssett ved å klikke på **Ny**  i **Kalibreringssett**-gruppen i **Skanner**-fanen i **Kontor**-modulen. **Opprett kalibrering**-veiviseren startes.

Kalibreringsveiviseren fører deg gjennom kalibreringsprosedyren i tre trinn:

1. Laste DICOM-filene for kalibreringen
2. Beregn kalibreringsinnstillinger
3. Fyll ut detaljene og lagre kalibreringssettet

Teknisk støtte

Hvis du støter på problemer, kan du kontakte teknisk støtte for DTX Studio:

support@dtxstudio.com

<https://tech.dexis.com/support>

OBSOLETE




Nobel Biocare AB
Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1,
411 17 Göteborg,
Sweden

www.nobelbiocare.com

Distribueres i Australia av:


Nobel Biocare Australia Pty Ltd
Level 4/7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW 2114
Australia

Telefon: +61 1800 804 597

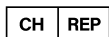

Representant/importør i Sveits:

Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
Switzerland

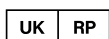

Ansvarlig person i Storbritannia:

Nobel Biocare UK Ltd.
4 Longwalk Road
Stockley Park
Uxbridge UB11 1FE
United Kingdom

Distribueres i New Zealand av:

Nobel Biocare New Zealand Ltd
33 Spartan Road
Takanini, Auckland, 2105
New Zealand

Telefon: +64 0800 441 657

Distribueres i Tyrkia av:

EOT Dental
Sağlık Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş
Nişpetiye Mah. Aytar Cad.
Metro İş Merkezi No: 10/7
Beşiktaş İSTANBUL
Telefon: +90 2123614901



ifu.dtxstudio.com/symbolglossary
ifu.dtxstudio.com