



DTX Studio™ Implant

Versão 3.6

Instruções de utilização

Índice

Índice	2
Introdução	8
Limitação de responsabilidade	8
Descrição do dispositivo	8
Utilização prevista	8
Modo de utilização/Indicações de utilização	8
Utilizador previsto e grupo-alvo de pacientes previsto	9
Compatibilidade necessária com outros dispositivos	9
Dispositivos com Função de Medição	9
Contraindicações	9
Cibersegurança	9
Compatibilidade	9
Interoperabilidade	10
Vida útil prevista	10
Requisitos e limitações de desempenho	10
Benefícios clínicos e efeitos secundários indesejáveis	10
Instalações e formação	10
Aviso relativamente a incidentes graves	10
Utilização profissional	10
Requisitos do sistema	10
Instalação do software	10
Instruções de manuseamento	10
Avisos, advertências e precauções	11
Avisos	11
Avisos na inicialização do SmartFusion™	11
Avisos de digitalizações	11
Avisos da férula	12
Avisos clínicos - Gerais	12
Avisos clínicos - Implante	12
Avisos configuráveis	12
Aviso entre os implantes e os nervos	13
Aviso entre os implantes e as raízes do dente	13
Advertências/Precauções	13

Requisitos do sistema	15
Sistemas operativos	15
Requisitos	15
Iniciar	16
O conceito de tratamento	16
Abrir o DTX Studio Implant	16
Ações básicas em ficheiros de pacientes	16
Criar um ficheiro de paciente novo	16
Abrir um ficheiro de paciente existente	16
Abrir um plano de tratamento	16
Guardar um plano de tratamento	16
Copiar um plano de tratamento	16
Alterar o nome ou eliminar um plano de tratamento	17
Fechar um plano de tratamento	17
Fechar o ficheiro de um paciente	17
Identificação do utilizador	18
Iniciar sessão	18
Autenticação de dois fatores	18
Mudar de utilizador	18
Gerir detalhes da conta	18
Configuração em consultório	19
Instalar a configuração em consultório	19
Gerir contas	19
Adicionar utilizadores	19
Visão geral do software	20
Sistema da Área de trabalho	21
O que é uma área de trabalho?	21
Barra de ferramentas	21
Interagir com os Visualizadores	22
Manipular objetos	22
Mostrar ou Ocultar um Objeto	22
Manipular um corte virtual de tomografia computadorizada	23
Percorrer imagens de tomografia computadorizada	23
Nível e janela	23
Nível/janela em 2D	23
Nível/janela em 3D	23

Modelo do paciente	24
Criar um modelo do paciente em 3D	24
Criar um modelo do paciente	24
Editar a forma da curva de corte virtual	24
Ajustar a forma da curva de corte virtual	24
Manipular os pontos de controlo existentes	24
Utilizar pontos de controlo do dente	25
Ajustar o tamanho do corte virtual de secção transversal	25
Visualização do modelo do paciente	25
O que é uma Função de transferência?	25
Como limpar a visualização do modelo do paciente	26
Utilizar Máscara de paciente	26
Apagar artefactos ósseos	26
Desativar máscara	27
Repor a máscara do paciente	27
Manter a parte de maiores dimensões	27
Informações sobre a prótese dentária	28
Configuração do diagnóstico	28
Digitalização dentária	28
Digitalização do molde dentário	28
Encomendar uma digitalização do molde dentário	28
Digitalização intraoral ou outra digitalização de ambiente de trabalho	28
SmartFusion™	29
Adicionar a digitalização dentária ao modelo do paciente	29
Inicialização do SmartFusion™	31
Procedimento de inicialização	31
Como iniciar o assistente de inicialização	31
Como definir pontos correspondentes no assistente de inicialização	32
Inserir um ponto	32
Remover pontos seleccionados	32
Remover todos os pontos	32
Avisos na inicialização do SmartFusion™	33
Digitalização facial	33
Adicionar uma digitalização facial ao modelo do paciente	33
Acertar uma Digitalização Facial	34
SmartSetup™	34
Calcular um SmartSetup™	34
Ajustar as definições de SmartSetup™	34
Editar um SmartSetup™	35

Modelo da Guia Radiográfica	36
Criar um Modelo de Guia Radiográfica	36
Superfície do entalhe	36
Diagnóstico	37
Nervos	37
Dentes	37
Remover dentes do modelo	37
Remover todos os dentes em simultâneo	37
Extrair uma restauração unitária	38
Medições	38
Planear Implantes	39
Trabalhar com implantes que não sejam da Nobel Biocare	39
Adicionar implantes a um plano de tratamento	39
Adicionar um implante a um plano de tratamento	39
O Que Significa a Zona Amarela?	40
Posição do dente	40
Diagrama de dentes	40
Manipular um Implante	40
Alterar a orientação do implante	40
Mover um implante	41
Colocar um implante paralelo a outro	41
Colocar todos os implantes em paralelo	41
Pilares	41
Selecionar um pilar adequado para um implante	41
Definir o tipo de cirurgia	42
Diferentes tipos de cirurgia	42
Deslocamento do anel piloto	42
Definir o deslocamento do anel piloto	43
Definir a rotação do anel piloto	43
Plano de corte ósseo	43
Parafusos estabilizadores	44
Adicionar um parafuso estabilizador ao Plano de tratamento	44
Corrigir a Inclinação e a Profundidade de Parafusos Estabilizadores	44
Parafusos estabilizadores e guia radiográfica (procedimento de trabalho edêntulo)	45
Parafusos estabilizadores e digitalização dentária (procedimento de trabalho parcialmente edêntulo)	46

Inspecionar um Plano de tratamento	47
Trabalhar com a funcionalidade de encaixe	47
Encaixar o corte virtual de secção transversal num implante ou parafuso estabilizador	47
Avançar para outro implante ou parafuso estabilizador	47
Regressar ao modo de curva	47
Inspecionar um Plano de tratamento	48
Criar uma férula cirúrgica	48
Criar uma férula cirúrgica de acordo com o plano de tratamento	48
Inspecionar a férula cirúrgica	48
Editar a férula cirúrgica virtual	49
Aprovar um plano de tratamento	49
Encomendas	50
Trabalhar com conexões	50
Acrescentar uma conexão	50
Aceitar uma conexão	50
Trabalhar com Encomendas de produtos	51
Criar uma encomenda de produto	51
Enviar uma encomenda de produto	51
Trabalhar com Encomendas de digitalização do modelo	52
Criar uma encomenda de digitalização de modelo	52
Trabalhar com encomendas de TempShell	52
O fluxo de trabalho do TempShell	52
Criar um pedido LabDesign	53
Criar uma encomenda de TempShell	53
Acrescentar um LabDesign ao plano de tratamento	53
Adicionar um TempShell ao Plano de tratamento	54
Trabalhar com pedidos de serviço	54
O fluxo de trabalho típico de um pedido de serviço através do DTX Studio Go	54
Responder a um pedido de serviço	54
O procedimento de trabalho de um pedido de serviço "local"	55
Exportar um plano aprovado	55
Trabalhar com o Assistant	56

Sistema de aviso do DTX Studio Implant	57
Avisos DTX Studio Implant	57
Avisos da férula	58
Avisos clínicos	59
Avisos gerais	59
Avisos do implante	60
Avisos configuráveis	61
Restrições técnicas	61
Distância mínima entre anéis cirúrgicos	61
Distância mínima entre anéis e implantes/anéis e parafusos estabilizadores	62
Colisão entre implantes, parafusos estabilizadores ou implantes e parafusos estabilizadores	62
Relação entre o anel cirúrgico e a guia radiográfica e/ou a digitalização dentária	62
Relação entre o Anel Cirúrgico e o Osso	64
A guia radiográfica foi criada sem um valor iso calibrado.	64
Discutir o plano de tratamento	65
Relatórios	65
Criar um Relatório	65
Imprimir um Relatório	65
Ficheiros do Visualizador	66
Criar um Ficheiro do Visualizador	66
Abrir um Ficheiro do Viewer através do DTX Studio Implant	66
Abrir um ficheiro do Visualizador através da hiperligação de transferência	66
Apresentações do Communicator	67
Criar uma apresentação do Communicator	67
Exportar um Plano de tratamento para consulta ou cirurgia	68
Exportar para o DTX Studio Clinic	68
Exportar o plano de tratamento para visualização noutro software (Abrir exportação)	68
Plano cirúrgico X-Guide™	69
Criar um plano cirúrgico X-Guide™	69
Exportar um plano cirúrgico X-Guide™	69
Plano cirúrgico OsseoCare™ Pro	70
Criar um plano cirúrgico OsseoCare™ Pro	70
Calibração do scanner	71
Criar um Novo Conjunto de Calibração	71
Apoio técnico	72

Introdução

Limitação de responsabilidade

Este produto é parte integrante de um conceito geral e só pode ser utilizado em conjunto com os produtos originais associados, em conformidade com as instruções e recomendações da Nobel Biocare. A utilização não recomendada de produtos fabricados por terceiros em conjunto com os produtos Nobel Biocare irá tornar nula toda e qualquer garantia ou outra obrigação, expressa ou implícita, da Nobel Biocare. O utilizador de produtos Nobel Biocare tem o dever de determinar se qualquer produto é ou não adequado para um paciente e circunstâncias específicos. A Nobel Biocare não assume qualquer responsabilidade, expressa ou implícita, e não será responsabilizada por quaisquer danos diretos, indiretos ou punitivos ou de outro tipo, resultantes de ou associados a erros de avaliação ou prática profissional na utilização de produtos Nobel Biocare. O clínico também é obrigado a estudar regularmente os desenvolvimentos mais recentes relativos aos produtos da Nobel Biocare e respetivas aplicações. Em casos de dúvida, o clínico deverá contactar a Nobel Biocare. Uma vez que a utilização deste produto é controlada pelo médico dentista, esta é da sua responsabilidade. A Nobel Biocare não assume qualquer responsabilidade por danos daí resultantes. Tenha em atenção que alguns produtos descritos nestas instruções de utilização poderão não estar aprovados, ter autorização de introdução no mercado ou estar licenciados para venda em todos os mercados.

Antes de utilizar o DTX Studio Implant, leia atentamente este documento de Instruções de Utilização e guarde-o para consulta posterior.

Tenha em atenção que as informações fornecidas neste documento destinam-se a ajudá-lo a começar.

Descrição do dispositivo

O DTX Studio Implant é um software, com base em imagens, para uso clínico de apoio ao processo de diagnóstico e planeamento de tratamentos dentários, craniomaxilofaciais ou tratamentos relacionados.

O software de apoio ao processo de diagnóstico e planeamento de tratamentos dentários, craniomaxilofaciais ou relacionados DTX Studio Implant oferece uma técnica de visualização de imagens de tomografia computadorizada do paciente para o processo de diagnóstico e planeamento de tratamentos. Além disso, podem ser visualizados dados de imagem 2D, como imagens fotográficas e radiografias e digitalizações de superfície da situação intraoral, para reunir dados de imagem para o diagnóstico. Podem ser acrescentadas e visualizadas informações protéticas, para apoiar o planeamento do implante protético. O plano cirúrgico, incluindo as posições dos implantes e as informações da prótese dentária, pode ser exportado para o desenho das restaurações dentárias no DTX Studio Lab.

O DTX Studio Implant apoia o conceito clínico da NobelGuide® relativamente a uma reabilitação oral com base em implantes dentários. É parte integrante de todo o Sistema de Cirurgia Guiada (o “conceito ‘NobelGuide®’) relativamente a tratamentos de maxilares total ou parcialmente edêntulos, incluindo casos de restaurações unitárias.

Os utilizadores do DTX Studio Implant podem optar por se inscrever em sessões regulares de treino e formação para dominar o software de planeamento. Para mais informações, consulte os cursos disponíveis através do website da Nobel Biocare em www.nobelbiocare.com.

Utilização prevista

A utilização prevista do software é auxiliar no processo de diagnóstico e no planeamento de tratamentos para procedimentos dentários e craniomaxilofaciais.

Modo de utilização/ Indicações de utilização

O DTX Studio Implant é uma interface de software para a transferência e visualização de informações de imagens 2D e 3D, de equipamentos como scanners de tomografia computadorizada, com a finalidade de ajudar no processo de diagnóstico, no planeamento de tratamentos e no acompanhamento nas regiões dentária e craniomaxilofacial.

O DTX Studio Implant pode ser utilizado para ajudar em cirurgia guiada de implantes, disponibilizar informações do desenho e analisar soluções protéticas dentárias. Os resultados podem ser exportados a fim de serem fabricados.

Utilizador previsto e grupo-alvo de pacientes previsto

O DTX Studio Implant é utilizado por uma equipa de tratamento interdisciplinar, para auxiliar no tratamento de pacientes que são submetidos a tratamentos dentário e craniomaxilofacial ou tratamentos relacionados.

Destina-se a pacientes que necessitam de ser submetidos a tratamento dentário.

Compatibilidade necessária com outros dispositivos

- Software DTX Studio Implant Viewer
- Aplicação NobelClinician Communicator iPad
- Aplicação OsseoCare™ Pro iPad
- DTX Studio Lab
- O DTX Studio Implant tem de ser compatível com os sistemas operativos Windows e Mac mais utilizados, incluindo as versões mais recentes.
- X-Guide™ – Sistema de navegação 3D (X-Nav Technologies, LLC)
- DTX Studio Clinic
- Conceito e férulas cirúrgicas NobelGuide®
- Implantes Nobel Biocare e pilares padrão
- Para importação dos dados da superfície para o DTX Studio Implant: Digitalização da superfície adquirida através de scanner NobelProcera® 2G e Kavo LS 3. Formato encriptado (*.nxa)
- Implantes de outros fornecedores para planeamento dos tratamentos e cirurgia guiada – apenas perfuração piloto.

- Importar DICOM (de scanners (CB)CT) e importar STL/PLY (de scanners do ambiente de trabalho ou intraorais).
- O DTX Studio Implant tem de ser compatível com o portal online – DTX Studio Go.

Dispositivos com Função de Medição

A precisão das medições depende dos dados da imagem, do hardware do scanner utilizado, da respetiva calibragem e das configurações de captação. A medição não pode ser mais precisa do que a resolução da imagem. O software DTX Studio Implant indica o valor, arredondado para um dígito depois do ponto decimal, com base nos pontos escolhidos pelo utilizador.

Contraindicações

Nenhuma contraindicação identificada para o DTX Studio Implant.

Cibersegurança

Para além disso, recomenda-se que disponha de um software antivírus e antimalware ativo e atualizado, juntamente com uma firewall configurada corretamente no computador em que o DTX Studio Implant será utilizado.

Além disso, bloqueie o seu computador sempre que o mesmo não estiver a ser utilizado. Caso não o faça, tal pode originar uma manipulação indesejada do diagnóstico e da planificação ou do tratamento.

Compatibilidade

O DTX Studio Implant não é ligado a outros dispositivos médicos, o software é compatível com versões anteriores do DTX Studio Implant.

Interoperabilidade

O DTX Studio Implant é interoperável com o DTX Studio Clinic e o DTX Studio Lab.

Vida útil prevista

A vida útil prevista para o software é de três anos. Quando utilizado nos sistemas operativos suportados, o software manterá o desempenho indicado na utilização prevista.

Requisitos e limitações de desempenho

O DTX Studio Implant tem dependências nos sistemas operativos com os quais é utilizado. Por conseguinte, é importante ter a certeza que o DTX Studio Implant é utilizado apenas com sistemas operativos aprovados. Encontram-se disponíveis mais informações acerca dos sistemas operativos aprovados no documento 'Requisitos do sistema' na página 15.

Benefícios clínicos e efeitos secundários indesejáveis

O DTX Studio Implant é um componente de tratamento com um sistema de implante dentário e/ou coroas e pontes dentárias. Como um benefício clínico do tratamento, prevê-se para os pacientes a substituição de dentes que têm em falta e/ou restauro de coroas.

Não são conhecidos efeitos secundários.

Instalações e formação

Recomenda-se vivamente que os médicos dentistas, quer sejam utilizadores novos ou experientes do nosso software, leiam as instruções de utilização antes de utilizarem o software pela primeira vez. Mediante pedido, pode ser oferecida uma vasta gama de cursos para vários níveis de conhecimentos e experiência.

Para obter mais informações, visite o nosso website de formação em tw.dtxstudio.com.

Aviso relativamente a incidentes graves

Caso ocorra um incidente grave durante a utilização deste dispositivo ou resultante da utilização do mesmo, deverá comunicá-lo ao fabricante e à sua autoridade nacional. As informações de contacto do fabricante deste dispositivo para a comunicação de incidentes graves são as seguintes:

Nobel Biocare AB

<https://www.nobelbiocare.com/complaint-form>

Utilização profissional

O DTX Studio Implant é de utilização exclusivamente profissional.

Requisitos do sistema

Recomendamos que consulte os 'Requisitos do sistema' na página 15 antes de começar a instalar o software. Para obter informações sobre os requisitos mínimos e/ou recomendados, contacte a assistência ao cliente. As novas versões do software podem necessitar de hardware ou um sistema operativo com requisitos mais elevados.

Instalação do software

Para obter informações sobre como instalar o software, contacte o técnico autorizado ou a assistência ao cliente.

Instruções de manuseamento

Para obter informações detalhadas sobre a utilização do software, consulte as instruções detalhadas descritas mais à frente nestas Instruções de Utilização.

Avisos, advertências e precauções

Avisos

São apresentados os seguintes avisos no software.



- Este programa de planeamento não verifica automaticamente todas as restrições técnicas! Em certos casos, pode não ser possível a produção das férulas cirúrgicas, mesmo que não seja automaticamente apresentada nenhuma limitação técnica no software.
- O utilizador deve estar familiarizado com a interpretação de dados de tomografia computadorizada e com a forma como estes dados são visualizados através do processamento de volume.
- Um alinhamento impróprio da digitalização da tomografia CBCT e da digitalização da superfície pode resultar numa férula cirúrgica incorreta e não pode ser usada para cirurgia.
- Tenha em atenção que podem existir diferenças na visualização dos dados (por ex., orientação do visualizador, cores dos objetos), bem como nos avisos, entre os softwares DTX Studio Implant e X-Guide™.
- O DTX Studio Implant suporta apenas uma seleção de implantes a exportar para o X-Guide™. Os implantes não suportados não serão incluídos no ficheiro do X-Guide™.



Avisos na inicialização do SmartFusion™

- O alinhamento do modelo dentário foi ajustado manualmente.
O alinhamento entre o modelo do paciente e o modelo dentário foi ajustado manualmente. Verifique e confirme que o modelo dentário está corretamente alinhado com a tomografia computadorizada (CB), uma vez que a existência de desvios impede o correto posicionamento dos implantes.
- Um ou mais pares de pontos não correspondem.
- Distribuição insuficiente dos pontos definidos na digitalização dentária.
- Indique, pelo menos, três pontos correspondentes.
- Verifique o alinhamento entre a digitalização dentária e a férula do paciente e, se estiver incorreto ou impreciso, recalcule o alinhamento no assistente Editar digitalização dentária.



Avisos de digitalizações

Não será possível carregar conjuntos DICOM inválidos. Os conjuntos DICOM podem ser inválidos devido às seguintes razões

- O conjunto DICOM tem menos de dois cortes.
- O conjunto DICOM possui um incremento de zero entre os cortes.
- O conjunto DICOM possui incrementos inconsistentes entre os cortes.
- O conjunto DICOM não possui orientação da imagem.
- O conjunto DICOM possui uma orientação da imagem incorreta.
- A espessura do corte do conjunto DICOM é demasiado grande.
- O conjunto DICOM possui um detetor de inclinação do suporte.
- O incremento entre os cortes do conjunto DICOM é demasiado grande (é possível utilizar este conjunto DICOM, mas tal ação será da sua inteira responsabilidade).



Avisos da férula

- Os anéis estão em colisão.*
- O implante e o anel estão em colisão.
- O parafuso estabilizador e o anel estão em colisão.
- O dente anotado e o anel estão em colisão.
- O anel do parafuso estabilizador está demasiado próximo da digitalização dentária.
- O anel piloto está demasiado perto da digitalização dentária.*
- O anel completamente guiado está demasiado próximo da digitalização dentária.

* Não é possível produzir a férula cirúrgica até este aviso estar resolvido.



Avisos clínicos - Gerais

- Não estão planeados parafusos estabilizadores.
- Os parafusos estabilizadores estão em colisão.
- A guia radiográfica não foi calibrada.
- Tratamento planeado com produtos não instalados.*
- Está ativada a visualização de baixa qualidade.**
- O alinhamento do modelo dentário foi ajustado manualmente.
- O alinhamento SmartFusion falhou.*
- Verifique o alinhamento do SmartFusion

* Não é possível produzir a férula cirúrgica antes de resolver este aviso.

** A visualização com baixa qualidade de imagem aumenta o risco de algumas características anatómicas não ficarem visíveis no modelo do paciente. A definição apenas influenciará a qualidade do volume 3D. Os cortes virtuais de tomografia computadorizada não serão afetados.



Avisos clínicos - Implante

Importante

Os valores que desencadeiam os avisos de implante devem ser definidos de acordo com as competências clínicas e experiência do utilizador.

- Os implantes estão em colisão.
- O implante e o parafuso estabilizador estão em colisão.
- O implante está demasiado próximo de um nervo anotado.*
- O implante está demasiado próximo de um dente anotado.*
- O DTX Studio Implant suporta apenas uma seleção de implantes a exportar para o X-Guide. Os implantes não suportados não serão incluídos no ficheiro do X-Guide.

* Estes avisos são configuráveis



Avisos configuráveis

Os avisos configuráveis baseiam-se num volume em torno do implante (isto é, o volume de aviso). Quando este volume colidir com uma estrutura anatómica anotada, é emitido um aviso.

O volume de aviso é definido com base numa distância predefinida. De acordo com a predefinição, esta distância foi definida como 1.5 mm, a distância mínima. Com esta distância mínima, o volume de aviso coincide com a zona amarela (que representa uma distância de 1.5 mm em torno do implante e uma distância de 2 x 1.5 mm (3.0 mm) no ápice). O volume de aviso pode aumentar. Como se vê na imagem (para uma distância exemplar de 4.0 mm), o volume de aviso é colocado à escala.



Aviso entre os implantes e os nervos

Quando um implante é colocado demasiado perto de um nervo anotado (ou seja, quando o volume de aviso colide com a visualização do nervo anotado) é emitido um aviso. O implante afetado é apresentado (se ainda não estiver visível) e fica cor de laranja.

Aviso entre os implantes e as raízes do dente

Quando um implante é colocado demasiado perto de uma raiz do dente (ou seja, quando o volume de aviso colide com o dente anotado), é emitido um aviso. O implante é apresentado e fica cor-de-laranja.

Nota

A distância mínima do volume de aviso deve ser definida em DTX Studio Implant > Preferências gerais. Os valores são guardados no computador em que está a trabalhar. Ao abrir o plano de tratamento num computador diferente do utilizado para a criação do plano, os avisos são apresentados em função das definições do computador que está a ser utilizado. Isso pode resultar em diferentes avisos com base nas definições do computador. Os valores configuráveis podem ser ajustados nas definições e, quando é emitido um aviso, são apresentados na visão geral do aviso.

Advertências/Precauções



- Recomendamos vivamente que os utilizadores, novos ou experientes, de implantes dentários, próteses dentárias e o software associado façam sempre uma formação especial antes de começar um novo método de tratamento. A Nobel Biocare oferece uma vasta gama de cursos para vários níveis de conhecimentos e experiência. Para mais informações, visite www.nobelbiocare.com.
- Quando utilizar um novo dispositivo ou método de tratamento pela primeira vez, poderá trabalhar com um colega experiente no novo dispositivo ou método de tratamento, a fim de evitar possíveis complicações. A Nobel Biocare tem uma rede global de mentores disponíveis para esse propósito.
- Não é possível garantir o sucesso em 100% dos implantes. O incumprimento das indicações de utilização do produto e o(s) procedimento(s) cirúrgicos ou de manuseamento podem resultar em falha. Relativamente aos pacientes pediátricos, não é recomendado o tratamento de rotina até que tenha sido corretamente documentado o fim da fase de crescimento do maxilar.
- Os défices pré-operatórios de tecidos duros ou moles podem originar resultados estéticos insatisfatórios ou ângulos desfavoráveis do implante. Recomendamos vivamente que a férula cirúrgica NobelGuide® e as próteses dentárias duplicadas sejam utilizadas apenas com implantes, instrumentos cirúrgicos e componentes protéticos adequados da Nobel Biocare, já que a combinação de componentes que não sejam concebidos para utilização conjunta pode conduzir à falha mecânica e/ou instrumental, danos nos tecidos ou resultados estéticos pouco satisfatórios.
- Antes de planear qualquer procedimento cirúrgico extraoral, ou seja, um tratamento craniomaxilofacial com utilização de implantes dentários fora da área dentária ou zigomática, compete ao utilizador verificar se o implante foi ou não concebido para uso extraoral.
- Para além disso, recomenda-se que disponha de um software antivírus e antimalware ativo e atualizado, juntamente com uma firewall configurada corretamente no computador em que o DTX Studio Implant (NobelClinician®) será utilizado.



- Nos Estados Unidos e em alguns outros mercados, uma férula cirúrgica para colocação do implante dentário endo-ósseo é um dispositivo médico. Contacte a sua agência de regulação local para obter informações sobre as condições e requisitos regulamentares relativos ao fabrico destas férulas cirúrgicas.
- Quando são acionados avisos devido aos cilindros, tais avisos são calculados com base numa estimativa da forma do produto.
- O desconhecimento ou falta de noções sobre como funciona o software pode resultar no atraso ou remarcação do diagnóstico e planeamento ou do tratamento propriamente dito ou pode resultar num plano de tratamento incorreto.
- Ao utilizar as ferramentas de diagnóstico e planeamento fornecidas no software, é importante prestar particular atenção:
 - à exatidão das indicações feitas (visualizações, medições, estruturas críticas, dados importados, planeamento de implantes).
 - à exatidão do resultado das funções automatizadas (o alinhamento dos scanners intraorais, a configuração de dentes virtuais...)
 - aos ficheiros stl da férula cirúrgica desenhada e ao seu ajuste ideal à boca do doente, de acordo com o plano desenvolvido.
 - aos dados para ver se estão atualizados e não desatualizados

Caso não o faça, aumenta o risco de ter de rever o diagnóstico e o planeamento ou o tratamento que, por sua vez, pode resultar num atraso ou remarcação do diagnóstico e planeamento ou do tratamento propriamente dito ou pode resultar num plano de tratamento incorreto.

- Recomenda-se particular atenção ao carregar os dados do paciente. Dados incorretos e incompletos podem resultar num plano de tratamento incorreto.
- Ao extrair do software um relatório ou dados do paciente, é importante saber que os dados do paciente que não foram alvo de anonimização podem ser indevidamente utilizados sem o consentimento do paciente.
- Recomenda-se particular atenção ao modo de representação e às marcas de orientação dos visualizadores. Uma orientação ou representação incorreta do paciente pode resultar num plano de tratamento incorreto.
- Após a atualização da versão do software, recomenda-se que proceda à verificação das definições críticas dos casos de pacientes e/ou planos de tratamento abertos para se certificar de que essas definições estão corretas na nova versão de software. Configurações incorretas podem resultar num atraso ou remarcação de um diagnóstico e planeamento ou do tratamento propriamente dito ou podem resultar num plano de tratamento incorreto.
- Para além disso, recomenda-se que disponha de um software antivírus e antimalware ativo e atualizado, juntamente com uma firewall configurada corretamente no computador em que o DTX Studio Implant será utilizado. Além disso, bloqueie o computador sempre que o mesmo não estiver a ser utilizado. Caso não o faça, tal pode originar uma manipulação indesejada do diagnóstico e da planificação ou do tratamento.
- Recomenda-se particular atenção ao planeamento de implante criado e ao posicionamento dos implantes em relação uns aos outros e a outras estruturas anatómicas importantes. Deve também prestar-se particular atenção aos sinais de aviso no software. Além disso, verifique sempre que foi selecionado o planeamento de implante correto para exportação e que o plano de implante exportado contém todas as informações necessárias para a cirurgia de implantes. Caso não o faça, aumenta o risco de ter de rever o diagnóstico e o planeamento ou o tratamento que, por sua vez, pode resultar num atraso ou remarcação do diagnóstico e planeamento ou do tratamento propriamente dito ou pode resultar num plano de tratamento incorreto.

Requisitos do sistema

Sistemas operativos

- Windows® 11 ou 10 de 64 bits (edição Pro e Enterprise) no computador de secretária ou portátil.
- macOS Sequoia (15), Sonoma (14), Ventura (13) ou Monterey (12) (Mac com processador Intel e Apple Silicon Mac com chip M1 ou superior) em dispositivos iMac, Mac Mini, Mac Pro, MacBook Pro e MacBook Air.

Nota

As placas gráficas de algumas configurações do MacBook Air® e Mac® Mini têm restrições no que diz respeito à renderização de volume. Considere a seleção de renderização de volumes de baixa resolução.

Requisitos

CPU	Dual-core / velocidade do relógio de 3 GHz
RAM	8 GB
Placa gráfica	Placa gráfica suplementar dedicada com suporte 3D eficaz (OpenGL 3.3) e 2 GB de memória ou mais (como AMD ou NVIDIA). Para ecrãs 4K: 4 GB de memória ou mais. São suportados CPU Intel® de 6.ª geração ou superior (com GPU de 9.ª geração ou superior incorporados). Para ver a versão OpenGL® da sua placa gráfica, vá a http://realtech-vr.com/admin/glview .
Espaço em disco	5 GB de espaço livre no disco
Rede	Ligação à Internet de banda larga com 3 Mbps de velocidade de carregamento e 30 Mbps de velocidade de descarregamento.
Monitor	Full HD (1920×1080) ou superior.

Iniciar

O conceito de tratamento

Um **tratamento** inclui todos os **planos de tratamento** relativos a um paciente. Pode iniciar-se um novo tratamento quando se cria um novo paciente ou quando se trabalha com um paciente existente. Por exemplo, pode criar tratamentos separados para o maxilar e a mandíbula.

Um **plano de tratamento** contém o modelo básico do paciente, a digitalização dentária, o enceramento e/ou a guia radiográfica, bem como todos os produtos na atual configuração de cena para um paciente específico.

Abrir o DTX Studio Implant

Para abrir o DTX Studio Implant, clique duas vezes no ícone de atalho  do ambiente de trabalho. O software é aberto no módulo Office, permitindo que inicie sessão e comece a trabalhar com ficheiros de pacientes.

Ações básicas em ficheiros de pacientes

Nota

Inicie a sessão no DTX Studio Implant para começar a trabalhar nos ficheiros dos pacientes.

Criar um ficheiro de paciente novo

Para criar um ficheiro de paciente novo, clique em **Novo**  no separador **Registos médicos** na barra de ferramentas. Na caixa de diálogo **Novo paciente** selecione a criação de um modelo 3D do paciente, solicite a digitalização de um molde dentário ou introduza informações sobre o paciente.

Abrir um ficheiro de paciente existente

Para abrir o ficheiro de um paciente, clique duas vezes sobre o nome do paciente na lista. A caixa de diálogo **Registo médico** é apresentada para determinar se pretende ir para o módulo de criação de um plano 3D, introduzir informações sobre o paciente, encomendar produtos ou discutir um plano de tratamento.

Abrir um plano de tratamento

Se um ficheiro de paciente específico estiver aberto e pretender abrir um plano de tratamento para o paciente, clique no separador **DTX Studio Implant** na barra de ferramentas e clique em **Abrir** . Quando aparece a janela **Descrição geral do planeamento**, selecione o plano de tratamento e clique em **Abrir cenário**.

Guardar um plano de tratamento

Para guardar um plano de tratamento, utilize **Guardar**  no separador **DTX Studio Implant** ou prima [CTRL + S].

Copiar um plano de tratamento

Para guardar uma cópia do tratamento, por exemplo, para criar um tratamento para o maxilar oposto com uma cópia dos dados, selecione **Guardar como** no separador **DTX Studio Implant** e selecione **Novo tratamento** .

Alterar o nome ou eliminar um plano de tratamento

Para mudar o nome ou eliminar um plano de tratamento, utilize a opção **Gerir** no separador **DTX Studio Implant**. Isto só é possível quando são cumpridas certas condições específicas.

Fechar um plano de tratamento

Para fechar um plano de tratamento, clique no separador **DTX Studio Implant** na barra de ferramentas e clique em **Fechar Planeamento** 🗑️. O plano de tratamento é fechado e é apresentada a caixa de diálogo **Descrição Geral do Planeamento**.

Fechar o ficheiro de um paciente

Para fechar o ficheiro de um paciente, clique no separador **DTX Studio Implant** da barra de ferramentas e selecione **Encerrar o Paciente** no menu. Quando aparece a caixa de diálogo **Registo médico**, clique em **Encerrar o paciente**. Se existirem alterações não guardadas no ficheiro do paciente, o sistema pergunta o que deve fazer: **Guardar**, **Não guardar** ou **Cancelar** o fecho do ficheiro do paciente.

Identificação do utilizador

O DTX Studio Implant permite o acesso de vários utilizadores ao computador. Para assegurar que somente utilizadores autorizados acedem e utilizam o DTX Studio Implant, é necessária uma identificação de utilizador adequada. O software aplica as definições de utilizador e as regras de privacidade do paciente corretas. É possível estabelecer uma autenticação de dois fatores através do DTX Studio Go para reforçar a segurança.

Iniciar sessão

1. Para abrir o software, clique duas vezes no ícone  do ambiente de trabalho.
2. Selecione o utilizador.
3. Introduza a palavra-passe correspondente.
4. Clique em [Iniciar sessão](#).

Quando iniciar sessão pela primeira vez, introduza a palavra-passe que recebeu com a mensagem de correio eletrónico de registo. Altere a palavra-passe, como solicitado. A palavra-passe deve ser o mais segura e forte possível, sem uma formulação fácil de descobrir (por exemplo, evite referências a dados pessoais, como a data de nascimento, etc.).

Se selecionar [Início de sessão automático](#), a caixa de diálogo de início de sessão no DTX Studio Implant não voltará a ser apresentada no computador utilizado.

Autenticação de dois fatores

Se a autenticação de dois fatores estiver configurada no DTX Studio Go, terá de introduzir uma palavra-passe e um código de verificação com 6 dígitos para iniciar sessão. Ser-lhe-á pedido que introduza um novo código de verificação com 6 dígitos a cada 30 dias.

Mudar de utilizador

No DTX Studio Implant, mude de utilizador clicando em [Mudar de conta](#) no menu [DTX Studio Implant](#) no módulo [My Office](#).

Gerir detalhes da conta

Para consultar detalhes da licença ou da conta, editar detalhes ou alterar a palavra-passe, gerir ligações ou autorizações no consultório, abra a caixa de diálogo [Gerir conta](#):

1. Clique no separador [DTX Studio Implant](#) no módulo [My Office](#).
2. Selecione [Gerir conta](#).
3. A caixa de diálogo [Gerir conta](#) apresenta a informação disponível.

Configuração em consultório

A versão de configuração em consultório do DTX Studio Implant permite múltiplas instalações e o acesso de diversos utilizadores num consultório dentário. Permite o armazenamento central de ficheiros de pacientes numa pasta de rede partilhada, com acesso fácil a esses ficheiros a partir de diferentes localizações.

Instalar a configuração em consultório

Contacte o apoio ao cliente para obter instruções sobre a instalação e registo do DTX Studio Implant.

Gerir contas


Para gerir as contas de utilizador disponíveis num consultório e configurar as respetivas autorizações de acesso, abra a caixa de diálogo [Gerir contas](#) através da opção [Gerir conta](#) no menu [DTX Studio Implant](#).

Adicionar utilizadores

Para adicionar novos utilizadores, contacte o apoio ao cliente ou o apoio técnico local da Nobel Biocare.

Visão geral do software

Os principais componentes da interface gráfica do utilizador são indicados na imagem abaixo.

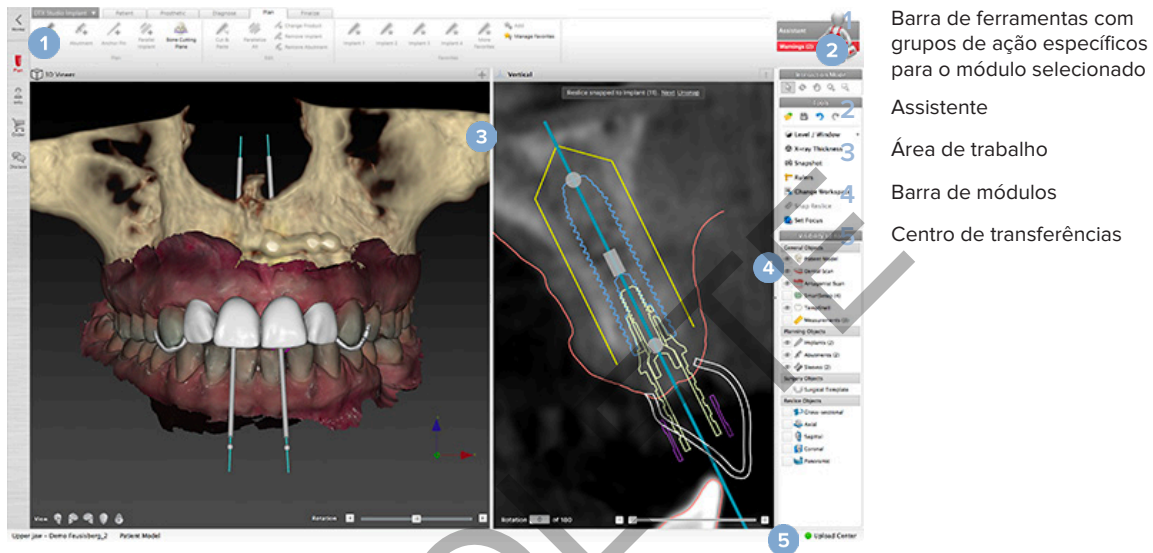

Clique nos ícones na barra de módulos, para navegar através dos diferentes módulos do DTX Studio Implant.


Home


Plan


Info


Order


Discuss

Módulo Início/My Office para gerir os pacientes e conjuntos de calibração.

Módulo de planeamento 3D para importar ficheiros DICOM, criar modelos de paciente e de guia, diagnosticar e planear.

Módulo Informações dos pacientes para guardar as informações dos pacientes e gerir imagens clínicas na **Biblioteca de pacientes**.

Módulo Encomenda para encomendar digitalizações de modelos dentários ou enceramentos, TempShells ou a férula cirúrgica e a prótese dentária em duplicado, em conjunto com componentes estandardizados.

Módulo Discutir para facilitar a comunicação relativa a um plano de tratamento com colegas e pacientes (através de ficheiros do Viewer, relatórios e/ou apresentações do Communicator) e ligar o DTX Studio Implant e o OsseoCare™ Pro através da criação de cirurgias OsseoCare™ Pro.


Faça duplo clique sobre um paciente em **My Office** para ir para uma secção específica relacionada com esse paciente. Clique no **Planeamento 3D** para o diagnóstico e plano de tratamento.

Sistema da Área de trabalho

Durante o planeamento no DTX Studio Implant, é importante conseguir visualizar os dados do paciente de formas diferentes. A vista requerida depende da informação solicitada pelo utilizador. Estes diferentes modos de visualização são designados por áreas de trabalho.

O que é uma área de trabalho?


Uma área de trabalho é um arranjo dos visualizadores 3D e 2D, conjuntamente com painéis de edição na barra lateral à direita do ecrã. Uma área de trabalho permite a visualização e a interação com objetos 3D e/ou dados imagiológicos 2D. Alterne os diferentes modos de visualização disponíveis no sistema para visualizar os dados imagiológicos pré-operatórios.

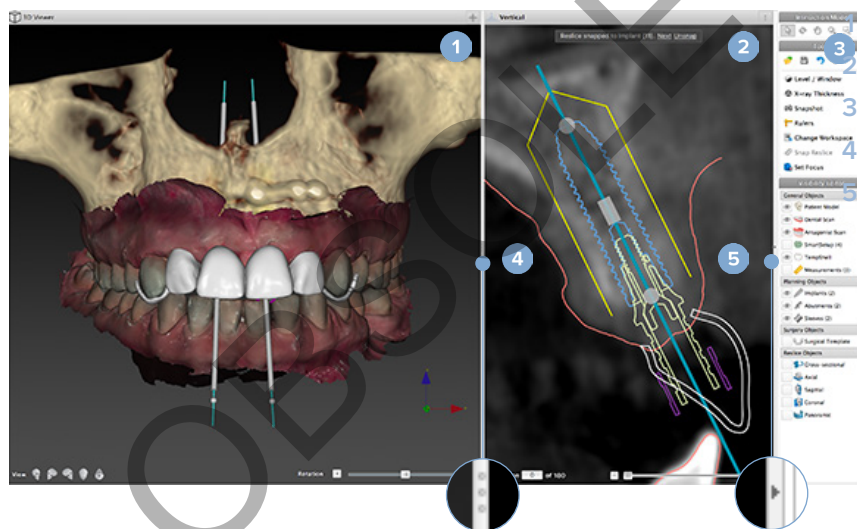

- Visualizador 3D
- Visualizador 2D
- Barra lateral
- Separador
- Botão de colapso

Barra de ferramentas

Na parte superior da área de trabalho, uma barra de ferramentas contextual específica permite aceder às ferramentas necessárias para certas tarefas. No módulo Planeamento, surgem separadores dedicados ao selecionar objetos específicos (por exemplo, um corte virtual de secção transversal, implantes, etc.). Estes separadores dedicados – também designados por separadores contextuais – proporcionam um acesso alternativo a ações que também estão disponíveis nos menus apresentados ao clicar com o botão direito do rato num objeto.

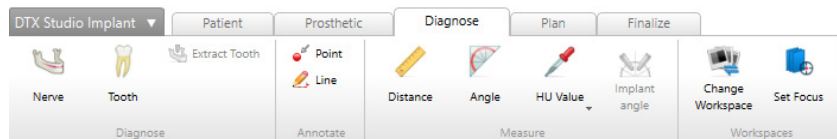

Interagir com os Visualizadores

É possível selecionar vários modos de interação para interagir com modelos 3D. Alterne entre estes modos clicando nos ícones na barra de ferramentas de interação, a partir de um menu de [Interação](#), acessível clicando com o botão direito do rato ou a partir de uma combinação de teclas de atalho.

	Modo de interação	Selecione um objeto ou identifique um objeto para uma ação premindo o botão esquerdo do rato.
	Modo Rotation	Rode a cena 3D (apenas 3D) arrastando o rato.
	Modo Pan	Desloque-se na cena arrastando o rato.
	Modo Zoom	Aumentar ou reduzir a ampliação arrastando o rato.
	Modo Zoom Box	Amplie para focar uma área específica do modelo através do desenho de uma área retangular (apenas em 2D).

Alterne entre os diferentes modos interação através dos atalhos:

Ctrl (Cmd) ou botão do meio do rato	Mude para o modo Deslocar quando estiver em qualquer outro modo. Desde que o botão esteja premido, o modo Deslocar mantém-se ativo. Solte o botão para voltar ao modo original.
Alt	Mude para o modo Rotação quando estiver em qualquer outro modo. Desde que o botão esteja premido, o modo de rotação mantém-se ativo. Solte o botão para voltar ao modo original.
Shift	Muda para o modo Zoom quando estiver em qualquer outro modo. Desde que o botão esteja premido, o modo Zoom mantém-se ativo. Solte o botão para voltar ao modo original.
Tecla de tabulação	Alterne entre o modo de interação e de rotação.

Encontram-se disponíveis várias vistas padrão no visualizador 3D. Clique nos ícones para ir para as correspondentes vistas padrão do modelo.

	Frontal – Vista frontal padrão tecla de atalho [5]
	Esquerda – Vista lateral esquerda padrão tecla de atalho [1]
	Direita – Vista lateral direita padrão tecla de atalho [3]
	De cima para baixo – Vista crânio-caudal padrão tecla de atalho [9]
	De baixo para cima – Vista caudocraniana padrão tecla de atalho [7]

Manipular objetos

Para selecionar um objeto, vá para o modo de interação e clique no objeto. Num visualizador 3D, uma linha de contorno branca indica que o objeto se encontra selecionado. Num visualizador 2D, o objeto selecionado tem um contorno colorido.

Nota

O modelo do paciente é uma exceção neste caso. Não é apresentada nenhuma linha de contorno ao selecionar o modelo do paciente.

Selecione o corte virtual de secção transversal, um implante ou um parafuso estabilizador e aceda a ações afins através da barra de ferramentas específica.

Clique com o botão direito do rato em qualquer objeto para ver o menu de sobreposição com as ações possíveis relacionadas com esse objeto.


Mostrar ou Ocultar um Objeto

Para planejar eficazmente o tratamento de um paciente é importante ver apenas objetos que são relevantes durante a fase de planeamento.

É possível ocultar um único objeto através do menu do botão direito do rato ou da tecla de atalho [H].

Com o [Editor de visibilidade](#), a visibilidade dos objetos padrão pode ser ativada com um único clique.

Encontram-se disponíveis diferentes ícones de visibilidade para cada grupo de objetos:

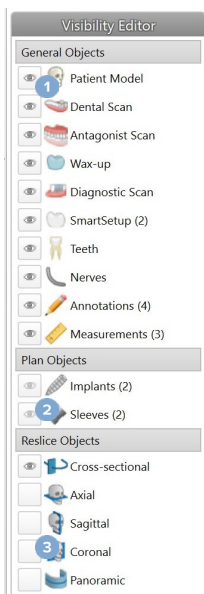

- 1 Quando o ícone preto de visibilidade  é apresentado à frente do grupo, são mostrados todos os objetos pertencentes ao grupo.
- 2 Quando o ícone cinzento de visibilidade  é apresentado à frente do grupo, um ou mais objetos no grupo encontram-se ocultos, enquanto outros continuam a ser mostrados.
- 3 Quando não é apresentado qualquer ícone  à frente do grupo, todos os objetos pertencentes ao grupo estão ocultos.

Manipular um corte virtual de tomografia computadorizada

Percorrer imagens de tomografia computadorizada

O DTX Studio Implant está equipado com várias ferramentas, como a roda de deslocamento do rato, o cursor ou o campo de introdução de corte, que permitem percorrer facilmente os cortes.

Nível e janela

Utilize a ferramenta nível/janela nos visualizadores 2D e 3D para alterar o nível e a janela dos valores utilizados para converter os dados numa imagem ou num modelo. Dependendo do tipo de imagem (2D ou 3D), os resultados são diferentes.

Nível/janela em 2D

O contraste dos cortes virtuais de tomografia computadorizada, bem como as vistas panorâmicas, são definidos pelos valores de janela e nível. A configuração nível/janela define os valores cinzentos apresentados no ecrã. É apresentada uma seleção centrada em volta do valor de nível e com uma largura do valor de janela (uniformemente dividida em ambos os lados do nível). Pode alterar o contraste dos cortes axiais de tomografia computadorizada ajustando estas definições.

O nível é modificado premindo o botão do rato e arrastando o rato para cima e para baixo. A janela é atualizada premindo o botão do rato e arrastando o rato para a esquerda (diminuir) e para a direita (alargar).

Nível/janela em 3D

Ao trabalhar na vista 3D, a ferramenta nível/janela é utilizada para controlar a escala ou o centro da função de transferência, de modo a reduzir a quantidade de ruído no modelo do paciente ou ajustar as definições de cores. Estes ajustes podem melhorar a visualização do modelo do paciente.

Mova o centro da função de transferência sem afetar a amplitude da gama premindo o botão do rato e arrastando o rato para cima ou para baixo. Prima o botão do rato e arraste o rato para a esquerda ou para a direita sobre o modelo do paciente, de modo a aumentar ou reduzir, respetivamente, a gama de valores utilizados para gerar o modelo do paciente.

Modelo do paciente

Criar um modelo do paciente em 3D

Para criar um modelo do paciente em 3D, é importante seleccionar os ficheiros DICOM corretos, definir o volume de interesse mais adequado, indicar o valor iso ideal e seleccionar o tipo de maxilar correto. O sistema irá orientá-lo através destes passos no assistente Criar um modelo do paciente.

Criar um modelo do paciente

1. Entre no assistente **Criar um modelo do paciente** com uma das seguintes ações:
 - Clique em **Novo**  no separador **Registos Médicos** da barra de ferramentas do DTX Studio Implant e clique em **Criar um planeamento novo**.
 - No módulo Planeamento, clique em **Paciente**  no separador **Paciente** da barra de ferramentas **Planeamento**.
2. Selecione o conjunto adequado a partir dos conjuntos DICOM carregados ou importe o conjunto correto.
3. Clique em **Avançar**.
4. Defina o VOI (Volume de Interesse) na página **Definir o volume de interesse e valor iso**.
5. Defina um valor iso adequado através do cursor **Isovalor** e clique em **Avançar**.
6. Ajuste a orientação do scanner e defina o plano oclusal através dos cursores.
7. Selecione o tipo de maxilar que quer tratar no paciente.
8. Clique em **Concluir**.

Editar a forma da curva de corte virtual

Para obter a melhor curva de corte virtual possível, o corte virtual de secção transversal deve estar sempre colocado perpendicularmente ao plano oclusal. Ao criar um novo modelo do paciente, é calculada uma curva de corte virtual padrão, com base no tipo de maxilar selecionado, volume de interesse e plano oclusal. A forma e o tamanho desta curva podem ser editados, tal como a forma da secção transversal virtual.

Ajustar a forma da curva de corte virtual

1. Clique em **Curva de corte virtual**  no grupo **Editor de tomografia computadorizada** no separador **Paciente**.
2. A ação **Ajustar Curva de Corte Virtual** tem início.
3. Ajuste os pormenores da curva calculada, manipulando os pontos de controlo existentes, ou crie uma nova curva colocando pontos de controlo do dente.

Manipular os pontos de controlo existentes

1. Clique e arraste os pontos de controlo para manipular a forma da curva de corte virtual.
2. Insira um ponto, adicione um ponto final ou selecione e remova um ponto.
3. Clique em **Concluir** quando a forma da curva parecer satisfatória.

Utilizar pontos de controlo do dente

1. Clique em [Voltar a indicar a curva](#) .
2. Siga as instruções das descrições para colocar corretamente os pontos de controlo do dente:
 - Clique no visualizador axial para indicar a posição do terceiro molar direito (dente do siso).
 - Clique no visualizador axial para indicar a posição do dente seguinte, o canino direito.
 - Clique no visualizador axial para indicar a posição do canino no lado esquerdo.
 - Clique no visualizador axial para indicar a posição do quarto dente, o terceiro molar esquerdo (dente do siso).

Observações

Os números dentários indicados nas descrições diferem consoante o sistema de notação dentária utilizado. Esta notação pode ser alterada em e Preferências gerais.

Se os pontos de marcador de dente forem posicionados onde a dentição já está ausente fisicamente, coloque-os onde seriam/deveriam ser colocados.

Estes quatro pontos – os dois terceiros molares e os dois caninos – juntamente com cinco pontos de controlo gerados automaticamente constituem a base da curva de corte virtual.

3. Verifique a curva e ajuste, caso seja necessário.
4. Clique em [Concluir](#) quando a forma da curva parecer satisfatória.

Ajustar o tamanho do corte virtual de secção transversal

Ajuste o tamanho da vista perpendicular para ver a imagem adequada no corte virtual de secção transversal:

1. Clique em [Curva de corte virtual](#)  para abrir a ação [Ajustar Curva de Corte Virtual](#).
2. Arraste os limites da região apresentada na vista perpendicular para cima/para baixo ou lateralmente.

Nota

É possível arrastar independentemente os limites superior e inferior. Quando arrastar o limite esquerdo ou direito, o limite contrário irá deslocar-se na direção oposta, mantendo a mesma distância, o que assegura a posição central da imagem recortada.

Visualização do modelo do paciente



Aviso

O utilizador deve estar familiarizado com a interpretação de dados de tomografia computadorizada e com a forma como estes dados são visualizados através do processamento de volume.

O que é uma Função de transferência?

Quando é criado um modelo do paciente, cada valor de cinzento é convertido numa cor específica obedecendo a determinada opacidade para conferir um aspeto característico ao modelo do paciente. Para tal, é aplicada uma função de transferência, que atribui valores de RGB e opacidade a cada voxel no volume. Ao aplicar a função de transferência, o volume 3D é visualizado.

As funções de transferência podem ser geridas e aplicadas ao modelo do paciente através da galeria de [Funções de transferência](#). Esta galeria contém as miniaturas que representam as diferentes funções de transferência disponíveis, bem como várias ações que podem ser executadas nestas funções de transferência. São diferenciados os [modelos incorporados](#), os [modelos personalizados](#) e as funções de transferência "[Este paciente](#)" do paciente atual.

Como limpar a visualização do modelo do paciente

No modo de Planeamento, a limpeza de artefactos e partículas obstrutivas na cena em 3D pode ser feita através das ações [Máscara de paciente](#) ou [Apagar artefactos ósseos](#).

Utilizar Máscara de paciente

1. Clique em [Máscara de paciente](#) .
2. Na ação [Máscara de paciente](#), clique num dos seguintes ícones:

	Clique em Cortar para indicar que parte do volume deve ser removida do modelo. Tudo o que estiver dentro do polígono desenhado ficará oculto.
	Clique em Isolar para indicar a parte do volume que pretende apresentar. Tudo o que estiver fora do polígono desenhado ficará oculto.
	Clique em Adicionar para começar a adicionar novamente parte do volume que tenha sido cortada.
3. Comece a desenhar o polígono:
 - Clique num ponto com o botão esquerdo do rato.
 - Mova o rato e clique mais uma vez. As duas posições em que clicou serão ligadas por uma linha tracejada verde.
 - Clique pela terceira vez. A linha tracejada verde de ligação alterar-se-á para um polígono.
 - Continue até ter enquadrado num polígono a parte do modelo que pretende retirar.
 - Clique com o botão direito do rato ou prima [Enter](#) para aplicar.

Apagar artefactos ósseos

1. Clique em [Apagar artefactos ósseos](#)  no grupo [Editor de paciente](#) no separador [Paciente](#). A ação [Apagar artefactos ósseos](#) é iniciada.
2. Clique em [Borracha mágica](#)  ou [Borracha](#)  na ação [Apagar artefactos ósseos](#).
3. Clique nos dados de TAC ou mantenha o botão do rato pressionado para assinalar as partes a remover do modelo do paciente. Com o botão [Borracha mágica](#) , a máscara é removida numa região pequena, média ou maior em torno da posição onde se clicou, dependendo das dimensões do pincel. Com o botão [Borracha](#) , toda a máscara é removida numa esfera em torno da posição onde se clicou. O tamanho da esfera também depende das dimensões do pincel, que podem ser alteradas.

Nota

A ação Apagar artefactos ósseos não afeta os dados de tomografia computadorizada originais. Quando os artefactos tiverem sido removidos e o modelo do paciente for posteriormente editado através da ação [Editar paciente](#), os artefactos voltam a fazer parte do modelo. Logo, se precisar de realizar as duas ações para obter um melhor resultado, a Nobel Biocare aconselha-o a editar primeiro o modelo do paciente e, em seguida, eliminar possíveis ruídos e artefactos.

Desativar máscara

Utilize [Desativar máscara](#)  para alternar entre o modelo do paciente completo e a seleção especificada.

Repor a máscara do paciente

Utilize [Repor a máscara do paciente](#)  para apresentar novamente o modelo do paciente completo, tal como foi gerado.

Manter a parte de maiores dimensões

Ao ajustar o modelo através da ação [Máscara de paciente](#), em vez de retirar todas as partículas menores que afetam a visualização, é possível isolar apenas a porção "óssea" de maiores dimensões do modelo.

Para o tal, clique em [Manter parte de maiores dimensões](#)  nas ações [Máscara de paciente](#) ou [Apagar artefactos ósseos](#). As partículas e partes menores cuja densidade seja diferente da densidade óssea serão removidas. A parte óssea de maiores dimensões permanecerá visível.

Informações sobre a prótese dentária

Configuração do diagnóstico

Ao usar o DTX Studio Implant, podem ser seguidos dois tipos de protocolo de digitalização para modelar as definições de diagnóstico virtual, de acordo com as indicações clínicas:

- No caso de pacientes com edentulismo parcial reduzido (de preferência, ainda com seis dentes, pelo menos), pode ser seguido o protocolo sem guia radiográfica (usando uma digitalização da situação intraoral).
- No caso de pacientes com edentulismo total ou parcial extenso (aconselhável quando existam menos de seis dentes), tem de ser seguido o protocolo com guia radiográfica.

Digitalização dentária

Digitalização do molde dentário

O molde dentário é feito a partir de uma impressão e representa a situação intraoral do paciente. Uma restauração protética pode ser construída no modelo utilizando uma configuração protética ou um enceramento. A superfície deste modelo pode ser minuciosamente digitalizada pelo laboratório de prótese dentária. Esta digitalização da superfície pode ser importada para o DTX Studio Implant, para ser alinhada com o modelo 3D do paciente dos dados DICOM.

Depois de efetuar a impressão, inicie sessão no DTX Studio Implant, abra o ficheiro do paciente e solicite ao laboratório de prótese dentária uma digitalização do molde dentário. Assim que o laboratório de prótese dentária carregar o ficheiro digitalizado no serviço da nuvem, transfira a digitalização e alinhe-a com os dados DICOM do modelo do paciente através do SmartFusion™.

Encomendar uma digitalização do molde dentário

1. Abra um ficheiro de paciente, clique em [Encomendar produtos](#) para ir para o módulo de encomenda e clique em [Digitalizar](#) .
2. Indique os objetos a digitalizar no diagrama de dentes arrastando a região a digitalizar e selecionando a opção requerida no menu de sobreposição. As digitalizações solicitadas são apresentadas na lista do lado direito.
3. Clique em [Avançar](#).
4. Selecione o laboratório de prótese dentária associado que irá efetuar para si o molde dentário, introduza todos os detalhes necessários e quaisquer instruções especiais pertinentes, e verifique a lista de digitalizações solicitadas.
5. Clique em [Concluir](#).
6. A encomenda é enviada para o laboratório de prótese dentária e acrescentado à lista de [Encomendas](#), sob o número da encomenda obtido a partir do servidor.

Digitalização intraoral ou outra digitalização de ambiente de trabalho

A situação intraoral do paciente é representada por uma digitalização da superfície realizada, por exemplo, por meio de um scanner intraoral. Esta digitalização da superfície (ficheiros .ply e .stl) pode ser importada para o DTX Studio Implant e alinhada com o modelo 3D do paciente dos dados DICOM usando o SmartFusion™.

SmartFusion™

Adicionar a digitalização dentária ao modelo do paciente


A digitalização da superfície obtida (carregada pelo laboratório de prótese dentária ou importada do scanner intraoral) pode ser alinhada com o modelo do paciente.

1. Abra o tratamento no módulo Planeamento.
2. Clique em **Digitalização dentária**  no grupo **Digitalização de tratamento** do separador **Prótese dentária**.
3. Selecione uma digitalização dentária ou importe um ficheiro de digitalização dentária.
4. Se utilizar ficheiros .nxa, o scanner utilizado para a obtenção da digitalização dentária é configurado automaticamente, de acordo com os dados do ficheiro selecionado. Se utilizar ficheiros .stl, configure o scanner:
 - Clique em **Selecionar scanner** ou **Alterar scanner** no canto inferior direito da janela, se algum scanner tiver sido anteriormente selecionado.
 - Selecione o scanner na lista.
 - Clique em **Selecionar scanner**.

Nota


Verifique sempre qual é o scanner selecionado, especialmente se importar ficheiros .nxa ou se tiverem sido utilizados diferentes scanners para a aquisição de digitalizações dentárias. Ao selecionar um scanner específico na lista, este é armazenado e será utilizado como scanner padrão quando criar novos modelos de paciente.

5. Clique em **Avançar**.
6. Se o intervalo de digitalização for conhecido, o intervalo dos dentes é automaticamente indicado. Para ajustar o intervalo da digitalização dentária selecionada:
 - Passe com o cursor sobre o diagrama de dentes ao longo da arcada.
 - Clique na arcada – ou no interior da zona realçada a cores em volta da arcada – e mantenha premido o botão do rato.
 - Arraste sobre os dentes do diagrama de dentes até estar coberto todo o intervalo de digitalização. Indique um intervalo de digitalização dentária de, pelo menos, três unidades dentárias. Solte o botão do rato.
 - Ajuste o intervalo clicando nas áreas realçadas a azul para incluir ou excluir uma unidade. Para retomar o ajustamento do intervalo de digitalização, clique em **Redefinir o diagrama**. Certifique-se de que indica um intervalo de digitalização contínuo.

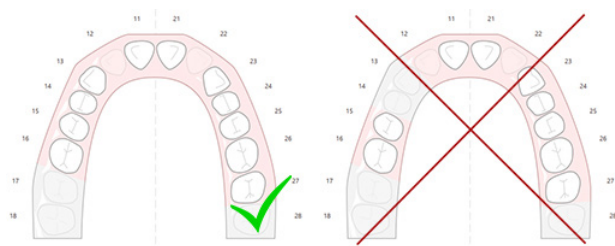

7. Indique os dentes em falta no diagrama de dentes clicando num dente branco presente e transformando-o num dente desativado ausente. Somente os dentes dentro do intervalo de dentes marcado podem ser indicados como em falta. Inclua, pelo menos, um dente restante no intervalo de digitalização.
8. Clique em **Avançar**.

9. Indique todas as posições de dentes de acordo com as sugestões dadas pelo assistente. Ao indicar um molar, clique no meio da cúspide. No caso de ser um canino, clique no centro do bordo incisal. Para repetir estes passos, clique em [Volte a indicar os pontos](#). Os pontos definidos são removidos e pode recomeçar.
10. Clique em [Avançar](#).
11. O modelo do paciente e a digitalização dentária são alinhados utilizando o SmartFusion™.
12. Na página [Verificar o resultado](#) do assistente, [verifique se o alinhamento automático está correto](#). O contorno da digitalização dentária alinhada (apresentada a cor de rosa por predefinição) deve corresponder exatamente à informação oclusal dos dentes no exame de tomografia computadorizada (CB). [Cabe ao médico dentista a responsabilidade de garantir que este passo é corretamente realizado](#) (consulte as imagens na página seguinte). Se estiver incorreto, inicialize o SmartFusion™. Se os dois modelos não puderem ser alinhados com precisão, contacte a assistência ao cliente.
13. Se o alinhamento estiver correto, clique em [Concluir](#).
14. A digitalização dentária é adicionada ao cenário. Se os dentes virtuais ou a digitalização da configuração/enceramento protético constarem da encomenda, são também adicionados automaticamente.

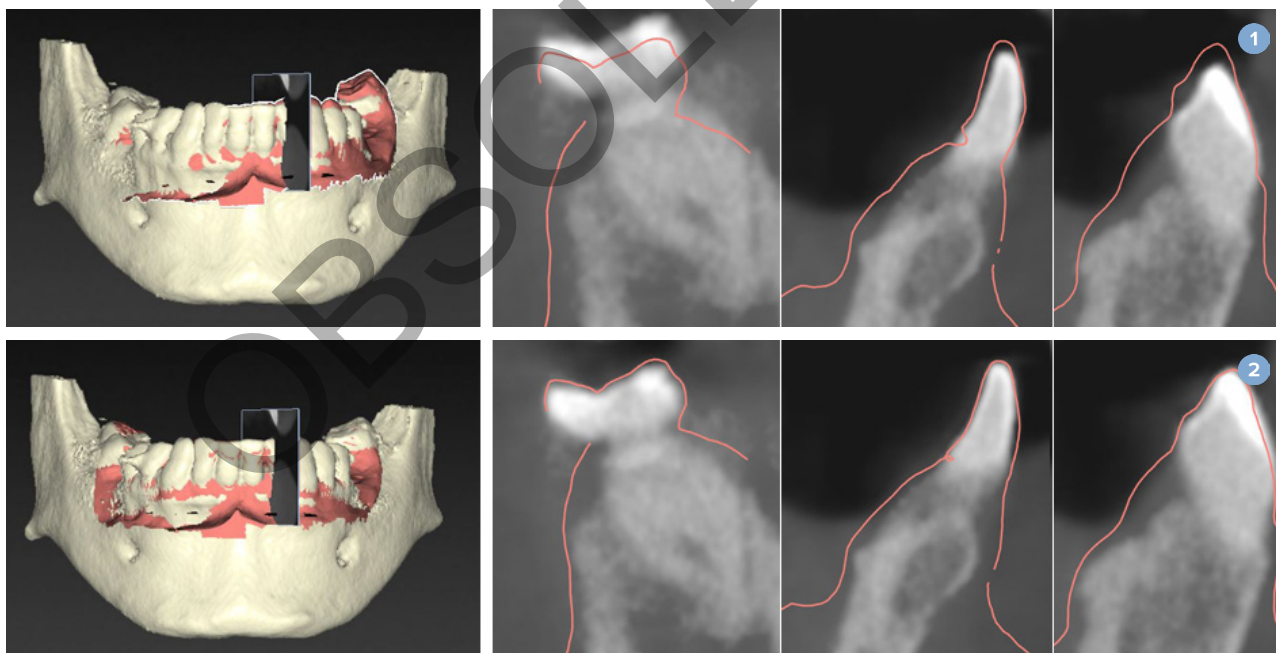

- 1 Alinhamento incorreto
- 2 Alinhamento correto



Aviso

Um alinhamento impróprio da digitalização da tomografia CBCT e da digitalização da superfície pode resultar numa férula cirúrgica incorreta e não pode ser usada para cirurgia.

Inicialização do SmartFusion™

Se o SmartFusion™ da digitalização dentária e o modelo do paciente falhar ou não for suficientemente preciso, ajuste a posição inicial da digitalização dentária e recomece o cálculo do SmartFusion™. Este processo é designado por inicialização do SmartFusion™.

Nota


É provável que o SmartFusion™ seja menos preciso quando o paciente tiver menos de seis dentes remanescentes.

Procedimento de inicialização


Para inicializar o SmartFusion™, defina, pelo menos, três pares de pontos correspondentes, apresentados nos dentes do modelo do paciente e da digitalização dentária, respetivamente. Se os pontos não estiverem rigorosamente posicionados, remova-os e volte a indicá-los. Todos os pontos correspondentes podem ser removidos com um simples clique.

Como iniciar o assistente de inicialização

- Para ajustar automaticamente a posição inicial com o SmartFusion™ em funcionamento, entre no assistente clicando na ação **Inicializar SmartFusion** action.

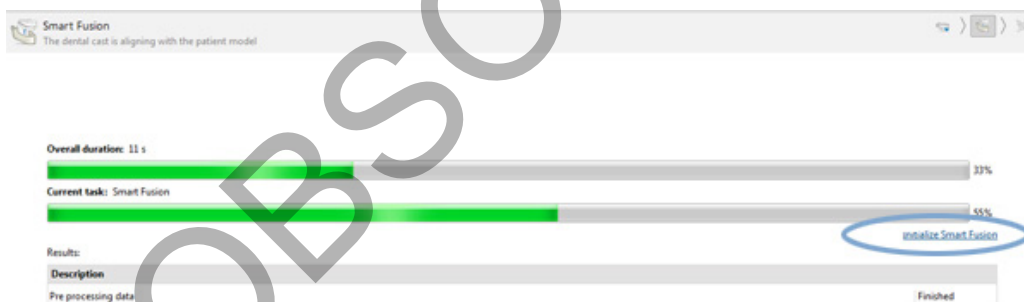

- Com o **SmartFusion™ em execução, se o processo falhar**, é apresentada uma mensagem de aviso. Clique em **Posição de inicialização** para iniciar o assistente de inicialização. Isso permite-lhe ajustar o ponto de início da digitalização dentária. Reiniciar o SmartFusion™.
- Com o **SmartFusion™ em execução, e após uma tentativa de inicialização**, se o processo falhar novamente, é apresentada uma mensagem de aviso e será direcionado para a página **Verificar o resultado**. Nesta página, entre no assistente de inicialização clicando em **Indique os pontos correspondentes** (ver imagem abaixo).
- Se o **SmartFusion™ estiver em funcionamento e tiver êxito**, mas a digitalização dentária e o modelo do paciente não estiverem corretamente alinhados, entre no assistente de inicialização clicando na ação **Indique os pontos correspondentes** na página **Verificar o resultado** do assistente.

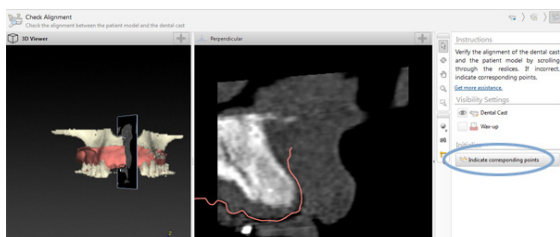


Como definir pontos correspondentes no assistente de inicialização

Inserir um ponto

1. Ao entrar no assistente, a ação **Inserir pontos**  encontra-se ativada.
2. Clique numa posição específica no painel esquerdo dos dentes do modelo do paciente.
3. Clique na posição correspondente no painel da direita da digitalização dentária. Repita os passos 2 e 3 até ter definido, pelo menos, três pares de pontos correspondentes.
4. Verifique se foi apresentado algum aviso na secção de avisos do assistente.
5. Quando uma mensagem indicar que foi atingido o número de pares necessário, clique em **Concluir** para fechar o assistente. Certifique-se de que tratou de todos os avisos antes de fechar o assistente. Caso contrário, não vai poder terminar.

Sugestão

Certifique-se de que os pontos que está a adicionar estão bem distribuídos por toda a arcada dentária. Evite juntá-los. Quanto maior for a área coberta, maior a probabilidade de o alinhamento ser efetuado corretamente. Coloque pontos, no mínimo, em dois dos quatro quadrantes, como mostrado na imagem abaixo.

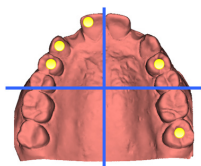

Remover pontos selecionados

Nota

Se as opções para remover pontos estiverem desativadas, clique com o botão direito do rato para concluir a ação de inserir pontos. As outras ações estão ativadas.

Para remover pontos selecionados:

1. Selecione um ponto num dos visualizadores.
2. Clique em **Remover pontos selecionados** .
3. O ponto selecionado e o ponto correspondente são removidos.

Remover todos os pontos

Para remover todos os pontos indicados, clique em **Remover todos os pontos** . Todos os pontos virtuais definidos são removidos.

Avisos na inicialização do SmartFusion™

Aviso	Explicação
O alinhamento do modelo dentário foi ajustado manualmente.	Se o utilizador optar por aplicar o alinhamento manual do SmartFusion™ da digitalização dentária e do modelo do paciente ou a digitalização dentária tiver sido ajustada manualmente, o sistema emite um aviso no sentido de proceder a uma dupla verificação do alinhamento, a fim de evitar eventuais imprecisões.
O alinhamento entre o modelo do paciente e o modelo dentário foi ajustado manualmente. Verifique e confirme que o modelo dentário está corretamente alinhado com a tomografia computadorizada (CB), uma vez que a existência de desvios impede o correto posicionamento dos implantes.	
Um ou mais pares de pontos não correspondem.	O sistema mede a distância entre os pontos posicionados no modelo do paciente e os pontos correspondentes indicados na digitalização dentária. Se a distância for superior à esperada, o sistema emite um aviso e convida o utilizador a ajustar os pares de pontos.
Distribuição insuficiente dos pontos definidos na digitalização dentária.	Se o sistema detetar que os pontos definidos não se encontram em, pelo menos, dois de quatro quadrantes, é emitido um aviso. O utilizador deve ajustar os pontos correspondentes ou adicionar um par de pontos correspondentes, tendo em conta uma distribuição uniforme pelos quadrantes da arcada dentária. Os pontos não devem ser colocados muito próximos uns dos outros.
Indique, pelo menos, três pontos correspondentes.	Não foram definidos pares de pontos suficientes para se poder terminar o assistente. Coloque mais pares de pontos até ser atingido o número mínimo de pares de pontos a colocar.

Digitalização facial

Carregue uma digitalização facial para ser mapeada no modelo do paciente. É possível carregar diferentes digitalizações, uma de cada vez. A forma de alcançar o melhor resultado é carregar primeiro uma digitalização facial neutra e mapeá-lo no modelo do paciente. Posteriormente, pode ser carregada e mapeada uma digitalização facial com sorriso, por exemplo, para a digitalização facial neutra.

Adicionar uma digitalização facial ao modelo do paciente

1. Clique em **Digitalização facial**  no grupo **Digitalizações adicionais** no separador **Prótese dentária** para iniciar o assistente.
2. Clique em **Selecionar uma digitalização facial**. Selecione uma digitalização facial (.obj) e clique em **Abrir**.
3. Clique em **Avançar**.
4. Verificar a posição atual da digitalização carregada. Para ajustar o alinhamento entre a digitalização facial carregada e o modelo do paciente, clique em **Ajustar alinhamento** , selecione o objeto com o qual pretende alinhar a digitalização facial e clique em **OK**. O assistente permite-lhe indicar um mínimo de cinco pontos correspondentes para alinhar corretamente a digitalização e o modelo. Clique em **Concluir** para sair do assistente de pontos correspondentes.
5. Clique em **Concluir** para sair do assistente **Digitalização facial**.

Para adicionar outra digitalização facial, repita os passos mencionados acima.

Acertar uma Digitalização Facial

Poderá ser útil acertar os dentes que estão a aparecer numa digitalização do sorriso, para que se possa realmente apresentar o modelo do paciente, por exemplo, o SmartSetup™ através da digitalização facial.

1. Clique em **Acertar Digitalização Facial** , quer no separador **Prótese dentária** da barra de ferramentas ou no assistente **Digitalização facial**.
2. Remova a região que necessita de ser acertada clicando e arrastando. Utilize o cursor **Ajustar tamanho do pincel** quando apropriado.
3. Clique em **Concluir**.

Nota

A ação de acerto será executada na digitalização facial que está a ser exibida. Quando forem carregadas múltiplas digitalizações e pretender acertar uma das digitalizações faciais, certifique-se de que seleciona primeiro a digitalização facial correta clicando com o botão direito no menu **Digitalização facial**.

SmartSetup™

SmartSetup™ é a solução para calcular automaticamente dentes virtuais com base numa digitalização da situação dentária real. Estes cálculos tomam em consideração:

- O tamanho, forma e posição dos dentes existentes.
- O tipo do dente a desenhar (um canino, por exemplo, tem de ser modelado de forma diferente da de um pré-molar).
- O tamanho e a forma do dente espelhado.
- Um conjunto de regras estéticas para os dentes da região frontal.
- Informações sobre os dentes antagonistas, se disponíveis.

Calcular um SmartSetup™

Para calcular um SmartSetup™ certifique-se de que dispõe de uma digitalização dentária que inclua, pelo menos, três dentes remanescentes.

1. Clique **SmartSetup**  no grupo **Digitalizações adicionais** do separador **Prótese dentária**.
2. Clique em **Definições de SmartSetup** no canto inferior direito do painel do diagrama de dentes e ajuste as definições do SmartSetup™ para obter um resultado de SmartSetup™ diferente.
3. Clique em **Calcular**. O SmartSetup™ está a ser calculado

Ajustar as definições de SmartSetup™

As definições do assistente SmartSetup™ podem ser ajustadas para alterar o resultado do cálculo do SmartSetup™.

1. Na página **Verifique o SmartSetup™** do assistente **SmartSetup™**, clique em **Opções de SmartSetup™** no canto inferior direito do painel do diagrama de dentes, para abrir a caixa de diálogo **Definições**.
2. No grupo **Qualidade**, indique se pretende calcular os modelos com **Máxima** (o que irá levar algum tempo a calcular), **Ideal** ou **Baixa** qualidade. Dependendo da sua seleção, um número maior ou menor de dentes será incluído nos cálculos.

- **Máximo:** todos os dentes do modelo serão incluídos nos cálculos do SmartSetup™. O tempo de cálculo será superior a quando a solução **Ideal** foi selecionada.
 - **Ideal:** os dentes do modelo necessários para calcular um resultado ótimo serão incluídos, enquanto que o tempo de cálculo é mantido numa duração razoável.
 - **Baixa:** um número mínimo de dentes do modelo serão incluídos nos cálculos do SmartSetup™. O tempo de cálculo será inferior a quando a solução **Ideal** foi selecionada.
3. No grupo **SmartSetup™**, decida se pretende ou não calcular os dentes virtuais de acordo com os seguintes critérios:
- **Remova as lacunas na configuração dos dentes:** na maioria das situações é desejável reduzir os espaços entre dentes vizinhos. Contudo, existem situações nas quais os espaços entre dentes a ser preenchido é demasiado grande. Se selecionar esta opção, o dente virtual pode ficar grande demais. Em tal caso, deve desligar a opção **Remover as lacunas na configuração do dente**. Esta opção é selecionada por defeito para **Todos os dentes**. Pode selecionar na caixa suspensa o dente ou dentes em que pretende remover as lacunas interdentais.
 - **Posição baseada nos dentes oponentes (espelho):** selecione esta opção se pretender posicionar o SmartSetup™ exatamente como os dentes opostos. Tenha, no entanto, em atenção que a maior parte dos pacientes não apresenta uma arcada totalmente simétrica, pelo que a utilização desta opção pode levar a um resultado subótimo. Esta opção está, por isso, desativada por defeito. No entanto o utilizador poderá ativar esta opção e verificar se esta opção leva a um resultado calculado ou não.
 - **Otimizar estética dos dentes da frente:** esta ação é baseada num conjunto de regras para determinar ou calcular o melhor resultado estético. Estas regras incluem, por exemplo, que as margens incisais dos incisivos centrais devem estar ao mesmo nível e que a mesma largura deve ser aplicada aos incisivos centrais. O mesmo se aplica aos incisivos laterais e aos caninos.
 - **Incluir os terceiros molares:** esta opção está selecionada por defeito se o intervalo de digitalização incluir os terceiros molares. O tamanho, forma e posição dos terceiros molares são tidos em consideração para o cálculo do tamanho, forma e posição do SmartSetup™.
 - **Fazer ajustes mais precisos da oclusão:** esta opção é selecionada por defeito se estiverem disponíveis informações sobre os antagonistas. As informações sobre os antagonistas são tidas em consideração para o ajuste fino da oclusão.
4. Clique em **OK** para aplicar as definições aos cálculos do SmartSetup™. Continue no assistente clicando em **Avançar**.

Editar um SmartSetup™

Edite a posição de cada SmartSetup™ calculado individualmente:

1. Clique **Editar SmartSetup**  no separador **Prótese dentária** da barra de ferramentas **Planeamento**. Em alternativa, clique em **Editar SmartSetup** na página **Verificar o resultado** do assistente **SmartSetup**.
2. Selecione o SmartSetup™ a editar clicando no visualizador 3D ou selecionando o dente na caixa suspensa.
3. Clique nas ações **Translação**, **Rotação** e/ou **Escala** para ajustar a posição e o tamanho do SmartSetup™ selecionado.

	Translação	Clique em SmartSetup™, mantenha o botão do rato premido e arraste para traduzir o SmartSetup™. Ajuste os valores nas caixas Bucal/lingual, Médio/distal e/ou Oclusal para ajustar a posição do SmartSetup™.
	Rotação	Clique no SmartSetup™, mantenha o botão do rato premido e arraste para rodar o SmartSetup™. Ajuste os valores nas caixas Bucal/lingual, Médio/distal e/ou Oclusal para ajustar a posição do SmartSetup™.
	Escala	Clique no SmartSetup™, mantenha o botão do rato premido e arraste para ajustar a escala do SmartSetup™. Arraste para cima, para aumentar a escala, ou para baixo, para a diminuir. Em alternativa, use a caixa Escala para definir uma percentagem de escala específica ou para ajustar o tamanho do SmartSetup™.

Para anular as alterações do SmartSetup™ selecionado, clique em  **Redefinir dente**.

Modelo da Guia Radiográfica

Com base no diagnóstico clínico do paciente, será criada uma guia radiográfica a partir de uma configuração dos dentes clinicamente validada, que contém marcadores para o procedimento de digitalização dupla. O modelo virtual é construído quando cria o modelo do paciente.

Criar um Modelo de Guia Radiográfica

1. Entre no assistente Criar guia clicando em **Guide** .
2. Selecione os dados DICOM corretos e clique em **Avançar**.
3. Defina o VOI (Volume of Interest - Volume de Interesse).
4. O **Valor iso calibrado** é carregado usando o conjunto de calibração adequado. Clique em **Avançar**.
5. Verifique o modelo da guia radiográfica.
6. O modelo do paciente e a guia radiográfica são automaticamente alinhados.
7. Verifique o resultado do alinhamento e clique em **Concluir**.

Superfície do entalhe

Para criar uma superfície do entalhe com base na guia radiográfica:

1. Clique em **Entalhe**  no separador **Prótese dentária** da barra de ferramentas **Planeamento**.
2. Verifique a superfície do entalhe e clique em **Concluir**.

Diagnóstico

Nervos

Para delinear um nervo, clique em **Nervo**  no separador **Diagnóstico** e será aberto um assistente.

1. Ajuste o corte virtual do nervo, caso seja necessário.
2. Clique para indicar os pontos de reconstrução do nervo.
3. Clique com o botão direito do rato para parar de adicionar pontos.
4. Clique em **Concluir**.

As esferas encontram-se interligadas por uma linha tubular, indicando o nervo.

Para adicionar outro nervo, escolha a ação **Adicionar novo nervo**  no grupo **Ações do nervo**. Comece a indicar os pontos do novo nervo usando o processo acima descrito.

Sugestão

Quando for difícil visualizar o canal do nervo, ajuste o corte virtual do nervo. Esta forma em U não está relacionada com nem ligada à forma da curva de corte virtual.

Dentes

Para anotar um dente, clique em **Dente**  no separador **Diagnóstico** e será aberto um assistente.

1. Selecione o dente a anotar no diagrama no topo.

Nota

A notação FDI é aqui utilizada por defeito. Se necessário, altere a notação do diagrama de dentes através das **Preferências gerais**.

2. Ajuste a posição do dente selecionado para ajustar o seu eixo central.
3. Clique em **Preenchimento com marcação mágica**  ou em **Pincel de marcação** .
4. Desloque os cortes CT e clique ou arraste para marcar o dente ponto a ponto. Todos os dados numa área específica em torno da posição clicada ficam coloridos e serão adicionados ao dente.
5. Clique em **Atualizar 3D**  ou utilize a tecla de atalho [u]. O dente é visualizado numa apresentação em 3D e é adicionado ao modelo do paciente no visualizador 3D.
6. Se necessário, selecione um novo dente a anotar no diagrama.
7. Quando todos os dentes estiverem anotados, clique em **Concluir**.

Remover dentes do modelo

Quando os dentes estiverem anotados, é possível subtraí-los ao modelo do paciente, individual ou simultaneamente.

Remover todos os dentes em simultâneo

1. Clique em **Subtrair dentes**  no separador **Paciente**. Este ícone só será ativado quando os dentes tiverem sido anotados.
2. Se necessário, corrija o modelo do paciente com as ações **Máscara de paciente** ou **Apagar artefactos ósseos**.

Nota

Quando forem adicionadas novas anotações de dente ou quando os dentes forem editados depois de ocorrer uma subtração, execute novamente a ação **Subtrair**, se desejar aplicá-la também aos dentes recém-adicionados e editados. Esta ação não será executada automaticamente. Em alternativa, use a ação **Extrair dente**.

Extrair uma restauração unitária

1. Clique no dente anotado para o seleccionar.
2. Clique no ícone **Extrair dente**  no grupo **Diagnóstico** na barra de ferramentas **Diagnóstico**. Este ícone **Extrair dente** só será ativado quando os dentes tiverem sido anotados.
3. O dente extraído é apresentado a vermelho.

Medições

Estão disponíveis vários tipos de medição.

Sugestão

Se a leitura do texto das medições for dificultada pelos objectos existentes na cena, seleccione a medição ou o texto para visualizar o resultado de medição na barra de estado.

Distância entre 2 pontos	1. Clique no botão Distância  no separador Diagnóstico. 2. Clique para indicar o primeiro ponto e clique novamente numa segunda posição. A medição é apresentada.
Ângulo	1. Clique em Ângulo  no separador Diagnóstico. 2. Indique os três pontos, a, b e c. 3. O ângulo é visualizado através de um arco de ângulo e é apresentado o valor da medição.
Valor cinzento/unidades Hounsfield	1. Clique em Valor HU  no separador Diagnóstico. 2. Indique um ponto para medição do valor HU.
Ângulo entre implantes ou pilares	1. Selecione um implante e clique Ângulo do implante  no separador Diagnóstico. 2. Selecione o segundo implante. Uma linha amarela em arco indica a medição em conjunto com o valor.

Planear Implantes

Trabalhar com implantes que não sejam da Nobel Biocare

O DTX Studio Implant está também aberto a sistemas de implantes que não sejam da Nobel Biocare (por exemplo, implantes dentários Straumann, Dentsply, Camlog, etc.). Usando o separador **Produtos de implante** na caixa de diálogo **Preferências**, o utilizador pode indicar qual o sistema de implantes a incluir no DTX Studio Implant.

Nota

É necessária uma ligação à Internet para adicionar implantes que não sejam da Nobel Biocare ao DTX Studio Implant.

A adição ou remoção de sistemas de implantes do DTX Studio Implant apenas se pode efetuar quando todos os cenários de planeamento estão fechados. Por isso, feche todos os ficheiros do paciente e vá para a caixa de diálogo **Preferências**:

1. Clique no separador **DTX Studio Implant**.
2. Selecione **Preferências gerais**.
3. Clique em **Produtos instalados**.
4. Indique quais os sistemas de implantes a adicionar ou remover do software.
5. Clique em **OK** para terminar.

Nota

Quando são utilizados produtos que não estão disponíveis no software, estes serão substituídos no plano de tratamento por produtos de demonstração cilíndricos. Contudo, a informação do produto original é guardada e, quando os produtos ficarem disponíveis, as demonstrações no plano de tratamento serão substituídas por uma representação mais detalhada dos produtos.



Atenção

Quando são acionados avisos devido aos cilindros, tais avisos são calculados com base numa estimativa da forma do produto.

Adicionar implantes a um plano de tratamento

Esta secção descreve como planear virtualmente um implante. Contudo, é recomendado que esteja a par das restrições quantitativas e qualitativas relacionadas com o planeamento de implantes orais.

Adicionar um implante a um plano de tratamento

1. Clique em **Implante**  no separador **Planeamento**.
2. Clique no modelo do paciente para indicar o ponto da plataforma externa.
3. Clique no modelo para indicar o ápice do implante.
4. Selecione o fabricante adequado na secção **Fabricante**, na janela **Seleção de produto**.
5. Selecione um implante. Indique também a título opcional o tipo de cirurgia, um pilar compatível e verifique a posição do dente.
6. Clique em **Selecionar produto** para confirmar.



Atenção

Os produtos indisponíveis são apresentados com um aviso vermelho na janela **Seleção de produto** e surgem a azul na vista 3D. Não é possível encomendar estes produtos.

O Que Significa a Zona Amarela?

A tolerância típica do conceito NobelGuide é de 1.5 mm. A zona amarela semitransparente ajuda o utilizador a estar consciente deste aspeto em relação às estruturas vitais. A zona é um cilindro que excede o raio dos implantes concretos em 1.5 mm, acrescido de um cone com 3 mm de altura.

Quando a zona amarela se torna visível através da superfície exterior do osso, o utilizador é avisado de potenciais riscos.

Observações

As brocas podem estender-se até mais 1 mm do que os implantes planeados. Esta zona de aviso amarela tem esta variação em conta.

É aconselhável que mantenha pelo menos 3 mm de osso vital entre duas interfaces de implante-osso e uma distância mínima de 1,5 mm entre um dente e um implante, para permitir a recolonização celular com um abastecimento de sangue adequado.

O conceito NobelGuide inclui vários passos clínicos, que o médico dentista tem de levar em consideração para cada caso individual. Por conseguinte, a total precisão de cada caso individual tem de levar em consideração a influência destes procedimentos.

Posição do dente

Os implantes são atribuídos a um número de dente específico. O número do dente aparece em diversas localizações no software, como no [Painel de propriedades](#) de um implante, no separador de implantes dedicado, no menu do botão direito do rato de um implante e na barra de estado quando o implante é selecionado.

Diagrama de dentes

Usando o diagrama de dentes, o utilizador pode verificar e, se necessário, ajustar a posição estimada do dente ao qual um implante está atribuído. A convenção de numeração de dentes utilizada neste diagrama de dentes corresponde à definição nas preferências gerais.



A posição ? (posição de ponto de interrogação) é usada para posições de dentes desconhecidas ou pouco claras (por exemplo, quando um implante é planeado entre duas posições onde já estão planeados outros implantes).

Manipular um Implante

O DTX Studio Implant proporciona várias funcionalidades para planear a posição ideal do implante.

Alterar a orientação do implante

É possível ajustar a orientação de um implante arrastando as esferas.

1. Selecione o implante. As esferas ficam vermelhas.
2. Efetue um ou mais dos seguintes procedimentos:
 - Clique na esfera superior no implante e arraste-a para rodar, enquanto utiliza o ponto apical como ponto de rotação.
 - Clique na esfera inferior no implante e arraste-a para rodar, enquanto o ponto da plataforma externa é utilizado como ponto de rotação.

Mover um implante

Para efetuar a translação física do implante:

1. Selecione um implante. O tubo cinzento no implante fica verde.
2. Clique no tubo verde e arraste o implante para a posição pretendida. O implante irá manter a sua orientação original.

A profundidade e rotação também podem ser alteradas através de ícones na barra de ferramentas dedicada [Implante](#).

Colocar um implante paralelo a outro

Para colocar um novo implante unitário em paralelo com um implante selecionado:

1. Selecione o implante que pretende utilizar como base.
2. Clique em [Implante paralelo](#) .
3. Clique no visualizador 3D ou 2D para indicar o ponto da plataforma externa.
4. O novo implante é colocado paralelo ao implante indicado.

Colocar todos os implantes em paralelo

Para paralelizar todos os implantes disponíveis no planeamento:

1. Selecione o implante que pretende utilizar como base.
2. Clique em [Paralelizar todos](#) .
3. Todos os implantes são colocados em paralelo com o implante inicialmente selecionado.

Nota

Após o comando [Paralelizar todos](#), inspecione cuidadosamente as posições de todos os implantes. Se o resultado for clinicamente inaceitável, utilize a função [Desfazer](#).

Pilares

Selecionar um pilar adequado para um implante

1. Selecione o implante na cena.
2. Clique em [Pilar](#)  no separador Implante ou clique com o botão direito do rato no implante selecionado e escolha [Adicionar pilar](#) no menu de atalhos.
3. É aberta a janela [Seleção de produto](#), com uma ênfase imediata nos pilares compatíveis.
4. Por defeito, está selecionada a opção "[Sem pilares](#)". Selecione um pilar, tendo em conta as dimensões corretas.
5. Clique em [Selecionar produto](#).

Nota

Estas opções apenas se encontram disponíveis se o implante selecionado ainda não tiver um pilar. Se já se encontrar presente um pilar, é necessário clicar no item de menu [Alterar produto](#) ou no ícone  para apresentar a janela [Seleção de produto](#).


Definir o tipo de cirurgia

O médico dentista tem várias soluções cirúrgicas, designadas por tipos de cirurgia, para o tratamento do paciente (à mão livre, com férula cirúrgica apenas para broca piloto ou com férula cirúrgica para cirurgia totalmente guiada). O tipo de cirurgia pode ser individualmente definido para cada implante no plano de tratamento.

1. Selecione o implante.
2. Clique no ícone **Tipo de cirurgia** no separador dedicado da barra de ferramentas. A forma deste ícone varia consoante os diferentes tipos de cirurgia.
3. Selecione o tipo de cirurgia adequado na lista. Dependendo do tipo de implante selecionado, as opções disponíveis serão diferentes.

Observações

Ao colocar um novo implante, o tipo de cirurgia pode ser definido por meio do separador **Tipo de cirurgia** na janela **Seleção de produto**.

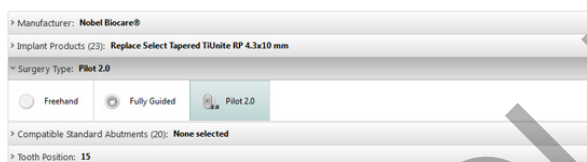

O tipo de cirurgia pode ser ajustado na janela **Verificar configuração da cirurgia** ao criar uma férula cirúrgica.

Diferentes tipos de cirurgia

São possíveis diferentes opções cirúrgicas, em função dos produtos selecionados no plano de tratamento. Estão disponíveis os seguintes tipos de cirurgia:

	De mãos livres: não se utiliza uma férula cirúrgica (nenhum anel cirúrgico) para colocar o implante.
	Totalmente guiado: é utilizada uma férula cirúrgica com anel totalmente guiado (permitindo a perfuração guiada e a colocação guiada do implante) para transferir para a boca do paciente as posições de implante planeadas.
	Perfuração com broca piloto (apenas para brocas espirais NobelGuide de 1.5 e 2.0 mm): é utilizada uma férula cirúrgica com anel piloto (apenas perfuração com broca piloto guiada) para transferir para a boca do paciente as posições de implante planeadas. Depois de se utilizar a broca piloto, a férula cirúrgica é removida, a profundidade da perfuração guiada é registada pelo indicador de direção ou pela broca espiral à mão livre relativamente a uma referência anatómica (por exemplo, crista óssea) e o procedimento de perfuração à mão livre é iniciado, seguido pela colocação à mão livre do implante (todas as profundidades das ferramentas à mão livre são medidas relativamente à referência anatómica definida, depois de se remover a férula). Consoante o diâmetro do implante, pode selecionar um diâmetro de anel piloto diferente.

Deslocamento do anel piloto

Esta função foi concebida apenas para a perfuração piloto. No caso de certas indicações clínicas, a distância por defeito entre o implante planeado (plataforma externa) e o anel não é suficiente (por exemplo, se a colocação do implante tem de ser mais profunda, se a crista alveolar fina em forma de lâmina de faca for removida após colocação do implante, se houver interferência do anel com os dentes adjacentes, etc.). Nestas indicações, o anel na posição predefinida colide com o modelo de superfície da digitalização dentária e é acionado um aviso para anéis piloto. O anel pode ser deslocado para cima, a fim de criar uma férula cirúrgica sem colisões do anel e para manter o implante na posição clínica planeada.

A relação predefinida entre os anéis cirúrgicos e o implante planeado é refletida nas marcas de profundidade de todas as brocas guiadas NobelGuide para todos os protocolos de perfuração. A distância adicional é designada 'deslocamento do anel' e é registada e adicionada automaticamente à página de instruções cirúrgicas NobelGuide, que é enviada com a férula cirúrgica.

Definir o deslocamento do anel piloto

1. Selecione um implante.
2. Certifique-se de que o tipo de cirurgia do implante selecionado é **perfuração com broca piloto**.
3. Clique no ícone **Deslocamento do anel** situado ao lado do ícone **Tipo de cirurgia** no separador dedicado **Implante** da barra de ferramentas. Ou clique com o botão direito do rato no implante e selecione **Deslocamento do anel** no menu de sobreposição.
4. Arraste o cursor para reposicionar o anel em altura ou introduza diretamente a altura da deslocação na caixa do cursor.

Definir a rotação do anel piloto

Se os anéis não estiverem na posição de rotação correta, pode ajustá-la através da rotação do anel.

1. Clique com o botão direito do rato no implante.
2. Clique em **Rotação do casquilho** no menu de sobreposição.
3. Arraste o cursor para rodar o anel até encontrar a posição de rotação correta.

Plano de corte ósseo

Para indicar um plano que represente o nível ósseo ideal para o paciente, utilize a ação **Plano de corte ósseo**. Na realidade, nada será removido. É uma visualização da qual osso pode ter de ser cortado, ajudando-o a planear o tratamento.

1. Clique em **Plano de corte ósseo**  no grupo **Plano** no separador **Plano** na barra de ferramentas.
2. Um plano roxo é adicionado ao modelo do paciente.
3. Clique no plano para o selecionar. Arraste as pegas coloridas nos limites para ajustar o tamanho e a posição do plano. Utilize o cursor **Altura do plano** clicando com o botão direito do rato no menu para ajustar a posição do plano em relação ao eixo Z do modelo.

Parafusos estabilizadores

Para estabelecer um encaixe adequado durante o início do procedimento cirúrgico, são aplicados parafusos estabilizadores guiados para estabilizar a férula cirúrgica. O ângulo e a profundidade são importantes no planeamento dos parafusos estabilizadores guiados. Geralmente, são colocados três ou quatro parafusos estabilizadores num maxilar edêntulo. Os parafusos estabilizadores têm de ser colocados em áreas com osso cortical adequado. Para minimizar o risco de danos nos tecidos, a estabilização bicortical dos parafusos estabilizadores tem de ser evitada.

Observações

A posição e orientação do parafuso estabilizador devem facilitar a colocação (tenha em consideração a retração labial e a abertura da boca), bem como evitar estruturas críticas, tais como vasos sanguíneos.

Aconselha-se o uso de um registo cirúrgico para posicionar com precisão a férula cirúrgica na boca do paciente. O registo cirúrgico deve permitir o acesso para perfuração e a colocação dos parafusos estabilizadores. O registo cirúrgico pode ser removido após colocação dos parafusos estabilizadores.

Adicionar um parafuso estabilizador ao Plano de tratamento

Posicionar o parafuso estabilizador de forma semelhante à colocação do implante.

1. Clique em **Parafuso estabilizador** .
2. Clique para indicar o parafuso estabilizador.
3. Clique para indicar o ápice do parafuso estabilizador.
4. O parafuso estabilizador é colocado na cena.

Sugestão

É mais conveniente definir os pontos de rebordo e do ápice num corte virtual 2D adequado.

Corrigir a Inclinação e a Profundidade de Parafusos Estabilizadores

Para estabilizar a férula cirúrgica para colocação do implante, pode colocar parafusos estabilizadores em posições estratégicas. O ângulo e a profundidade são cruciais.


Os parafusos estabilizadores também atuam como retratores labiais durante a cirurgia. Se os parafusos estabilizadores ficarem demasiado dispersos na arcada, a abertura da boca poderá ficar negativamente afetada. Está disponível uma versão curta do parafuso estabilizador para mitigar este potencial efeito negativo. No entanto, os parafusos estabilizadores devem ser planeados de modo a permitir um fácil acesso e não devem interferir com os leitos de implante.

Os anéis devem ser colocados perto da mucosa, representada pelo modelo de superfície digitalizada da situação intraoral (a, aproximadamente, 0,5 a 1 mm de distância da mucosa), mas não devem interferir nem colidir com o modelo referido anteriormente quando se utiliza uma digitalização de superfície de fusão inteligente.


Em situações de edêntulo, recomenda-se a utilização de um mínimo de quatro parafusos estabilizadores. Os parafusos estabilizadores são posicionados extraoralmente à entrada do vestíbulo ou, em casos especiais, a partir da direção oposta (palatalmente ou lingualmente), para fixar a férula cirúrgica no lugar pelos dois lados.

Parafusos estabilizadores e guia radiográfica (procedimento de trabalho edêntulo)

Quando utilizar uma guia radiográfica, o anel deve estar ligado a esta guia, mas não deve sobressair da superfície de entalhe.

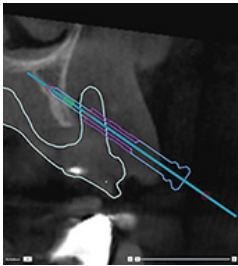


Correto

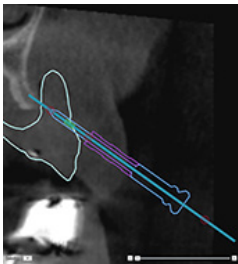

Incorreto

O anel dos parafusos estabilizadores não está ligado à guia radiográfica nem será ligado à fêrula.

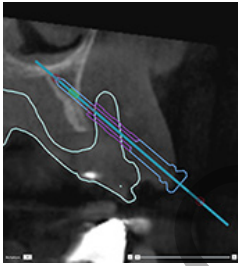


Incorreto


O anel dos parafusos estabilizadores sobressai da guia radiográfica e a fêrula não se irá ajustar à boca do paciente.

Parafusos estabilizadores e digitalização dentária (procedimento de trabalho parcialmente edêntulo)

Ao usar uma digitalização SmartFusion da superfície, o anel deve ser colocado perto da mucosa (a uma distância de 0.5 mm a 1 mm da mucosa, representada pela digitalização da superfície) mas não deve sobressair da digitalização SmartFusion da superfície.

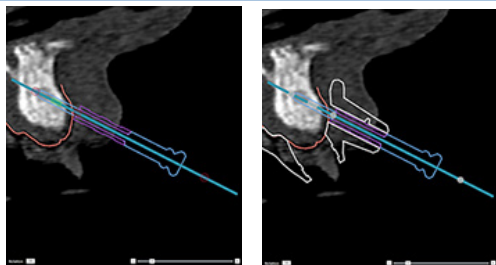


Correto

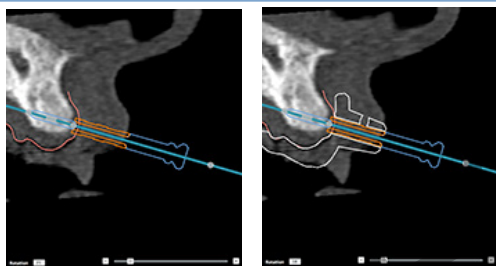


Incorreto

O anel dos parafusos estabilizadores sobressai da digitalização dentária (tecido mole) e a férula não se irá ajustar à boca do paciente.

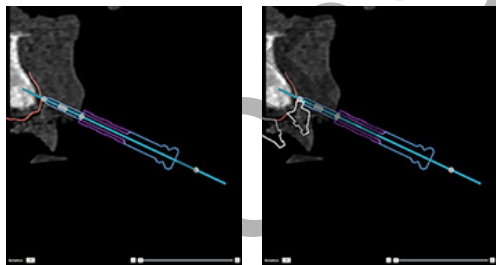

Incorreto

O parafuso estabilizador não está fixado no osso nem ligado à digitalização dentária. O material da férula não será adicionado em redor do anel.

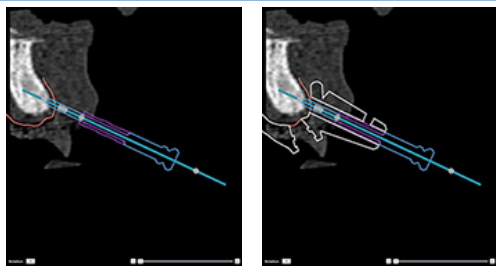

Incorreto

O parafuso estabilizador não está fixado no osso; há material da férula à volta do anel, mas este parafuso estabilizador não garante qualquer fixação durante a cirurgia.

Inspecionar um Plano de tratamento

Quando precisar de inspecionar o percurso de um implante ou parafuso estabilizador através do osso, é possível visualizar cortes através do volume da imagem, ao longo do implante ou parafuso estabilizador, ou paralelamente ao implante ou parafuso estabilizador. Esta funcionalidade permite uma inspeção detalhada do osso adjacente aos implantes e parafusos estabilizadores, desde que a posição escolhida seja adequada para a colocação de implantes ou parafusos estabilizadores.

Trabalhar com a funcionalidade de encaixe

A funcionalidade de encaixe do corte virtual da secção transversal funciona de modos diferentes:

- No **modo de implante ou parafuso estabilizador**, o corte virtual da secção transversal é encaixado no eixo central de um implante ou parafuso estabilizador e é colocado no centro do implante ou parafuso estabilizador.
- No **modo de curva**, o corte virtual da secção transversal é encaixado na curva do corte virtual panorâmico.

Encaixar o corte virtual de secção transversal num implante ou parafuso estabilizador

1. Clique em **Anexar ao corte virtual**  no painel **Ferramentas**.
2. O corte de secção transversal é encaixado no implante ou parafuso estabilizador selecionado e vai rodar em torno do seu eixo em vez de seguir a curvatura do osso do maxilar. Se nenhum for implante ou parafuso estabilizador estiver selecionado, o corte virtual é encaixado no implante ou parafuso estabilizador selecionado mais recentemente. Se ainda não tiver sido selecionado nenhum implante ou parafuso estabilizador, o corte virtual é encaixado no implante ou parafuso estabilizador planeado mais recentemente.

Sugestão

Ao selecionar um novo implante ou parafuso estabilizador, o corte virtual é automaticamente encaixado no novo implante ou parafuso estabilizador. Esta funcionalidade pode ser desativada nas preferências gerais.

Nota

Ao apagar o último implante na cena, o corte de secção transversal é automaticamente encaixado na curva, se tiver sido encaixado no implante.

Avançar para outro implante ou parafuso estabilizador


Quando a funcionalidade de encaixe está no modo de implante ou parafuso estabilizador, passe para outro implante ou parafuso estabilizador por meio da ação **Avançar**, apresentada na barra **Encaixar** do visualizador 2D.

1. Clique em **Avançar** na barra Encaixar.
2. O corte de secção transversal desloca-se para o próximo implante ou parafuso estabilizador.

Regressar ao modo de curva

Quando a funcionalidade de encaixe está no modo de implante ou parafuso estabilizador, regresse ao modo de curva por meio da ação **Desencaixar** na barra **Encaixar**.

1. Clique em **Desencaixar** na barra Encaixar.
2. O corte de secção transversal é encaixado na curva.

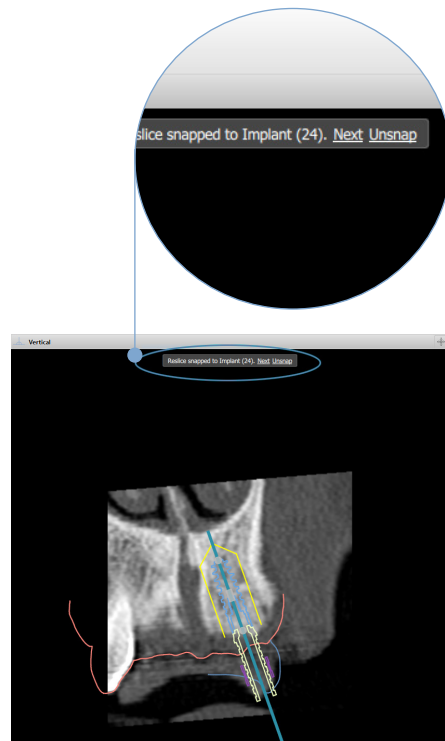

Inspeccionar um Plano de tratamento

Criar uma férula cirúrgica

A férula cirúrgica ajuda a efetuar a cirurgia exatamente como planeado. Durante a finalização do plano, é possível criar uma férula cirúrgica virtual, que é uma pré-visualização do que irá receber.

Criar uma férula cirúrgica de acordo com o plano de tratamento


1. Clique em **Criar férula**  no separador **Finalizar**. É apresentada uma janela para se verificar as posições dos implantes com os anéis selecionados (tipos de cirurgia). Por defeito, a férula cirúrgica é produzida pela Nobel Biocare. Se desejar que a férula seja criada localmente ou por outro fabricante, selecione **Outro**. Selecione o fabricante na lista. Se selecionar o seu nome de conta, pode descarregar você próprio a férula a partir do DTX Studio™ Go. Se selecionar um dos seus associados, ele poderá descarregar a férula. Acrescente os pormenores necessários e, se for o caso, altere o tipo de cirurgia selecionado.
2. Prima **Avançar**, se estiver correto. A férula cirúrgica virtual é criada.
3. Inspeccionar a férula cirúrgica virtual.
4. Clique em **Concluir**.
5. Aparece a caixa de diálogo **Aprovar planeamento para encomendar**. Leia-o cuidadosamente. Clique em **Li e compreendi todas as afirmações anteriores** para confirmar que leu as mensagens e que tudo está como deveria estar.
6. Clique em **Criar pedido** para encomendar imediatamente a férula. O sistema leva-o para o módulo de encomenda, apresentando o ficheiro de planeamento e permitindo-lhe encomendar produtos. Para adiar a sua encomenda, clique em **Aprovar mais tarde**.

Nota

A cor de uma férula cirúrgica virtual para produção local é diferente da cor de uma férula cirúrgica virtual produzida pela Nobel Biocare.



Férula virtual calculada para produção da Nobel Biocare.

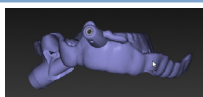

Férula virtual calculada para produção local.

Inspeccionar a férula cirúrgica

Durante a finalização de um plano de tratamento, é de grande importância estar atento a vários problemas que podem impedir que a férula cirúrgica seja criada corretamente:

1. Verifique a posição dos parafusos estabilizadores.
2. Verifique as angulações entre implantes e – se tiver dúvidas – discuta com a equipa se o ângulo poderá ter um impacto negativo no tratamento protético.
3. Verifique os anéis cirúrgicos em relação aos dentes circundantes.
 - Certifique-se de que o anel não toca nos dentes circundantes.
 - Inspeccione a cena 3D, a fim de verificar se a férula cirúrgica toca nos dentes adjacentes e determinar se a férula precisa ou não de ser desgastada ou alterada.

4. Verifique cada implante no corte virtual perpendicular, bem como na cena 3D para verificar o plano.
5. Assegure-se de que não existem quebras ou orifícios nas estruturas de suporte da férula cirúrgica que rodeiam os anéis dos implantes ou parafusos estabilizadores.
6. Comunique o plano à equipa para verificar todos os aspetos.

Editar a férula cirúrgica virtual

Nota

Isto só é possível para férulas criadas a partir de uma digitalização dentária.

Se a férula virtual não estiver corretamente distribuída pela arcada dentária (estendendo-se de forma regular pelas superfícies labial/bucal e lingual), a sua forma pode ser editada. Altere a forma da linha azul no assistente [Editar férula](#), de modo a que a curva coincida com a arcada dentária.

1. Clique em [Editar férula](#)  no separador [Finalizar](#).
2. Clique e arraste os pontos presentes na curva para alterar a posição.
3. Quando a posição da linha azul coincidir melhor com a arcada dentária, clique em [Concluir](#).
4. A férula cirúrgica virtual é regenerada.

Se a forma da férula virtual não for a ideal, repita estes passos até o conseguir.

Nota

Nos Estados Unidos e em alguns outros mercados, uma férula cirúrgica para colocação do implante dentário endo-ósseo é um dispositivo médico. Contacte a sua agência de regulação local para obter informações sobre as condições e requisitos regulamentares relativos ao fabrico desta férula cirúrgica.

Aprovar um plano de tratamento

Quando um tratamento se encontrar completamente finalizado, bloqueie-o através de aprovação. Leia cuidadosamente o texto da caixa de diálogo [Aprovar](#) e concorde para dar seguimento à aprovação.

O seu estado "aprovado" surge na barra Estado do Planeamento.

É impossível efetuar alterações a um plano de tratamento aprovado. Para remover a aprovação e proceder a mais alterações, clique no botão [Remover a aprovação do planeamento](#).

Encomendas

Envie as encomendas de digitalização ou TempShell ao laboratório de prótese dentária para que este efetue uma digitalização ou desenhos e calcule um TempShell provisório. Para enviar as encomendas através do serviço de nuvem, o laboratório de prótese dentária tem de usar o DTX Studio Lab e estabelecer uma conexão no DTX Studio Lab e no DTX Studio Implant.

Trabalhar com conexões

Para acrescentar uma conexão, necessita do número de identificação de nove dígitos da pessoa, consultório ou laboratório de prótese dentária com que se deseja conectar. No DTX Studio Implant, o código de conexão é apresentado na caixa de diálogo [Gerir conta](#). No DTX Studio Lab, o código de conexão é apresentado na caixa de diálogo [Detalhes da conta](#).

Acrescentar uma conexão

1. Clique em [Adicionar conexão](#)  no separador [Registos médicos](#) da barra de ferramentas [My Office](#). Em alternativa, clique no separador [DTX Studio Implant](#) e clique em [Gerir conta](#).
2. Na caixa de diálogo [Gerir conta](#), clique em [Adicionar uma nova conexão](#) no grupo [Gerir as conexões](#).
3. Introduza o número de identificação de nove dígitos da conta com que se deseja conectar.
4. Clique em [Adicionar conexão](#). A nova conexão é adicionada à lista, apresentando o estado [Convite enviado](#) e é enviado um e-mail de convite para o endereço associado à conta utilizada.
5. Clique em [OK](#).
6. Quando a nova conexão aceita o convite é-lhe enviado um e-mail e o estado da conexão na lista passa para [Aceito](#).

Aceitar uma conexão

Os novos pedidos de conexão que lhe são enviados tem o estado [Solicitado](#). Para aceitar um pedido de conexão, clique em [Aceitar](#) no e-mail de convite. Em alternativa:

1. Clique em [Adicionar conexão](#)  no separador [Registos médicos](#) da barra de ferramentas [My Office](#) ou clique no separador [DTX Studio Implant](#) e clique em [Gerir conta](#).
2. Na caixa de diálogo [Gerir conta](#), selecione o pedido de conexão no grupo [Gerir as conexões](#) marcado com o estado [Convite enviado](#).
3. Clique em [Aceitar a conexão selecionada](#).
4. O estado da conexão passa para [Aceito](#) e é enviado um e-mail de confirmação ao autor do convite.

Trabalhar com Encomendas de produtos

Criar uma encomenda de produto

Para produtos Nobel Biocare pode ser criada uma encomenda de produtos. Para produtos que não sejam da Nobel Biocare (por exemplo, implantes que não sejam da Nobel Biocare) não é possível criar uma encomenda de produtos.

Para criar uma encomenda de produtos:

1. Clique em [Encomenda](#)  no separador [Finalizar](#) da barra de ferramentas [Planeamento](#). Em alternativa, clique em [Produto](#) na barra de ferramentas do módulo [Encomenda](#).
2. É apresentada a lista de ficheiros de planeamento disponíveis para o paciente atual. No painel da janela da direita, consulte os detalhes do ficheiro de planeamento selecionado, escolha o ficheiro de planeamento adequado e clique em [Avançar](#).

Nota

Certifique-se de que o ficheiro de planeamento a encomendar é um ficheiro aprovado . Apenas ficheiros de planeamento aprovados podem ser convertidos em encomendas. É apresentado um aviso no caso de um ficheiro de planeamento não-aprovado.

3. É apresentada a [Lista de produtos](#). Na lista, apague os itens que não precisam de ser encomendados ou ajuste a quantidade dos produtos a serem encomendados e clique em [Avançar](#).
4. Selecione o endereço [Enviar para](#), preencha os dados do autor da encomenda e, se necessário, acrescente notas para a produção.
5. Defina [Apenas guardar](#) a encomenda ou [Salvar e enviar agora](#).
6. Verifique os produtos a serem encomendados no painel [Produtos encomendados](#).
7. Clique em [Concluir](#). A encomenda é criada e apresentada na lista de encomendas criadas.

Enviar uma encomenda de produto

Para enviar uma encomenda de produtos criada:

1. Selecione a encomenda criada na lista.
2. Clique em [Enviar](#)  na barra de ferramentas.

Trabalhar com Encomendas de digitalização do modelo

Para receber uma digitalização da superfície do molde dentário, uma montagem ou enceramento de diagnóstico e/ou uma digitalização dos antagonistas, envie uma encomenda de digitalização do modelo ao laboratório de prótese dentária.

Criar uma encomenda de digitalização de modelo

1. No módulo **Office**, clique em **Nova**  e em **Encomendar uma digitalização de modelo** . Em alternativa, vá para o módulo **Encomenda** e clique em **Digitalização**.
2. Indique os objetos a digitalizar no diagrama de dentes arrastando a região a digitalizar e selecionando a opção requerida no menu de sobreposição. As digitalizações solicitadas são apresentadas na lista do lado direito.
3. Clique em **Avançar**.
4. Selecione o laboratório de prótese dentária associado que irá efetuar para si o molde dentário, introduza todos os detalhes necessários e quaisquer instruções especiais pertinentes, e verifique a lista de digitalizações solicitadas.
5. Clique em **Concluir**.
6. A encomenda de digitalização do modelo é enviada para o laboratório de prótese dentária e acrescentado à lista de **Encomendas**, sob o número da encomenda obtido a partir do servidor.

Trabalhar com encomendas de TempShell

Os provisórios imediatos permitem ao paciente obter uma coroa ou ponte provisória na sua consulta de colocação de implantes. Para tal, o utilizador do DTX Studio Implant e o laboratório de prótese dentária (a utilizar o DTX Studio Lab) trabalham em conjunto para conceber um TempShell que possa ser convertido em provisório pelo médico dentista no momento da cirurgia.

O fluxo de trabalho do TempShell

O utilizador do DTX Studio Implant cria um ficheiro de paciente, acrescenta informações da prótese dentária e planeia os implantes. É criada e enviada para o laboratório de prótese dentária uma encomenda de TempShell, recebendo o laboratório de prótese dentária o pedido no DTX Studio Lab. O laboratório de prótese dentária cria um LabDesign no DTX Studio Lab.

O LabDesign pode ser partilhado com o utilizador do DTX Studio Implant, a título opcional. Para verificar se o desenho se ajusta ao plano de tratamento, o utilizador acrescenta o LabDesign ao plano de tratamento no DTX Studio Implant. Se for necessário efetuar alguns ajustes, o laboratório de prótese dentária é contactado (pelo telefone ou por e-mail) para solicitar os ajustes. Podem ser necessárias diversas interações entre o utilizador do DTX Studio Implant e o laboratório de prótese dentária. Quando o médico dentista confirma que o desenho se ajusta, o TempShell é criado e partilhado pelo laboratório de prótese dentária.

O utilizador do DTX Studio Implant adiciona o TempShell ao plano de tratamento.

Criar um pedido LabDesign

Para solicitar um LabDesign:

1. Clique em **LabDesign**  na barra de ferramentas do módulo **Encomenda**.
2. É apresentada a lista de ficheiros de planeamento disponíveis para o paciente atual. No painel da janela da direita, consulte os detalhes do ficheiro de planeamento selecionado, escolha o ficheiro de planeamento adequado e clique em **Avançar**.
3. É apresentada a **descrição geral da encomenda de LabDesign**.
4. Indique no diagrama de dentes as posições para as quais foi pedido um LabDesign (unitário ou ponte).
5. Selecione o laboratório de prótese dentária que vai processar o pedido ou opte por exportar o pedido sob a forma de ficheiro.
6. Verifique os detalhes do pedido e ajuste-os, se necessário.
7. Clique em **Concluir**.

Criar uma encomenda de TempShell

Para criar uma encomenda de TempShell e enviá-la ao laboratório de prótese dentária:

1. Clique em **TempShell**  na barra de ferramentas do módulo **Encomenda**.
2. É apresentada uma lista com os ficheiros de planeamento disponíveis para o paciente atual. No painel da janela da direita, consulte os detalhes do ficheiro de planeamento selecionado, escolha o ficheiro de planeamento adequado e clique em **Avançar**.
3. É apresentada a **descrição geral da encomenda de TempShell**.
4. Indique no diagrama de dentes as posições para as quais foi encomendada um TempShell (unitário ou ponte). Não selecione a extensão das asas.
5. Selecione o laboratório de prótese dentária que vai processar a encomenda ou opte por exportar a encomenda sob a forma de ficheiro.
6. Verifique os detalhes da encomenda e ajuste-os, se necessário.
7. Clique em **Concluir**.

Acrescentar um LabDesign ao plano de tratamento

Para verificar se a restauração protética desenhada pelo laboratório de prótese dentária se ajusta ao plano de tratamento, o LabDesign partilhado pode ser adicionado ao plano de tratamento.

1. Clique em **Adicionar LabDesign**  no separador **Prótese dentária** do módulo **Planeamento**.
2. É apresentada a caixa de diálogo **Adicionar LabDesign**. Selecione o **LabDesign** e clique em **Adicionar LabDesign**.
3. O **LabDesign** é adicionado à cena.
4. Contacte o laboratório de prótese dentária pelo telefone ou por e-mail para confirmar que o LabDesign se ajusta ou para solicitar algumas alterações.

Observações

Se precisar de ajustar o plano de tratamento, não se esqueça de voltar a encomendar o LabDesign.

Se um ficheiro de LabDesign estiver disponível numa unidade, importe-o por meio da ação **Importar LabDesign** na caixa de diálogo **Adicionar LabDesign**.

Adicionar um TempShell ao Plano de tratamento

1. Clique em **Adicionar TempShell**  no separador **Finalizar** da barra de ferramentas **Planeamento**.
2. É apresentada a caixa de diálogo **Adicionar TempShell**.
3. Clique num TempShell disponível para ser adicionado ao plano de tratamento.
4. Clique em **Adicionar TempShell**.

Nota

Se estiver disponível numa unidade um ficheiro de TempShell, importe-o por meio da ação **Importar TempShell** na caixa de diálogo **Adicionar TempShell**.

Trabalhar com pedidos de serviço

O fluxo de trabalho típico de um pedido de serviço através do DTX Studio Go

O utilizador do DTX Studio Clinic (requerente) gostaria de receber de um utilizador do DTX Studio Implant (fornecedor) um plano para um caso específico. O requerente cria um ficheiro do paciente no DTX Studio Clinic e, por norma, um pedido de serviço através do DTX Studio Go. Quando o fornecedor recebe um novo pedido no DTX Studio Go para criar um plano, os ficheiros necessários estão disponíveis para transferência. É necessário descompactar e guardar o ficheiro zip. O fornecedor cria um novo ficheiro do paciente no DTX Studio Implant utilizando os dados do paciente recebidos como ponto de partida. O fornecedor realiza as habituais etapas de planeamento do implante no DTX Studio Implant e aprova o plano de tratamento. Em seguida, pode responder ao pedido de serviço e enviar o plano de tratamento ao requerente através do DTX Studio Go.

Responder a um pedido de serviço

Para enviar um plano aprovado ao requerente do serviço:

1. No módulo **Encomenda**, clique em **Preencha o pedido** .
2. Selecione o plano correto na lista. Clique em **Avançar**.
3. Preencha as informações necessárias para personalizar o pedido de serviço. Certifique-se de que anexa o relatório e, opcionalmente, pode adicionar notas ou imagens.
4. Clique em **Concluir**.
5. Uma janela pop-up mostra as informações essenciais, tais como ID do serviço e dados do requerente, permitindo-lhe verificar se o tratamento está a ser enviado para o caso do paciente correto. Clique em **Transferir** para enviar o plano ao requerente.

O procedimento de trabalho de um pedido de serviço "local"

Se um utilizador tiver o DTX Studio Clinic e o DTX Studio Implant instalados no mesmo computador, o fluxo de trabalho é ligeiramente diferente. No DTX Studio Clinic, é criado um ficheiro do paciente e são efetuados os alinhamentos necessários para criar uma férula do paciente. Quando o DTX Studio Implant é aberto a partir do DTX Studio Clinic, o modelo do paciente é exportado e é criado um novo ficheiro do paciente no DTX Studio Implant, com base nos dados exportados. O plano de tratamento do implante é criado no DTX Studio Implant e pode ser exportado e visualizado diretamente no DTX Studio Clinic.



Importante

Se o alinhamento entre a digitalização dentária e a férula do paciente tiver sido feito através do SmartFusion™ no DTX Studio Clinic, surge uma mensagem de aviso pop-up a solicitar que verifique o alinhamento:

Verifique o alinhamento entre a digitalização dentária e a férula do paciente e, se estiver incorreto ou impreciso, recalcule o alinhamento no assistente Editar digitalização dentária.

Exportar um plano aprovado

Se o DTX Studio Clinic e o DTX Studio Implant estiverem instalados no mesmo computador, o plano aprovado tem de ser exportado.

1. No módulo [Encomenda](#), clique em [Preencha o pedido](#)
2. Selecione o plano correto na lista. Clique em [Avançar](#).
3. Preencha as informações necessárias para personalizar o pedido de serviço. Certifique-se de que anexa o relatório e, opcionalmente, pode adicionar notas ou imagens.
4. Clique em [Exportar](#).
5. Escolha a localização para guardar os ficheiros exportados. Clique em [Selecionar pasta](#).
6. Os ficheiros ficam então disponíveis na localização selecionada.

Trabalhar com o Assistant

Para abrir o DTX Studio Implant Assistant, clique em **Assistente** no canto superior direito da janela.

É apresentada a janela **DTX Studio Implant Assistant**. O DTX Studio Implant Assistant é constituído por diferentes separadores:


- **Tarefas**  : uma visão geral de tarefas de planeamento e tarefas adicionais orienta o utilizador através do procedimento de planeamento.
- **Avisos**  : as mensagens de aviso avisam o utilizador de possíveis problemas.
- **Descrição geral do planeamento**  : é fornecida uma descrição geral dos implantes, pilares e/ou parafusos estabilizadores utilizados no plano de tratamento. É também indicado se a guia radiográfica e a férula cirúrgica foram ou não criadas. A posição dos implantes planeados é indicada no diagrama de dentes.

Sistema de aviso do DTX Studio Implant

É visualizada no software DTX Studio Implant uma série de avisos técnicos/de produção/de procedimento (por exemplo, anéis cirúrgicos colocados demasiado perto uns dos outros, "não foi colocado nenhum parafuso estabilizador", implante planeado demasiado perto de nervo anotado).

Quando os avisos são emitidos por o DTX Studio Implant ter detetado problemas clínicos ou de planeamento técnico, podem ser visualizados na secção **Avisos** do Assistente de planeamento.

Abra o Assistente de planeamento e selecione o ícone **Avisos** , ou clique no botão **Avisos** abaixo do botão **Assistente**. O Assistente de planeamento apresenta os avisos categorizados por avisos clínicos e de fêrula.

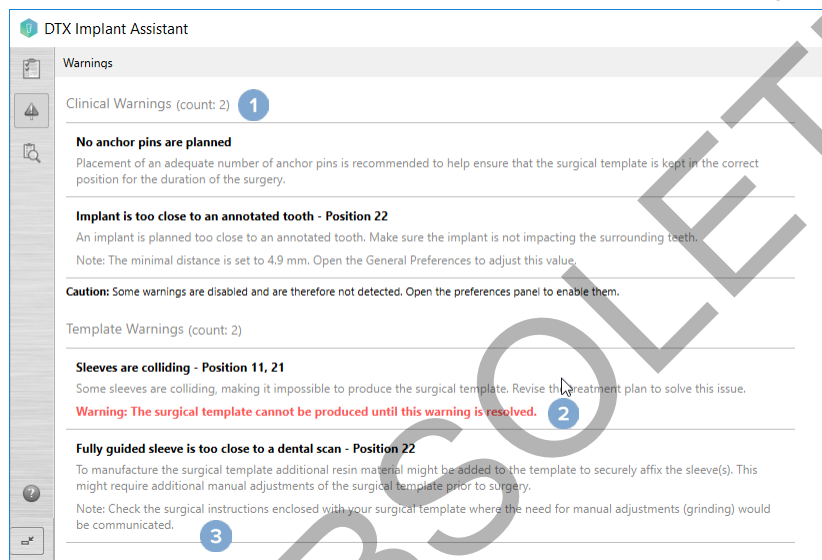

- 1 O número de avisos clínicos e de fêrula atuais é apresentado no cabeçalho do tipo de aviso.
- 2 No caso de a fêrula cirúrgica não poder ser produzida, os avisos específicos são marcados com uma notificação a vermelho indicando que os avisos precisam de ser resolvidos antes de a fêrula cirúrgica poder ser produzida.
- 3 Os avisos configuráveis são acompanhados por uma nota referindo o valor estabelecido e se esse valor pode ser alterado, caso seja necessário algum ajuste. Caso tenha sido desativado um aviso configurável nas preferências, é apresentada uma notificação de precaução, que o informa de que alguns dos problemas possíveis podem não ter sido detetados.

Avisos DTX Studio Implant



Aviso

Este programa de planeamento não verifica automaticamente todas as restrições técnicas. Em certos casos, pode não ser possível a produção de fêrulas cirúrgicas, mesmo que não seja automaticamente apresentada nenhuma limitação técnica no software.

Durante o planeamento, é necessário ter em conta as restrições técnicas específicas para assegurar a produção correta da fêrula cirúrgica e a utilização adequada da fêrula produzida, durante a cirurgia. O DTX Studio Implant deteta automaticamente a possível violação de algumas das restrições técnicas e clínicas. Se não respeitar todas as restrições técnicas, surgirá uma mensagem de aviso no Assistant. Clique nesta mensagem para visualizar uma descrição detalhada das notas e avisos.

Nos visualizadores 2D e 3D, os objetos causadores de problemas apresentam-se a vermelho ou laranja, dependendo do tipo de violação. As mensagens de aviso correspondentes são apresentadas no assistente. Estas mensagens também podem ser visualizadas na janela **Aprovar**, na visão geral do planeamento, no relatório, etc.

Em baixo, é apresentada uma visão geral dos avisos possíveis consoante o tipo de aviso.

Avisos da férula

No relatório, os avisos da férula são apresentados na última página.

Aviso	Explicação
Os anéis estão em colisão.*	Alguns anéis estão a colidir, impossibilitando o fabrico da férula cirúrgica. Reveja o plano de tratamento para resolver o problema.
O implante e o anel estão em colisão.	Um implante está em colisão com um anel. Isto poderá causar problemas durante a cirurgia. Recomenda-se uma revisão do plano de tratamento.
O parafuso estabilizador e o anel estão em colisão.	Um parafuso estabilizador está em colisão com um anel. Isto poderá causar problemas durante a cirurgia. Recomenda-se uma revisão do plano de tratamento.
O dente anotado e o anel estão em colisão.	Um anel está em colisão com um dente anotado. Certifique-se de que esta colisão não impede o encaixe correto da férula cirúrgica.
O anel do parafuso estabilizador está demasiado próximo da digitalização dentária.	Um anel de parafuso estabilizador planeado está demasiado próximo da digitalização dentária. Isto poderá impedir um encaixe correto da férula cirúrgica durante a cirurgia. Experimente posicionar o anel do parafuso estabilizador de forma que não colida com a digitalização dentária.
O anel piloto está demasiado perto da digitalização dentária.*	Um anel de broca piloto está posicionado demasiado próximo da digitalização dentária, impedindo o fabrico da férula cirúrgica. Reveja a posição dos implantes planeados ou altere o "deslocamento do anel" para resolver o problema.
O anel completamente guiado está demasiado próximo da digitalização dentária.	Para fabricar a férula cirúrgica, pode adicionar mais material de resina à férula para fixar os anéis com firmeza. Isto poderá exigir ajustes manuais adicionais à férula cirúrgica antes da cirurgia.
Nota Consulte as instruções cirúrgicas fornecidas com a férula cirúrgica quando for comunicada a necessidade de ajustes manuais (desgaste).	

* Não é possível produzir a férula cirúrgica até este aviso estar resolvido.

Avisos clínicos

Os avisos clínicos subdividem-se em avisos gerais e avisos do implante. Os avisos clínicos são apresentados nas páginas sobre implantes do relatório.

Avisos gerais

Aviso	Explicação
Não estão planeados parafusos estabilizadores.	Recomenda-se que coloque um número adequado de parafusos estabilizadores para ajudar a garantir que a férula cirúrgica se mantem na posição correta durante toda a cirurgia.
Os parafusos estabilizadores estão em colisão.	Alguns parafusos estabilizadores estão em colisão. Isto poderá causar problemas durante a cirurgia. Recomenda-se uma revisão do plano de tratamento.
A guia radiográfica não foi calibrada.	O modelo 3D da guia radiográfica foi criado com um valor cinzento (valor iso) como limiar, que não foi calibrado para o seu scanner. Para produzir uma férula cirúrgica que encaixe com precisão, é importante seguir o Procedimento de Calibração NobelGuide, o qual está descrito no manual NobelGuide.
Tratamento planeado com produtos não instalados.*	O plano de tratamento inclui produtos que não estão atualmente instalados no seu computador. Certifique-se de que existe uma ligação ativa à Internet e volte a abrir o plano de tratamento. Se não for possível instalar os produtos em falta, contacte a equipa de assistência ao cliente local.
Está ativada a visualização de baixa qualidade.**	No plano de tratamento, utiliza-se uma visualização de baixa qualidade do modelo do paciente em 3D.
O alinhamento do modelo dentário foi ajustado manualmente.	O alinhamento entre o modelo do paciente e o modelo dentário foi ajustado manualmente, indicando os pontos correspondentes ou importando uma nova superfície de digitalização dentária. Verifique duas vezes se a digitalização dentária está corretamente alinhada com a digitalização da tomografia computadorizada (CB), uma vez que os desvios provocam erros no posicionamento dos implantes.
O alinhamento SmartFusion falhou.*	O alinhamento do SmartFusion falhou e não foi ajustado manualmente. Execute a ação Editar digitalização dentária para resolver este problema.

Aviso	Explicação
Verifique o alinhamento do SmartFusion	Verifique o alinhamento entre a digitalização dentária e a férula do paciente e, se estiver incorreto ou impreciso, recalcule o alinhamento no assistente Editar digitalização dentária.

* Não é possível produzir a férula cirúrgica antes de resolver este aviso.

** A visualização com baixa qualidade de imagem aumenta o risco de algumas características anatômicas não ficarem visíveis no modelo do paciente. A definição apenas influenciará a qualidade do volume 3D. Os cortes virtuais de tomografia computadorizada não serão afetados.

Avisos do implante

Alguns dos avisos do implante são configuráveis. Por exemplo, podem ser ativados ou desativados e/ou os valores utilizados para desencadear os avisos podem ser definidos pelo utilizador. Na tabela abaixo, estes possuem uma etiqueta: "configurável".



Importante

Os valores que desencadeiam os avisos de implante devem ser definidos de acordo com as competências clínicas e experiência do utilizador.


Aviso	Explicação
Os implantes estão em colisão.	Alguns implantes estão em colisão. Isto poderá causar problemas durante a cirurgia. Recomenda-se uma revisão do plano de tratamento.
O implante e o parafuso estabilizador estão em colisão.	Um implante está em colisão com um parafuso estabilizador. Isto poderá causar problemas durante a cirurgia. Recomenda-se uma revisão do plano de tratamento.
O implante está demasiado próximo de um nervo anotado.*	Um implante está planeado demasiado próximo de um nervo anotado. Certifique-se de que o implante não está em colisão com o nervo. Nota A distância mínima está definida como [...] mm. Aceda a Preferências gerais para ajustar este valor.
O implante está demasiado próximo de um dente anotado.*	Um implante está planeado demasiado próximo de um dente anotado. Certifique-se de que o implante não está em colisão com os dentes adjacentes. Nota A distância mínima está definida como [...] mm. Aceda a Preferências gerais para ajustar este valor.

* Estes avisos são configuráveis

Avisos configuráveis

Os avisos configuráveis baseiam-se num volume em torno do implante (isto é, o volume de aviso). Quando este volume colidir com uma estrutura anatômica anotada, é emitido um aviso.

O volume de aviso é definido com base numa distância predefinida. De acordo com a predefinição, esta distância foi definida como 1.5 mm, a distância mínima. Com esta distância mínima, o volume de aviso coincide com a zona amarela (que representa uma distância de 1.5 mm em torno do implante e uma distância de 2×1.5 mm (3.0 mm) no ápice). O volume de aviso pode aumentar. Como se vê na imagem (para uma distância exemplar de 4.0 mm), o volume de aviso é colocado à escala.

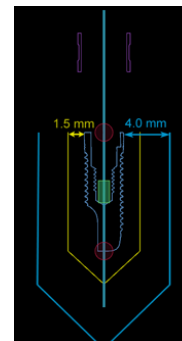

Aviso entre os implantes e os nervos

Quando um implante é colocado demasiado perto de um nervo anotado (ou seja, quando o volume de aviso colide com a visualização do nervo anotado) é emitido um aviso. O implante afetado é apresentado (se ainda não estiver visível) e fica cor de laranja.

Aviso entre os implantes e as raízes do dente

Quando um implante é colocado demasiado perto de uma raiz do dente (ou seja, quando o volume de aviso colide com o dente anotado), é emitido um aviso. O implante é apresentado e fica cor-de-laranja.

Nota

A distância mínima do volume de aviso deve ser definida em [DTX Studio Implant > Preferências gerais](#). Os valores são guardados no computador em que está a trabalhar. Ao abrir o plano de tratamento num computador diferente do utilizado para a criação do plano, os avisos são apresentados em função das definições do computador que está a ser utilizado. Isso pode resultar em diferentes avisos com base nas definições do computador. Os valores configuráveis podem ser ajustados nas definições e, quando é emitido um aviso, são apresentados na visão geral do aviso.

Restrições técnicas


São explicadas várias restrições técnicas que são cruciais para a criação correta da férula cirúrgica. Quando estas restrições não são tidas em conta, não é garantido que a férula cirúrgica possa ser fabricada ou que possa ser utilizada corretamente.

Distância mínima entre anéis cirúrgicos

A férula cirúrgica necessita que seja respeitada uma distância mínima entre os anéis cirúrgicos. Quando a distância é demasiado pequena, não é possível produzir a férula cirúrgica.

Quando o espaço mínimo entre os anéis cirúrgicos é violado, os anéis cirúrgicos tornam-se automaticamente visíveis e ficam vermelhos. Nesta configuração, não é possível produzir a férula cirúrgica.


Para resolver esta situação, mova ou incline os implantes de forma a aumentar o espaço entre os anéis. Quando a distância for suficientemente grande, os implantes ou os parafusos estabilizadores cirúrgicos voltarão automaticamente à sua cor normal.

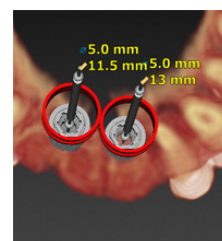

Distância mínima entre anéis e implantes/anéis e parafusos estabilizadores

Quando os anéis e implantes ou anéis e parafusos estabilizadores são colocados muito próximos ou estão em colisão, tornam-se automaticamente visíveis e ficam cor de laranja. Uma distância demasiado curta entre um anel e um implante ou parafuso estabilizador pode dificultar durante a cirurgia a realização de uma osteotomia ou a colocação do implante ou parafuso estabilizador.


Para resolver este problema, mova ou incline os implantes ou os parafusos estabilizadores de forma a que o espaço entre estes e o anel aumente. Quando a distância for suficientemente grande, os anéis cirúrgicos voltam automaticamente à sua cor normal.

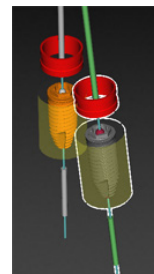

Colisão entre implantes, parafusos estabilizadores ou implantes e parafusos estabilizadores

Quando os implantes, parafusos estabilizadores ou implantes e parafusos estabilizadores estão em colisão, tornam-se automaticamente visíveis e ficam laranja. A colisão destes objetos pode provocar problemas durante a cirurgia.

Para resolver este problema, mova ou incline os implantes ou os parafusos estabilizadores de forma a que não colidam. Quando a distância for suficientemente grande, os anéis cirúrgicos voltarão automaticamente à sua cor normal.

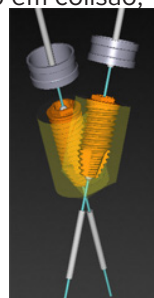

Nota

Em alguns casos, o leito do implante é utilizado para um parafuso estabilizador em primeiro lugar. Antes de o implante ser inserido, o parafuso estabilizador tem de ser removido.


Relação entre o anel cirúrgico e a guia radiográfica e/ou a digitalização dentária

Durante o planeamento, para além de todas as considerações de ordem clínica, é importante considerar as restrições técnicas para a posição dos anéis cirúrgicos em relação à guia radiográfica e/ou à digitalização dentária. A posição dos anéis cirúrgicos precisa de ser verificada com a guia radiográfica e/ou a digitalização dentária deve ser apresentada.

Posição da Guia Radiográfica


- **Posição:** cada anel cirúrgico deve ser posicionado dentro da guia radiográfica de modo a assegurar que existe material suficiente na férula cirúrgica para suportar o anel cirúrgico.

- 1 Posicionado de forma correta
- 2 Posicionado de forma incorreta: o anel está demasiado longe e não está ligado à guia radiográfica.

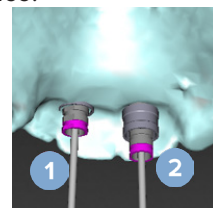

- **Profundidade:** é necessário verificar a profundidade do anel cirúrgico em relação à guia radiográfica. O anel não deve penetrar na superfície virada para a gengiva (superfície de entalhe), de modo a garantir que a férula cirúrgica fica na posição correta. Para verificar a profundidade do anel cirúrgico, veja a posição do mesmo e ajuste a profundidade do implante por meio do ícone **Profundidade** na barra de ferramentas dedicada. Em alternativa, se for escolhido um anel piloto, pense em ajustar o deslocamento do anel.

- 1 Posicionado de forma correta
- 2 Posicionado de forma incorreta: o anel está colocado a uma profundidade excessiva.



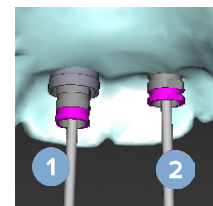


Digitalização do molde dentário

Verifique a posição dos anéis depois do planeamento de implantes. As seguintes situações têm de ser resolvidas:



- **Colisões laterais:** são colisões com os dentes adjacentes ou eventualmente com o tecido mole (digitalização da superfície da situação intraoral). Se ocorrer uma colisão, verifique se a posição do implante pode ser alterada de modo a não ser emitido o aviso de colisão. Se tal não for possível, tente diminuir o diâmetro do anel ou escolha a opção apenas perfuração piloto. Os utilizadores experientes também podem considerar ignorar partes do procedimento de perfuração guiada e finalizar o protocolo de perfuração com o protocolo à mão livre, após a remoção da férula cirúrgica. O implante é então colocado à mão livre.

- 1 Posicionado de forma incorreta: demasiado perto ou em colisão com os dentes ou tecido mole adjacentes.
- 2 Posicionado de forma correta: diâmetro alterado.
- 3 Posicionado de forma correta: alterado para anel piloto.

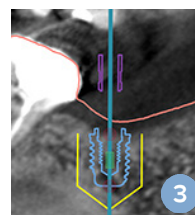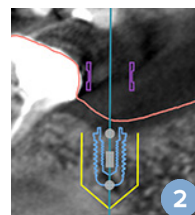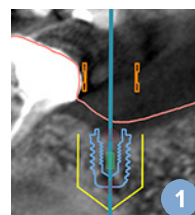

- **Colisões verticais:** são colisões com tecido potencialmente mole (digitalização da superfície da situação intraoral). Se uma colisão vertical ocorrer e tiver optado por uma broca piloto, poderá ser recomendável ajustar o deslocamento do anel.

- 1 Posicionado de forma incorreta
- 2 Posicionado de forma correta: deslocamento do anel ajustado.

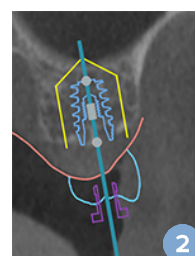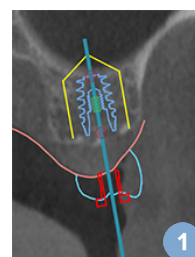

Relação entre o Anel Cirúrgico e o Osso

Durante o planeamento, é importante ter em conta as restrições técnicas quanto à posição dos anéis cirúrgicos relativamente à superfície óssea, que pode incluir os dentes. Quando o anel cirúrgico colide com a superfície óssea, ou com os dentes restantes que fazem parte do modelo ósseo, pode não ser possível encaixar corretamente a férula cirúrgica durante a cirurgia.

No entanto, em certos casos, este erro pode ser aceitável (por exemplo, se o anel colidir com um dente que será extraído antes da cirurgia ou quando um anel colide com um artefacto existente).

Pilares guiados

No caso de estar planeada a utilização de pilares guiados, certifique-se de que o ângulo entre os implantes mais angulados não ultrapassa os 30 graus.

A guia radiográfica foi criada sem um valor iso calibrado.

É recomendada a utilização do valor iso calibrado durante a criação de um modelo de guia radiográfica, se a férula cirúrgica for exportada para fabrico. Se o conjunto de calibração não for utilizado, é emitido um aviso de calibração ("O modelo de guia radiográfica foi criado sem um valor iso calibrado") para evidenciar a importância deste passo automático exclusivo, seguro e conveniente.

Discutir o plano de tratamento

O módulo **Discutir** permite-lhe criar relatórios, ficheiros de visualizador apenas de leitura e apresentações do Communicator.

Relatórios

Criar um Relatório

1. Certifique-se de que existe um ficheiro de paciente aberto. Clique em **Relatório**  no grupo **Comunicar** do separador **Finalizar** do módulo Planeamento.
2. É apresentada a lista de ficheiros de planeamento. Selecione o ficheiro de planeamento correto e clique em **Avançar**. O sistema carrega os dados e gera as páginas de relatório.
3. São apresentadas imagens de pré-visualização das páginas do relatório: uma visão geral das informações disponíveis sobre o tratamento do paciente, scanner utilizado, avisos de planeamento, produtos utilizados, imagens do plano cirúrgico, etc.
Nota
As imagens de pré-visualização são geradas com uma resolução inferior à do ficheiro pdf real.
4. Atribua um nome adequado ao relatório.
5. Opcionalmente, adicione uma nota (até 700 caracteres) ao relatório.
6. Personalize o relatório selecionando as páginas a serem incluídas: anule a seleção das páginas que pretende remover do relatório. As páginas desmarcadas são apresentadas em cinzento e não são incluídas no relatório final criado.
7. Se necessário, o relatório pode ser anónimo.
8. Clique em **Concluir** para criar o relatório ou em **Cancelar** para descartar o pedido.
9. Mediante confirmação, é apresentada uma pré-visualização com as páginas selecionadas para o relatório. Percorra as páginas para as verificar.

Imprimir um Relatório

Para imprimir o relatório criado, exporte-o e guarde-o como ficheiro PDF.

1. Selecione o relatório na lista de **Itens de comunicação**.
2. Clique em **Exportar** no grupo **Relatório** do separador **Comunicação** da barra de ferramentas.
3. Avance até à localização onde pretende guardar o relatório.
4. Clique em **Guardar**.
5. O relatório é guardado como um documento pdf. Por predefinição, o relatório será aberto, permitindo que imprima o documento.

Ficheiros do Visualizador

Se o DTX Studio Implant não estiver disponível no computador da pessoa com quem pretende discutir o plano de tratamento, pode ser utilizado um ficheiro do Viewer para comunicar sobre o plano de tratamento. Um ficheiro do Viewer é uma versão do plano de tratamento guardada num ficheiro apenas de leitura criado no DTX Studio Implant, contendo o plano de tratamento de um paciente específico. Um ficheiro do Viewer pode ser aberto, desde que o DTX Studio Implant Viewer esteja instalado no computador que está a utilizar.

Criar um Ficheiro do Visualizador

1. Entre no módulo [Discutir](#).
2. Clique em [Visualizador](#)  no grupo [Comunicar](#) do separador [Comunicação](#).
3. Selecione o ficheiro de planeamento na lista e clique em [Avançar](#).
4. Preencha os detalhes do visualizador na página de personalização:
 - Introduza um nome adequado para o ficheiro do Viewer.
 - Clique nas imagens a incluir no ficheiro do Visualizador.
 - Indique se pretende comprimir os dados de imagens de tomografia computadorizada.
 - Se os detalhes do paciente não puderem ser partilhados, anonimize o ficheiro nesta altura, seleccionando [Anonimizar toda a informação do paciente](#).
 - Para partilhar o ficheiro do Visualizador imediatamente após a sua conclusão, selecione a respetiva caixa.
5. Clique em [Concluir](#) para guardar o ficheiro do Visualizador.
6. O ficheiro do Visualizador é criado e apresentado na lista de [Itens de comunicação](#). É apresentada a caixa de diálogo [Partilhar um visualizador](#).
7. Introduza o endereço de e-mail ou use o botão [Contactos](#) para seleccionar as pessoas com quem quer partilhar o visualizador.
8. Acrescente uma mensagem pessoal e clique em [Partilhar](#).
9. É enviado às pessoas seleccionadas um e-mail com uma hiperligação de transferência.

Abrir um Ficheiro do Viewer através do DTX Studio Implant

1. Clique duas vezes no ficheiro do Visualizador na lista de [Itens de comunicação](#).
2. A aplicação DTX Studio Implant Viewer abre-se e apresenta o ficheiro do Viewer seleccionado.

Abrir um ficheiro do Visualizador através da hiperligação de transferência

Se receber um e-mail com uma hiperligação de transferência de um ficheiro do Visualizador:

1. Clique na hiperligação de transferência do e-mail.
2. O ficheiro do Visualizador é transferido.
3. Procure a localização onde está guardado o ficheiro transferido e clique duas vezes no ficheiro do Visualizador guardado.

4. O DTX Studio Implant Viewer abre e apresenta o ficheiro do Viewer.

O módulo **Discutir** permite-lhe criar relatórios, ficheiros de visualizador apenas de leitura e apresentações do Communicator.

Apresentações do Communicator

As apresentações do Communicator proporcionam uma visão geral do plano de tratamento, assim como a possibilidade de fazer anotações durante a comunicação do procedimento ao paciente. As apresentações do Communicator podem ser usadas para comunicar um tratamento dentário aos pacientes e aos colegas. Além disso, as apresentações podem ser disponibilizadas através do serviço na nuvem.

As apresentações do Communicator são carregadas na nuvem e podem ser consultadas através da aplicação Communicator iPad®.

Criar uma apresentação do Communicator

1. Entre no módulo **Discutir**.
2. Clique em **Comunicador**  no grupo **Comunicar** do separador **Comunicação**.
3. Selecione o ficheiro de planeamento na lista.
4. Clique em **Avançar**.
5. Preencha os detalhes da apresentação do Communicator na página de personalização:
 - Introduza um nome adequado para a apresentação.
 - Se desejar, inclua notas sobre a apresentação. Estas são apresentadas na apresentação do Communicator quando esta é aberta num iPad®.
 - Defina quais as imagens a incluir na apresentação. Apenas se encontram disponíveis para serem incluídas as imagens da Biblioteca de pacientes.
 - Se os detalhes do paciente não puderem ser partilhados, anonimize o ficheiro nesta altura, selecionando **Anonimizar toda a informação do paciente**.
 - Para carregar a apresentação do Communicator no iPad® após a sua conclusão, selecione a respetiva caixa.
6. Clique em **Concluir**.
7. A apresentação do Communicator é criada e apresentada na lista de **Itens de comunicação**.

Exportar um Plano de tratamento para consulta ou cirurgia

O DTX Studio Implant permite-lhe exportar o plano de tratamento para utilização, por exemplo, no DTX Studio Clinic, X-Guide™ ou no OsseoCare™ Pro ou para ser consultado noutro software.

Exportar para o DTX Studio Clinic

Para exportar o plano de tratamento para visualização no DTX Studio Clinic:

1. Aceda ao módulo [Planeamento](#).
2. Clique [Exportar clínica](#)  no grupo [Plano cirúrgico](#) no separador [Finalizar](#).
3. Selecione a pasta para armazenar o ficheiro .dtxip encriptado contendo todas as informações necessárias do seu plano de tratamento.
4. É apresentada uma mensagem a confirmar uma gravação bem sucedida, assim como o local onde o ficheiro está guardado. Clique em [OK](#) para fechar.

Exportar o plano de tratamento para visualização noutro software (Abrir exportação)

1. Aceda ao módulo [Planeamento](#).
2. Clique em [Abrir exportação](#)  no grupo [Comunicar](#) no separador [Finalizar](#).
3. Selecione a pasta para armazenar o plano de tratamento.
4. Clique em [Exportar](#).
5. É apresentada uma mensagem a confirmar uma gravação bem sucedida, assim como o local onde o ficheiro está guardado. Clique em [OK](#) para fechar.

Plano cirúrgico X-Guide™

O X-Guide™ é um sistema de navegação 3D para implantes dentários, que o ajuda a transferir o plano de tratamento para o paciente e proporciona orientação interativa durante a cirurgia.



Aviso

Tenha em atenção que podem existir diferenças na visualização dos dados (por ex., orientação do visualizador, cores dos objetos), bem como nos avisos, entre os softwares DTX Studio Implant e X-Guide™.

Criar um plano cirúrgico X-Guide™

1. No módulo **Discutir** clique em **X-Guide**  no grupo **Comunicar**.
2. Selecione o ficheiro de planeamento devidamente aprovado na lista.
3. Clique em **Avançar**.
4. Preencha os detalhes na página **Personalizar a configuração da cirurgia**. Anonimizar, se necessário.
5. Clique em **Concluir**.

Exportar um plano cirúrgico X-Guide™

1. No módulo **Discutir** selecione um plano cirúrgico **X-Guide™** criado na lista de **Itens de comunicação**.
2. Clique em **Exportar**  no grupo **X-Guide** do separador **Comunicação**.



Aviso

O DTX Studio Implant suporta apenas uma seleção de implantes a exportar para o X-Guide™. Os implantes não suportados não serão incluídos no ficheiro do X-Guide™.

3. Na caixa de diálogo clique em **Procurar** e vá até à localização onde deve estar guardado o ficheiro X-Guide™ de cirurgia.
4. Clique em **Guardar**.

Plano cirúrgico OsseoCare™ Pro

O OsseoCare™ Pro é um motor de perfuração com broca que é operado através do iPad® da Apple, possibilitando planejar e definir a sequência de tratamento antes da cirurgia. O dispositivo destina-se a ser utilizado por médicos dentistas e cirurgiões para cortar tecidos duros e moles com ferramentas apropriadas.

Um plano cirúrgico OsseoCare™ Pro combina os passos consecutivos na sequência de tratamento e guia o médico dentista ou cirurgião pelo processo cirúrgico passo a passo, através da aplicação iPad®.

Criar um plano cirúrgico OsseoCare™ Pro

1. No módulo [Discutir](#) clique em [OsseoCare Pro](#)  no grupo [Comunicar](#).
2. Selecione o ficheiro de planeamento devidamente aprovado na lista.
3. Clique em [Avançar](#).
4. Preencha os detalhes na página [Personalizar a configuração da cirurgia](#).
5. Clique em [Concluir](#). Por predefinição, o plano cirúrgico concluído será carregado na nuvem.
6. Para continuar, clique em [Concordo](#) na Limitação de responsabilidade.

Calibração do scanner

Nota

Este procedimento de calibração do scanner só é necessário para a criação de uma guia radiográfica.

Para transferir de forma correta e precisa o plano de tratamento do computador para o paciente, para cirurgia, é muito importante gerar uma fêrula cirúrgica que se ajuste tão bem como a guia radiológica aos tecidos moles e duros envolventes. Para isto é necessária uma cópia 1:1 precisa que envolve a digitalização através de um scanner de tomografia computadorizada (CB) e a criação de um modelo virtual da guia radiográfica no software utilizando o as definições dependentes adequadas do scanner. A identificação deste valor, o "valor iso", pode ser efetuada manualmente, através de interação manual meticulosa, ou pode ser determinada automaticamente utilizando uma digitalização de calibração do objeto de calibração NobelGuide® exclusivo adquirido pelo scanner utilizado com as definições adequadas. O objeto de calibração NobelGuide® é um objeto com as mesmas propriedades de radiolucência que a guia radiológica (PMMA) e que tem uma forma definida com precisão conhecida pelo software. Através da análise automática da digitalização de referência (digitalização de calibração) e da comparação desta com a forma original, o DTX Studio Implant determina automaticamente o valor iso mais adequado (o **Valor iso calibrado**), aplicando-o posteriormente, para extração (segmentação) das dimensões e forma corretas a partir da digitalização da guia radiográfica. O software guarda todos os conjuntos de calibração específicos do scanner. Para cada digitalização de uma guia radiográfica, procura automaticamente um conjunto de calibração adequado entre os scanners "conhecidos". Se tal scanner for detetado, o **Valor iso calibrado** correspondente é sugerido e aplicado automaticamente. O editor de valor iso no assistente de guia radiográfica fornece informações sobre o conjunto de calibração utilizado, o tipo de scanner utilizado e o valor iso calibrado.

A utilização do valor iso calibrado é recomendada durante a criação de um modelo de guia radiográfica se a fêrula cirúrgica for exportada para fabrico. Se o conjunto de calibração não for utilizado, é emitido um aviso de calibração (**O modelo de guia radiográfica foi criado sem um valor iso calibrado**) para evidenciar a importância deste passo automático exclusivo, seguro e conveniente.

Quando é utilizada a calibração, o editor do valor iso apresenta **Valor iso calibrado** em vez de **Isovalor**. Quando utilizar um conjunto de calibração gerado pelo sistema, é apresentado **Valor iso sugerido**.

Criar um Novo Conjunto de Calibração

A primeira vez que são utilizados dados de imagem de tomografia computadorizada (CB) de um scanner específico e um protocolo em particular, é obrigatório criar um novo conjunto de calibração. Assim que este conjunto de calibração for desenvolvido, pode ser utilizado para todos os pacientes digitalizados com esta unidade de digitalização. É recomendada a criação de um novo conjunto de calibração a cada seis meses, pelo menos, ou quando a unidade de digitalização for atualizada ou for efetuada manutenção na mesma.

Para criar um novo conjunto de calibração, clique no botão **Novo**  no grupo conjunto de **Calibração**, no separador **Scanner** do módulo **My Office**. É iniciado o assistente **Criar calibração**.

O assistente de calibração orienta o utilizador no procedimento de calibração em três passos:

1. Carregar os ficheiros DICOM de calibração
2. Calcular as definições de calibração
3. Preencher os detalhes e guardar o conjunto de calibração

Apoio técnico

Se se deparar com quaisquer problemas durante a instalação, contacte o Apoio Técnico do DTX Studio:

support@dtxstudio.com

<https://tech.dexis.com/support>

OBSOLETE




Nobel Biocare AB
Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1,
411 17 Göteborg,
Sweden

www.nobelbiocare.com

Distribuído na Austrália por:


Nobel Biocare Australia Pty Ltd
Level 4/7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW 2114
Australia

Telefone: +61 1800 804 597

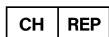

Importador/representante CH:

Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
Switzerland

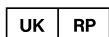

Pessoa responsável no Reino Unido:

Nobel Biocare UK Ltd.
4 Longwalk Road
Stockley Park
Uxbridge UB11 1FE
United Kingdom

Distribuído na Nova Zelândia por:

Nobel Biocare New Zealand Ltd
33 Spartan Road
Takanini, Auckland, 2105
New Zealand

Telefone: +64 0800 441 657

Distribuído na Turquia por:

EOT Dental
Sağlık Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş
Nişpetiye Mah. Aytar Cad.
Metro İş Merkezi No: 10/7
Beşiktaş İSTANBUL
Telefone: +90 2123614901



ifu.dtxstudio.com/symbolglossary
ifu.dtxstudio.com