



DTX Studio™ Implant

3.6-os verzió

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
Bevezetés	8
Felelősségi nyilatkozat	8
Termékleírás	8
A használat célja	8
Rendeltetés és használati javallatok	8
Felhasználói célcsoport és páciensek célcsoportja	9
Kompatibilitásra vonatkozó követelmények	9
Mérési funkcióval rendelkező készülékek	9
Ellenjavallatok	9
Kiberbiztonság	9
Kompatibilitás	9
Együtműködés más szoftverekkel	9
Tervezett élettartam	10
Teljesítménykövetelmények és korlátozások	10
Klinikai előnyök és nemkívánatos mellékhatások	10
Intézmények és képzések	10
Megjegyzés a súlyos eseményekkel kapcsolatban	10
Szakemberek számára	10
Rendszerkövetelmények	10
A szoftver telepítése	10
Használati utasítások	10
Figyelmeztetések és óvintézkedések	11
Figyelmeztetések	11
SmartFusion™ inicializálási figyelmeztetések	11
Szkenelési figyelmeztetések	11
Sablonnal kapcsolatos figyelmeztetések	12
Klinikai figyelmeztetések – Általános	12
Klinikai figyelmeztetések – Implantátum	12
Beállítható figyelmeztetések	12
Implantátumok és idegek ütközésére vonatkozó figyelmeztetés	13
Implantátumok és foggyökerek ütközésére vonatkozó figyelmeztetés	13
Óvintézkedések	13

Rendszerkövetelmények	15
Operációs rendszer	15
Követelmények	15
Elindítás	16
A kezelési terv	16
A DTX Studio Implant megnyitása	16
A páciensfájlokkal végzett alapvető műveletek	16
Új páciensfájl létrehozása	16
Meglévő páciensfájl megnyitása	16
A kezelési terv megnyitása	16
A kezelési terv mentése	16
A kezelési terv másolása	16
A kezelési terv átnevezése vagy törlése	17
A kezelési terv bezárása	17
A páciensfájl bezárása	17
A felhasználó azonosítása	18
Bejelentkezés	18
Kétfaktoros hitelesítés	18
Felhasználók közötti váltás	18
A fiókatatok kezelése	18
Rendelői beállítások	19
Rendelői verzió telepítése	19
Fiókok kezelése	19
Felhasználók hozzáadása	19
A szoftver áttekintése	20
A munkaterületek rendszere	21
Mi az a munkaterület?	21
Eszköztár	21
Interakció a megjelenítővel	22
Az objektumok manipulálása	22
Egy objektum mutatása vagy elrejtése	22
A CT-szeletek manipulálása	23
CT-felvételek görgetése	23
Szint és ablak	23
Szint/ablak beállítása 2D-megjelenítő esetén	23
Szint/ablak beállítása 3D-megjelenítő esetén	23

Páciensmodell	24
3D-páciensmodell létrehozása	24
A páciensmodell létrehozása	24
A tervezési görbe alakjának szerkesztése	24
A tervezési görbe alakjának módosítása	24
A meglévő kontrollpontok módosítása	24
A fogakhoz tartozó kontrollpontok használata	25
A keresztmetszeti szelet méretének beállítása	25
A páciensmodell megjelenítése	25
Mi az az átalakítási művelet?	25
A páciensmodell megjelenítésének letisztázása	26
A páciensmaszk használata	26
Csontműtermékek törlése	26
A maszk letiltása	27
A páciensmaszk visszaállítása	27
Legnagyobb rész megtartása	27
Protetikai információk	28
Diagnosztikai beállítások	28
Fogászati scan	28
A gipszminta szkennelése	28
A gipszminta szkennelésének megrendelése	28
Intraorális scan vagy asztali szkenneléssel készített scan	28
SmartFusion™	29
A fogászati scan hozzáadása a páciensmodellhez	29
A SmartFusion™ inicializálása	31
Az inicializálási folyamat	31
Az inicializáció varázsló indítása	31
A megfelelő pontok kijelölése az Inicializálási varázslóval	32
Pont beszúrása	32
Kiválasztott pontok eltávolítása	32
Minden pont eltávolítása	32
SmartFusion™ inicializálási figyelmeztetések	33
Arcfelvétel	33
Arcfelvétel hozzáadása a páciensmodellhez	33
Az arcfelvétel levágása	34
SmartSetup™	34
A SmartSetup™ kiszámítása	34
A SmartSetup™ beállítások módosítása	34
A SmartSetup™ szerkesztése	35

Radiológiai sablon modellje	36
A radiológiai sablon modelljének létrehozása	36
Intaglio felszín	36
Diagnosztika	37
Idegek	37
Fogak	37
Fogak eltávolítása a modellről	37
Minden fog eltávolítása egyszerre	37
Egyetlen fog eltávolítása	38
Mérések	38
Az implantátumok tervezése	39
Nem Nobel Biocare által gyártott implantátumok használata	39
Implantátumok hozzáadása a kezelési tervhez	39
Implantátum hozzáadása egy kezelési tervhez	39
Mit jelent a sárga terület?	40
Fogpozíció	40
Fogak ábrája	40
Az implantátumok kezelése	40
Az implantátum irányának megváltoztatása	40
Az implantátumok mozgatása	41
Implantátumok párhuzamos elhelyezése	41
Minden implantátum párhuzamos elhelyezése	41
Felépítmények	41
Megfelelő felépítmény kiválasztása az implantátumhoz	41
A műtét típus beállítása	42
Különböző műtét típusok	42
Kezdőpersely eltolása	43
A kezdőpersely eltolásának beállítása	43
A kezdőpersely forgatásának beállítása	43
Csontlevágási sík	43
Rögzítőtüskék	44
Rögzítőtüske hozzáadása a kezelési tervhez	44
A rögzítőtüskék megfelelő dőlésszöge és mélysége	44
Rögzítőtüskék és radiológiai sablon (fogatlan eset)	45
Rögzítőtüskék és fogászati scan (részlegesen fogatlan eset)	46

A kezelési terv ellenőrzése	47
Az illesztési funkció használata	47
Keresztmetszeti szeletek implantátumhoz vagy rögzítőtüskéhez való illesztése	47
Ugrás egy másik implantátumra vagy rögzítőtüskére	47
Visszatérés pásztázó módba	47
A kezelési terv ellenőrzése	48
Műtési sablon készítése	48
A kezelési tervnek megfelelő műtési sablon létrehozása	48
A műtési sablon ellenőrzése	48
A virtuális műtési sablon szerkesztése	49
A kezelési terv jóváhagyása	49
Rendelések	50
A kapcsolatok használata	50
Kapcsolat hozzáadása	50
Kapcsolat elfogadása	50
A termékrendelések kezelése	51
Új termékrendelés létrehozása	51
A termékrendelés elküldése	51
Modellszkennelési rendelések használata	52
Modellszkennelési rendelés létrehozása	52
A TempShell megrendelések használata	52
A TempShell munkafolyamat	52
LabDesign-kérés létrehozása	53
TempShell-rendelés létrehozása	53
LabDesign hozzáadása a kezelési tervhez	53
TempShell hozzáadása a kezelési tervhez	54
Szolgáltatásigénylések kezelése	54
Tipikus szolgáltatásigénylési munkafolyamat a DTX Studio Go segítségével	54
Válasz a szolgáltatásigénylésre	54
A „helyi” szolgáltatásigénylés munkafolyamata	55
A jóváhagyott terv exportálása	55
A Segéd használata	56

A DTX Studio Implant szoftverben megjelenő figyelmeztetések rendszere	57
A DTX Studio Implant szoftverben megjelenő figyelmeztetések	57
Sablonnal kapcsolatos figyelmeztetések	58
Klinikai figyelmeztetések	59
Általános figyelmeztetések	59
Implantátummal kapcsolatos figyelmeztetések	60
Beállítható figyelmeztetések	60
Technikai megkötések	61
Az irányító perselyek közötti minimális távolság	61
A perselyek és az implantátumok, illetve a perselyek és a rögzítőtűskék közötti minimális távolság	61
Implantátumok közötti vagy rögzítőtűskék közötti ütközés, illetve implantátumok és rögzítőtűskék közötti ütközés	61
Az irányító persely és a radiológiai sablon és/vagy fogászati scan viszonya	62
Az irányító persely és a csont viszonya	63
A radiológiai sablon kalibrált izoérték nélkül készült.	63
A kezelési terv megbeszélése	64
Jelentések	64
Jelentés létrehozása	64
A jelentés nyomtatása	64
Megjelenítői fájlok	65
Megjelenítői fájl létrehozása	65
Megjelenítői fájl megnyitása a DTX Studio Implant szoftver segítségével	65
Megjelenítői fájl megnyitása letöltési hivatkozáson keresztül	65
Communicator-prezentációk	66
Communicator-prezentáció létrehozása	66
Kezelési terv exportálása konzultációhoz vagy műtéthez	67
Exportálás a DTX Studio Clinic szoftverbe	67
Más szoftvertermékekben való megjelenítés érdekében a kezelési terv exportálásához (nyílt exportálás):	67
X-Guide™ műtéti terv	68
Az X-Guide™ műtéti terv létrehozása	68
Az X-Guide™ műtéti terv exportálása	68
OsseoCare™ Pro műtéti terv	69
Az OsseoCare™ Pro műtéti terv létrehozása	69
A szkennerek kalibrálása	70
Új kalibrációs készlet létrehozása	70
Műszaki támogatás	71

Bevezetés

Felelősségi nyilatkozat

Ez a termék egy általános koncepció része, és csak a hozzá tartozó eredeti összetevőkkel és eszközökkel együtt, a Nobel Biocare utasításainak és javaslatainak megfelelő módon szabad használni. A Nobel Biocare termékek más gyártók által előállított, a Nobel Biocare által nem javasolt termékekkel való használata esetén megszűnik a Nobel Biocare által teljesítendő mindenféle, kifejezett vagy vélelmezett garancia és kötelezettség. A Nobel Biocare termékek felhasználójának a kötelessége megállapítani, hogy a termék alkalmas-e a páciens kezelésére. A Nobel Biocare elutasít mindenféle kifejezett vagy vélelmezett kötelezettséget, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, büntető jellegű vagy egyéb kárért, amely a Nobel Biocare termékek használata során a szakmai döntéshozatal vagy gyakorlat bármilyen hibájából ered vagy azzal kapcsolatos. A felhasználónak kötelessége továbbá rendszeresen követni az ezzel a Nobel Biocare termékkel és az alkalmazásával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket. Ha kétségei merülnek fel, a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a Nobel Biocare-rel. A termék használatát a felhasználó végzi, ez az ő felelősségét képezi. A Nobel Biocare elutasít mindenféle felelősséget az ebből eredő károkért. Vegye figyelembe, hogy az ebben a használati útmutatóban említett termékek között lehetnek olyanok, amelyek nincsenek jóváhagyva, nincsenek forgalomban, vagy nincsenek eladásra engedélyezve bizonyos piacokon.

A DTX Studio Implant használata előtt olvassa el a jelen Használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Ne feledje, hogy az ebben a dokumentumban található információk célja, hogy Önt segítse a munka elkezdésében.

Termékleírás

A DTX Studio Implant a fogászati, kránio-maxillofaciális és kapcsolódó kezelések kép-alapú diagnosztikáját és tervezését segítő klinikai szoftver.

A fogászati, kránio-maxillofaciális és kapcsolódó kezelések diagnosztikájának és tervezésének elősegítéséhez a DTX Studio Implant egy vizualizációs technikát biztosít a páciens (CB) CT képeinek megjelenítéséhez a diagnosztikai és tervezési lépések során. Ezenkívül 2D-képadatok, pl. röntgen- vagy fényképfelvételek, illetve a szájbán fennálló viszonyok felszíni ábrázolása is felvehető és megjeleníthető, hogy a diagnosztikai képek közös helyre kerüljenek. Protetikai információkat is hozzá lehet adni és meg lehet jeleníteni a protetikai implantátumtervezés tervezése érdekében. A műtői terv, ideértve az implantátumpozíciókat és a protetikai információkat, exportálható a DTX Studio Lab szoftverbe a fogpótlások megtervezéséhez.

A DTX Studio Implant támogatja a fogászati implantátum-alapú orális rehabilitációt célzó NobelGuide® klinikai koncepciót. Része a teljesen vagy részben fogatlan állcsontok – ideértve az egytagú pótlásokat is – fogászati implantátummal való kezeléséhez kifejlesztett teljes Irányított Műtői Rendszernek (a „NobelGuide® koncepciónak”).

A DTX Studio Implant felhasználói előfizethetnek rendszeres elméleti és gyakorlati képzésekre, amelyekben megtanulhatják a szoftver hatékony használatát. További információért lásd a Nobel Biocare webhelyén (www.nobelbiocare.com) elérhető tanfolyamokat.

A használat célja

A szoftver használatának célja a fogászati és kránio-maxillofaciális eljárások diagnosztikájának és a kezelési terv elkészítésének a támogatása.

Rendeltetés és használati javallatok

A DTX Studio Implant képalkotó berendezések, például CT-készülékek által nyert, a fogászati és kránio-maxillofaciális területeket ábrázoló 2D- és 3D-képinformációk átvitelére és megjelenítésére szolgál a diagnózis felállításának, a kezelés tervezésének és utánkövetésének támogatása céljából.

A DTX Studio Implant felhasználható az irányított implantátumműtétek támogatásához, valamint a fogpótlási megoldások tervezéséhez és áttekintéséhez. Az eredmények exportálhatók a valós elkészítéshez.

Felhasználói célcsoport és páciensek célcsoportja

A DTX Studio Implant alkalmazást interdiszciplináris orvoscsoporthoz használja, és olyan páciensek kezelésében nyújt támogatást, akiken fogászati, cranio-maxillofaciális vagy ezekhez kapcsolódó kezeléseket végeznek.

Fogászati kezelésre szoruló betegeken alkalmazandó.

Kompatibilitásra vonatkozó követelmények

- DTX Studio Implant Viewer szoftver
- NobelClinician Communicator iPad alkalmazás
- OsseoCare™ Pro iPad alkalmazás
- DTX Studio Lab
- A DTX Studio Implant kompatibilis a leggyakrabban használt Windows és Mac operációs rendszerekkel, beleértve a legújabb kiadásokat is.
- X-Guide™ – 3D navigációs rendszer (X-Nav Technologies, LLC)
- DTX Studio Clinic
- NobelGuide® rendszer és műtéti sablonok
- Nobel Biocare implantátumok és standard felépítmények
- Felületi adatok DTX Studio Implant szoftverbe való importálásához: NobelProcera® 2G szkennelvel, Kavo LS 3 szkennelvel felvett felületi scan. Titkosított formátum (*.nxa)
- Harmadik féltől származó implantátumok a kezelés megtervezéséhez és irányított műtétekhez – csak kezdő fúrás.

- DICOM adatok importálása ((CB)CT szkennerekből) és STL/PLY adatok importálása (asztali vagy intraorális szkennerekből).
- A DTX Studio Implant szoftvernek kompatibilisnek kell lennie az online portállal (DTX Studio Go).

Mérési funkcióval rendelkező készülékek

A mérési pontosság függ a képadatoktól, a használt szkennerek hardverétől, annak kalibrálási és felvételi beállításaitól. A mérés nem lehet pontosabb, mint a kép felbontása. A DTX Studio Implant a felhasználó által kiválasztott pontok alapján, az első tízedesjegyre kerekítve jeleníti meg az értéket.

Ellenjavallatok

Nincsenek ellenjavallatok a DTX Studio Implant használatához.

Kiberbiztonság

Javasolt, hogy a DTX Studio Implant alkalmazást futtató számítógépen aktív és folyamatosan frissített vírusvédelmi és kártevő programok elleni szoftver, valamint megfelelően beállított tűzfal legyen használatban.

Továbbá használaton kívül ajánlott zárolni a számítógépet. Ennek elmulasztása a diagnózis, a tervezés vagy a kezelés adatainak nem szándékos módosításaihoz vezethet.

Kompatibilitás

A DTX Studio Implant nincs összekapcsolva más orvosi eszközökkel; a szoftver kompatibilis a DTX Studio Implant korábbi verzióival.

Együttműködés más szoftverekkel

A DTX Studio Implant együttműködik a DTX Studio Clinic és a DTX Studio Lab szoftverekkel.

Tervezett élettartam

A szoftver tervezett élettartama három év. Ha a támogatott operációs rendszereken használják, a szoftver határozatlan ideig megtartja a rendeltetésszerű működését.

Teljesítménykövetelmények és korlátozások

A DTX Studio Implant működése nem választható el attól az operációs rendszertől, amelyen fut. Ezért fontos, hogy a DTX Studio Implant szoftvert csak a jóváhagyott operációs rendszereken használja. A jóváhagyott operációs rendszerekkel kapcsolatban további információkért lásd: 'Rendszerkövetelmények', oldalszám: 15.

Klinikai előnyök és nemkívánatos mellékhatások

A DTX Studio Implant fogászati implantátumrendszerrel és/vagy koronákkal vagy hidakkal végzett kezelés részeként használható. A kezelés klinikai előnye a hiányzó fog pótlása és/vagy a fogkorona helyreállítása.

Nincsenek ismert mellékhatások.

Intézmények és képzések

Kifejezetten javasolt minden orvosnak – kezdő felhasználóknak és a szoftver alkalmazásában jártas szakembereknek egyaránt –, hogy a szoftver első használata előtt olvassák el a Használati útmutatót. A különböző tudásszintű, illetve tapasztalattal rendelkező felhasználók számára kéreésre számos tanfolyam elérhető.

További tudnivalókat keresse fel képzéseket biztosító weboldalunkat a következő címen: tw.dtxstudio.com.

Megjegyzés a súlyos eseményekkel kapcsolatban

Ha az eszköz használata során vagy annak következtében súlyos esemény történik, kérjük, jelentse azt a gyártónak és az országos hatóságoknak. Az eszköz gyártójának kapcsolattartási adatai a súlyos események bejelentéséhez:

Nobel Biocare AB

<https://www.nobelbiocare.com/complaint-form>

Szakemberek számára

A DTX Studio Implant alkalmazást kizárólag egészségügyi szakemberek használhatják.

Rendszerkövetelmények

Javasoljuk, hogy a szoftver telepítésének megkezdése előtt olvassa el a következő részt: 'Rendszerkövetelmények', oldalszám: 15. A minimális és/vagy ajánlott követelményekkel kapcsolatos információkért forduljon az ügyfélszolgálatához. A szoftver újabb verziói magasabb követelményeket támaszthatnak a hardverrel vagy az operációs rendszerrel szemben.

A szoftver telepítése

A szoftver telepítésével kapcsolatos információkért forduljon a felhatalmazott műszaki szakemberhez vagy az ügyfélszolgálatához.

Használati utasítások

A szoftver használatára vonatkozó részletes információkért tekintse meg a jelen használati útmutatóban található részletes utasításokat.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Figyelmeztetések

A szoftverben a következő figyelmeztetések jelenhetnek meg.



- Ez a tervezőprogram nem ellenőrzi automatikusan az összes műszaki megkötést! Ha a szoftver nem azonosít automatikusan semmilyen megkötést, akkor is előfordulhat, hogy a műtéti sablonokat nem lehet legyártani.
- A felhasználónak legyen gyakorlata a CT-adatok értelmezésében, és ismerje a CT-adatok ábrázolásának módját (térfogat-leképezés).
- A CBCT-szkennelés és a felületszkennelés helytelen illeszkedése esetén nem megfelelő műtéti sablon készül, amely nem használható a műtéthez.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy az információk megjelenítése (pl. megjelenítő orientációja, objektumok színe) és a figyelmeztetések tekintetében a DTX Studio Implant és az X-Guide™ szoftver eltérhet egymástól.
- A DTX Studio Implant csak bizonyos implantátumok X-Guide™ szoftverbe való exportálását támogatja. A nem támogatott implantátumok nem lesznek belefoglalva az X-Guide fájlba.



SmartFusion™ inicializálási figyelmeztetések

- A fogászati scan illesztése kézzel történt.
A páciensmodell és a fogászati scan illesztését manuálisan módosították. Ellenőrizze, hogy a fogászati scan megfelelően illeszkedik-e a (CB)CT-képhez, mivel az eltérések hibákhoz vezethetnek az implantátumok pozicionálása során.
- Egy vagy több pontpár nem felel meg egymásnak.
- A megadott pontok nincsenek kellőképp elosztva a fogászati scanen.
- Legalább három, egymásnak megfelelő pontpárt jelöljön meg.
- Ellenőrizze a fogászati scan és a páciensmodell illesztését, és ha az eredmény helytelen vagy kétséges, számítsa újra az illesztést a Fogászati scan szerkesztése varázslóval.



Szkennelési figyelmeztetések

Érvénytelen DICOM-készletek nem tölthetők be. A DICOM-készletek az alábbi okok miatt lehetnek érvénytelenek:

- A DICOM-készletben két szeletnél kevesebb szerepel.
- A DICOM-készletben nincs állandó szeletvastagság.
- A DICOM-készletben nem egyező a szeletvastagság.
- A DICOM-készletnek nincs képtájolása.
- A DICOM-készletnek rossz a képtájolása.
- A DICOM-készlet szeletvastagsága túl nagy.
- A DICOM-készletben megdőlt a gantry-érzékelő.
- A DICOM-készlet szeletei közötti távolság túl nagy (a DICOM-készlet használható, de csak saját kockázatra.)



Sablonnal kapcsolatos figyelmeztetések

- Perselyek ütköznek egymással.*
- Egy implantátum és egy persely ütközik egymással.
- Egy rögzítőtüske és egy persely ütközik egymással.
- Egy megjelölt fog és egy persely ütközik egymással.
- Egy rögzítőtüske perselye túl közel van a fogászati scanhez.
- A kezdőpersely túl közel van a fogászati scanhez.*
- Egy teljes mértékben irányító persely túl közel van a fogászati scanhez.

* A műtési sablont nem lehet legyártani, amíg el nem hárítja ezt a figyelmeztetést.



Klinikai figyelmeztetések – Általános

- Nincsenek megtervezett rögzítőtüskék.
- Két rögzítőtüske ütközik egymással.
- A radiológiai sablont nem kalibrálták.
- A kezelési tervben nem telepített termékek szerepelnek.*
- A megjelenítés alacsony minőségű.**
- A fogászati scan illesztése kézíleg történt.
- A SmartFusion-igazítás nem sikerült.*
- Ellenőrizze a SmartFusion-illesztést

* A műtési sablont nem lehet legyártani, amíg el nem hárítja ezt a figyelmeztetést.

** Az alacsony minőségű felvételek növelik annak a kockázatát, hogy néhány anatómiai jellegzetesség nem lesz látható a páciensmodellben. A beállítás csak a térfogat 3 dimenziós megjelenítését befolyásolja. A CT szeletek módosítására nincs hatással.



Klinikai figyelmeztetések – Implantátum

Fontos

Az implantátummal kapcsolatos figyelmeztetéseket kiváltó értékeket a felhasználó klinikai tapasztalata és gyakorlottsága alapján kell beállítani.

- Két implantátum ütközik egymással.
- Egy implantátum és egy rögzítőtüske ütközik egymással.
- Egy implantátum túl közel van egy megjelölt ideghez.*
- Egy implantátum túl közel van egy megjelölt foghoz.
- A DTX Studio Implant csak bizonyos implantátum típusokat tud exportálni az X-Guide rendszerbe. A DTX Studio Implant csak bizonyos implantátumok X-Guide™ szoftverbe való exportálását támogatja. A nem támogatott implantátumok nem lesznek belefoglalva az X-Guide fájlba.

* Ezek beállítható figyelmeztetések



Beállítható figyelmeztetések

A beállítható figyelmeztetések az implantátum körüli térfogatra, az úgynevezett figyelmeztetési térfogatra vonatkoznak. Ha ez a térfogat ütközik egy megjelölt anatómiai struktúrával, kiváltódik a figyelmeztetés.

A figyelmeztetési térfogat létrehozása egy előre megadott távolság alapján történik. E távolság alapbeállítása 1.5 mm, ez a legkisebb választható távolság. E legkisebb távolság esetén a figyelmeztetési zóna megegyezik a sárga területtel (ez az implantátum körül 1.5 mm-es területet és a csúcsánál 2 × 1.5mm-es (3.0 mm) távolságot jelent). Ez a figyelmeztetési térfogat növelhető. Az ábrán a 4.0 mm-es beállítás esetén érvényes terület látható.



Implantátumok és idegek ütközésére vonatkozó figyelmeztetés

Ha egy implantátum egy megjelölt ideghez túl közel van elhelyezve, vagyis a figyelmeztetési térfogat ütközik a megjelölt idegek, kiváltódik egy figyelmeztetés. Az érintett implantátum megjelenik (ha addig nem jelent meg), és narancsszínűre változik.

Implantátumok és foggyökerek ütközésére vonatkozó figyelmeztetés

Ha egy implantátum egy foggyökérhez túl közel van elhelyezve, vagyis a figyelmeztetési térfogat ütközik a megjelölt foggal, kiváltódik egy figyelmeztetés. Az implantátum megjelenik, és narancsszínűre változik.

Megjegyzés

A figyelmeztetési zóna meghatározó alapértelmezett minimális távolságot a DTX Studio Implant > Általános beállítások menüjében kell beállítani. Az értékeket az éppen használt számítógépre menti. Ha a kezelési tervet nem azon a számítógépen nyitja meg, amelyen létrehozta, azok a figyelmeztetések fognak megjelenni, amelyek az aktuális számítógépen be vannak állítva. Ennek következtében a megjelenő figyelmeztetések számítógépenként eltérhetnek. A beállítható értékeket bármikor ellenőrizheti és módosíthatja a beállításokban. Az értékek megjelennek a figyelmeztetés áttekintésében, amikor egy figyelmeztetés aktiválódik.

Óvintézkedések



- Kifejezetten javasolt minden új kezelési módszer alkalmazása előtt, hogy az implantátumok, protetikai megoldások és kapcsolódó szoftverek alkalmazásában kezdő és jártas szakembereknek egyaránt részt vegyenek speciális képzésen. A Nobel Biocare többféle tanfolyamot kínál a különböző tudás- és tapasztalati szinten lévő szakemberek képzésére. További információért látogasson el a következő oldalra: www.nobelbiocare.com.
- Amikor először alkalmaz egy új eszközt/kezelési módszert, a lehetséges szövődmények elkerülésében segítséget jelenthet, ha egy olyan kollégával dolgozik együtt, aki már tapasztaltot szerzett az új eszköz/kezelési módszer használatában. Erre alkalmas mentorok világszerte a Nobel Biocare rendelkezésére állnak.
- Az implantációs beavatkozások esetében nem garantálható a biztos siker. Különösen a termék használati javallatának és a sebészeti vagy kezelési eljárások figyelmen kívül hagyása okozhat kudarcot. Gyermekes esetében általánosságban nem javasolt implantátumot beültetni, csak akkor, ha megfelelően igazolva van, hogy véget ért az állcsontok növekedésének fázisa.
- Ha már a műtét előtt hiányoznak kemény vagy lágy szövetek, lehetséges, hogy rosszabb lesz az esztétikai eredmény, vagy az implantátum nem a megfelelő szögben fog elhelyezkedni. Határozottan javasolt a NobelGuide műtési sablonok és a duplikált fogsor alkalmazásához megfelelő Nobel Biocare implantátumokat, műtési eszközöket és protetikai összetevőket használni, mert a nem kompatibilis összetevők használata az eszközök mechanikai meghibásodásához, szövetkárosodáshoz vagy nem kielégítő esztétikai eredményhez vezethet.
- Az extraorális műtési eljárások (például kranio-maxillofaciális kezelés, amelyben fogászati implantátumokat helyeznek el a dentális vagy zigomatikus területen kívül) tervezése előtt a felhasználó köteles ellenőrizni, hogy az implantátum használható-e extraorálisan.
- Javasolt továbbá, hogy a DTX Studio Implant (NobelClinician®) futtatására használt számítógépen bekapcsolt és naprakész vírusirtó és kártevőirtó szoftver, valamint megfelelően beállított tűzfal működjön.



- Az Egyesült Államokban, és bizonyos más piacokon az endoszteális fogászati implantátumok elhelyezését segítő műtéti sablonok orvosi eszköznek minősülnek. Az ilyen műtéti sablonok gyártásával kapcsolatos törvényi szabályozással és követelményekkel kapcsolatos információkért forduljon a helyi szabályozó hatóságához.
- Amikor a figyelmeztetéseket henger alakú objektumok váltják ki, ezeket a figyelmeztetéseket a rendszer a termék becsült alakja alapján számítja ki.
- A szoftver nem megfelelő ismerete vagy megértése a diagnózis, a tervezés vagy a tényleges kezelés elhúzódsához, átütemezéséhez vagy helytelen kezelési tervhez vezethet.
- A szoftverben található diagnosztikai és tervezési eszközök használatakor fokozott figyelmet kell fordítani a következőkre:
 - a szoftverben készített jelölések (vizualizációk, mérések, fontos képletek, importált adatok, implantátumtervezés) helyessége.
 - az automatizált funkciók (scanek egymáshoz igazítása, virtuális fogfelállítás) által adott eredmények helyessége.
 - a tervezett műtéti sablon stl fájllai és azok optimális illeszkedése a szájban a kezelési tervnek megfelelően.
 - az adatok naprakészek, ill. nem avultak el

Ennek elmulasztása növeli a diagnózis, a tervezés vagy a kezelés felülvizsgálatának szükségességét, ami pedig a diagnózis, a tervezés vagy a tényleges kezelés elhúzódsához, átütemezéséhez vagy helytelen kezelési tervhez vezethet.

- A páciensadatok betöltését fokozott odafigyeléssel ajánlott végezni. A hibás vagy hiányos adatok helytelen kezelési tervhez vezethetnek.
- Fontos tudni, hogy egy jelentés vagy a páciensadatok szoftveren kívülre való továbbítása lehetőséget ad arra, hogy a titkosítást nem tartalmazó páciensadatokat helytelen módon, a páciens bejegyzése nélkül használják fel.
- Fokozottan ügyelni kell a nézetablakok megjelenítési módjára és az orientációs jelöléseire. A páciens helytelen orientációja vagy megjelenítése helytelen kezelési tervhez vezethet.
- A szoftververzió frissítése után ajánlott ellenőrizni a nyitott esetek és/vagy a kezelési terv sarkalatos beállításait, megbizonyosodva arról, hogy ezek a beállítások helyesek az új szoftververzióban is. A helytelen beállítások a diagnózis, a tervezés vagy a tényleges kezelés elhúzódsához, átütemezéséhez vagy helytelen kezelési tervhez vezethet.
- Javasolt, hogy a DTX Studio Implant alkalmazást futtató számítógépen aktív és folyamatosan frissített vírusvédelmi és kártevő programok elleni szoftver, valamint megfelelően beállított tűzfal legyen használatban. Továbbá használaton kívül ajánlott zárolni a számítógépet. Ennek elmulasztása a diagnózis, a tervezés vagy a kezelés adatainak nem szándékos módosításaihoz vezethet.
- Javasoljuk, hogy fordítson fokozott figyelmet a létrehozott implantációs tervre és az implantátumoknak az egymáshoz, ill. más fontos anatómiai képletekhez viszonyított helyzetére. Különös figyelmet kell fordítani a szoftverben megjelenő figyelmeztető jelzésekre is. Továbbá mindig ellenőrizze, hogy a megfelelő implantációs terv lett-e kiválasztva az exportáláshoz, és hogy az exportált implantátumterv tartalmazza-e az implantációs műtétéhez szükséges valamennyi információt. Ennek elmulasztása növeli a diagnózis, a tervezés vagy a kezelés felülvizsgálatának szükségességét, ami pedig a diagnózis, a tervezés vagy a tényleges kezelés elhúzódsához, átütemezéséhez vagy helytelen kezelési tervhez vezethet.

Rendszerkövetelmények

Operációs rendszer

- Windows® 11 vagy 10 64 bites (Pro és Enterprise kiadás) asztali vagy hordozható számítógépen.
- macOS Sequoia (15), Sonoma (14), Ventura (13) vagy Monterey (12) (Intel-alapú Mac és Apple Silicon Mac M1 vagy nagyobb teljesítményű chippel) iMac, Mac Mini, Mac Pro, MacBook Pro, MacBook Air eszközökön.

Megjegyzés

Egyes MacBook Air® és Mac® Mini konfigurációk grafikus kártyái csak korlátozottan használhatók térfogatlekepezésre. Meg kell fontolni az alacsony felbontású térfogatlekepezés használatát.

Követelmények

CPU	Kétmagos / 3 GHz-es órajel
RAM	8 GB
Videókártya	Dedikált bővíthető videokártya optimális 3D támogatással (OpenGL 3.3) és 2 GB vagy több memóriával (például AMD vagy NVIDIA), 4K kijelzők esetén: 4 GB vagy több memória. A 6. generációs Intel® CPU-k vagy újabbak támogatottak (beágyazott 9. generációs vagy újabb GPU-val). A grafikus kártya OpenGL® verziójának ellenőrzéséhez látogasson el a http://realtech-vr.com/admin/glview weboldalra.
Lemezterület	5 GB szabad lemezterület
Hálózat	Szélessávú internetkapcsolat 3 Mb/s feltöltési és 30 Mb/s letöltési sebességgel.
Monitor	Full HD (1920x1080) vagy magasabb.

Elindítás

A kezelési terv

Egy **kezelés** magában foglalja az adott pácienssel kapcsolatos összes **kezelési tervet**. Új kezelés kezdhető új páciens létrehozása esetén vagy egy meglévő pácienssel kapcsolatos munka közben. Így például külön kezeléseket hozhat létre a felső állcsonthez és az állkapocshoz.

Egy **kezelési terv** tartalmazza az alapvető páciensmodellt, a fogászati scant, a viaszmintát és/vagy a radiológiai sablont, valamint az aktuális konfigurációhoz tartozó összes terméket.

A DTX Studio Implant megnyitása

A DTX Studio Implant szoftver elindításához kattintson a  parancsikorra az asztalon. A szoftver az Iroda modulban nyílik meg, ami lehetővé teszi, hogy bejelentkezzen, és elkezdje a munkát a páciensfájlokkal.

A páciensfájlokkal végzett alapvető műveletek

Megjegyzés

A DTX Studio Implant szoftverbe való bejelentkezés után elkezdhet dolgozni a páciensfájlokon.

Új páciensfájl létrehozása

Új páciensfájl létrehozásához kattintson az **Új**  lehetőségre az eszköztár **Egészségügyi rekordok** lapján. Az **Új páciens** ablakban válassza ki, hogy egy 3D-páciensmodellt szeretne létrehozni, szeretné megrendelni a gipszminta szkennelését, vagy páciensadatokat szeretne beírni.

Meglévő páciensfájl megnyitása

Egy páciensfájl megnyitásához kattintson duplán a páciens nevére a listában. Megjelenik az **Egészségügyi rekord** párbeszédablak, amelyben kiválaszthatja, hogy 3D-páciensmodellt szeretne létrehozni, páciensadatokat szeretne beírni, termékeket szeretne megrendelni, vagy egy kezelési tervet szeretne megbeszélni.

A kezelési terv megnyitása

Miután megnyitott egy páciensfájlt, és meg szeretné nyitni az adott páciens kezelési tervét, kattintson az eszköztáron a **DTX Studio Implant** lapfülre, majd kattintson a **Megnyitás**  lehetőségre. Amikor megnyílik a **Tervezés áttekintése** ablak, válassza ki a kezelési tervet, és kattintson a **Forgatókönyv megnyitása** lehetőségre.

A kezelési terv mentése

A kezelési terv mentéséhez kattintson a **Mentés**  lehetőségre a **DTX Studio Implant** lapon, vagy nyomja meg a [CTRL + S] billentyűket.

A kezelési terv másolása

A kezelés másolatának mentéséhez, pl. a másik állcsont kezelésének létrehozásához az adatok másolatával, válassza a **Mentés másként** lehetőséget a **DTX Studio Implant** lapon, majd válassza ki az **Új kezelés**  lehetőséget.

A kezelési terv átnevezése vagy törlése

A kezelési terv átnevezéséhez vagy törléséhez kattintson a **Kezelés** lehetőségre a **DTX Studio Implant** lapon. Ez csak akkor lehetséges, ha bizonyos feltételek teljesülnek.

A kezelési terv bezárása

A kezelési terv bezárásához kattintson a **DTX Studio Implant** lapfülre az eszköztáron, majd kattintson a **Terv bezárása**  lehetőségre. A kezelési terv bezáródik, és a **Tervezés áttekintése** párbeszédablak jelenik meg.

A páciensfájl bezárása

A páciensfájl bezárásához kattintson az eszköztáron a **DTX Studio Implant** lapfülre, majd a menüben válassza a **Páciens bezárása** lehetőséget. Amikor megjelenik az **Egészségügyi rekord** párbeszédablak, kattintson a **Páciens bezárása** lehetőségre. Ha bármilyen nem mentett módosítás van a páciensfájlban, a rendszer megkérdezi, hogy mit tegyen: **Mentés**, **Ne mentsen** vagy **Mégse** (a páciensfájl bezárásának visszavonása).

A felhasználó azonosítása

A DTX Studio Implant szoftverrel több felhasználó is használhatja a számítógépet. Annak biztosítására, hogy csak arra felhatalmazott felhasználók jelentkezzenek be a DTX Studio Implant szoftverbe és használják azt, a felhasználók megfelelő azonosítása szükséges. A szoftver a felhasználó azonosítása után a megfelelő felhasználói beállításokat és páciens-adatvédelmi szabályokat alkalmazza. A biztonság további növelése érdekében kétfaktoros hitelesítés is beállítható a DTX Studio Go szoftveren keresztül.

Bejelentkezés

1. A szoftver elindításához kattintson a  parancsikorra az asztalon.
2. Válassza ki a felhasználót.
3. Írja be a megfelelő jelszót.
4. Kattintson a **Bejelentkezés** gombra.

Az első bejelentkezéskor adja meg a regisztrációs e-mailben kapott jelszót. Változtassa meg a jelszót, amikor a program erre kéri. A jelszónak a lehető legbiztonságosabbnak és legerősebbnek kell lennie, és ne legyen könnyen kitalálható (kerülje a személyes adatok használatát, például a születés évét stb.).

Ha kiválasztja az **Automatikus bejelentkezés** lehetőséget, a DTX Studio Implant bejelentkezési ablaka többször már nem jelenik meg az adott számítógépen.

Kétfaktoros hitelesítés

Ha a DTX Studio Go alkalmazásban beállították a kétfaktoros hitelesítést, a bejelentkezéshez meg kell adnia egy jelszót és egy hatjegyű ellenőrző kódot. A rendszer 30 naponta felszólít egy új hatjegyű ellenőrző kód megadására.

Felhasználók közötti váltás

A DTX Studio Implant szoftverben a **Saját iroda modulban** lehet váltani a felhasználók között. Ehhez kattintson a **DTX Studio Implant** menüben a **Fiókok váltása** lehetőségre.

A fiókadatok kezelése

A licenc vagy a fiókadatok kezeléséhez, a személyes adatok szerkesztéséhez, a jelszó módosításához, valamint a rendelő kapcsolatainak vagy engedélyeinek kezeléséhez nyissa meg a **Fiók kezelése** párbeszédablakot:

1. Kattintson a **DTX Studio Implant** lapfőre a **Saját iroda** modulban.
2. Válassza a **Fiók kezelése** lehetőséget.
3. A **Fiók kezelése** párbeszédablakban megjelennek a rendelkezésre álló információk.

Rendelői beállítások

A DTX Studio Implant rendelői verziója lehetővé teszi a szoftver több példányának telepítését és több felhasználó bejelentkezését. Lehetővé teszi a páciensfájlok központi tárolását egy megosztott hálózati mappában, így egyszerűen hozzá lehet férni ezekhez különféle helyekről is.

Rendelői verzió telepítése

A DTX Studio Implant telepítésével és regisztrálásával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.

Fiókok kezelése


A szoftver felhasználói fiókjainak kezeléséhez és a megfelelő jogosultságok beállításához nyissa meg a [Fiókok kezelése](#) párbeszédablakot a [DTX Studio Implant](#) menü [Fiók kezelése](#) menüpontjának kiválasztásával.

Felhasználók hozzáadása

Ha új felhasználókat kíván hozzáadni, forduljon a Nobel Biocare ügyfélszolgálatához.

A szoftver áttekintése

A lenti ábrán láthatók a grafikus felhasználói felület fő részei.

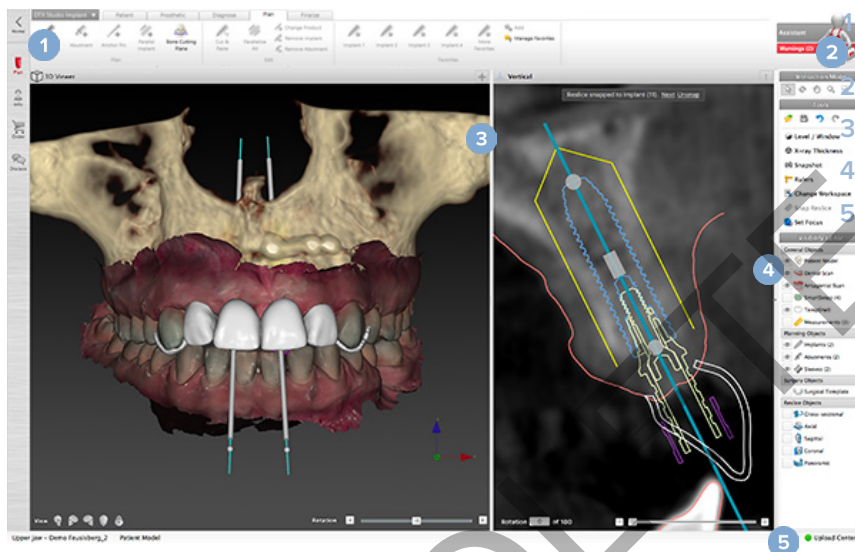

Eszköztár a kiválasztott modulra jellemző parancscsoportokkal


Segéd

Munkaterület

Modulsáv

Feltöltési központ

A DTX Studio Implant szoftver részét képező különböző modulok közötti váltáshoz kattintson az egyes ikonokra a modulsávon:

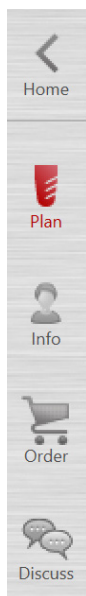

Home

Plan

Info

Order

Discuss

Kezdőlap / Saját iroda modul: a páciensek és a kalibrációsorozatok kezelése.

3D-tervezés modul: DICOM-fájlok importálása, páciens- és sablonmodellek készítése, diagnosztizálás és tervezés.

Páciensadatok modul: a páciensadatok tárolása és a **Pácienskönyvtárban** található klinikai képek kezelése.

Rendelés modul: gipszminták vagy viaszminták szkennelésének, TempShelleknek, műtéti sablonoknak, duplikált fogsornak és gyári alkatrészek a rendelése.

Megbeszélés modul: a kezelési tervről való kommunikáció elősegítése kollégákkal és páciensekkel, kezelési tervek, illetve Communicator-prezentációk segítségével, valamint a DTX Studio Implant és az OsseoCare™ Pro összekapcsolása OsseoCare™ Pro-műtétek létrehozása útján.


A **Saját iroda** modulban egy páciensre duplán kattintva elérhetők a páciensre vonatkozó különböző adatok. A diagnosztika elvégzéséhez és a kezelés megtervezéséhez kattintson a **3D-tervezés** ikonra.

A munkaterületek rendszere

A DTX Studio Implant szoftverrel való tervezéskor fontos, hogy a páciensadatokat különböző módokon is meg lehessen tekinteni. A szükséges nézet attól függ, hogy milyen információkra van szüksége a felhasználónak. Ezeket a különböző adatmegjelenítési módokat nevezzük munkaterületeknek.

Mi az a munkaterület?


A munkaterület 3D- és 2D-megjelenítőkből, valamint a képernyő jobb oldalán található szerkesztési oldalsávokból áll. A munkaterület segítségével megjeleníthetők és kezelhetők 3D objektumok és 2D képek adatai. A műtét előtti képek adatainak a megtekintéséhez könnyen válthat a rendszer által biztosított különböző megtekintési elrendezések között.

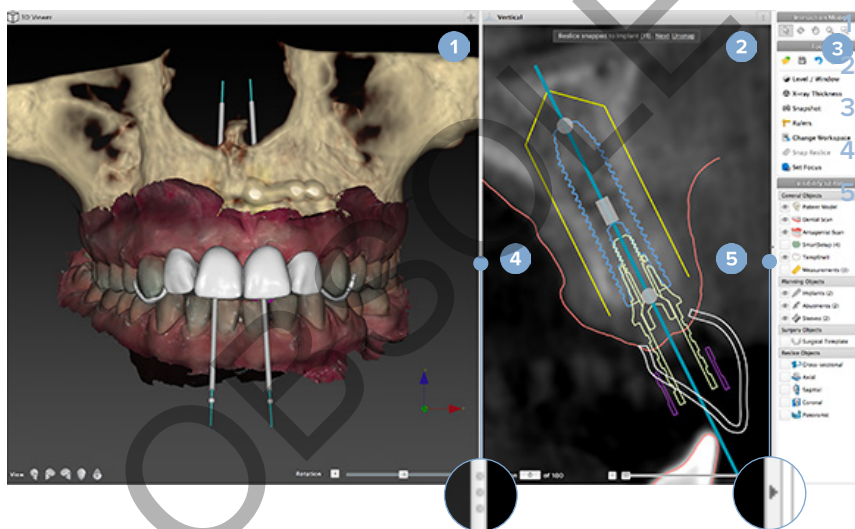

- 3D megjelenítő
- 2D megjelenítő
- Oldalsáv
- Osztó
- Minimalizálás gomb

Eszköztár

A munkaterület felső részén, egy környezetfüggő eszköztárban található bizonyos feladatokhoz szükséges eszközök. A Tervezés modulban bizonyos objektumok (például keresztmetszeti szelet, implantátumok stb.) kiválasztásakor az azokhoz tartozó lapok jelennek meg. Ezekről a lapokról – ezek az ún. környezetérzékeny lapok – is el lehet érni azokat a parancsokat, amelyek az objektumra a jobb egérgombbal rákattintva megjelenő előugró menüben elérhetők.

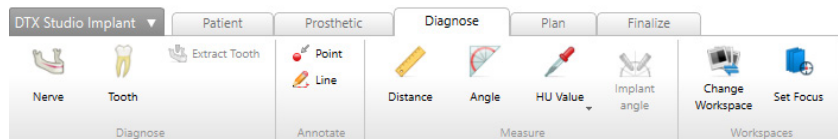

Interakció a megjelenítővel

A 3D-modellekkel különféle módokon lehet interakcióba lépni. Az interakciós módok közötti váltáshoz kattintson az Interakció eszköztár ikonjaira, vagy a jobb egérgombbal való kattintás után megjelenő menüben az **Interakció** lehetőségre, vagy pedig használja a funkciók gyorsbillentyűit.

	Interakciós mód	Egy objektum a bal egérgomb megnyomásával választható ki vagy jelölhető ki parancs elvégzéséhez.
	Forgatási mód	Egy 3D ábra (csak 3D módban) forgatható az egér mozgatásával.
	Páztázási mód	Egy ábra elcsúsztatható az egér mozgatásával.
	Nagyítási mód	A modell az egér mozgatásával nagyítható vagy kicsinyíthető.
	Nagyítási négyzet mód	A modell egy bizonyos területe kinagyítható az egérrel egy téglalap kijelölésével (csak 2D-módban).

A különféle interakciós módok között a gyorsbillentyűk segítségével válthat:

Ctrl (Cmd) vagy az egér középső gombja	Páztázási módba válthat, ha nem abban van. Amíg a gomb be van nyomva, a páztázási mód marad aktív. A gomb felengedésével a rendszer visszatér az eredeti módba.
Alt	Forgatási módba vált, ha nem abban van. Amíg a gomb be van nyomva, a forgatási mód marad aktív. A gomb felengedésével a rendszer visszatér az eredeti módba.
Shift	Nagyítási módba vált, ha nem abban van. Amíg a gomb be van nyomva, a nagyítási mód marad aktív. A gomb felengedésével a rendszer visszatér az eredeti módba.
Tabulátor gomb	Vált az interakciós mód és forgatási mód között.

A 3D-megjelenítőben több alap nézet közül lehet választani. A modell valamely alap nézetére való váltáshoz kattintson a megfelelő ikonokra.

	Előlnézet – normál frontális nézet. gyorsbillentyű [5]
	Bal – normál bal, laterális nézet. gyorsbillentyű [1]
	Jobb – normál jobb, laterális nézet. gyorsbillentyű [3]
	Felülnézet – normál kranio-kaudális nézet gyorsbillentyű [9]
	Alulnézet – normál kaudo-kraniális nézet gyorsbillentyű [7]

Az objektumok manipulálása

Egy objektum kiválasztásához lépjen interakciós módba, és kattintson az objektumra. A 3D-megjelenítőben fehér körvonal jelzi, hogy az objektum ki van választva. A 2D-megjelenítőben a kiválasztott objektum körvonala színes.

Megjegyzés

Ez alól kivétel a páciensmodell. A páciensmodell kiválasztása esetén nem jelenik meg körülötte körvonal.

Válassza a keresztmetszeti képet, egy implantátumot vagy egy rögzítőtüskét, és megjelenik a hozzájuk tartozó eszköztár.

Az objektummal elvégezhető tevékenységeket tartalmazó előugró menü megjelenítéséhez kattintson az objektumra a jobb egérgombbal.


Egy objektum mutatása vagy elrejtése

A páciens kezelésének hatékony megtervezéséhez fontos, hogy a tervezési szakaszban csak a releváns objektumok látszódnak.

Egyetlen elem elrejthető a jobb egérgombbal rákattintva megjelenő menü vagy a [H] gyorsbillentyű segítségével.

A **Láthatósági szerkesztő** segítségével az alapvető objektumok láthatósága egyetlen egérekattintással be- és kikapcsolható.

Objektumcsoportok láthatóságát különböző láthatósági ikonok jelzik:

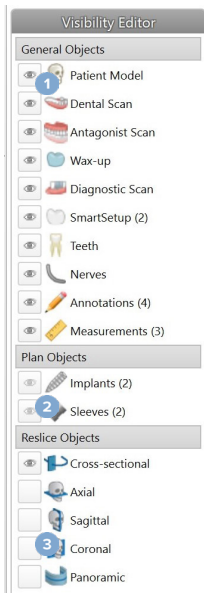

- 1 Ha a fekete láthatósági ikon jelenik meg a csoport előtt, a csoport összes eleme látható.
- 2 Ha a szürke láthatósági ikon jelenik meg a csoport előtt, a csoport egyes elemei láthatók, míg más elemei el vannak rejtve.
- 3 Ha nem jelenik meg ikon a csoport előtt, a csoporthoz tartozó összes elem el van rejtve.

A CT-szeletek manipulálása

CT-felvételek görgetése

A DTX Studio Implant több eszközt is nyújt a szeletek áttekintéséhez, mint pl. az egér görgetőkereke, a csúszka és a szeletszám-beviteli mező.

Szint és ablak

A szint/ablak eszköz mind a 2D-, mind a 3D-megjelenítővel használható az adatok a képpé vagy modellé konvertálásához használt képpont értékek szintjének és ablakolásának beállításához. (Szürkeárnyalatok) A kép típusától (2D vagy 3D) függően különböző lesz a parancs eredménye.

Szint/ablak beállítása 2D-megjelenítő esetén

A CT szeletek és a panorámanézetek kontrasztját az „ablak” és a „szint” értékekkel lehet meghatározni. A szint, illetve az ablak beállítása határozza meg, hogy melyik szürkeárnyalatok jelenjenek meg a képernyőn. A szürkeárnyalatok egy bizonyos tartománya jelenik meg, ennek a tartománynak a középső értéke a szint, a tartomány szélessége pedig az ablak értéke (a szélesség fele a szint alá, a fele a szint fölé esik). Ezeknek a beállításoknak a használatával módosítható a CT-szeletek kontrasztja.

A szintet úgy módosíthatja, hogy lenyomja az egérgombot, és fel- és lefelé mozgatja az egeret. Az ablak méretét úgy módosíthatja, hogy lenyomja az egérgombot, és vízszintesen mozgatja az egeret: balra szűkíti, jobbra pedig szélesíti az ablakot.

Szint/ablak beállítása 3D-megjelenítő esetén

3D-nézetben a Szint/ablak eszköz az átalakítási művelet léptékének és középpontjának beállítására szolgál azzal a céllal, hogy csökkentse a zajt, és módosítsa a színbeállítást a páciensmodellen. Ezek a módosítások javíthatják a páciensmodell megjelenítését.

Az átalakítási művelet középpontjának a megváltoztatásához a tartomány szélességének megváltoztatása nélkül nyomja le az egérgombot, és húzza az egeret felfelé vagy lefelé. Nyomja le az egérgombot, és húzza az egeret balra, illetve jobbra a páciensmodellen a páciensmodell létrehozásához használt értékek tartományának szélesítéséhez, illetve szűkítéséhez.

Páciensmodell

3D-páciensmodell létrehozása

Egy 3D-páciensmodell készítéséhez fontos a megfelelő DICOM-fájlok kiválasztása, a leginkább megfelelő vizsgálandó térfogat beállítása, az optimális izoérték megválasztása és a megfelelő állcsonttípus kiválasztása. A rendszer végigvezeti a felhasználót ezeken a lépéseken a Páciens létrehozása varázsló segítségével.

A páciensmodell létrehozása

1. Nyissa meg a [Páciens létrehozása](#) varázslót az alábbi módszerek egyikével:
 - Kattintson az [Új](#)  lehetőségre a DTX Studio Implant eszköztárának [Egészségügyi rekordok](#) lapján, majd kattintson az [Új terv létrehozása](#) lehetőségre.
 - A Tervezés modulban a [Tervezés](#) eszköztár [Páciens](#) lapján kattintson a [Páciens](#)  ikonra.
2. Válassza ki a betöltött DICOM-fájlok közül a megfelelő készletet, vagy importálja azt.
3. Kattintson a [Tovább](#) gombra.
4. Állítsa be a vizsgálandó térfogatot (VOI) a [Vizsgálandó térfogat és izoérték beállítása](#) oldalon.
5. Állítsa be a megfelelő izoértéket az [Izoérték](#) csúszka segítségével, majd kattintson a [Tovább](#) gombra.
6. Állítsa be a szkennel irányát, és állítsa be az okklúziós síkot a csúszkák segítségével.
7. Válassza ki, hogy melyik állcsontot kívánja kezelni a páciens esetében.
8. Kattintson a [Befejezés](#) gombra.

A tervezési görbe alakjának szerkesztése

A szeletelési görbe optimális meghatározásához a keresztmetszeti szeletelést mindig az okklúziós síkra merőlegesen kell elhelyezni. Új páciensmodell létrehozása esetén a rendszer kiszámítja az alapértelmezett tervezési görbét a beállított állcsont-típus, a vizsgálandó térfogat és az okklúziós sík alapján. A felhasználó szerkesztheti ennek a görbének az alakját és a keresztmetszeti szeletelés méretét.

A tervezési görbe alakjának módosítása

1. A [Páciens](#) lap [CT szerkesztő](#) csoportjában kattintson a [Tervezési görbe](#)  gombra.
2. Elindul a [Tervezési görbe igazítása](#) művelet.
3. Finomhangolja a számított görbét a meglévő kontrollpontok módosításával, vagy hozzon létre új görbét a fogakhoz tartozó kontrollpontok elhelyezésével.

A meglévő kontrollpontok módosítása

1. A tervezési görbe alakjának a beállításához a kontrollpontokra kattintva azokat a kívánt helyre húzhatja.
2. Hozzáadhat pontokat, hozzáadhat végpontot, és kiválasztás után eltávolíthat pontokat.
3. Ha elégedett a görbe alakjával, válassza a [Befejezés](#) lehetőséget.

A fogakhoz tartozó kontrollpontok használata

1. Kattintson a **Görbe újrajelzése**  lehetőségre.
2. A fogakhoz tartozó kontrollpontok megfelelő elhelyezéséhez kövesse a sugóbuborékokban szereplő utasításokat:
 - Az axiális megjelenítőn kattintással jelezze a jobb oldali harmadik nagyőrlő (bölcsességfog) helyzetét.
 - Az axiális megjelenítőn kattintással jelezze a következő fog, a jobb oldali szemfog helyzetét.
 - Ezután az axiális megjelenítőn kattintással jelezze a bal oldali szemfog helyzetét.
 - Végül az axiális megjelenítőn kattintással jelezze a negyedik fog, a bal oldali harmadik nagyőrlő (bölcsességfog) helyzetét.

Megjegyzések

A fogaknak a sugóbuborékokban megjelenő száma eltérő lehet a fogak megjelölésére használt rendszertől függően. A fogak megjelölésére használt rendszer megváltoztatható a **Beállítások** részen.

Ha a megjelölendő fogak fizikailag már nincsenek jelen, helyezze a fogakat jelölő pontokat oda, ahol a fognak lennie kellene.

A tervezési görbe alapját e négy pont – a két bölcsességfog és a két szemfog –, valamint öt automatikusan létrehozott kontrollpont képezi.

3. Ellenőrizze a görbét, és végezze el a finombeállítását, ha szükséges.
4. Ha elégedett a görbe alakjával, válassza a **Befejezés** lehetőséget.

A keresztmetszeti szelet méretének beállítása

A keresztmetszeti szeletelésben a megfelelő kép megjelenítéséhez beállíthatja a merőleges nézet méretét:

1. A **Tervezési görbe igazítása** művelet elindításához kattintson a **Tervezési görbe**  lehetőségre.
2. A merőleges nézetben a megjelenített terület határait húzza felfelé vagy lefelé, illetve oldalra.

Megjegyzés

A felső és az alsó határt egymástól függetlenül lehet elmozdítani. A bal vagy a jobb oldali határ elmozdításakor a másik oldali határ is automatikusan elmozdul ugyanakkora távolságra az ellenkező irányba, hogy a szeletelési kép mindig középen helyezkedjen el.

A páciensmodell megjelenítése



Figyelmeztetés

A felhasználónak legyen gyakorlata a CT-adatok értelmezésében, és ismerje a CT-adatok ábrázolásának módját (térfogat-megjelenítés).

Mi az az átalakítási művelet?

A páciensmodell létrehozásakor a szoftver minden szürkeárnyalatot átalakít egy bizonyos színné, amely meghatározott átlátszóságú; ezzel létrehozza a páciensmodell jellemző megjelenését. Ehhez olyan átalakítási műveletet végez, amely a térfogat minden egyes térfogategységéhez egy (piros-zöld-kék színrendszer szerint kódolt) színértéket és egy átlátszóságot rendel. Az átalakítási művelet eredménye a térfogat háromdimenziós megjelenítése.

Az átalakítási művelet kezelése és a páciensmodellre való alkalmazása az **Átalakítási műveletek** galéria segítségével végezhető el. A képtárban találhatók a különböző, rendelkezésre álló átalakítási műveleteket megjelenítő miniatűrök és az átalakítási műveleten végezhető parancsok. A szoftver megkülönbözteti a **„beépített” sablonokat** az **„egyedileg készített” sablonokat** és az **Aktuális páciens** (aktuális páciensre vonatkozó) átalakítási műveleteket.

A páciensmodell megjelenítésének letisztázása

Tervezési módban a 3D-modell műtermékei és elszórt részecskéi könnyen és egyszerűen kitörölhetők a **Páciensmaszk** és a **Csontműtermékek törlése** parancssal.

A páciensmaszk használata

1. Kattintson a **Páciensmaszk**  lehetőségre.
2. A **Páciensmaszk** művelet elindítása után kattintson a következő ikonok valamelyikére:



A **Vágás** ikonra kattintva elkezdheti kijelölni a modelltől eltávolítandó részeket. A szoftver elrejtí a felhasználó által megrajzolt sokszög által határolt részt.



Az **Elkülönítés** ikonra kattintva elkezdheti kijelölni a modellen a megjeleníteni kívánt részeket. A szoftver elrejtí a felhasználó által megrajzolt sokszögön kívül eső részt.



A **Hozzáadás** ikonra kattintva elkezdheti újra hozzáadni a modelltől kivágott részeket.

3. Kezdje el a sokszög rajzolását:
 - Kattintson a bal egérgombbal.
 - Húzza arrébb az egeret, és kattintson újra. A két pont között zöld pontozott vonal jelenik meg.
 - Kattintson harmadszor is. A pontokat összekötő zöld pontozott vonal egy sokszöggé jelenik meg.
 - Folytassa, amíg a sokszöggel körbe nem vette a modellből kivágandó részeket.
 - A művelet alkalmazásához kattintson a jobb egérgombbal, vagy nyomja meg az **Enter** billentyűt.

Csontműtermékek törlése

1. A **Páciens** lap **Páciensszerkesztő** csoportjában kattintson a **Csontműtermékek törlése**  gombra. Elkezdődik a **Csontműtermékek törlése** folyamat.
2. Kattintson a **Varázsrádír**  gombra vagy a **Rádír**  gombra a **Csontműtermékek törlése** folyamatban.
3. A páciensmodellről eltávolítandó részek kijelöléséhez kattintson a CT-felvételre, vagy tartsa nyomva az egérgombot. A **Varázsrádír**  eszköz használatakor az ecset méretétől függően a kattintás helye körüli kis, közepes vagy nagy területen törlődik a maszk. A **Rádír**  eszköz használatakor a kattintás helye körüli gömbön belül található területen teljesen törlődik a maszk. A gömb mérete az ecset méretétől függ, ez módosítható.

Megjegyzés

A Csontműtermékek törlése parancs nem befolyásolja az eredeti CT-felvételt. Ha a műtermékek eltávolítása után a **Páciens szerkesztése** művelet segítségével szerkeszti a páciensmodellt, a műtermékek újra megjelennek a modellen. Ezért, ha mindkét műveletet el kell végeznie a jobb eredmény elérése érdekében, a Nobel Biocare azt javasolja, hogy előbb a páciensmodellt szerkessze, és csak azután távolítsa el az esetleges zajt és a műtermékeket.

A maszk letiltása

A **Maszk letiltása**  gomb segítségével válthat a teljes páciensmodell és a kiválasztott rész megjelenítése között.

A páciensmaszk visszaállítása

A **Páciensmaszk visszaállítása**  gomb segítségével újra megjelenítheti a páciensmodellt az eredeti állapotában.

Legnagyobb rész megtartása

Amikor a modell finombeállítását végzi a **Páciensmaszk** művelettel, ahelyett hogy egyenként kivágná a nézetben elszórt összes kis részecskét, azt is megteheti, hogy izolálja a modellen a legnagyobb „csontos” részt.

Ehhez kattintson a **Páciensmaszk** vagy a **Csontműtermékek törlése** műveletben a **Legnagyobb rész megtartása**  parancsra. A szoftver eltávolítja a csont sűrűségétől eltérő sűrűségű kisebb részecskéket és részeket. Csak a legnagyobb csontos rész marad látható.

Protetikai információk

Diagnosztikai beállítások

A DTX Studio Implant szoftver használatakor a klinikai javallattól függően a virtuális diagnosztikai felállítás modellezése kétféle szkennelési protokollal végezhető:

- Kisebb részleges foghiány esetén (lehetőleg legalább hat megmaradó fog esetén) a radiológiai sablon nélküli protokoll (intraorális szkenneléssel) követhető.
- Teljes foghiány vagy nagyobb részleges foghiány esetén (kevesebb mint hat megmaradó fog) a radiológiai sablonnal végzett protokollt kell követni.

Fogászati scan

A gipszminta szkennelése

A gipszminta lenyomat alapján készül, és az intraorális viszonyokat reprezentálja. A mintán fogpótlás készíthető protetikai fogfelállítás vagy viaszmintázás segítségével. E minta felszíne pontosan beszkenyelhető (digitalizálható) a fogtechnikai laboratóriumban. Ez a szkennelt felszín importálható a DTX Studio Implant szoftverbe, és hozzáilleszthető a páciens DICOM-adatokból származó 3D-modelljéhez.

A lenyomat elkészítése után indítsa el a DTX Studio Implant szoftvert, nyissa meg a páciensfájlt, és rendelje meg a gipszminta szkennelését a fogtechnikai laboratóriumtól. Miután a laboratórium feltöltötte a szkennelt fájlt a felhőszolgáltatásba, töltsse le a felvételt, és illessze hozzá a páciensmodellből származó DICOM-adatokhoz a SmartFusion™ funkcióval.

A gipszminta szkennelésének megrendelése

1. Nyisson meg egy páciensfájlt, a [Termékrendelés](#) elemre kattintva lépjen a Rendelés modulra, majd kattintson a [Scan](#)  ikonra.
2. Jelölje be a beszkenyelendő objektumokat a fogak ábráján úgy, hogy húzza a beszkenyelendő területet, és a felugró menüből kiválasztja a kívánt lehetőséget. A kért felvételek a jobb oldali listában találhatók.
3. Kattintson a [Tovább](#) gombra.
4. Válassza ki azt a fogtechnikai laboratóriumot, amely elvégzi a gipszminta szkennelését, írja be az összes szükséges adatot és az esetleg szükséges különleges utasításokat, és ellenőrizze a kért felvételek listáját.
5. Kattintson a [Befejezés](#) gombra.
6. Ezzel elküldi a rendelést a fogtechnikai laboratóriumnak, hozzáadja a [Rendelések](#) listához, és a kiszolgáltatótól kapott rendelésszámmal együtt jeleníti meg.

Intraorális scan vagy asztali szkennelével készített scan

A páciens száján belüli viszonyokat egy felületi felvétel, például egy intraorális szkennelvény felvétele mutatja. Ez a felszíni felvétel (pl. .ply és .stl kiterjesztésű fájlok) a DTX Studio Implant szoftverbe importálható, és a SmartFusion™ használatával hozzáilleszthető a páciens DICOM-adatokból származó 3D-modelljéhez.

SmartFusion™

A fogászati scan hozzáadása a páciensmodellhez


Az elkészített felületi felvétel (amelyet a fogtechnikai laboratórium töltött fel, vagy az intraorális szkennerből importáltak) hozzáilleszthető a páciensmodellhez.

1. Nyissa meg a kezelést a Tervezés modulban.
2. A **Protetika** lap **Kezelési scan** csoportjában kattintson a **Fogászati scan** ikonra.
3. Válassza ki a kívánt fogászati scant, vagy importáljon egy fogászati scan fájlt.
4. .nxa fájlok használatakor a fogászati scant elkészítő szkennert a rendszer automatikusan konfigurálja a választott fájlban található adatok alapján. .stl fájlok használatakor önnek kell konfigurálnia a szkennert:
 - Az ablak jobb alsó sarkában kattintson a **Szkennert kiválasztása** lehetőségre, illetve a **Szkennert módosítása** lehetőségre, ha korábban már kiválasztott egy szkennert.
 - Válassza ki a szkennert a listából.
 - Kattintson a **Szkennert kiválasztása** lehetőségre.

Megjegyzés


Mindig ellenőrizze, hogy melyik szkennert van kiválasztva, különösen .nxa fájlok importálásakor, vagy amikor több szkennert használhatunk a fogászati scanek elkészítésére. Amikor kiválaszt egy szkennert a listából, ezt a rendszer menti, és alapértelmezett szkennerként használja új páciensmodellek létrehozásakor.

5. Kattintson a **Tovább** gombra.
6. Ha ismert a szkennelés tartománya, automatikusan kijelzi a fogtartományt. A kiválasztott fogászati scan tartományának beállítása:
 - Vigye a mutatót a fogak ábrája fölé a fogív mentén.
 - Kattintson a fogívre – vagy a fogívet körülvevő színesen kiemelt területen belülre –, és tartsa lenyomva az egérgombot.
 - Húzza az egérmutatót a fogakra a fogak ábráján, amíg a teljes szkennelési tartományt le nem fedi. Legalább három fogászati egységnyi tartományt jelöljön meg a szkenneléshez. Engedje el az egérgombot.
 - Egy egység befoglalásához vagy kizárásához módosítsa a tartományt a kéken kiemelt területekre kattintva. A felvételi tartomány beállításának újratekésztéséhez kattintson a **Diagram visszaállítás** lehetőségre. Ügyeljen arra, hogy folytonos felvételi tartományt adjon meg.

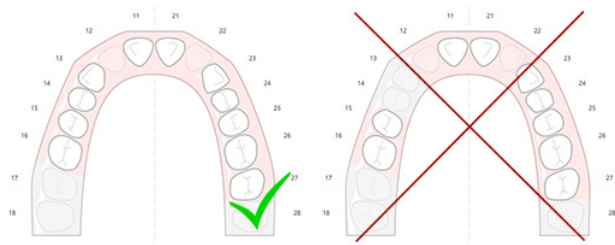

7. A fogak ábráján jelölje meg a hiányzó fogakat oly módon, hogy rákattint egy fehér színű meglévő fogra, majd hiányzó foggá alakítja azt. Csak a megjelölt fogtartományon belüli fogak adhatók meg hiányzó foggként. Legalább egy megmaradó fog szerepeljen a felvételi tartományban.

8. Kattintson a **Tovább** gombra.
9. Jelölje meg az összes foghelyzetet a varázsló által adott tippeknek megfelelően.
Ha őrlőfogat jelöl meg, kattintson a hegy közepére. Szemfog esetében kattintson a metszőél közepére. Ha újra szeretné kezdeni ezeket a lépéseket, kattintson a **Pontok megjelölése újra** lehetőségre. Ekkor eltűnnek a megjelölt pontok, és újrakezeldhető a művelet.
10. Kattintson a **Tovább** gombra.
11. Ekkor a SmartFusion™ egymáshoz illeszti a páciens állcsontmodelljét és fogászati scant.
12. A varázsló **Eredmények ellenőrzése** lapján **ellenőrizze, hogy megfelelő-e az automatikus illesztés**. Az illesztett fogászati scan körvonalaival (alapértelmezésként rózsaszínben jelennek meg) pontosan meg kell felelniük a fogak (kúpsugaras) CT-felvételen látható okklúziós információinak. **A klinikus felelőssége ellenőrizni, hogy ez a lépés helyesen történt-e meg** (lásd a képeket a következő oldalon). Ha az illesztés helytelen, inicializálja a SmartFusion™ funkciót. Ha a két modellt nem lehet pontosan illeszteni, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
13. Ha az illeszkedés megfelelő, kattintson a **Befejezés** gombra.
14. Ekkor a szoftver hozzáadja az ábrához a fogakról készült felvételt. Ha belefoglalta a virtuális fogakat vagy a protetikai fogfelállítást/viaszmodellt is a rendelésbe, a szoftver automatikusan hozzáadja azt is.

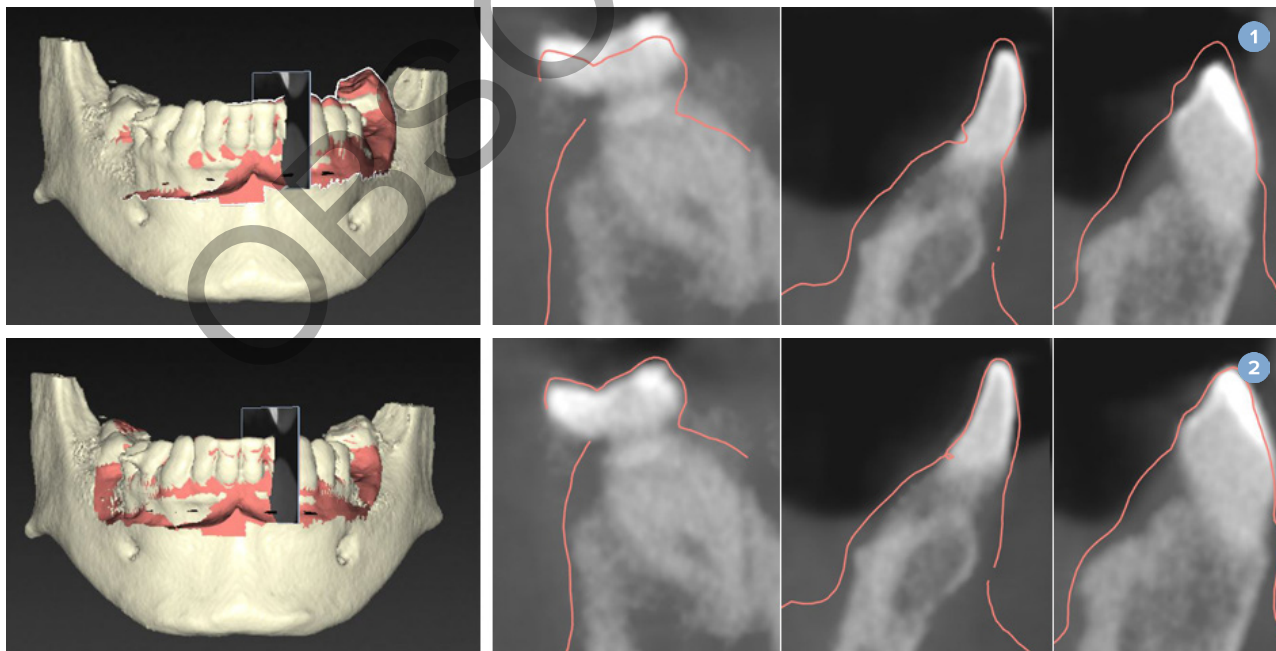

- 1 Helytelen illeszkedés
- 2 Helyes illeszkedés



Figyelmeztetés

A CBCT-szkennelés és a felületszkennelés helytelen illeszkedése esetén nem megfelelő műtéti sablon készül, amely nem használható a műtéthez.

A SmartFusion™ inicializálása

Ha nem sikerül a fogászati scan és a páciens állcsontmodell illesztése a SmartFusion™ funkcióval, vagy az nem elég pontos, módosítsa a fogászati scan kezdeti pozícióját, és indítsa újra a SmartFusion™ számítását. Ezt hívják a SmartFusion™ inicializálásának.

Megjegyzés


A SmartFusion™ valószínűleg kevésbé lesz pontos, ha a páciensnek kevesebb mint hat foga maradt.

Az inicializálási folyamat


A SmartFusion™ inicializálásához adjon meg legalább három pontpárt; ezek a fogászati scanen és a páciens állcsontmodellen is megadandó, egymásnak megfelelő pontok. Ha a pontok nem megfelelően vannak elhelyezve, azokat el is távolíthatja, majd újra megadhatja. Ha az összes pontpárt el akarja távolítani, ezt egyetlen kattintással elvégezheti.

Az inicializáció varázsló indítása

- Ha a SmartFusion™ funkció fut, de azonnal meg akarja változtatni a kezdeti pozíciót, a [SmartFusion inicializálása](#) műveletre kattintva indítsa el a varázslót.

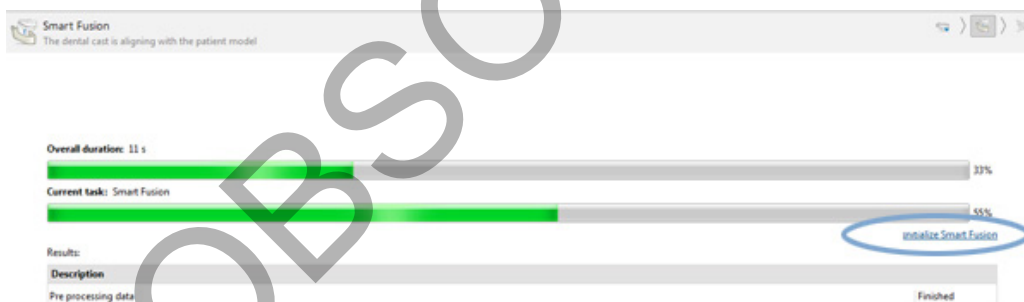

- Ha a **SmartFusion™** funkció fut, de nem jár sikerrel, figyelmeztető üzenet jelenik meg. Kattintson az [a Pozíció inicializálása](#) lehetőségre az inicializálási varázsló elindításához. Ennek segítségével módosíthatja a fogászati scan kezdeti helyzetét. A SmartFusion™ újraindítása.
- Ha a **SmartFusion™** fut egy inicializálási kísérlet után, de az illesztés ismét sikertelen, figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a rendszer megnyitja az [Illesztés ellenőrzése](#) oldalt. Ezen az oldalon indítsa el az inicializáció varázslót az [Egymásnak megfelelő pontok megjelölése](#) parancsra kattintva (lásd a lenti képet).
- Ha a **SmartFusion™** fut, és sikeresen befejeződik, de a fogászati scan és a páciens állcsontmodell nem illeszkedik megfelelően, lépjen be az inicializálási varázslóba az [Egymásnak megfelelő pontok megjelölése](#) parancsra kattintva a varázsló [Eredmények ellenőrzése](#) lapján.

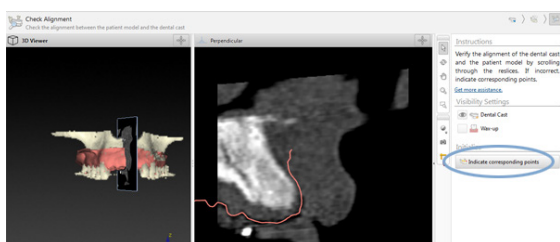


A megfelelő pontok kijelölése az Inicializálási varázslóval

Pont beszúrása

1. A varázsló elindításakor a **Pontok beszúrása** művelet  aktív.
2. A bal oldali panelen kattintson a páciensmodellen egy bizonyos helyre a fogakon.
3. A jobb oldali panelen kattintson a fogászati scanen az annak megfelelő helyre. Ismétlje meg a 2. és 3. lépést, amíg meg nem határozott legalább három pár egymásnak megfelelő pontot.
4. Ellenőrizze, hogy látható-e figyelmeztetés a varázsló figyelmeztetéseket tartalmazó részében.
5. Ha egy üzenet jelzi, hogy elérte a kívánt számú pontpárt, a varázsló bezárásához kattintson a **Befejezés** lehetőségre. A varázsló bezárása előtt minden figyelmeztetést figyelembe kell vennie. Ellenkező esetben nem lehet befejezni a műveletet.

Tipp

Gondoskodjon arról, hogy a hozzáadott pontok az egész fogíven egyenletesen legyenek elosztva. Ne jelöljön meg több pontot egymás közelében. Minél nagyobb területen oszlanak el az egyes pontok, annál valószínűbb, hogy az illesztés sikeres lesz. Helyezzen pontokat a lenti ábrán látható négy kvadráns közül legalább kettőbe.

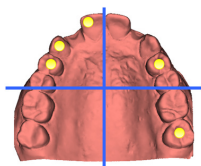

Kiválasztott pontok eltávolítása

Megjegyzés

Ha a pontok eltávolításának lehetősége nincs engedélyezve, a Pontok beszúrása művelet befejezéséhez kattintson a jobb egérgombbal. Ezután a többi művelet engedélyezett lesz.

A kiválasztott pontok eltávolításához:

1. Válasszon ki egy pontot valamelyik megjelenítőben.
2. Kattintson a **Kiválasztott pontok eltávolítása**  lehetőségre.
3. A szoftver eltávolítja a kiválasztott pontot és az annak megfelelő pontot.

Minden pont eltávolítása

Az összes pont eltávolításához kattintson az **Összes pont eltávolítása**  lehetőségre. Ezzel eltávolítja az összes meghatározott virtuális pontot.

SmartFusion™ inicializálási figyelmeztetések

Figyelmeztetés	Magyarázat
A fogászati scan illesztése kézíleg történt. A páciens állcsontmodell és a fogászati scan illesztését manuálisan módosították. Ellenőrizze, hogy a fogászati scan megfelelően illeszkedik-e a (CB)CT-képhez, mivel az eltérések hibákhoz vezethetnek az implantátumok pozicionálása során.	Ha a felhasználó a fogászati scan és a páciensmodell manuális illesztését választja a SmartFusion™ funkció futtatásakor, vagy a fogászati scan manuálisan lett illesztve, a rendszer figyelmezteti, hogy gondosan ellenőrizze az illeszkedést, hogy elkerülje a lehetséges pontatlanságokat.
Egy vagy több pontpár nem felel meg egymásnak.	A rendszer megméri a távolságot a páciensmodellen elhelyezett pontok között, illetve a fogászati scanen elhelyezett pontok között. Ha a távolság nagyobb a vártánál, a rendszer figyelmeztetést jelenít meg, és arra kéri a felhasználót, hogy módosítsa a pontpárokat.
A megadott pontok nincsenek kellőképp elosztva a fogászati scanen.	Ha a rendszer észleli, hogy nincsenek pontok helyezve a négyből legalább két kvadránsba, figyelmeztetést jelenít meg. A felhasználót felkéri, hogy módosítsa az egymásnak megfelelő pontokat, vagy adjon hozzá egy pontpárt, figyelembe véve a pontok egyenletes elosztását a fogív kvadránsain. Ne jelöljön meg több pontot egymás közelében.
Legalább három, egymásnak megfelelő pontpárt jelöljön meg.	Nem adott meg elegendő pontpárt a varázsló befejezéséhez. Helyezzen el további pontpárokat, hogy elérje a minimálisan elhelyezendő pontpárok számát.

Arcfelvétel

Töltsön be egy arcfelvételt, hogy hozzárendelje azt a páciensmodellhez. Betölthet egymás után különböző scaneket. A legjobb eredmény elérése érdekében először töltsön be egy zárt szájjal készült arcfelvételt, és rendelje hozzá a páciensmodellhez. Később betölthet egy mosolygó arcfelvételt, és hozzárendelheti azt pl. az előző arcfelvételhez.

Arcfelvétel hozzáadása a páciensmodellhez

1. A varázsló elindításához kattintson az **Arc-scan**  lehetőségre a **Protetika** lap **További scanek** csoportjában.
2. Kattintson az **Arc-scan kiválasztása** lehetőségre. Válasszon ki egy arcfelvételt (.obj), majd kattintson a **Megnyitás** lehetőségre.
3. Kattintson a **Tovább** gombra.
4. Ellenőrizze a feltöltött scan aktuális pozícióját. A betöltött arcfelvétel és a páciensmodell illesztésének beállításához kattintson az **Illesztés igazítása**  gombra, válassza ki azt az objektumot, amelyhez hozzá szeretné igazítani az arcfelvételt, és kattintson az **OK** gombra. A scan és a modell megfelelő illesztése érdekében a varázslóban meg kell jelölni legalább öt egymásnak megfelelő pontot. Kattintson a **Befejezés** gombra a pontmegjelölő varázslóból való kilépéshez.
5. Kattintson a **Befejezés** gombra az **Arc-scan** varázslóból való kilépéshez.

Újabb arcfelvétel hozzáadásához ismételje meg a fenti lépéseket.

Az arcfelvétel levágása

Hasznos lehet a mosolygó scanen látható fogak levágása, így ténylegesen meg tudja mutatni a páciensmodellt pl. a SmartSetup™ segítségével az arcfelvételen keresztül.

1. Kattintson az **Arc-scan levágása**  lehetőségre az eszköztár **Protetika** lapján vagy az **Arc-scan** varázslóban.
2. A levágandó régió eltávolításához kattintson és húzza el az egérmutatót. Szükség esetén használja az **Ecsetméret módosítása** csúszkát.
3. Kattintson a **Befejezés** gombra.

Megjegyzés

A vágási művelet a megjelenített arcfelvételre lesz alkalmazva. Ha több scan van betöltve, és le szeretné vágni az egyik arcfelvételt, először válassza ki a megfelelő arcfelvételt az **Arc-scan** helyi menüjében.

SmartSetup™

A SmartSetup™ segítségével automatikusan kiszámíthatók a virtuális fogak az aktuális fogászati szituációról készített scan alapján. A számítás az alábbiakat veszi figyelembe:

- A meglévő fogak mérete, alakja és helyzete;
- A tervezni kívánt fog típusa (egy szemfogat például másként kell formázni, mint egy kisőrlőt).
- A tükrözött fog mérete és alakja;
- Az elülső régióban lévő fogak esetében az esztétikai szempontok.
- Az antagonista fogak adatai, ha rendelkezésre állnak.

A SmartSetup™ kiszámítása

A SmartSetup™ kiszámításához rendelkezésre kell állnia egy fogászati scannek, amelyen legalább három maradandó fog van.

1. A **Protetika** lap **További scanek** csoportjában kattintson a **SmartSetup**  ikonra.
2. A fogak ábrája paneljének jobb alsó sarkában kattintson a **SmartSetup beállítások** lehetőségre, és módosítsa a SmartSetup™ beállításait egy másik SmartSetup™ számítás elvégzéséhez.
3. Kattintson a **Számítás** lehetőségre. Elindul a SmartSetup™ kiszámításának folyamata

A SmartSetup™ beállítások módosítása

A SmartSetup™ varázslóban módosíthatja a beállításokat a SmartSetup™ számítás eredményének finomhangolása érdekében.

1. A **SmartSetup**™ varázsló **SmartSetup ellenőrzése**™ lapján kattintson a jobb alsó sarokban található **SmartSetup**™ **opciók** lehetőségre a **Beállítások** párbeszédablak megnyitásához.
2. A **Minőség** csoportban jelölje meg, hogy a modellekhez **Maximális** (maximális minőség, meglehetősen hosszú ideig tart a számítás), **Optimális** (optimális minőség) vagy **Alacsony** (alacsony minőség) számítási beállítást kíván használni. A választástól függően több vagy kevesebb fogat vesz figyelembe a számítás.

- **Maximális:** a SmartSetup™ számításba az összes szkennelt fog bele fog számítani. A számítási idő hosszabb lesz, mint az **Optimális** lehetőség választása esetén.
 - **Optimális:** az optimális eredményhez szükséges fogakat veszi figyelembe, így a számítási idő viszonylag rövid marad.
 - **Alacsony:** a SmartSetup™ számításhoz csak minimális számú fogat vesz figyelembe a program. A számítási idő rövidebb, mint az **Optimális** lehetőség választása esetén.
3. A **SmartSetup™** csoportban megadhatja, hogy az alábbi kritériumok szerint szeretné-e kiszámíttatni a virtuális fogakat:
- **Hézagok eltávolítása :** legtöbbször a szomszédos fogak közötti hézagok csökkentésére van szükség. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a kitöltendő hézag túl nagy. Ha bejelöli ezt a lehetőséget, a virtuális fog túl nagyra nőhet. Ilyenkor célszerűbb kikapcsolni a **Hézagok eltávolítása** lehetőséget. Ez a lehetőség alapértelmezés szerint minden fogra meg van jelölve (**Összes fog**). A legördülő mezőben kijelölheti azt a fogat vagy fogakat, amelyeknél szeretné eltávolítani a hézagot.
 - **Pozíciók az antagonista fogak alapján (tükrözés):** Válassza ezt az opciót, ha a SmartSetup™-ot pontosan úgy szeretné elhelyezni, mint az antagonista fogakat. Ne feledje azonban, hogy a legtöbb betegnek nem szimmetrikus a fogíve, ezért ez a funkció az optimálisnál gyengébb eredményt adhat. Ezért ez a lehetőség alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A felhasználó azonban bekapcsolhatja, és megnézheti, hogy jobb számított eredményt ad-e vagy sem.
 - **Frontfogak esztétikájának optimalizálása:** Ez a művelet egy szabályrendszeren alapul a leginkább esztétikus eredmény meghatározása vagy kiszámítása érdekében. Ezek a szabályok például azt tartalmazzák, hogy a centrális metszőfogak metszőélének azonos magasságban kell lennie, és ugyanaz a szélesség alkalmazandó a centrális metszőfogakra. Ez a laterális metszőfogakra és a szemfogakra is érvényes.
 - **Harmadik moláris(ok) befoglalása:** Ezt a lehetőséget automatikusan kiválasztja a rendszer, ha a szkennelési tartományban benne vannak a bölcsességfogak. Figyelembe veszi a bölcsességfog(ak) méretét, alakját és helyzetét a SmartSetup™ méretének, alakjának és pozíciójának kiválasztásakor.
 - **Az okklúzió további finomhangolása:** Ha rendelkezésre állnak antagonista információk, ez az opció alapértelmezés szerint ki van választva. Az antagonista adatai alapján finomhangolja az okklúziót.
4. Kattintson az **OK** gombra a SmartSetup™ számítás beállításainak érvénybe lépéséhez. Folytassa a varázslót a **Tovább** gombra kattintva.

A SmartSetup™ szerkesztése

Az egyes SmartSetup™ számítások pozícióját külön-külön szerkesztheti:

1. A **Tervezés** eszköztár **Protetika** lapján kattintson a **SmartSetup szerkesztése**  ikonra. Vagy pedig a **SmartSetup** varázsló **Eredmények ellenőrzése** lapján kattintson a **SmartSetup szerkesztése** lehetőségre.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt SmartSetup™ számítást úgy, hogy a 3D-megjelenítőben rákattint, vagy a legördülő listából kiválasztja a fogat.
3. A kiválasztott SmartSetup™ pozíciójának és méretének módosításához kattintson az **Eltolás**, **Forgatás** és/vagy **Méretezés** lehetőségre.

	Fordítás	Kattintson a SmartSetup™ lehetőségre, tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza az egeret a SmartSetup™ eltolásához. A SmartSetup™ számítás finomhangolásához állítsa be az értékeket a Bukkális/linguális , Meziális/disztális és/vagy Okklúziós mezőkben.
	Forgatás	Kattintson a SmartSetup™ lehetőségre, tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza az egeret a SmartSetup™ forgatásához. A SmartSetup™ számítás finomhangolásához állítsa be az értékeket a Bukkális/linguális , Meziális/disztális és/vagy Okklúziós mezőkben.
	Skálázás	Kattintson a SmartSetup™ lehetőségre, tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza az egeret a SmartSetup™ méretének módosításához. Húzza felfelé a skála növeléséhez, illetve lefelé a csökkentéséhez. Alternatív módon a Méretezés mezőben adja meg a kívánt méretarányt a SmartSetup™ méretének finomhangolásához.

A kiválasztott SmartSetup™ módosításainak visszavonásához kattintson a  **Fog visszaállítása** lehetőségre.

Radiológiai sablon modellje

A páciens klinikai kivizsgálása alapján radiológiai sablon készül egy klinikailag ellenőrzött fogfelállítás alapján, amely tartalmazza a dupla szkenneléshez szükséges radiológiai markereket. A virtuális modell a páciensmodell elkészítésekor készül.

A radiológiai sablon modelljének létrehozása

1. Indítsa el a Sablon létrehozása varázslót a **Sablon**  gomb megnyomásával.
2. Válassza ki a megfelelő DICOM adatokat, majd kattintson a **Tovább** gombra.
3. Állítsa be a vizsgálandó térfogatot (VOI).
4. A rendszer a megfelelő kalibrációs készletből betölti a **Kalibrált izeérték** értéket. Kattintson a **Tovább** gombra.
5. Ellenőrizze a radiológiai sablon modelljét.
6. A rendszer automatikusan összeilleszti a páciensmodellt és a radiológiai sablont.
7. Ellenőrizze az illesztés eredményét, és kattintson a **Befejezés** gombra.

Intaglio felszín

Intaglio felszín létrehozása a radiológiai sablon alapján:

1. A **Tervezés** eszköztár **Protetika** lapján kattintson az **Intaglio**  ikonra.
2. Ellenőrizze az intaglio felszínt, és kattintson a **Befejezés** gombra.

Diagnosztika

Idegek

Egy ideg ábrázolásához kattintson az **Ideg**  gombra a **Diagnosztizálás** lapon, ekkor elindul a varázsló.

1. Szükség esetén módosítsa az ideg szeleteit.
2. Kattintással jelölje ki az ideg kijelöléséhez szükséges pontokat.
3. Ha befejezte a pontok hozzáadását, kattintson a jobb egérgombbal.
4. Kattintson a **Befejezés** gombra.

A program összeköti a gömböket egy csőszerű vonallal, amely az ideget jelzi.

Újabb ideg kijelöléséhez válassza az **Új ideg hozzáadása**  lehetőséget az **Idegműveletek** csoportból. Jelölje ki az új ideget jelző pontokat a fenti lépéseket követve.

Tipp

Ha nehéz láthatóvá tenni az idegcsatornát, módosítsa az ideg szeletét. Ennek az U-görbének az alakja nem áll összefüggésben a tervezési görbe alakjával.

Fogak

Egy fog megjelöléséhez kattintson a **Fog**  gombra a **Diagnosztizálás** lapon, és elindul egy varázsló.

1. Válassza ki a megjelölendő fogat a felső ábrában.

Megjegyzés

Itt alapbeállításként a szoftver az FDI megjelölést használja. Ha szükséges, az **Általános beállítások** részben megváltoztathatja a fogak megjelölésének rendszerét.

2. A kiválasztott fog helyzetének finombeállításához beállíthatja a központi tengelyét.
3. Kattintson a **Kitöltési varázsló**  gombra vagy a **Kijelölőecset**  gombra.
4. A fog darabonként való megjelöléséhez görögse a CT-szeleteket, és kattintással vagy húzással jelölje meg a fog helyét. A kattintással vagy húzással megjelölt helyek körüli bizonyos nagyságú terület színesen jelenik meg, és hozzáadódik a foghoz.
5. Ezután kattintson a **3D frissítése**  elemre, vagy nyomja meg az [u] billentyűt. A szoftver mutatja a fogat 3D-előnézetben, és hozzáadja a páciensmodellhez a 3D-megjelenítőben.
6. Ha kívánja, válassza ki az ábrában a következő megjelölendő fogat.
7. Ha megjelölte az összes fogat, kattintson a **Befejezés** lehetőségre.

Fogak eltávolítása a modellről

Ha megjelölte a fogakat, eltávolíthatja azokat a páciensmodellből, egyenként vagy egyszerre mindet.

Minden fog eltávolítása egyszerre

1. A **Páciens** lapon a kattintson a **Fogak eltávolítása**  ikonra. Ez az ikon csak akkor kattintható, ha meg vannak jelölve fogak.

- Ha szükséges, a páciensmodellt kijavíthatja a **Páciensmaszk** vagy a **Csontműtermékek törlése** művelettel.

Megjegyzés

Ha újabb feliratozással látja el a fogakat, vagy szerkeszti a fogakat egy eltávolítás után, újra végezze el az **Eltávolítás** műveletet, hogy az újonnan hozzáadott vagy szerkesztett fogakra is alkalmazza azt. Ez a művelet nem történik meg automatikusan. Alternatív módon használja a **Foghúzás** műveletet.

Egyetlen fog eltávolítása

- Egy fog kiválasztásához kattintson rá.
- A **Diagnosztizálás** eszköztár **Diagnosztizálás** csoportjában kattintson a **Foghúzás**  ikonra. Ez a **Foghúzás** ikon csak akkor kattintható, ha meg vannak jelölve fogak.
- A kihúzott fog piros színben jelenik meg.

Mérések

Többféle mérési típust használhat.

Tipp

Ha nehéz a mérések mellett megjelenő szöveg olvasása, mert eltakarják a terven látható objektumok, válassza ki a mérést vagy a szövegét, hogy a mérés eredménye az állapotsorban jelenjen meg.

Két pont közötti távolság	- A Diagnosztizálás lapon kattintson a Távolság  gombra. - Kattintással jelölje ki az első pontot, majd ugyanígy a másikat is. Megjelenik a mérés eredménye.
Dőlésszög	- A Diagnosztizálás lapon kattintson a Szög  gombra. - Jelölje ki a három: a, b és c pontot. - A szög egy ívként jelenik meg, és megjelenik a mérés értéke.
Szürkeárnyalat-érték / Hounsfield-egység	- A Diagnosztizálás lapon kattintson a HU-érték  gombra. - Jelölje meg azt a pontot, amelynek HU értékét meg kívánja mérni.
Az implantátumok vagy felépítmények tengelye által bezárt szög	- Válasszon ki egy implantátumot, és a Diagnosztizálás lapon kattintson az Implantátum szöge  gombra. - Válassza ki a másik implantátumot. Egy ívelt sárga vonal mutatja a mérést és az eredményét.

Az implantátumok tervezése

Nem Nobel Biocare által gyártott implantátumok használata

A DTX Studio Implant nem Nobel Biocare által gyártott implantátumrendszerekkel is használható (pl. Straumann, Dentsply, Camlog stb. fogászati implantátumok.). A **Beállítások** párbeszédablak **Implantátumtermékek** lapján néhány kattintással kijelölhető, hogy mely implantátumrendszerek adatait kívánja betölteni a DTX Studio Implant szoftverbe.

Megjegyzés

A nem Nobel Biocare által gyártott implantátumok adatainak a DTX Studio Implant szoftverbe való letöltéséhez internetkapcsolat szükséges.

A DTX Studio Implant szoftverben az implantátumrendszerek adatainak betöltése vagy ilyen adatok eltávolítása csak akkor végezhető el, ha minden tervezési forgatókönyv be van zárva. Ezért zárja be a páciens összes fájlját, és lépjen a **Beállítások** párbeszédpanelre:

1. Kattintson a **DTX Studio Implant** lapfülre.
2. Válassza az **Általános beállítások** lehetőséget.
3. Kattintson a **Telepített termékek** lehetőségre.
4. Adja meg, hogy melyik implantátumrendszer adatait kívánja hozzáadni a szoftverhez vagy eltávolítani onnan.
5. A befejezéshez kattintson az **OK** gombra.

Megjegyzés

Ha olyan termékeket használ, amelyek adatai nem találhatók meg a szoftverben, a kezelési tervben az adott termékek helyett henger alakú helyőrzők jelennek meg. Az eredetileg megadott termékadatokat azonban tárolja a szoftver, és amikor a termékek részletes adatai rendelkezésre állnak, a szoftver a próbaeszközt lecseréli a részletes adatok alapján elkészített valódi termékekre.



Figyelem

Amikor a figyelmeztetéseket henger alakú objektumok váltják ki, ezeket a figyelmeztetéseket a rendszer a termék becsült alakja alapján számítja ki.

Implantátumok hozzáadása a kezelési tervhez

Ebben a szakaszban az implantátumok virtuális tervezését ismertetjük. Mindazonáltal javasolt, hogy ismerje, és vegye figyelembe az orális implantátumok tervezésének mennyiségi és minőségi korlátait.

Implantátum hozzáadása egy kezelési tervhez

1. A **Terv** lapon kattintson az **Implantátum**  gombra.
2. Kattintással jelölje ki a páciensmodellen az implantátum vállának a helyét.
3. Majd kattintással jelölje ki az implantátum csúcsának a helyét.
4. A **Termék kiválasztása** ablak **Gyártó** részén válassza ki a megfelelő gyártót.
5. Válasszon ki egy implantátumot. Opcionális módon jelölje meg a műtét típusát és egy kompatibilis felépítményt, és ellenőrizze a fog helyzetét.
6. A megerősítéshez kattintson a **Termék kiválasztása** lehetőségre.



Figyelem

A nem kapható termékek piros színű figyelmeztetéssel jelennek meg a **Termék kiválasztása** ablakban, illetve kék színben jelennek meg a 3D megjelenítőben. E termékek nem rendelhetők meg.

Mit jelent a sárga terület?

A NobelGuide-tervek átlagos toleranciája 1.5 mm-en belül van. A félig átlátszó sárga terület segít a felhasználónak, hogy figyelembe vegye ezt a körülményt a fontos képletek esetében. A sárga terület sugara az implantátum sugarát 1.5 mm-rel haladja meg, és ki van egészítve egy 3 mm magasságú kúppal.

Felhívja a felhasználó figyelmét a lehetséges kockázatokra, ha a sárga terület láthatóvá válik a csont külső felszínén.

Megjegyzések

A fúrók 1 mm-rel hosszabbak lehetnek, mint a tervezett implantátum(ok). A sárga terület erre a lehetséges eltérésre is figyelmeztet.

Javasolt legalább 3 mm vastagságú élő csontot hagyni két implantátum-csont érintkezési felület között, valamint legalább 1.5 mm távolságot tartani a fogak és az implantátumok között, lehetővé téve ezzel a sejtek megfelelő vérellátással történő rekolonizációját.

A NobelGuide koncepció számos klinikai lépésből áll, amelyeket az orvosnak figyelembe kell vennie minden egyes esetben.

Ezért minden egyes esetben az összesített pontosság meghatározásakor ezeknek az eljárásoknak a hatását is figyelembe kell venni.

Fogpozíció

Az implantátumokat a szoftver egy bizonyos fogszámhoz rendeli hozzá. Ez a fogszám a szoftverben több helyen megjelenik, így az implantátumhoz tartozó [Tulajdonságok panel](#) lapon, az implantátum saját lapján, az implantátum jobb egérgombbal rákattintva megjelenő menüjében és az implantátum kiválasztásakor az állapotsorban.

Fogak ábrája

A fogak ábráján ellenőrizhető és szükség szerint beállítható az a becsült fogpozíció, amelyhez rendelve van egy implantátum. Az ezen az ábrán használt fogjelölési konvenció az, amely ki van választva az általános beállításokban.



A „kérdőjeles pozíció” az ismeretlen vagy nem egyértelmű fogpozíciók esetében használatos (ilyen például, ha egy implantációt tervez két olyan pozíció között, amelyekre már van tervezve más implantátum).

Az implantátumok kezelése

A DTX Studio Implant különféle funkciókat biztosít az implantátum optimális helyzetének megtervezéséhez.

Az implantátum irányának megváltoztatása

Az implantátum iránya az implantátumot jelző gömbök elmozdításával változtatható meg.

1. Válassza ki az implantátumot. A gömbök piros színnel jelennek meg.
2. Ekkor a következőket teheti:
 - Kattintson az implantátum tetején látható gömbre, és húzással elforgathatja a csúcspont körül.
 - Kattintson az implantátum alján látható gömbre, és húzással elforgathatja az implantátum válla körül.

Az implantátumok mozgatása

Egy implantátum elmozdításához:

1. Válasszon ki egy implantátumot. Az implantátumot jelölő szürke henger zöldre változik.
2. Kattintson a zöld hengerre, és húzza az implantátumot a kívánt helyre. Az implantátum iránya ezzel nem változik.

Az **Implantátum** eszköztár segítségével megváltoztatható az implantátum mélysége, és elforgatható az implantátum.

Implantátumok párhuzamos elhelyezése

Egy kiválasztott implantátummal párhuzamos új implantátum elhelyezéséhez:

1. Válassza ki a viszonyítási alapként használandó implantátumot.
2. Kattintson a **Párhuzamos implantátum**  lehetőségre.
3. A 3D vagy a 2D megjelenítőben kattintással jelölje ki az implantátum vállának a helyét.
4. Az új implantátum a kijelölt implantátummal párhuzamos lesz.

Minden implantátum párhuzamos elhelyezése

A tervben az összes implantátum párhuzamosra állításához:

1. Válassza ki a viszonyítási alapként használandó implantátumot.
2. Kattintson az **Összes párhuzamosítása**  gombra.
3. Az összes implantátum a kezdetben kijelölt implantátummal párhuzamossá válik.

Megjegyzés

Az **Összes párhuzamosítása** utasítás végrehajtása után gondosan ellenőrizze az implantátumok helyzetét. Ha az eredmény klinikailag nem elfogadható, vonja vissza a parancsot a **Visszavonás** utasítással.

Felépítmények

Megfelelő felépítmény kiválasztása az implantátumhoz

1. Válassza ki az implantátumot az ábrán.
2. Az Implantátum lapon kattintson a **Felépítmény**  gombra, vagy kattintson a jobb egérgombbal a kiválasztott implantátumra, és válassza ki az **Felépítmény hozzáadása** lehetőséget a megjelenő menüből.
3. Megnyílik a **Termék kiválasztása** ablak, benne a kompatibilis felépítményekkel.
4. Alapbeállításként a **Nincs felépítmény** lehetőség van kiválasztva. Válasszon ki egy felépítményt, figyelembe véve a megfelelő méreteket.
5. Kattintson a **Termék kiválasztása** lehetőségre.

Megjegyzés

Ez a lehetőség csak akkor elérhető, ha a kiválasztott implantátum még nincsen ellátva felépítménnyel. Ha már van felépítmény, a **Termék kiválasztása** ablak megnyitásához a  **Termék módosítása** **menüelemre** vagy a **ikonra** kell kattintania.


A műtét típus beállítása

A klinikus különféle műteti módszerekkel kezelheti a páciens, ezeket nevezzük műtét típusoknak: szabad kezes, műteti sablon használata csak kezdőfúráshoz vagy műteti sablon használata teljes mértékben irányított műtethez. A műtét típusa külön-külön beállítható a kezelési tervben található mindegyik implantátum esetén.

1. Válassza ki az implantátumot.
2. Kattintson a **Műtét típus** ikonra az eszköztár megfelelő lapján. Ennek az ikonnak különböző az alakja a műtét típusától függően.
3. Válassza ki a listából a megfelelő műtét típust. A rendelkezésre álló lehetőségek a kiválasztott implantátum típusától függenek.

Megjegyzések

Új implantátum elhelyezése esetén a műtét típusa a **Termék kiválasztása** ablak **Műtét típus** lapján állítható be.

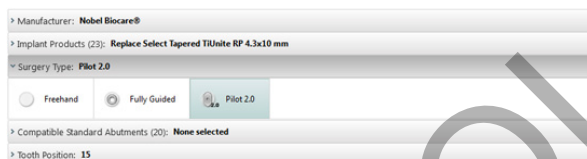

A műtét típusa a **Műteti beállítások ellenőrzése** ablakban módosítható a műteti sablon létrehozásakor.

Különböző műtét típusok

A kezelési terv során kiválasztott termékektől függően különböző típusú műtétek lehetségesek.

A következő műteti típusok léteznek:



Szabad kezes: az implantátum behelyezéséhez nem használnak műteti sablont (irányító perselyt).



Teljes mértékben irányított: az implantátum pozícióját a páciens szájában egy teljes mértékben irányított persellyel ellátott műteti sablon határozza meg (amely lehetővé teszi az irányított fúrást és az irányított implantátumbehelyezést).



Kezdőfúrási (csak NobelGuide 1,5 és 2,0 mm-es twist drill fúrókhoz): egy kezdőpersellyel ellátott műteti sablon (csak irányított próbafúrási esetén) kerül felhasználásra a tervezett implantátumpozíciók átviteléhez a páciens szájába. A kezdőfúrási elvégzése után az orvos eltávolítja a műteti sablont, és az irányított fúrási mélységét irányjelző vagy szabad kezes fúró segítségével, egy anatómiai képlethez (például a processus alveolarishoz) viszonyítva határozza meg, majd szabad kézi fúrást végez, és szabad kézzel helyezi be az implantátumot (mindegyik szabad kézi eszköz helyzetét egy meghatározott anatómiai képlethez viszonyítva állapítja meg). Az implantátum átmérőjétől függően különböző átmérőjű kezdőperselyt lehet kiválasztani.

Kezdőpersely eltolása

Ez a módszer csak kezdőfúráshoz használható. Bizonyos klinikai helyzetekben a tervezett implantátum (az implantátum válla) és a persely közötti távolság nem elegendő (például ha az implantátumot mélyebbre kell helyezni, ha a keskeny alveoláris csontgerincet az implantátum behelyezése után el kell távolítani, ha a persely a közeli fogakkal ütközik, stb.). Ilyen esetekben az alapértelmezett pozíciójú persely ütközik a fogászati felvétel felszíni modelljével, és a szoftver a kezdőperselyek tervezésekor figyelmeztetést jelenít meg. Ahhoz, hogy a persely ütközése nélküli műtéti sablont lehessen készíteni, de az implantátum a tervezett klinikai pozícióban maradjon, a persely elmozdítható felfelé.

Az irányító perselyek és a tervezett implantátum alapértelmezett viszonyát tükrözi az összes NobelGuide irányított fúró és fúrási protokoll mélységjelzése. A plusz távolság neve „persely-eltolás”, ezt a szoftver automatikusan rögzíti és hozzáadja a NobelGuide Műtéti utasítások oldalhoz, amelyet a műtéti sablonnal együtt szállítunk.

A kezdőpersely eltolásának beállítása

1. Válasszon ki egy implantátumot.
2. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott implantátumhoz tartozó műtéti típus a [kezdőfúrás](#).
3. Kattintson a megfelelő [Implant](#) lapon található [Műtétitípus](#) ikon melletti [Persely eltolása](#) ikonra. Vagy kattintson a jobb egérgombbal, és az előugró menüből válassza a [Persely eltolása](#) lehetőséget.
4. A csúszka mozgatójával változtassa meg a persely magasságát, vagy írja be a magasságkülönbséget közvetlenül a csúszka mezőjébe.

A kezdőpersely forgatásának beállítása

Ha a persely nem a megfelelő forgási pozícióban van, átállítható a forgási pozíció a persely forgatása funkcióval.

1. Kattintson a jobb egérgombbal az implantátumra.
2. A felugró menüben kattintson a [Persely forgatása](#) lehetőségre.
3. A csúszka mozgatójával forgassa el a perselyt, amíg a megfelelő irányba nem fordult.

Csontlevágási sík

A páciens ideális csontszintjét reprezentáló sík megjelöléséhez hajtsa végre a [Csontlevágási sík](#) műveletet. Ténylegesen semmi sem lesz eltávolítva. Ez egy olyan vizualizáció, amelynek során a csontot esetleg le kell vágni, segítve ezzel a kezelés megtervezését.

1. Kattintson a [Csontlevágási sík](#)  lehetőségre az eszköztár [Terv](#) lapjának [Terv](#) csoportjában.
2. A páciensmodellhez egy lila sík lesz hozzáadva.
3. Kattintson a síkra a sík kiválasztásához. Húzza el a határvonalakon lévő színes fogantyúkat a sík méretének és pozíciójának beállításához. Használja a [Sík magassága](#) csúszkát a jobb egérgombos menüben, hogy beállítsa a sík helyzetét a modell Z tengelyéhez képest.

Rögzítőtűskék

A műtét kezdetekor a megfelelő rögzítés eléréséhez a Surgical Template műtési sablont Guided Anchor Pin irányított rögzítőtűskékkel kell rögzíteni. Az irányított rögzítőtűskékkel való tervezésnél fontos tényező a dőlésszög és a mélység. Egy fogatlan állcsontba jellemzően három vagy négy rögzítőtűskét helyeznek. A rögzítőtűskéket megfelelő corticalis csontállománnyal rendelkező csontba kell helyezni. A szövetkárosodás elkerüléséhez ne rögzítse a rögzítőtűskéket mindkét corticalis rétegbe.

Megjegyzések

A rögzítőtűskék elhelyezkedésének és irányának lehetővé kell tennie az egyszerű behelyezést (vegye figyelembe az ajak elhúzását és a szájnyitást), és el kell kerülni a fontos képletéket, például az ereket.

A műtési sablonnak a páciens szájában való pontos pozicionálásához műtési index (sablon pozicionáló szilikon harapás) használata javallott. A műtési indexnek nem szabad akadályoznia a fúrást és a rögzítőtűskék behelyezését. A rögzítőtűskék behelyezése után a műtési index eltávolítható.

Rögzítőtűske hozzáadása a kezelési tervhez

Rögzítőtűskét elhelyezni ugyanolyan módon lehet, mint implantátumot.

1. Kattintson a **Rögzítőtűske**  lehetőségre.
2. Kattintással jelölje ki a rögzítőtűske helyét.
3. Kattintással jelölje ki a rögzítőtűske csúcsának a helyét.
4. Ezzel elhelyezi a rögzítőtűskét.

Tipp

Kényelmesebb a rögzítőtűske vállának és csúcsának a helyét egy megfelelő 2D-szeleten megjelölni.

A rögzítőtűskék megfelelő dőlésszöge és mélysége

A műtési sablon stabilizálása érdekében az implantátum behelyezése előtt rögzítőtűskék helyezhetők be stratégiai pozíciókba. Ezeknek a dőlésszöge és behelyezés mélysége döntő jelentőségű.


A rögzítőtűskék a műtét során az ajkak eltartására is szolgálnak. A fogíven túl nagy területen elosztott rögzítőtűskék hátrányosan befolyásolhatják a száj nyitását. E hátrányos hatás csökkentésére kaphatók rövid szárú rögzítőtűskék. A rögzítőtűskék helyét úgy kell megtervezni, hogy jó hozzáférést biztosítsanak, és ne akadályozzák az implantátumok helyének hozzáférését.

A perselyeket a szájban fennálló viszonyok digitalizált felszíni modellje által reprezentált nyálkahártyához közel (0.5–1 mm távolságra) kell elhelyezni, de nem szabad érintkezniük vagy ütközniük a fent említett modellel, amikor felszíni SmartFusion felvételt használ.


Fogatlan fogív esetén javasolt legalább négy rögzítőtűskét használni. A rögzítőtűskéket vesztibulárisan, a szájon kívüli irányból kell behelyezni, vagy bizonyos speciális helyzetekben a szemközti irányból (palatális vagy linguális irányból), hogy két oldalról rögzítsék a műtési sablont.

Rögzítőtűskék és radiológiai sablon (fogatlan eset)

Radiológiai sablon használata esetén a perselynek a radiológiai sablonnal összeköttetésben kell lennie, azonban nem emelkedhet ki az intaglio felszínből.

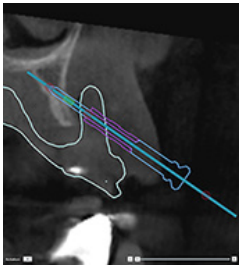


Helyes

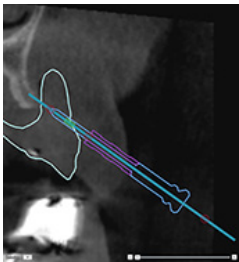

Helytelen

A rögzítőtűske perselye nincs rögzítve a radiológiai sablonhoz, így nem fog csatlakozni a műtési sablonhoz.

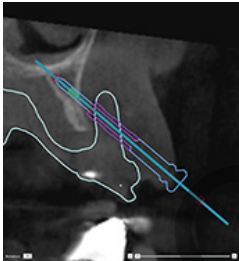


Helytelen


A rögzítőtűske perselye túllóg a radiológiai sablonon, így a sablon nem fog bemenni a páciens szájába.

Rögzítőtűskék és fogászati scan (részlegesen fogatlan eset)

A SmartFusionnal létrehozott radiológiai sablon alkalmazásakor a rögzítőtűskét a nyálkahártyához közel (0.5–1 mm távolságra a nyálkahártyától, amit a felszíni scan reprezentál) kell elhelyezni, ügyelve arra, hogy a rögzítőtűske perselye ne lógjon túl a SmartFusionnal létrehozott felszíni scanen.

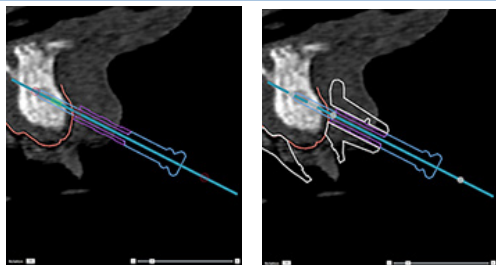


Helyes

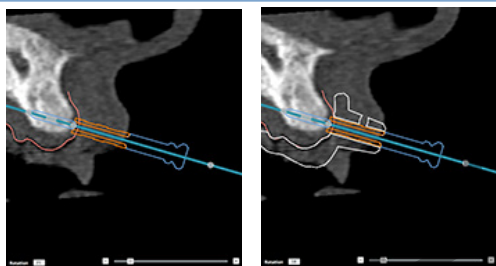


Helytelen

A rögzítőtűske perselye kiemelkedik a radiológiai sablonból (lágyszövetből), így a sablon nem fog bemenni a páciens szájába.

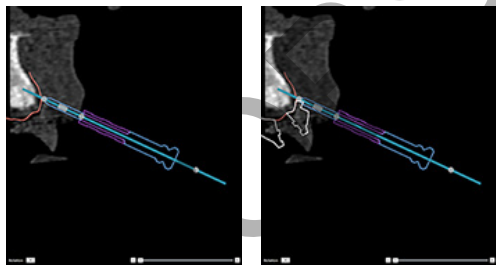

Helytelen

A rögzítőtűske nincs beágyazva a csontba, és nem csatlakozik a radiológiai sablonhoz. A sablon anyaga nem megy a persely köré.

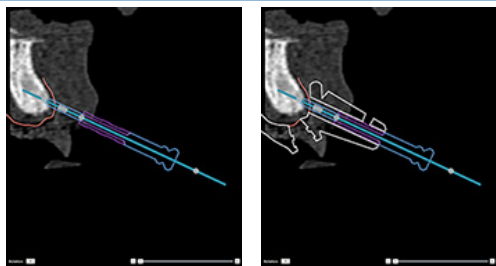

Helytelen

A rögzítőtűske nincs beágyazva a csontba, a sablon anyaga a persely köré megy, de ez a rögzítőtűske nem fog rögzíteni a műtét alatt.

A kezelési terv ellenőrzése

Ha meg szeretné tekinteni az implantátum vagy a rögzítőtüske útját a csonton keresztül, megjelenítheti az implantátumra vagy a rögzítőtüskére merőleges szeleteket, valamint az implantátummal vagy a rögzítőtüskével párhuzamos szeleteket is. Ezzel a módszerrel részletesen áttekinthető az implantátum és a rögzítőtüske környezete, hogy meggyőződhessen arról, hogy a választott pozíció alkalmas-e az implantátum vagy rögzítőtüske behelyezésére.

Az illesztési funkció használata

A keresztmetszeti szeletek illesztési funkciója különféle módokban eltérően működik:

- **Implantátum vagy rögzítőtüske módban** a szoftver a keresztmetszeti szeleteket az implantátum vagy rögzítőtüske középtengelyéhez igazítja, és az implantátum vagy rögzítőtüske középpontjába helyezi.
- **Pásztázó módban** a keresztmetszeti szeleteket a szoftver a panorámaszeletek görbéjéhez illeszti.

Keresztmetszeti szeletek implantátumhoz vagy rögzítőtüskéhez való illesztése

1. Az **Eszközök** panelen kattintson az **Illesztés szelethez**  gombra.
2. Ezzel a keresztmetszeti szeleteket a kiválasztott implantátumhoz vagy rögzítőtüskéhez illeszti, és a tengelye körül forgatja, nem pedig az állcsont ívét követve. Ha nem választ ki implantátumot vagy rögzítőtüskét, a szeleteket az utoljára kiválasztott implantátumhoz vagy rögzítőtüskéhez illeszti. Ha még nem választott ki implantátumot vagy rögzítőtüskét, a szeleteket az utoljára tervezett implantátumhoz vagy rögzítőtüskéhez illeszti.

Tipp

Ha másik implantátumot vagy rögzítőtüskét választ ki, a szeleteket automatikusan az új implantátumhoz vagy rögzítőtüskéhez illeszti. Ezt a funkciót az általános beállításoknál kapcsolhatja ki.

Megjegyzés

Ha úgy törli a kezelési terv utolsó implantátumát, hogy a keresztmetszeti szeleteket az implantátumhoz illesztette, a keresztmetszeti szeleteket automatikusan a görbéhez fogja illeszteni.

Ugrás egy másik implantátumra vagy rögzítőtüskére


Amikor az illesztési funkció implantátum vagy rögzítőtüske módban van, a 2D-megjelenítő **Illesztés** sávján megjelenő **Tovább** művelettel egy másik implantátumra vagy rögzítőtüskére válthat.

1. Az Illesztés sávon kattintson a **Tovább** gombra.
2. A keresztmetszeti szelet a sorban következő implantátumra vagy rögzítőtüskére vált.

Visszatérés pásztázó módba

Amikor az illesztési funkció implantátum vagy rögzítőtüske módban van, az **Illesztés** sávon megjelenő **Illesztés megszüntetése** művelettel gyorsan visszatérhet Pásztázó módba.

1. Az Illesztés sávon kattintson az **Illesztés megszüntetése** gombra.
2. A keresztmetszeti szeletet ezzel a görbéhez igazítja.

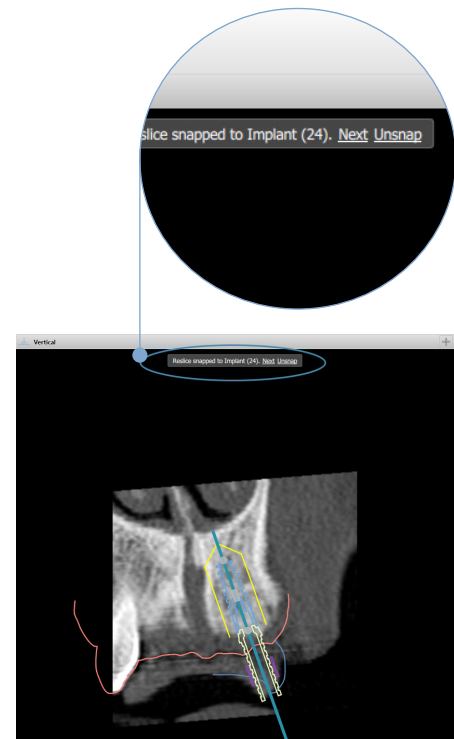

A kezelési terv ellenőrzése

Műtési sablon készítése

A műtési sablon segít abban, hogy a műtétet pontosan úgy végezhesse el, ahogy tervezte. A terv véglegesítésekor létrehozhat egy virtuális műtési sablont, amely egy előnézete annak, amit ténylegesen kapni fog.

A kezelési tervnek megfelelő műtési sablon létrehozása


1. A **Véglegesítés** lapon kattintson a **Sablon létrehozása**  gombra. Megjelenik egy ablak, amelyben meg kell erősítenie az implantátumok pozícióját a kiválasztott perselyekkel (műtési típusokkal) együtt. Alapértelmezés szerint a műtési sablont a Nobel Biocare gyártja. Ha helyileg szeretné elkészíteni a sablont vagy egy másik gyártó sablonját szeretné használni, akkor válassza az **Egyéb** lehetőséget. Válassza ki a listából a gyártót. Ha kiválasztja saját fióknevét, akkor letöltheti a sablont a DTX Studio™ Go alkalmazásból. Ha kiválasztja egyik kapcsolatát a sablon elérhető lesz számukra letöltéshez. Adja meg a szükséges részleteket, és ha kell, módosíthatja a kiválasztott műtési típust.
2. Ha megfelelőek az adatok, nyomja meg a **Tovább** gombot. A szoftver létrehozza a műtési sablont.
3. Vizsgálja meg a virtuális műtési sablont.
4. Kattintson a **Befejezés** gombra.
5. Megjelenik a **Terv jóváhagyása a megrendelés előtt** párbeszédablak. Olvassa el figyelmesen a benne írtakat. Annak megerősítéséhez, hogy elolvasta az üzeneteket, és minden úgy van, ahogy lennie kell, kattintson az **Elolvastam a fenti információkat, és elfogadom azokat.** lehetőségre.
6. A sablon azonnali megrendeléséhez kattintson a **Megrendelés létrehozás** gombra. A rendszer megjeleníti a rendelési modult, amelyben látható a tervezési fájl, és ahol megrendelheti a termékeket. A rendelés későbbre halasztásához kattintson a **Jóváhagyás később** lehetőségre.

Megjegyzés

A helyi gyártáshoz használt virtuális műtési sablon színe eltér a Nobel Biocare által gyártott virtuális műtési sablonétól.



Nobel Biocare általi gyártáshoz kiszámított virtuális sablon.

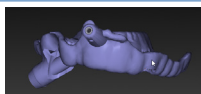

Helyben gyártáshoz kiszámított virtuális sablon.

A műtési sablon ellenőrzése

Egy kezelési terv véglegesítésekor nagyon fontos ellenőrizni több olyan dolgot, amelyek megakadályozhatják a műtési sablon megfelelő létrehozását:

1. Ellenőrizze a rögzítőtüskék elhelyezkedését.
2. Ellenőrizze az implantátumok tengelyeltérését, és – ha nem biztos benne – beszélje meg a kezelést végző csapat tagjaival, hogy nincs-e hátrányos hatással a protetikai kezelésre.
3. Ellenőrizze az irányító perselyek és a szomszédos fogak viszonyát.
 - Gondoskodjon arról, hogy az irányító persely ne érintse a szomszédos fogakat.
 - Ellenőrizze a 3D-forgatókönyvet, hogy a műtési sablon érintkezik-e a fogakkal. Ezt azért kell tudni, hogy eldönthesse, hogy a sablont kell-e csiszolni vagy módosítani.

4. A terv elfogadása előtt ellenőrizzen minden implantátumot a merőleges szeletben és a 3D forgatókönyvben.
5. Ellenőrizze, hogy nincsen-e megszakadás vagy lyuk a műtési sablon megtartó szerkezetében az implantátumok vagy a rögzítőtűskék perselyei környékén.
6. Közölje a tervet a csapat többi tagjával, hogy ellenőrizhessék az összes szempontot.

A virtuális műtési sablon szerkesztése

Megjegyzés

Csak a fogakról készült felvételtől létrehozott sablonok esetében használható.

Ha azt tapasztalja, hogy a virtuális sablon nem egyenletesen van elosztva a fogíven (egyenletesen emelkedik ki a labiális/bukkális és a linguális felszínen), szerkesztheti az alakját. Változtassa meg a kék vonal lefutását a **Sablon szerkesztése** varázslóban, hogy kövesse a fogívet.

1. A **Véglegesítés** lapon kattintson a **Sablon szerkesztése** gombra.
2. Kattintson a görbén található pontokra, és azok húzásával változtassa meg a görbe elhelyezkedését.
3. Amikor a kék vonal lefutása jobban megfelel a fogívnek, kattintson a **Befejezés** lehetőségre.
4. A szoftver újra létrehozza a műtési sablont.

Ha a virtuális sablon alakja továbbra sem optimális, ismételje meg ezeket a lépéseket, amíg megfelelő nem lesz.

Megjegyzés

Az Egyesült Államokban, és bizonyos más piacokon az endoszteális fogászati implantátumok elhelyezését segítő műtési sablonok orvosi eszköznek minősülnek. Az ilyen műtési sablonok gyártásával kapcsolatos törvényi szabályozással és követelményekkel kapcsolatos információkért forduljon a helyi szabályozó hatósághoz.

A kezelési terv jóváhagyása

Ha egy kezelési tervet teljesen véglegesített, zárja le azt a jóváhagyásával. A jóváhagyás folytatásához olvassa el a **Jóváhagyás** párbeszédablak szövegét, és nyugtázza.

A Tervezés állapotsorban megjelenik a „jóváhagyva” szó.

Jóváhagyott kezelési tervet nem lehet módosítani. A terv jóváhagyásának megszüntetéséhez, hogy ismét módosítani lehessen, kattintson a **Terv jóváhagyásának megszüntetése** gombra.

Rendelések

Scan készítéséhez, illetve ideiglenes TempShell modell megtervezéséhez és kiszámításához küldje el a scan- vagy TempShell-rendelést a fogtechnikai laboratóriumba. Rendelések felhőszolgáltatáson keresztül való küldéséhez a fogtechnikai laboratóriumnak a DTX Studio Lab szoftvert kell használnia, és kapcsolatot kell létesíteni a DTX Studio Lab és a DTX Studio Implant között.

A kapcsolatok használata

Egy kapcsolat hozzáadásához szüksége lesz annak a személynek, praxisnak vagy fogtechnikai laboratóriumnak a kilencjegyű azonosítószámára, akihez vagy amelyhez kapcsolódni szeretne. A DTX Studio Implant kapcsolati azonosítószáma a [Fiók kezelése](#) párbeszédablakban látható. A DTX Studio Lab kapcsolati azonosítószáma a [Fiókadatok](#) párbeszédablakban látható.

Kapcsolat hozzáadása

1. A [Saját iroda](#) eszköztár [Egészségügyi rekordok](#) lapján kattintson a [Kapcsolat hozzáadása](#)  lehetőségre. Vagy pedig kattintson a [DTX Studio Implant](#) lapfülre, és a menüből válassza a [Fiók kezelése](#) lehetőséget.
2. A [Fiók kezelése](#) párbeszédablak [Kapcsolatok kezelése](#) csoportjában kattintson az [Új kapcsolat hozzáadása](#) lehetőségre.
3. Adja meg annak a fióknak a kilencjegyű azonosítószámát, amelyhez kapcsolódni szeretne.
4. Kattintson a [Kapcsolat hozzáadása](#) lehetőségre. Ezzel a listába felveszi az új kapcsolatot, amelynek állapota [Meghívó elküldve](#) lesz, továbbá egy e-mailes meghívót küld a használt fiókhoz kapcsolódó címre.
5. Kattintson az [OK](#) gombra.
6. Amikor a másik fél elfogadja a meghívását, ön erről egy megerősítő e-mailt kap, és a listában a kapcsolatot állapota [Elfogadva](#) lesz.

Kapcsolat elfogadása

Az önnek küldött új kapcsolódási kérése állapota [Kért](#) lesz. A kapcsolat elfogadásához kattintson a meghívó e-mailben található [Elfogadás](#) hivatkozásra. Másik lehetőség:

1. A [Saját iroda](#) eszköztár [Egészségügyi rekordok](#) lapján kattintson a [Kapcsolat hozzáadása](#)  gombra, vagy kattintson a [DTX Studio Implant](#) lapfülre és a [Fiók kezelése](#) lehetőségre.
2. A [Fiók kezelése](#) párbeszédablak [Kapcsolatok kezelése](#) csoportjában válassza ki a [Meghívó elküldve](#) állapotú kapcsolódási kérést.
3. Kattintson a [Kiválasztott kapcsolat elfogadása](#) lehetőségre.
4. A kapcsolatot állapota ekkor [Elfogadva](#) lesz, és egy megerősítő e-mailt küld a meghívó félnek.

A termékrendelések kezelése

Új termékrendelés létrehozása

A Nobel Biocare termékek esetében létrehozhatók termékrendelések. A nem Nobel Biocare által gyártott termékek (pl. más gyártók implantátuma) esetében nem hozhatók létre termékrendelések.

Termékrendelés létrehozásához:

1. A **Tervezés** eszköztár **Véglegesítés** lapján kattintson a **Rendelés**  lehetőségre. Vagy pedig a **Rendelés** modul eszköztárán kattintson a **Termék** lehetőségre.
2. Megjelenik egy lista az aktuális pácienshez rendelkezésre álló tervezési fájlokkal. A jobb oldali panelen tekintse meg a kiválasztott tervezési fájl részletes adatait, válassza ki a megfelelő tervezési fájlt, majd kattintson a **Tovább** gombra.

Megjegyzés

Győződjön meg arról, hogy a megrendelni kívánt tervezési fájl jóvá van-e hagyva: . Csak jóváhagyott tervezési fájl alapján lehet rendelést leadni. Ha a tervezési fájl még nincs jóváhagyva, figyelmeztetés jelenik meg.

3. Megjelenik a **Terméklista**. A listában található termékek közül törölje azokat a termékeket, amelyeket nem kíván megrendelni, vagy módosítsa a megrendelt termékek darabszámát, majd kattintson a **Tovább** gombra.
4. Válassza ki a **Szállítás ide** címet, írja be, hogy ki adta le a rendelést, és ha szükséges, írjon megjegyzéseket a gyártással kapcsolatban.
5. Válassza ki, hogy csak menteni szeretné a rendelést (**Csak mentés**), vagy pedig rögtön el is szeretné küldeni (**Mentés és küldés most**).
6. Ellenőrizze a megrendelésre kerülő termékek listáját a **Megrendelt termékek** panelen.
7. Kattintson a **Befejezés** gombra. Ezzel létrejött a rendelés, és megjelenik a létrehozott rendelések listájában.

A termékrendelés elküldése

Egy létrehozott termékrendelés elküldéséhez:

1. Válassza ki a listából a létrehozott megrendelést.
2. Kattintson az eszköztáron a **Küldés**  gombra.

Modellszkennelési rendelések használata

A gipszminta, a diagnosztikai fogfelállítás vagy a viaszmodell felszíni szkenneléséhez és/vagy egy antagonistá scannek a megrendeléséhez egy modellszkennelési rendelést kell küldenie a fogtechnikai laboratóriumnak.

Modellszkennelési rendelés létrehozása

1. Az **Iroda** modulban kattintson az **Új**  gombra, majd a **Modellszkennelési rendelése**  lehetőségre. Vagy pedig lépjen a **Rendelés** modulba, és kattintson a **Scan** lehetőségre.
2. Jelölje be a beszkennelendő objektumokat a fogak ábráján úgy, hogy húzza a beszkennelendő területet, és a felugró menüből kiválasztja a kívánt lehetőséget. A kért felvételek a jobb oldali listában találhatók.
3. Kattintson a **Tovább** gombra.
4. Válassza ki azt a fogtechnikai laboratóriumot, amely elvégzi a gipszminta szkennelését, írja be az összes szükséges adatot és az esetleg szükséges különleges utasításokat, és ellenőrizze a kért felvételek listáját.
5. Kattintson a **Befejezés** gombra.
6. Ezzel elküldi a modellszkennelési rendelést a fogtechnikai laboratóriumnak, hozzáadja a **Rendelések** listához, és megjeleníti a kiszolgáltatótól kapott rendelésszámmal együtt.

A TempShell megrendelések használata

Az azonnali ideiglenes pótlások lehetővé teszik, hogy a páciens ideiglenes koronát vagy hidat kapjon az implantátum behelyezésekor. Ennek érdekében a DTX Studio Implant felhasználója és a fogtechnikai laboratórium (amely a DTX Studio Lab szoftvert használja) együttműködik egy TempShell modell létrehozásában, amelyet az orvos a műtét idején ideiglenes fogpótlássá alakíthat.

A TempShell munkafolyamat

A DTX Studio Implant felhasználója létrehozza a páciensfájlt, hozzáadja a protetikai információkat, majd megtervezi az implantátumokat. A rendszer létrehozza a TempShell-rendelést, és elküldi a fogtechnikai laboratóriumba, amely a DTX Studio Lab szoftverben fogadja a rendelést. A fogtechnikai laboratórium a DTX Studio Lab szoftverben megtervez egy LabDesign-t.

A LabDesign-t opcionális módon megosztja a DTX Studio Implant felhasználójával. Annak ellenőrzéséhez, hogy a design megfelel-e a kezelési tervnek, a felhasználó a DTX Studio Implant szoftverben hozzáadja a LabDesign-t a kezelési tervhez. Ha bármilyen módosításra van szükség, kapcsolatba lép a fogtechnikai laboratóriummal (telefonon vagy e-mailben), és kéri a modell módosítását. A DTX Studio Implant felhasználója és a fogtechnikai laboratórium közötti kommunikáció során előfordulhat, hogy több designváltozatra lesz szükség. Amikor az orvos megerősíti, hogy a design megfelelően illeszkedik, a fogtechnikai laboratórium létrehozza és elküldi a TempShellt.

A DTX Studio Implant felhasználója hozzáadja a TempShellt a kezelési tervhez.

LabDesign-kérés létrehozása

LabDesign kérése:

1. Kattintson a **LabDesign**  gombra a **Rendelés** modul eszköztárján.
2. Megjelenik egy lista az aktuális pácienshez rendelkezésre álló tervezési fájlokkal. A jobb oldali panelen tekintse meg a kiválasztott tervezési fájl részletes adatait, válassza ki a megfelelő tervezési fájlt, majd kattintson a **Tovább** gombra.
3. Megjelenik a **LabDesign kérés áttekintése**.
4. A fogak ábráján jelölje be az a helyet, ahová a LabDesign-t (egytágú pótlás vagy híd) rendeli.
5. Válassza ki, hogy mely fogtechnikai laboratóriumra bízza a rendelést, vagy pedig exportálja a rendelést fájlként.
6. Ellenőrizze a kérés adatait, és módosítsa szükség szerint.
7. Kattintson a **Befejezés** gombra.

TempShell-rendelés létrehozása

TempShell-rendelés létrehozásához és elküldéséhez a fogtechnikai laboratóriumba:

1. Kattintson a **TempShell**  gombra a **Rendelés** modul eszköztárján.
2. Megjelenik egy lista az aktuális pácienshez rendelkezésre álló tervezési fájlokkal. A jobb oldali panelen tekintse meg a kiválasztott tervezési fájl részletes adatait, válassza ki a megfelelő tervezési fájlt, majd kattintson a **Tovább** gombra.
3. Megjelenik a **TempShell rendelés áttekintése**.
4. A fogak ábráján jelölje be az a helyet, ahová a TempShellt (egytágú pótlás vagy híd) rendeli. Ne válassza ki a szárnyak meghosszabbítását.
5. Válassza ki, hogy melyik fogtechnikai laboratóriumra bízza a rendelést, vagy exportálja a rendelést fájlként.
6. Ellenőrizze a rendelés részletes adatait, és szükség szerint állítsa be.
7. Kattintson a **Befejezés** gombra.

LabDesign hozzáadása a kezelési tervhez

Annak ellenőrzéséhez, hogy a fogtechnikai laboratórium által megtervezett pótlás megfelel-e a kezelési tervnek, az elküldött LabDesign modell hozzáadható a kezelési tervhez.

1. A **Tervezés** modul **Protetika** lapján kattintson a **LabDesign hozzáadása**  ikonra.
2. Megjelenik a **LabDesign hozzáadása** párbeszédablak. Válassza a **LabDesign** lehetőséget, majd kattintson a **LabDesign hozzáadása** lehetőségre.
3. Ezzel hozzáadja a **LabDesign** modellt az ábrához.
4. Annak megerősítéséhez, hogy a LabDesign modell megfelelő, vagy ha a módosítására van szükség, lépjen kapcsolatba a fogtechnikai laboratóriummal telefonon vagy e-mailben.

Megjegyzések

Ha módosítani kell a kezelési tervet, ne feledje újra megrendelni a LabDesign-t.

Ha egy meghajtón rendelkezésre áll egy LabDesign fájl, importálja a fájlt a **LabDesign hozzáadása** párbeszédablak **LabDesign importálása** műveletével.

TempShell hozzáadása a kezelési tervhez

1. Kattintson a **TempShell hozzáadása**  gombra a **Tervezés** eszköztár **Véglegesítés** lapján.
2. Megjelenik a **TempShell hozzáadása** párbeszédablak.
3. Kattintson egy rendelkezésre álló TempShellre, hogy hozzáadja azt a kezelési tervhez.
4. Kattintson a **TempShell hozzáadása** lehetőségre.

Megjegyzés

Ha egy meghajtón rendelkezésre áll egy TempShell fájl, importálja a fájlt az **TempShell importálása** művelettel a **TempShell hozzáadása** párbeszédablakban.

Szolgáltatásigénylések kezelése

Tipikus szolgáltatásigénylési munkafolyamat a DTX Studio Go segítségével

A DTX Studio Clinic felhasználója (igénylő) szeretne egy tervet igényelni egy adott esethez a DTX Studio Implant felhasználójától (a szolgáltató). Az igénylő létrehoz egy páciensfájlt a DTX Studio Clinic szoftverben, és a szolgáltatásigénylést jellemzően a DTX Studio Go segítségével küldi el. Amikor a szolgáltató új felkérést kap a DTX Studio Go alkalmazásban egy terv létrehozására, letöltheti szükséges fájlokat. A zip-fájlt ki kell csomagolni és el kell menteni. A szolgáltató új páciensfájlt hoz létre a DTX Studio Implant alkalmazásban, a kapott páciensadatokat használva. A szolgáltató elvégzi a szokásos implantációs tervezési lépéseket a DTX Studio Implant szoftverben, és jóváhagyja a kezelési tervet. Ezután válaszolhat a szolgáltatásigénylésre, és a DTX Studio Go segítségével visszaküldheti a kezelési tervet az igénylőnek.

Válasz a szolgáltatásigénylésre

A jóváhagyott terv visszaküldése a szolgáltatást igénylőnek:

1. A **Rendelés** modulban kattintson a **Kérés teljesítése**  lehetőségre.
2. Válassza ki a megfelelő tervet a listából. Kattintson a **Tovább** gombra.
3. Töltse ki a kért információkat a szolgáltatásigénylés személyre szabásához. Ne feledje csatolni a jelentést, illetve hozzáadhat megjegyzéseket és képeket is.
4. Kattintson a **Befejezés** gombra.
5. Egy felugró ablak olyan alapvető információkat jelenít meg, mint a szolgáltatásazonosító és az igénylő adatai, így ellenőrizheti, hogy a kezelés a megfelelő esethez lesz-e visszaküldve. Kattintson a **Feltöltés** lehetőségre, ezzel a tervet elküldi az igénylőnek.

A „helyi” szolgáltatásigénylés munkafolyamata

Ha a felhasználó telepítette mind a DTX Studio Clinic, mind a DTX Studio Implant szoftvert ugyanarra a számítógépre, a munkafolyamat kissé eltér. A DTX Studio Clinic szoftverben a felhasználó létrehozza a páciensfájlt, és a szükséges illesztési műveletekkel létrehozza a páciensmodellt. Amikor a DTX Studio Clinic szoftveren belül megnyitja a DTX Studio Implant szoftvert, a páciensmodell exportálva lesz, és az exportált adatok alapján létrejön egy új páciensfájl a DTX Studio Implant szoftverben. Az implantátum kezelési terve a DTX Studio Implant szoftverben lesz létrehozva, és a terv közvetlenül a DTX Studio Clinic szoftverbe exportálható, illetve abban megjeleníthető.



Fontos

Amikor a fogászati scan és a páciensmodell illesztése a DTX Studio Clinic szoftverben a SmartFusion™ segítségével történik, egy felugró ablakban megjelenik egy figyelmeztetés, amely felszólít az illesztés ellenőrzésére:

Ellenőrizze a fogászati scan és a páciensmodell illesztését, és ha az eredmény helytelen vagy kétséges, számítsa újra az illesztést a Fogászati scan szerkesztése varázslóval.

A jóváhagyott terv exportálása

Ha a DTX Studio Clinic és a DTX Studio Implant ugyanarra a számítógépre van telepítve, a jóváhagyott tervet exportálni kell.

1. A **Rendelés** modulban kattintson a **Kérés teljesítése**  lehetőségre.
2. Válassza ki a megfelelő tervet a listából. Kattintson a **Tovább** gombra.
3. Töltse ki a kért információkat a szolgáltatásigénylés személyre szabásához. Ne feledje csatolni a jelentést, illetve hozzáadhat megjegyzéseket és képeket is.
4. Kattintson az **Exportálás** lehetőségre.
5. Válassza ki az exportált fájlok tárolási helyét. Kattintson a **Mappa kiválasztása** lehetőségre.
6. A fájlok most már elérhetők a kiválasztott helyen.

A Segéd használata

A DTX Studio Implant Segéd elindításához kattintson a **Segéd** gombra az ablak jobb felső sarkában.

Megjelenik a **DTX Studio Implant Segéd** ablak. A DTX Studio Implant Segéd különböző lapokból áll:

- **Feladatok** : A tervezési és a további feladatok áttekintése, amely végigvezet a tervezési műveleten.
- **Figyelmeztetések** : Figyelmeztető üzenetek, amelyek felhívják a figyelmet a lehetséges problémákra.
- **Tervezés áttekintése** : Itt áttekinthetők a kezelési tervben felhasznált implantátumok, felépítmények és/vagy rögzítőtüskék. Az is jelzésre kerül, hogy megtörtént-e radiológiai vezetőeszköz és műtéti sablon létrehozása. A fogak ábrája jelzi a tervezett implantátumok pozícióját.


OBSOLETE

A DTX Studio Implant szoftverben megjelenő figyelmeztetések rendszere

Számos technikai/gyártási/eljárási figyelmeztetés (pl. egymáshoz túl közel helyezett irányító perselyek, „nincs elhelyezett rögzítőtüske”, megjelölt ideghez túl közelre tervezett implantátum) jelenhet meg a DTX Studio Implant szoftverben.

Amikor a figyelmeztetések azért jelennek meg, mert a DTX Studio Implant klinikai vagy technikai tervezési hibát észlelt, ellenőrizze ezeket a Tervezési segéd [Figyelmeztetések](#) részén.

Nyissa meg a Tervezési segéd eszközt, és kattintson a [Figyelmeztetések](#)  ikonra, vagy kattintson a [Figyelmeztetések](#) gombra a [Segéd](#) gomb alatt. A Tervezési segéd ekkor a figyelmeztetéseket mutatja, klinikai és sablonnal kapcsolatos figyelmeztetésekre osztva őket.

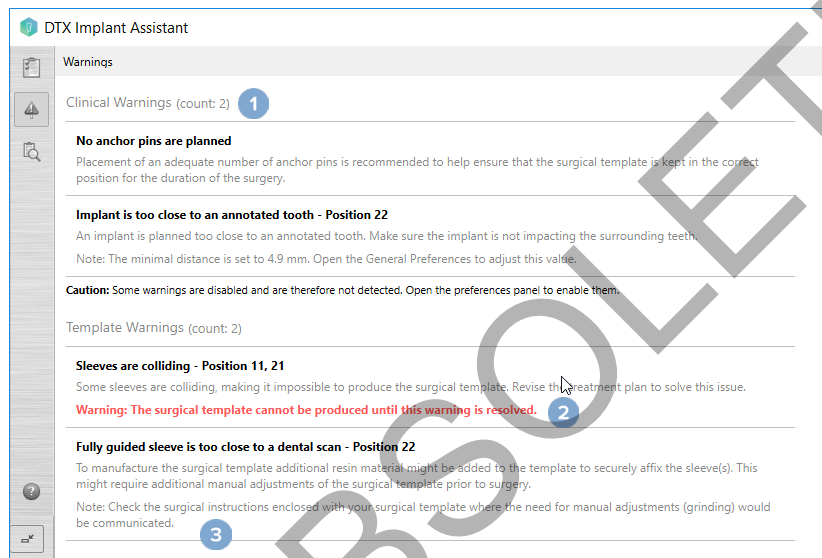

- 1 A figyelmeztetéstípus fejlécében megjelennek az aktuális klinikai és sablonnal kapcsolatos figyelmeztetések.
- 2 Amikor nem lehet legyártani a műtéti sablont, a kapcsolódó figyelmeztetések pirosan jelennek meg, és jelzik, hogy el kell őket hárítani, hogy a műtéti sablont le lehessen gyártani.
- 3 A beállítható figyelmeztetésekhez egy megjegyzés kapcsolódik, amely kijelzi a beállított értéket, és megmondja, hogy hol lehet azt módosítani, ha szükséges. Ha egy beállítható figyelmeztetés ki van kapcsolva, egy figyelmeztetés jelenik meg, amely arról tájékoztatja, hogy lehetséges, hogy bizonyos problémák nem jelennek meg.

A DTX Studio Implant szoftverben megjelenő figyelmeztetések



Figyelmeztetés

Ez a tervezőprogram nem ellenőrzi automatikusan az összes műszaki megkötést. Ha a szoftver nem azonosít automatikus semmilyen megkötést, akkor is lehetséges, hogy a műtéti sablonokat nem lehet legyártani.

A tervezés során figyelembe kell venni néhány technikai megkötést, amelyek szükségesek a műtéti sablon megfelelő gyártásához és a sablon műtét közben való sikeres használatához. A DTX Studio Implant automatikusan észleli bizonyos technikai és klinikai korlátozás esetleges megszegését. Ha ilyet észlel, figyelmeztető üzenet jelenik meg a Segéd részen. Kattintson erre az üzenetre a megjegyzések és figyelmeztetések részletes adatainak megtekintéséhez.

A 2D- és 3D-megjelenítőben a problémát okozó objektumok pirosan és narancsszínben jelennek meg attól függően, hogy mely megkötést szegték meg. A megfelelő figyelmeztető üzenetek a Segéd részen jelennek meg. Ezek az üzenetek a **Jóváhagyás** ablakban, a tervezés áttekintésében, a jelentésben és más helyeken is megjelennek.

Alább található a lehetséges figyelmeztetések áttekintését a típusuk szerint csoportosítva.

Sablonnal kapcsolatos figyelmeztetések

A jelentésben a sablonnal kapcsolatos figyelmeztetések az utolsó oldalon találhatók.

Figyelmeztetés	Magyarázat
Perselyek ütköznek egymással.*	Bizonyos perselyek ütköznek egymással, így nem lehet legyártani a műtéti sablont. A probléma megoldásához ellenőrizze a kezelési tervet.
Egy implantátum és egy persely ütközik egymással.	Egy implantátum ütközik egy persellyel. Ez problémát okozhat a műtét során. Javasolt ellenőrizni a kezelési tervet.
Egy rögzítőtüske és egy persely ütközik egymással.	Egy rögzítőtüske ütközik egy persellyel. Ez problémát okozhat a műtét során. Javasolt ellenőrizni a kezelési tervet.
Egy megjelölt fog és egy persely ütközik egymással.	Egy persely ütközik egy megjelölt foggal. Ellenőrizze, hogy ez az ütközés nem akadályozza-e meg a műtéti sablon megfelelő behelyezését.
Egy rögzítőtüske perselye túl közel van a fogászati scanhez.	Egy rögzítőtüske perselyének tervezett helye túl közel van a fogászati scanhez. Ez problémákat okozhat a műtéti sablon megfelelő behelyezését illetően a műtét során. Próbálja úgy pozicionálni a rögzítőtüske perselyét, hogy ne ütközzön a fogászati scannel.
A kezdőpersely túl közel van a fogászati scanhez.	A kezdőfűrő perselyének helye túl közel van a fogászati scanhez, ami lehetetlenné teszi a műtéti sablon legyártását. A probléma megoldásához ellenőrizze a tervezett implantátumok pozícióját, vagy módosítsa a kezdőperselyt.
Egy teljes mértékben irányító persely túl közel van a fogászati scanhez.	A műtéti sablon legyártásához további gyantaanyagot adhat a sablonhoz, hogy biztonságosan rögzítse a persely(ek)e)t. Előfordulhat, hogy ehhez a műtét előtt kézzel ki kell igazítani a műtéti sablont.
Megjegyzés Ha kézi igazítás (csiszolás) javallott, nézze meg a műtéti sablonhoz mellékelt műtéti utasításokat.	

* A műtéti sablont nem lehet legyártani, amíg el nem hárítja ezt a figyelmeztetést.

Klinikai figyelmeztetések

A klinikai figyelmeztetések általános figyelmeztetések és implantátummal kapcsolatos figyelmeztetések lehetnek. A klinikai figyelmeztetések a jelentés implantátummal kapcsolatos oldalain láthatók.

Általános figyelmeztetések

Figyelmeztetés	Magyarázat
Nincsenek megtervezett rögzítőtűskék.	Javasolt a megfelelő számú rögzítőtűskét elhelyezni, amelyek a műtési sablont a helyes pozícióban tartják a műtét során.
Két rögzítőtűske ütközik egymással.	Bizonyos rögzítőtűskék ütköznek egymással. Ez problémát okozhat a műtét során. Javasolt ellenőrizni a kezelési tervet.
A radiológiai sablont nem kalibrálták.	A radiológiai sablon 3D-modelljének küszöbértéke egy szürkeérték (izoérték), amelyet nem a készülékére kalibráltak. Pontos illeszkedésű műtési sablon legyártásához fontos követni a NobelGuide kalibrációs eljárást, amelynek leírása a NobelGuide koncepciót ismertető kézikönyvben található.
A kezelési tervben nem telepített termékek szerepelnek.	A kezelési tervben olyan termékek szerepelnek, amelyek jelenleg nincsenek a számítógépre telepítve. Ellenőrizze, hogy van-e internetkapcsolata, majd nyissa meg újra a kezelési tervet. Ha a hiányzó termékeket nem sikerült telepíteni, vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisellel.
A megjelenítés alacsony minőségű.**	A kezelési tervben használt páciensmodell 3D-megjelenítése alacsony minőségű.
A fogászati scan illesztése kézileg történt.	A páciensmodell és a fogászati scan illesztését manuálisan módosították egymásnak megfelelő pontok megjelölésével vagy új fogászati scanfelszín importálásával. Fokozottan ellenőrizze, hogy a fogászati scan megfelelően illeszkedik-e a (kúpsugaras) CT-képhez, mivel az eltérések problémához vezethetnek az implantátumok behelyezésekor.
A SmartFusion-igazítás nem sikerült.*	A SmartFusion-igazítás nem sikerült, és nem módosították kézileg. A probléma elhárításához indítsa el a Fogászati scan szerkesztése műveletet.
Ellenőrizze a SmartFusion-illesztést	Ellenőrizze a fogászati scan és a páciensmodell illesztését, és ha az eredmény helytelen vagy kétséges, számítsa újra az illesztést a Fogászati scan szerkesztése varázslóval.

* A műtési sablont nem lehet legyártani, amíg el nem hárítja ezt a figyelmeztetést.

** Az alacsony minőségű felvételek növelik annak a kockázatát, hogy néhány anatómiai jellegzetesség nem lesz látható a páciensmodellben. A beállítás csak a térfogat 3 dimenziós megjelenítését befolyásolja. A CT szeletek módosítására nincs hatással.

Implantátummal kapcsolatos figyelmeztetések

Bizonyos implantátummal kapcsolatos figyelmeztetések beállíthatók. Így például bekapcsolhatók és kikapcsolhatók, vagy a figyelmeztetés megjelenését kiváltó értékeket a felhasználó adhatja meg. A beállítható figyelmeztetés mellett az alábbi címkében a „beállítható” megjelölés található.



Fontos

Az implantátummal kapcsolatos figyelmeztetéseket kiváltó értékeket a felhasználó klinikai tapasztalata és gyakorlottsága alapján kell beállítani.


Figyelmeztetés	Magyarázat
Két implantátum ütközik egymással.	Bizonyos implantátumok ütköznek egymással. Ez problémát okozhat a műtét során. Javasolt ellenőrizni a kezelési tervet.
Egy implantátum és egy rögzítőtüske ütközik egymással.	Egy implantátum ütközik egy rögzítőtüskével. Ez problémát okozhat a műtét során. Javasolt ellenőrizni a kezelési tervet.
Egy implantátum túl közel van egy megjelölt ideghez.*	Egy implantátum tervezett helye túl közel van egy megjelölt ideghez. Gondoskodjon arról, hogy az implantátum ne érintse az ideget. Megjegyzés A minimális távolság beállítása [...] mm. Az érték módosításához nyissa meg az Általános beállításokat.
Egy implantátum túl közel van egy megjelölt foghoz.*	Egy implantátum tervezett helye túl közel van egy megjelölt foghoz. Gondoskodjon arról, hogy az implantátum ne érintse a fogat. Megjegyzés A minimális távolság beállítása [...] mm. Az érték módosításához nyissa meg az Általános beállításokat.

* Ezek beállítható figyelmeztetések

Beállítható figyelmeztetések

A beállítható figyelmeztetések az implantátum körüli térfogatra, az úgynevezett figyelmeztetési térfogatra vonatkoznak. Ha ez a térfogat ütközik egy megjelölt anatómiai struktúrával, kiváltódik a figyelmeztetés.

A figyelmeztetési térfogat létrehozása egy előre megadott távolság alapján történik. E távolság alapbeállítása 1.5 mm, ez a legkisebb választható távolság. E legkisebb távolság esetén a figyelmeztetési térfogat megegyezik a sárga területtel (ez az implantátum körül 1.5 mm-es területet és a csúcsánál 2 × 1.5mm-es (3.0 mm) távolságot jelent). Ez a figyelmeztetési térfogat növelhető. Az ábrán a 4.0 mm-es beállítás esetén érvényes terület látható.

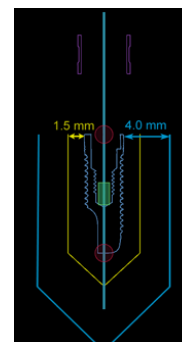

Implantátumok és idegek ütközésére vonatkozó figyelmeztetés

Ha egy implantátum egy megjelölt ideghez túl közel van elhelyezve, vagyis a figyelmeztetési térfogat ütközik a megjelölt idegek, kiváltódik egy figyelmeztetés. Az érintett implantátum megjelenik (ha addig nem jelent meg), és narancsszínűre változik.

Implantátumok és foggyökerek ütközésére vonatkozó figyelmeztetés

Ha egy implantátum egy foggyökérhez túl közel van elhelyezve, vagyis a figyelmeztetési térfogat ütközik a megjelölt foggal, kiváltódik egy figyelmeztetés. Az implantátum megjelenik, és narancsszínűre változik.

Megjegyzés

A figyelmeztetési térfogatot meghatározó alapértelmezett minimális távolságot a **DTX Studio Implant > Általános beállítások** menüjében kell beállítani. Az értéket az éppen használt számítógépre menti. Ha a kezelési tervet nem azon a számítógépen nyitja meg, amelyen létrehozta, azok a figyelmeztetések fognak megjelenni, amelyek az aktuális számítógépen be vannak állítva. Ennek következtében a megjelenő figyelmeztetések számítógépenként eltérhetnek. A beállítható értékeket bármikor ellenőrizheti és módosíthatja a beállításokban. Az értékek megjelennek a figyelmeztetés áttekintésében, amikor egy figyelmeztetés aktiválódik.

Technikai megkötések


A következőkben ismertetünk több olyan technikai megkötést, amelyeket figyelembe kell venni a műtéti sablon megfelelő létrehozásához. Ha nem veszi figyelembe ezeket a megkötéseket, nem garantálható, hogy a műtéti sablont le lehet gyártani és sikeresen lehet használni.

Az irányító perselyek közötti minimális távolság

A műtéti sablonban az irányító perselyek között be kell tartani egy minimális távolságot. Ha a távolság túl kicsi, nem lehet legyártani a műtéti sablont.

Ha az irányító perselyek közötti távolság nem megfelelő, az irányító perselyek automatikusan megjelennek piros színnel, akkor nem lehet legyártani a műtéti sablont.


A probléma megoldásához helyezze át vagy döntse meg az implantátumokat úgy, hogy növekedjen a perselyek közötti távolság. Ha a távolság kellően nagy, az irányító perselyek színe automatikusan a normál színre vált.

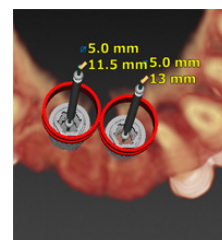

A perselyek és az implantátumok, illetve a perselyek és a rögzítőtűskék közötti minimális távolság

Ha perselyek és implantátumok, vagy a perselyek és rögzítőtűskék egymáshoz túl közel vannak elhelyezve, vagy akár ütköznek, automatikusan megjelennek narancssárga színnel. A persely és az implantátum közötti túl kicsi távolság problémát okozhat a műtét során a csontfurat elkészítésekor vagy egy implantátum vagy rögzítőtűske behelyezésekor.

A probléma megoldásához helyezze át vagy döntse meg az implantátumokat vagy a rögzítőtűskéket úgy, hogy növekedjen a perselytől való távolságuk. Ha a távolság kellően nagy, a színük automatikusan a normál színre áll vissza.

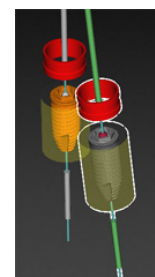


Implantátumok közötti vagy rögzítőtűskék közötti ütközés, illetve implantátumok és rögzítőtűskék közötti ütközés

Ha implantátumok, rögzítőtűskék vagy implantátumok ütköznek rögzítőtűskékkel, automatikusan narancssárga színnel jelennek meg. Ezeknek az objektumoknak az ütközése nehézségeket okozhat a műtét során.

A probléma megoldásához helyezze át vagy döntse meg az implantátumokat vagy a rögzítőtűskéket úgy, hogy ne ütközzenek. Ha a távolság kellően nagy, a színük automatikusan a normál színre vált.

Megjegyzés

Egyes esetekben az implantátum helyét először rögzítőtűske rögzítésére használják. Az implantátum behelyezése előtt a rögzítőtűskét el kell távolítani.


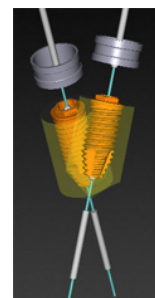


Az irányító persely és a radiológiai sablon és/vagy fogászati scan viszonya

A tervezés során az összes klinikai megfontolás mellett fontos figyelembe venni az irányító perselyeknek a radiológiai sablonhoz és/vagy fogászati scanhez viszonyított helyzetére vonatkozó technikai megköveteléseket: Az irányító perselyek pozícióját ellenőrizni kell úgy, hogy közben látható a radiológiai sablon és/vagy a fogászati scan is.

A radiológiai sablon pozíciója




- **Pozíció:** Mindegyik irányító perselynek a radiológiai sablonon belül kell elhelyezkednie, hogy a műtési sablonban elegendő anyag legyen az irányító persely megtámasztásához.
 - 1 Helyes elhelyezkedés
 - 2 Helytelen elhelyezkedés: A persely túl távolra van helyezve, és nincs összeköttetésben a radiológiai sablonnal.
- **Mélység:** Ellenőrizni kell a persely mélységét a radiológiai sablonhoz képest. A perselynek nem szabad érintenie a radiológiai sablon fogíny felé tekintő felszínét (intaglio felszín), hogy megfelelő helyzetben rögzíteni lehessen a műtési sablon. A persely mélységének ellenőrzéséhez tekintse meg a persely pozícióját, és végezze el a finombeállítást a dedikált eszköztárban található **Mélység** ikon segítségével. Vagy pedig ha kezdőperselyt használ, fontolja meg a persely eltolásának beállítását.
 - 1 Helyes elhelyezkedés
 - 2 Helytelen elhelyezkedés: a persely túl mélyre lett helyezve.

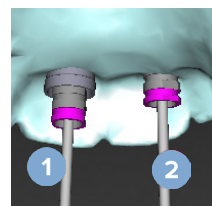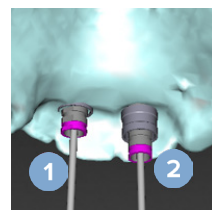

A gipszminta szkennelése



Ellenőrizze a perselyek pozícióját az implantátumok tervezése után. A következő problémákat meg kell oldani:

- **Laterális ütközések:** A laterális ütközés a szomszédos fogakkal vagy esetleg lágyszövettel való ütközés (intraorális szituáció felszíni szkennelése). Ha ütközés áll fenn, próbálja meg megváltoztatni az implantátum helyzetét úgy, hogy ne váltsa ki ütközési figyelmeztetést. Ha ez nem lehetséges, próbálkozzon a persely átmérőjének csökkentésével, vagy válassza a csak kezdőfuratot tartalmazó lehetőséget. Nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek megfontolhatják az irányított fúrás eljárás egyes részeinek kihagyását úgy, hogy a műtési sablon eltávolítása után szabad kezes módszerrel fejezik be a fúrás protokollt. Ilyenkor az implantátum behelyezése szabad kezes módszerrel történik.
 - 1 Helytelen elhelyezkedés: túl közel helyezkedik el a szomszédos foghoz vagy lágyszövethez, vagy ütközik vele.
 - 2 Helyes elhelyezkedés: módosított átmérő.
 - 3 Helyes elhelyezkedés: váltás kezdőperselyre.

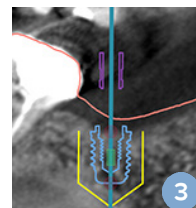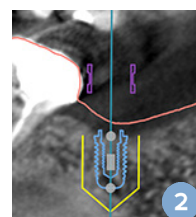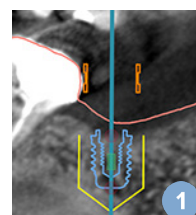

- **Vertikális ütközések:** A vertikális ütközések lágy szövetrel való potenciális ütközések (intraorális szituáció felszíni szkennelése). Ha függőleges irányú ütközés áll fenn, és Ön a kezdőfűrési lehetőséget választotta, fontolja meg a persely függőleges irányú pozíciójának megváltoztatását.

- 1 Hibás elhelyezkedés
- 2 Helyes elhelyezkedés: a persely eltolása módosítva.

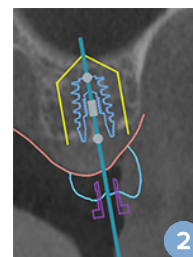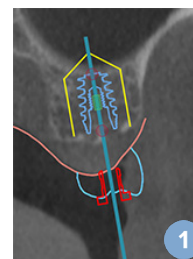

Az irányító persely és a csont viszonya

A tervezés során fontos figyelembe venni az irányító perselyeknek a csontfelszínhez (amely fogakat is tartalmazhat) viszonyított helyzetére vonatkozó technikai megkötéseket. Ha az irányító persely ütközik a csontfelszínnel vagy a csontmodell részét képező megtartandó fogakkal, előfordulhat, hogy a műtéti sablont nem lehet megfelelően behelyezni a műtét során.

Ez a hiba azonban bizonyos esetekben elfogadható (ilyen eset, ha a persely olyan foggal ütközik, amelyet a műtét előtt ki fognak húzni, vagy ha a persely műtermékkel ütközik).

Irányított felépítmények

Ha irányított felépítményeket kíván használni, gondoskodjon arról, hogy bármely két implantátum közötti tengelyeltérés ne legyen több, mint 30 fok.

A radiológiai sablon kalibrált izoérték nélkül készült.

Javasolt a kalibrált izoértéket használni, ha modellt készít a radiológiai sablonról, és ennek alapján műtéti sablont exportál gyártásra. Ha nem használja a kalibrációs készletet, a szoftver kalibrációs figyelmeztetést ad („A radiológiai sablon kalibrált izoérték nélkül készült”), amellyel felhívja a figyelmet ennek az automatikus lépésnek a fontosságára.

A kezelési terv megbeszélése

A **Megbeszélés** modul lehetővé teszi, hogy jelentéseket hozzon létre, valamint hogy írásvédett fájlokat és Communicator-prezentációkat hozzon létre.

Jelentések

Jelentés létrehozása

1. Nyisson meg egy páciensfájlt. A Tervezés modul **Véglegesítés** lapjának **Kommunikáció** csoportjában kattintson a **Jelentés**  gombra.
2. Megjelenik a tervezési fájlok listája. Válassza ki a kívánt tervezési fájlt, majd kattintson a **Tovább** gombra. A rendszer betölti az adatokat, és létrehozza a jelentés oldalait.
3. A jelentés oldalainak előnézeti képein a következők jelennek meg: a páciens és a kezelés általános adatai, a felhasznált szkennerek, a tervezési figyelmeztetések, a felhasznált termékek, a műtéti terv képei stb.
Megjegyzés
Az előnézeti képek alacsonyabb felbontásúak, mint a tényleges PDF-fájl.
4. Nevezze el a riportot.
5. Ha szeretne, fűzzön jegyzetet (legfeljebb 700 karakter) a riporthoz.
6. Testre szabhatja a jelentést a felvenni kívánt oldalak kiválasztásával: törölje a jelentésből eltávolítani kívánt oldalak kijelölését. Ezek az oldalak szürkén jelennek meg, és nem fognak benne lenni a végső jelentésben.
7. Ha szükséges, távolítsa el a jelentésről a személyi adatokat.
8. A riport létrehozásához kattintson a **Befejezés** gombra, vagy a törléséhez a **Mégse** gombra.
9. A megerősítés után egy előnézeti kép jelenik meg a riport kijelölt oldalaival. Az oldalak megtekintéséhez görgesse őket.

A jelentés nyomtatása

A létrehozott jelentés kinyomtatásához először exportálnia és PDF-fájlként kell mentenie azt.

1. Válassza ki a jelentést a **Kommunikációs elemek** listából.
2. Az eszköztár **Kommunikáció** lapjának **Jelentés** csoportjában kattintson az **Exportálás** lehetőségre.
3. Tallózza be azt a helyet, ahová a jelentést menteni szeretné.
4. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.
5. A jelentést PDF-dokumentumként menti. A jelentés automatikusan megnyílik, így kinyomtatathatja a dokumentumot.

Megjelenítői fájlok

Amikor a DTX Studio Implant nincs telepítve annak a személynek a számítógépére, akivel meg szeretné beszélni a kezelési tervet, megjelenítői fájl segítségével megmutathatja neki a kezelési tervet. A megjelenítői fájl a kezelési tervnek a DTX Studio Implant szoftverből írásvédett fájlként exportált változata, amely egy adott páciens kezelési tervét tartalmazza. A megjelenítői fájlt a DTX Studio Implant Viewer szoftver segítségével lehet megnyitni.

Megjelenítői fájl létrehozása

1. Nyissa meg a **Megbeszélés** modult.
2. A **Kommunikáció** lap **Kommunikáció** csoportjában kattintson a **Megjelenítő**  lehetőségre.
3. Válassza ki a listából a tervezési fájlt, és kattintson a **Tovább** gombra.
4. Adja meg a megjelenítői fájl részletes adatait a testreszabási oldalon:
 - Adja meg a megjelenítői fájl nevét.
 - Kattintson a megjelenítői fájlba foglalandó képekre.
 - Adja meg, hogy a CT-képadatokat tömöríteni szeretné-e.
 - Ha nem szeretné megosztani a páciens adatait, anonimizálja a fájlt az **Összes páciensadat anonimizálása** lehetőség kiválasztásával.
 - A megjelenítői fájl megosztásához közvetlenül a létrehozása után jelölje be a megfelelő négyzetet.
5. A megjelenítői fájl mentéséhez kattintson a **Befejezés** gombra.
6. Ezzel létrejött a megjelenítői fájl, és megjelenik a **Kommunikációs elemek** listában. Megjelenik a **Megjelenítő megosztása** párbeszédablak.
7. Írja be az e-mail-címet, vagy a **Kapcsolatok** gombot megnyomva válassza ki azokat az embereket, akikkel meg szeretné osztani a megjelenítői fájlt.
8. Adjon hozzá egy személyes üzenetet, és kattintson a **Megosztás** lehetőségre.
9. Ezzel egy e-mailt küld a kiválasztott embereknek, amely egy letöltési hivatkozást tartalmaz.

Megjelenítői fájl megnyitása a DTX Studio Implant szoftver segítségével

1. Kattintson duplán a megjelenítői fájlra a **Kommunikációs elemek** listában.
2. Megnyílik a DTX Studio Implant Viewer alkalmazás, és mutatja a kiválasztott megjelenítői fájlt.

Megjelenítői fájl megnyitása letöltési hivatkozáson keresztül

Ha egy e-mailt kapott, amelyben egy megjelenítői fájlra mutató letöltési hivatkozás van:

1. Kattintson a letöltési hivatkozásra.
2. Letölti a megjelenítői fájlt.
3. Keresse meg a letöltött megjelenítői fájlt, és kattintson rá duplán.
4. Megnyílik a DTX Studio Implant Viewer alkalmazás, és mutatja a megjelenítői fájlt.

A **Megbeszélés** modul lehetővé teszi, hogy jelentéseket hozzon létre, valamint hogy írásvédett fájlokat és Communicator-prezentációkat hozzon létre.

Communicator-prezentációk

A Communicator-prezentációk áttekintést nyújtanak a kezelési tervről, és lehetővé teszik, hogy kommentárokat írjon, amelyek segítik elmagyarázni az eljárást a páciensnek.

A Communicator-prezentációk segítségével be lehet mutatni a fogászati kezelési terveket a pácienseknek és a munkatársaknak. Ezenkívül a prezentációkat közzé is lehet tenni a felhőszolgáltatáson keresztül.

A Communicator-prezentációk a felhőbe lesznek feltöltve, és a Communicator iPad®-alkalmazáson keresztül tekintheti meg őket.

Communicator-prezentáció létrehozása

1. Nyissa meg a **Megbeszélés** modult.
2. A **Kommunikáció** lap **Kommunikáció** csoportjában kattintson a **Communicator**  lehetőségre.
3. Válassza ki a listából a tervezési fájlt.
4. Kattintson a **Tovább** gombra.
5. Adja meg a Communicator-prezentáció részletes adatait a testreszabási oldalon:
 - Adja meg a prezentáció nevét.
 - Ha kívánja, írja be megjegyzéseit a prezentációval kapcsolatban. Ezek akkor jelennek meg a Communicator-prezentációban, amikor megnyitja egy iPad® készüléken.
 - Adja meg, hogy melyik képeket szeretné felvenni a prezentációba. Csak a Pácienskönyvtárban található képek választhatók.
 - Ha nem szeretné megosztani a páciens adatait, anonimizálja a fájlt az **Összes páciensadat anonimizálása** lehetőség kiválasztásával.
 - A Communicator-prezentáció feltöltéséhez egy iPad®-re a létrehozása után jelölje be a megfelelő négyzetet.
6. Kattintson a **Befejezés** gombra.
7. Ezzel létrejött a Communicator-prezentáció, és megjelenik a **Kommunikációs elemek** listában.

Kezelési terv exportálása konzultációhoz vagy műtéthez

A DTX Studio Implant lehetővé teszi a kezelési terv exportálását, így az használható lesz például a DTX Studio Clinic, az X-Guide™ vagy az OsseoCare™ Pro szoftverekben, vagy megtekinthető lesz más szoftverekben.

Exportálás a DTX Studio Clinic szoftverbe

A DTX Studio Clinic szoftverben való megjelenítés érdekében a kezelési terv exportálásához:

1. Lépjen a **Tervezés** modulba.
2. Kattintson a **Klinikai exportálás**  gombra a **Véglegesítés** lap **Műteti terv** csoportjában.
3. Válassza ki a mappát a titkosított .dtxip fájl tárolására, amely tartalmazza a kezelési terv összes szükséges információját.
4. Megjelenik egy üzenet, amely megerősíti a sikeres mentést, valamint a fájl mentési helyét. Kattintson az **OK** gombra az üzenet bezárásához.

Más szoftvertermékekben való megjelenítés érdekében a kezelési terv exportálásához (nyílt exportálás):

1. Lépjen a **Tervezés** modulba.
2. Kattintson az **Exportálás megnyitása**  gombra a **Véglegesítés** lap **Kommunikáció** csoportjában.
3. Válassza ki az kezelési terv tárolására szolgáló mappát.
4. Kattintson az **Exportálás** lehetőségre.
5. Megjelenik egy üzenet, amely megerősíti a sikeres mentést, valamint a fájl mentési helyét. Kattintson az **OK** gombra az üzenet bezárásához.

X-Guide™ műtéti terv

Az X-Guide™ egy 3D-s navigációs rendszer fogászati implantátumokhoz, amely elősegít a kezelési terv páciensre való átvitelét, és interaktív iránymutatást ad a műtét során.



Figyelmeztetés

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az információk megjelenítése (pl. megjelenítő orientációja, objektumok színe) és a figyelmeztetések tekintetében a DTX Studio Implant és az X-Guide™ szoftver eltérhet egymástól.

Az X-Guide™ műtéti terv létrehozása

1. A **Megbeszélés** modul **Kommunikáció** csoportjában kattintson az **X-Guide**  lehetőségre.
2. Válassza ki a listából a megfelelő jóváhagyott tervezési fájlt.
3. Kattintson a **Tovább** gombra.
4. Adja meg a megjelenítői fájl részletes adatait a **Műtéti beállítások testre szabása** oldalon. Szükség szerint névtelenítse.
5. Kattintson a **Befejezés** gombra.

Az X-Guide™ műtéti terv exportálása

1. A **Megbeszélés** modul **Kommunikációs elemek** listájából válasszon ki egy létrehozott **X-Guide™** műtéti tervet.
2. A **Kommunikáció** lap **X-Guide** csoportjában kattintson az **Exportálás**  lehetőségre.



Figyelmeztetés

A DTX Studio Implant csak bizonyos implantátumok X-Guide™ szoftverbe való exportálását támogatja. A nem támogatott implantátumok nem lesznek belefoglalva az X-Guide fájlba.

3. A párbeszédpanelen kattintson a **Tallózás** lehetőségre, és lépjen az X-Guide™ műtéti fájl mentési helyére.
4. Kattintson a **Mentés** lehetőségre.

OsseoCare™ Pro műtéti terv

Az OsseoCare™ Pro egy fúrómotor, amely Apple iPad® készüléken keresztül működik, és lehetővé teszi a kezelési folyamat megtervezését és beállítását a műtét előtt. Az eszköz fogászok és sebészek számára készült kemény és lágyszövetek megfelelő eszközökkel végzett vágásához.

Az OsseoCare™ Pro műtéti terv kombinálja a kezelési folyamat egymást követő lépéseit, és az iPad®-alkalmazás segítségével lépésről lépésre végigvezeti a fogorvost vagy a sebészt a műtéti eljárás során.

Az OsseoCare™ Pro műtéti terv létrehozása

1. A **Megbeszélés** modul **Kommunikáció** csoportjában kattintson az **OsseoCare Pro**  gombra.
2. Válassza ki a listából a megfelelő jóváhagyott tervezési fájlt.
3. Kattintson a **Tovább** gombra.
4. Adja meg a megjelenítési fájl részletes adatait a **Műtéti beállítások testre szabása** oldalon.
5. Kattintson a **Befejezés** gombra. Az elkészült műtéti terv alapértelmezés szerint a felhőbe lesz feltöltve.
6. A folytatáshoz kattintson a jogi nyilatkozatnál az **Elfogadom** lehetőségre.

A szkennerek kalibrálása

Megjegyzés

Ez a szkennerek kalibrálási művelet csak a radiológiai sablon létrehozásához szükséges.

A kezelési terv helyes és pontos kivitelezéséhez fontos olyan műtéti sablont készíteni, amely ugyanolyan jól illeszkedik a környező lágy és kemény szövetekhez, mint a radiológiai sablon. Ehhez pontos, 1:1 méretarányú másolat szükséges, valamint (kúpsugaras) CT-készülékkel (szkennerekkel) végzett digitalizálás, és a szoftverben el kell készíteni a radiológiai sablon virtuális modelljét a megfelelő, a CT-készülékre jellemző beállításokkal. Ez az érték (az „izoérték”) megállapítható manuális eljárással, vagy pedig automatikusan az egyedülálló NobelGuide® kalibrációs tárgyról készített kalibrációs scan használatával, amelyet a megfelelő szkennerek beállításokkal kell elvégezni. A NobelGuide® kalibrációs objektum ugyanolyan sugáráteresztő anyagból (PMMA) készül, mint a radiológiai sablon, és pontosan meghatározott formájú, amelyet a szoftver ismer. A DTX Studio Implant szoftver automatikusan értékeli a referenciaként szolgáló (kalibrációs) scan adatait, összehasonlítja az objektum ismert, valóságos formájával, és ennek segítségével automatikusan meghatározza és alkalmazza a leginkább megfelelő izoértéket (a **kalibrált izoértéket**), amely a radiológiai sablonról készült felvételtől a megfelelő forma és méretek meghatározására (szegmentálására) szolgál. A szoftver tárolja az összes CT-készülékre jellemző kalibrációs készletet. A radiológiai sablonról készült mindegyik felvétel esetében a szoftver megkeresi a megfelelő kalibrációs készletet az általa „ismert” szkennerek kalibrációs készletei közül. Ha a szoftver megtalálja az illető szkennert, automatikusan a hozzá tartozó **kalibrált izoértéket** javasolja és alkalmazza. A radiológiai sablon varázslójának részét képező izoérték-szerkesztő információkat nyújt a kalibrációs készletről, a használt szkennerek típusáról és a kalibrált izoértékekről.

Javasolt a kalibrált izoértéket használni, ha modellt készít a radiológiai sablonról, és ennek alapján műtéti sablont exportál gyártásra. Ha nem használja a kalibrációs készletet, a szoftver kalibrációs figyelmeztetést ad (**A radiológiai sablon kalibrált izoérték nélkül készült**), amellyel felhívja a figyelmet ennek az automatikus lépésnek a fontosságára.

Ha kalibrálást alkalmaz, az izoérték-szerkesztő az **Izoérték** kifejezés helyett a **Kalibrált izoérték** kifejezést használja. Ha a rendszer által készített kalibrációs készletet használ, a **Javasolt izoérték** kifejezés jelenik meg.

Új kalibrációs készlet létrehozása

Amikor először dolgozik valamely típusú (kúpsugaras) CT-szkennerekkel származó adatokkal, új kalibrációs készletet kell létrehozni. Ha ez a kalibrációs készlet elkészült, használható minden olyan páciens esetében, akit ugyanazzal a képalkotó készülékkel vizsgáltak. Javasolt új kalibrációs készletet létrehozni legalább hat hónaponként, valamint akkor, ha a képalkotó készülék szoftverét frissítették, bővítették, vagy karbantartást végeztek rajta.

Új kalibrációs készlet létrehozásához kattintson a **Saját iroda** modul **Szkennerek** lapján található **Kalibrálási készlet** csoportban az **Új**  gombra. Elindul a **Kalibráció létrehozása** varázsló.

A kalibrálási varázsló három lépésben vezeti végig Önt a kalibrációs eljáráson:

1. A kalibrációs DICOM fájlok betöltése
2. A kalibrációs beállítások kiszámítása
3. A részletek megadása és a kalibrációs készlet mentése

Műszaki támogatás

Ha bármilyen problémába ütközik, forduljon a DTX Studio műszaki támogatásához:

support@dtxstudio.com

<https://tech.dexis.com/support>

OBSOLETE




Nobel Biocare AB
Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1,
411 17 Göteborg,
Svédország

www.nobelbiocare.com

Ausztráliában forgalmazza:


Nobel Biocare Australia Pty Ltd
Level 4/7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW 2114
Ausztrália

Telefon: +61 1800 804 597

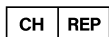

CH importőr/képviseelő:

Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
Svájc

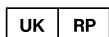

Felelős szervezet az Egyesült Királyságban:

Nobel Biocare UK Ltd.
4 Longwalk Road
Stockley Park
Uxbridge UB11 1FE
Egyesült Királyság

Új-Zélandon forgalmazza:

Nobel Biocare New Zealand Ltd
33 Spartan Road
Takanini, Auckland, 2105
Új-Zéland

Telefon: +64 0800 441 657

Törökországban forgalmazza:

EOT Dental
Sağlık Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş.
Nispetiye Mah. Aytar Cad.
Metro İş Merkezi No: 10/7
Beşiktaş İSTANBUL
Telefon: +90 2123614901



ifu.dtxstudio.com/symbolglossary
ifu.dtxstudio.com